

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Intego & Intego Pro

Performance su cui contare

dentsplysirona.com





Il vostro partner affidabile

Intego è il migliore riunito della sua classe. Si basa sulla forza innovativa e sul premiato design dei nostri riuniti di ultima generazione. Quale partner affidabile per uno studio efficiente, Intego possiede tutte le caratteristiche in grado di favorire la vostra attività: design ergonomico per processi di lavoro efficienti, elevati standard di qualità nella progettazione e nella realizzazione unitamente ad un eccellente rapporto qualità-prezzo; ecco perché si può contare sulla performance di Intego.

Eccellente rapporto qualità-prezzo

Eccellenti prestazioni e funzionalità innovative ad un ottimo prezzo, molte opzioni personalizzabili per un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Design ergonomico

Ideato per un utilizzo intuitivo e flussi di lavoro integrati e ottimizzati.

Qualità made in Germany

Basata su materiali solidi, strutture stabili, continui processi di verifica e progettazione a prova di futuro.

Tocca a te

Taglia unica: sappiamo che in uno studio dentistico, molto spesso questo non è vero. Ecco perché Intego è disponibile in due versioni per soddisfare le esigenze individuali.

Intego

Se stai cercando un centro di trattamento che supporti in modo ottimale i tuoi flussi di lavoro ad un prezzo equo, Intego è la tua scelta. Pur essendo semplice da usare, dispone di tutte le funzioni necessarie proprio dove ne hai bisogno.

Il design ergonomico di Intego offre un elevato comfort sia a te che ai tuoi pazienti. L'elemento idrico compatto con la bottiglia d'acqua esterna rende facile il rispetto di tutte le norme relative alla prevenzione delle infezioni.



Intego Pro

Il clou di Intego Pro è indubbiamente il suo gruppo idrico comfort, che porta il concetto della prevenzione delle infezioni nel tuo studio dentistico. Il sistema di disinfezione integrato riduce il carico di lavoro

del tuo team attraverso lo spurgo e la sanificazione automatica dei cordoni, nonché una disinfezione permanente con Dentosept S*.



* Dentosept® S, a base di perossido di idrogeno, viene impiegato per il mantenimento della qualità dell'acqua nei circuiti interni dei Centri di Trattamento Dentsply Sirona.

Intego TS (design con braccio OTP)

- Posizionamento ergonomico dell'elemento medico grazie al braccio portante ad ampio raggio
- Sistema tray funzionale con tray asportabile e posizionabile con grande flessibilità
- Sistema di prevenzione delle infezioni integrato e completo per un'igiene ottimale



Ottimo rapporto qualità-prezzo su cui contare

La giornata lavorativa è complessa e pone una serie di sfide che il vostro riunito è chiamato ad affrontare. Intego vi offre la soluzione perfetta: scegliete tra due versioni che potete configurare con la massima flessibilità. Sia che scegliate un'esecuzione Sprido o un design a cordoni pendenti, in ogni caso sono assicurate le migliori prestazioni ad un prezzo vantaggioso.

CS - il design Sprido



Il **design Sprido** è ideale per la più ampia gamma di posizioni di trattamento, sia per operatività a 4 mani che a 2 mani. L'elemento medico può essere ruotato fino a 240° per garantire un posizionamento ottimale. La distanza massima tra l'elemento medico e gli strumenti è 90 cm.

- 1 Sprayvit E**
Visibilità ottimale grazie alla luce a LED integrata.
- 2 Micromotore BL ISO E**
Micromotore brushless sterilizzabile con controllo di velocità e coppia durante il trattamento. Particolarmente leggero, compatto e con un'ampia gamma di velocità.
- 3 Ablatore SiroSonic L**
Manipolo e punte sterilizzabili. Oscillazione controllata lineare, con regolazione elettronica della potenza e dello spray.
- 4 SiroCam F o AF o AF+**
Immagini intraorali dettagliate con la facilità di utilizzo di SiroCam F o AF/AF+ con funzione autofocus.



Funzionamento intuitivo

Trattamenti più impegnativi richiedono la massima concentrazione. Questo è il motivo per cui Intego è così intuitivo, con due pannelli di comando di ultima tecnologia e strumenti innovativi per un trattamento senza stress. Così è possibile concentrarsi solo su ciò che è veramente importante: il vostro paziente, per un risultato perfetto.

Interfacce moderne e intuitive



EasyPad

Pannello di comando chiaro e intuitivo. Di serie su Intego.



EasyTouch

Pannello di comando integrabile a scelta, assicura maggiore facilità d'uso grazie alla tecnologia touchscreen intuitiva e alle opzioni d'uso e visualizzazione aggiuntive come per esempio l'apex locator o funzioni supplementari.

Possibilità di integrazione per trattamenti endodontici


La funzione endodontica integrata di Intego è la soluzione ideale per i professionisti del settore dentale che cercano più sicurezza, efficienza e semplicità nell'esecuzione delle procedure endodontiche.

L'integrazione di tutti i risultati si traduce in un flusso di lavoro ottimizzato e assolutamente igienico e riduce al minimo i tempi di programmazione.



ApexLocator

È possibile integrare in EasyTouch anche un localizzatore apicale per consentire il controllo permanente della profondità di lavoro durante il trattamento endodontico e di ridurre l'esposizione ai raggi X.

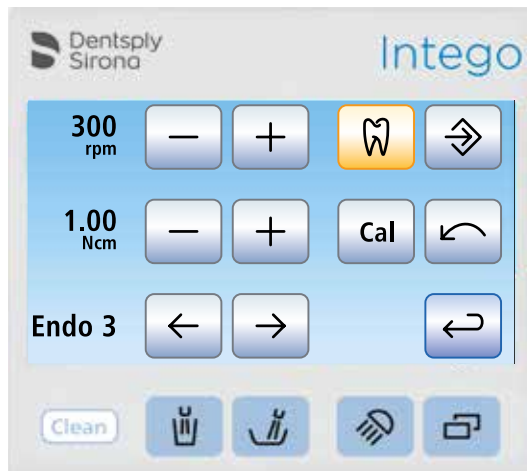


Controllo di coppia integrato

Velocità e coppia sono regolabili e il motore si arresta automaticamente quando raggiunge la coppia massima impostata. Ciò assicura maggiore sicurezza e un flusso di lavoro perfetto per i trattamenti endodontici.



Radiografico intraorale Heliodent Plus

Radiografia intraorale veloce e affidabile con HELIODENT Plus integrato sul riunito. Un'unità radiografica resistente e duratura che offre la massima flessibilità e una qualità dell'immagine ottimale.

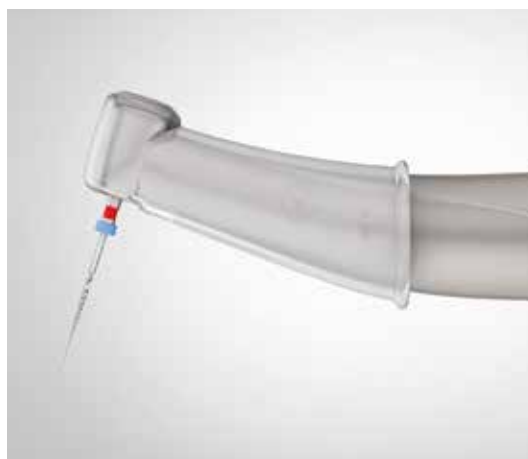

Contrangolo T1 Line Endo 6 L con luce

Avere una migliore visibilità durante il trattamento endodontico aumenta il tasso di successo del trattamento stesso. Un'altra opzione disponibile senza la luce è il contrangolo Endo 6: 1.

Sistema di file reciprocanti

Intego permette l'integrazione di software per sistemi di file reciprocanti Dentsply Sirona Maillefer e VDW, consentendo un utilizzo rapido e semplice dei più comuni sistemi di file endodontici

WaveOne®

WaveOne® Gold
File reciprocante

Reciproc®
One file endo



Sicurezza su cui contare

In tutto il mondo i dentisti hanno esigenze molto elevate in termini di sicurezza dei pazienti e del personale dello studio. Il sistema di prevenzione delle infezioni di Intego è progettato per garantire la rapida e facile conformità a tutte le normative per il controllo delle infezioni. Il design dell'elemento assistente e del gruppo idrico assicura procedure di prevenzione delle infezioni rapide e semplici. Tutto ciò garantisce un perfetto controllo delle infezioni.



Poggiatesta a doppia articolazione

Rapidamente regolabile per adattarsi a varie situazioni di trattamento e alle diverse stature dei pazienti.

Rivestimento Premium/Lounge

Il rivestimento di alta qualità garantisce il massimo comfort anche durante i trattamenti prolungati.

ErgoMotion

Il cinematismo dello schienale segue perfettamente l'anatomia del paziente, evitando stiramento e compressione alla schiena.

Braccioli

I pazienti possono appoggiare comodamente le braccia.



L'unicità dell'ErgoMotion Dentsply Sirona per la famiglia Intego

I vantaggi

- Miglior posizionamento per il trattamento mandibolare o mascellare
- Minore stiramento della testa del paziente
- Nessuno stiramento o compressione della schiena del paziente
- Non è necessario risistemare il poggiatesta

Sistema di sollevamento

Lo straordinario sistema di sollevamento posiziona delicatamente e con precisione i pazienti nella posizione corretta.

Poggiapiedi Vario

Nella versione Premium, il poggiapiedi Vario può essere regolato in maniera semplice e consente di assumere una posizione ergonomica anche a pazienti molto alti.

Sicurezza su cui contare – con Intego

I dentisti di tutto il mondo hanno le massime esigenze per la sicurezza dei loro pazienti e del team dello studio odontoiatrico. Il concetto di prevenzione delle infezioni di Intego è progettato in modo da poter rispettare rapidamente e facilmente tutte le normative sul controllo delle infezioni.

L'elemento assistente e il design dell'unità idrica rendono le procedure di prevenzione delle infezioni ancora più semplici e richiedono meno tempo. Tutto ciò garantisce un perfetto controllo delle infezioni.

Intego con gruppo
idrico compact

Bacinella

Estraibile e orientabile,
facile da pulire e
immediatamente
accessibile.

Funzione purge

Spurga automaticamente
tutti i cordoni presenti su
lato medico e lato assistente.



Sistemi di aspirazione

Compatibili con tutti i sistemi di aspirazione a umido o a secco, compreso il separatore di amalgama.

Intego

Grazie ai sistemi di aspirazione e alle opzioni per la prevenzione dalle infezioni selezionabili, il gruppo idrico e l'elemento assistente Compact possono soddisfare qualsiasi esigenza e adattarsi a diversi requisiti.



Kit bottiglia acqua

Per una qualità dell'acqua controllata. Può essere inoltre riempito con una soluzione Dentosept S per la disinfezione continua e per la sanificazione manuale.



Pulizia automatica dei cordoni di aspirazione

Adattatore per pulizia e sciacquo automatico di aspira saliva e aspiratore chirurgico.



Superfici lisce

La struttura della superficie per lo più priva di scanalature e fessure assicura massima efficacia della disinfezione in tempi rapidissimi.

Sicurezza su cui contare - con Intego Pro

In tutto il mondo i dentisti condividono esigenze molto elevate in termini di sicurezza dei pazienti e del personale dello studio. Il sistema di prevenzione delle infezioni di Intego Pro è progettato per garantire la rapida e facile conformità a tutte le normative per il controllo delle infezioni. Il design dell'elemento assistente e del gruppo idrico assicura procedure di prevenzione delle infezioni rapide e semplici. Tutto ciò garantisce un perfetto controllo delle infezioni.

Intego pro con gruppo
idrico comfort

Bacinella

Orientabile, estraibile,
in vetro di alta qualità.



Funzione Purge e Autopurge

I cordoni degli strumenti possono essere risciacquati rapidamente oppure disinfettati in modo accurato tramite gli adattatori specifici.

Sistemi di aspirazione

Compatibili con tutti i più comuni sistemi di aspirazione centrali a umido o a secco, compreso il separatore di amalgama.

Intego Pro

Il gruppo idrico e l'elemento assistente Comfort sono dotati di un sistema completo per la prevenzione delle infezioni.



Sistema di disinfezione integrato

Disinfezione continua delle condutture idriche interne con Dentosept S. Funzione di igienizzazione automatica per una disinfezione intensiva e regolare. Può essere usato anche come sistema autonomo di alimentazione dell'acqua.



Adattatori di pulizia integrati

Per il lavaggio automatico e lo spurgo dei cordoni degli strumenti (Autopurge) e l'igienizzazione delle condutture idriche.



Pulizia chimica dei tubi di aspirazione

Serbatoio detergente per il risciacquo chimico delle condutture di aspirazione. La concentrazione di detergente può essere regolata.

Intego Ambidestro – un capolavoro di flessibilità

Opzione ambidestro disponibile sia per
Intego che per Intego Pro.



Rotazione perfettamente ergonomica

Nell'organizzazione efficace del lavoro quotidiano dello studio è fondamentale adattare la strumentazione non solo all'ambiente di lavoro del dentista, ma anche a quello degli assistenti. Questa difficoltà è ancora maggiore in uno studio associato, dove uno stesso riunito è usato da diversi dentisti. La zona di lavoro deve poter essere adattata rapidamente e facilmente e la procedura deve essere assolutamente sicura e affidabile. Intego Ambidestro è progettato esattamente per questo scopo.

La procedura di rotazione in breve:



- 1** La rotazione è attivata in un singolo passaggio con il relativo pedale. Lo schienale si muove automaticamente nella posizione di chiusura.




- 2** Grazie allo spostamento fluido del gruppo idrico dietro allo schienale su un robusto braccio di supporto, l'elemento medico e la lampada operatoria possono essere orientati simultaneamente nella nuova posizione senza dover creare spazio aggiuntivo.



- 3** In un ultimo passaggio avviene il cambio di posto tra portatray e supporto della telecamera, se presenti.

I vantaggi per voi:

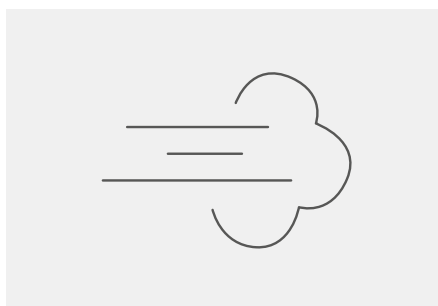


Velocità

Grazie a un meccanismo progettato in modo intelligente è possibile cambiare posizione di trattamento in soli 15 secondi.



Semplicità

Non serve un training speciale, la procedura è facilmente eseguibile dagli assistenti. È sufficiente premere il pedale una sola volta per sbloccare il meccanismo di rotazione e lo schienale si sposta automaticamente nella posizione corretta.

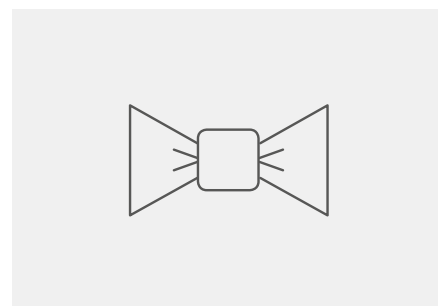

Eleganza


Il riunito è convertibile senza sforzo e con fluidità in un unico passaggio. Non sono necessari movimenti energici, viti, operazioni di assemblaggio.

Maggiore libertà di movimento senza necessità di creare spazio aggiuntivo


Intego Ambidestro assicura massima flessibilità in uno spazio ridotto. Nonostante la possibilità di conversione non è richiesto spazio aggiuntivo rispetto a quello necessario per i riuniti Dentsply Sirona.

Grazie al meccanismo di rotazione studiato in modo intelligente, il movimento è compatto e discreto in qualsiasi fase. Durante la procedura di rotazione il riunito rimane costantemente stabile in tutte le posizioni. Il gruppo idrico è guidato in modo controllato e sicuro attorno allo schienale, escludendo il rischio di danneggiamento.

Le immagini di seguito mostrano come Intego Ambidestro non occupi più spazio di qualsiasi altro riunito Intego in tutte le fasi della rotazione.

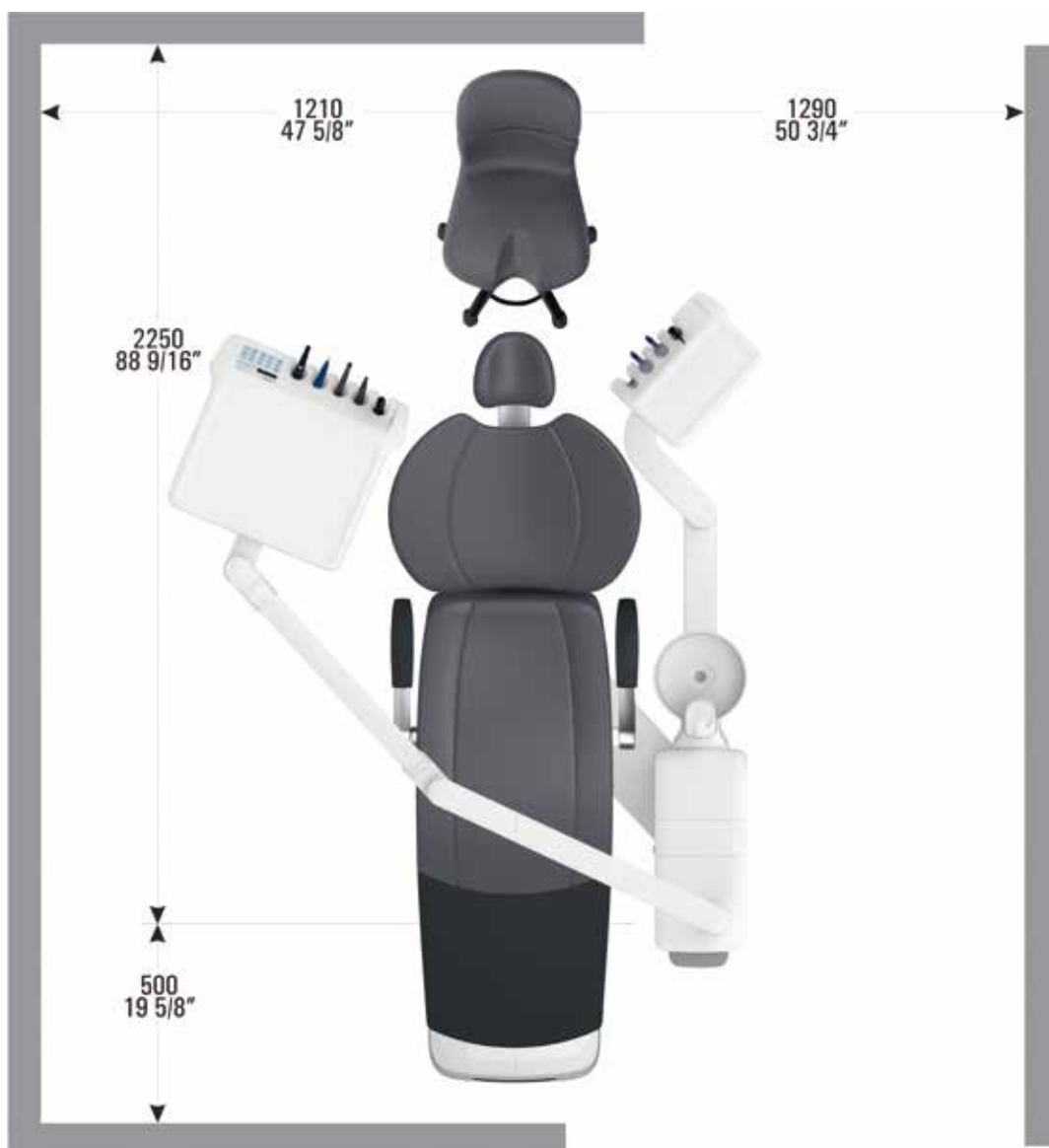

Questa immagine illustra lo spazio richiesto di qualsiasi Intego usato nella posizione ore 12.

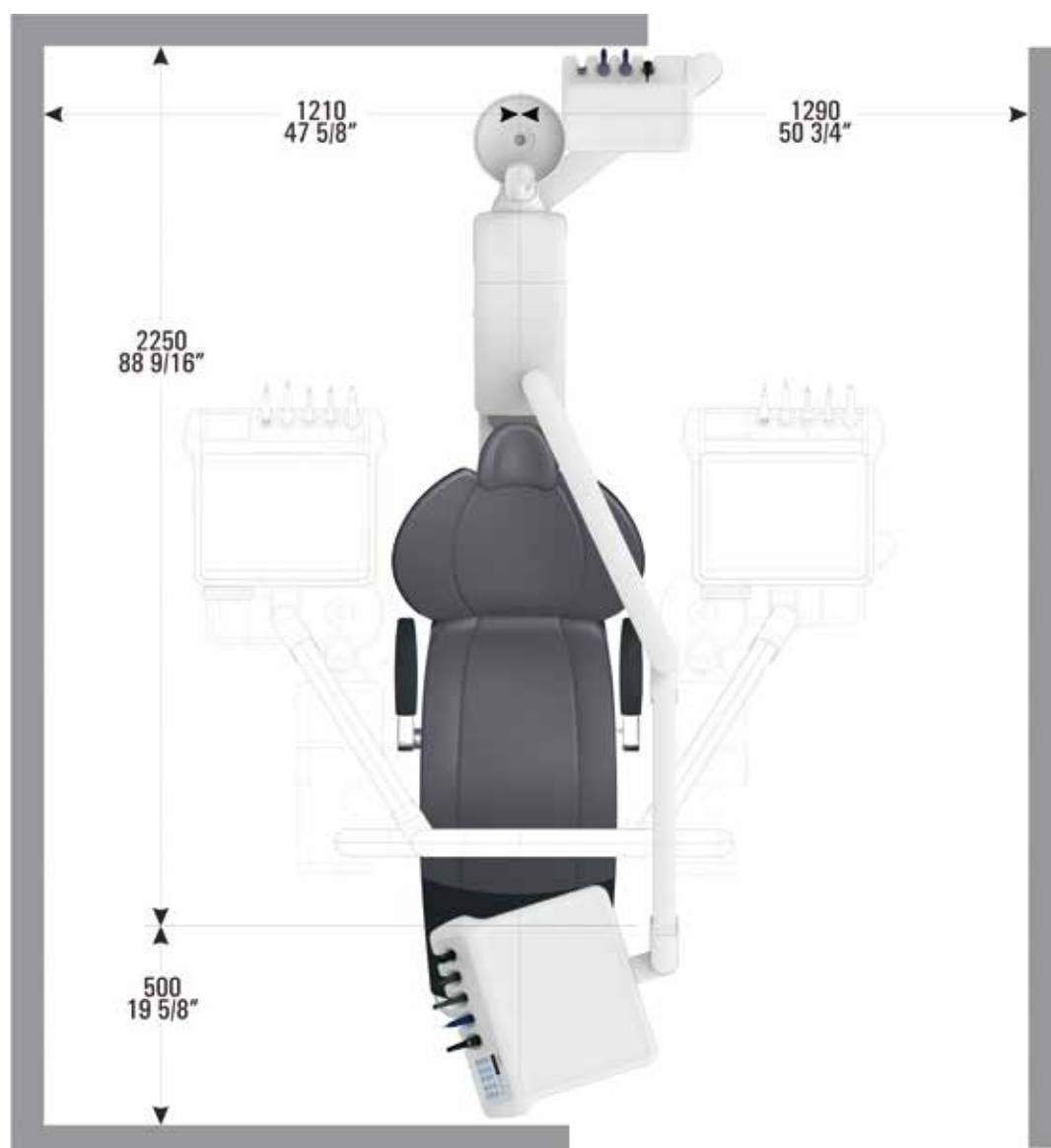

Questa immagine illustra lo spazio massimo richiesto di Intego Ambidestro con elemento assistente Comfort durante il processo di conversione.

Posizione perfettamente ergonomica per tutti i trattamenti

Risultati perfetti al termine di una lunga giornata di lavoro grazie alla vostra esperienza e al supporto del vostro riunito. Che siate mancini o destrorsi, potrete godere in ogni situazione della postura intuitiva, della posizione confortevole, dell'ottima visibilità e del flusso di lavoro integrato. Tutto questo si traduce in risultati clinici perfetti.



Più libertà di movimento

- Schienale sottile per la massima libertà di movimento delle gambe
- Posizionamento flessibile del comando a pedale
 - Facile regolazione in altezza tramite comandi manuali sull'elemento dentista o tramite l'interruttore a pedale opzionale
 - Bacinella orientabile

Posizionamento dello strumento ottimizzato

- Perfetto coordinamento tra elemento dentista ed elemento assistente
- Posizionamento flessibile del tray aggiuntivo permette un'area di appoggio per strumenti più ampia e disponibile
- Elemento assistente compatto e confortevole in base al tuo concetto di trattamento



Sgabelli da lavoro confortevoli

- Hugo, Carl, Paul
- Novità: sgabello ergonomico a sella Theo
- Supportano una sana posizione di seduta per tutto il giorno

Ottima visibilità

- Poggiatesta a doppia articolazione per adattamenti rapidi e flessibili
- Poggiatesta piatto con posizioni variabili attraverso il cuscino magnetico
- Lampada operatoria LEDview Plus o LEDlight Plus, illuminazione per strumenti a LED

Il design incontra la funzione

Prestigiosi premi di design come l'iF Communication Award e il Red Dot Design Award testimoniano l'eccellente qualità del design dei Centri di Trattamento Dentsply Sirona. Intego offre una vasta gamma di opzioni di design per il tuo studio, con tre diversi schemi di colori. Lascia correre la tua immaginazione e metti insieme la combinazione perfetta.



Colori dei rivestimenti

Il mondo elegante



Colori raffinati dei rivestimenti che regalano un'immagine classica e senza tempo.

Il mondo naturale



Tonalità calde e delicate dall'effetto rilassante.

Il mondo vitale



Tinte brillanti e toni luminosi che creano un'atmosfera vivace e moderna.

* Colori disponibili per l'imbottitura Lounge.

Colori delle cuciture



Standard

Rosso

Grigio scuro

Azzurro

Rosa

Le opzioni per il rivestimento



Rivestimento Premium

Il pregiato rivestimento, privo di cuciture, garantisce il massimo comfort anche durante trattamenti lunghi.



Rivestimento Lounge

Materiale morbido e piacevole e imbottitura soffice per il massimo relax. Superficie sagomata per un posizionamento perfetto.

Flessibilità verso il futuro

La personalizzazione rappresenta un importante fattore di benessere all'interno di uno studio odontoiatrico. Per questo motivo Intego consente una configurazione dei componenti che vi assiste in maniera ottimale durante i trattamenti. La flessibilità significa ancora di più per noi: Intego si può predisporre con le opzioni più idonee affinché le applicazioni future siano facilmente integrabili.

Versatile

Scelta tra due poggiatesta

Il poggiatesta piatto può essere regolato in maniera rapida e flessibile. Opzionalmente è possibile scegliere un poggiatesta a doppia articolazione, di ancora più facile posizionamento, che consente una visibilità migliore anche nelle aree più difficilmente accessibili.



Poggiatesta piatto



Poggiatesta a doppia articolazione

Due lampade operatorie a scelta: sempre l'illuminazione ottimale

Due lampade a LED a scelta per illuminare in maniera ottimale il campo operatorio. La nostra lampada operatoria premium LEDview Plus offre con le sue luci LED policrome e caratteristiche tecniche sofisticate un'illuminazione naturalmente perfetta.



LEDlight Plus



LEDview Plus

Elemento assistente: Comfort o Compact

I due elementi assistente sono decisamente poco ingombranti e garantiscono massima libertà di movimento. Con il modello Comfort è possibile lavorare in modo confortevole anche senza assistente.



Elemento assistente Comfort



Elemento assistente Compact

Dotazione ultramoderna

Le telecamere SiroCam F/AF/AF+ autofocus abbinano qualità superiore dell'immagine a facilità d'uso.



	SiroCam F	SiroCam AF	SiroCam AF+
Fuoco	Fuoco fisso	Autofocus	Autofocus
Formato immagine 16:10	✓	✓	✓
Pixel (effettivi)	0,42 megapixel	0,65 megapixel	1,00 megapixel
Campo di lavoro	✓ 5-20 mm	✓ 2-130 mm	✓ 2-130 mm
Risoluzione immagine in movimento	824 x 514	824 x 514	824 x 514
Risoluzione immagine fissa	824 x 514	1024 x 640	1276 x 796

Una progettazione a prova di futuro

Interfacce: flessibilità verso il futuro

Un'interfaccia di rete nella poltrona del paziente e una presa USB sull'elemento medico o assistente vi consentiranno di integrare nuove funzioni e di collegare in rete il vostro studio. In questo caso è possibile attivare facilmente la teleassistenza da remoto.



Presa USB integrata

Monitor Sivation 22" AC

Il monitor HD vi permette di illustrare ai vostri pazienti, direttamente sul riunito, immagini intraorali e radiografie, software e pianificazioni, video e presentazioni PowerPoint.



Monitor Sivation 22" AC

Qualità su cui contare

Non è sufficiente che i nostri clienti siano soddisfatti: desideriamo che siano entusiasti. Per questa ragione la qualità, le prestazioni e il servizio sono al centro della nostra attività. I riuniti Dentsply Sirona abbinano alta qualità con innovazioni di punta, che aumentano in maniera sensibile il comfort e la gestione del lavoro nel corso del trattamento.

Affidabilità e durata



Materiali resistenti e rigorosi test di qualità rendono Intego un riunito affidabile e dalla durata al di sopra della media.

Elevata qualità



Intego dimostra subito l'attenzione per i dettagli. I materiali utilizzati (robuste plastiche modellabili, solidi componenti in acciaio ed alluminio all'interno, vetro e rivestimenti di alta qualità) soddisfano i requisiti di qualità di un prodotto realmente Premium.

Standard elevati



Dentsply Sirona è leader tecnologico con oltre 130 anni di storia e innovazione. I nostri ingegneri e progettisti nel campo della ricerca e dello sviluppo non si limitano a prestare attenzione solo agli aspetti legati all'innovazione, ma anche alla qualità.



Una progettazione a prova di futuro

Presso il centro d'innovazione Dentsply Sirona vengono anticipate le tendenze future e sviluppati prodotti in grado di rispondere ai requisiti tecnologici di domani.



Configurazione personalizzata

Intego

Unità di base

Poltrona paziente

- Rivestimento Premium
- Poggiatesta piatto
- Pedale pneumatico

Elemento medico

- 5 posizioni strumenti
- Pannello di comando EasyPad
- 2 azionamenti trapano

Elemento assistente

- Versione Compact orientabile ed installata sotto la bacinella
- 4 posizioni
- Aspirasaliva e aspiratore chirurgico

Unità idrica

- Design compatto
- Aspirazione umida standard
- Predisposto per Kit bottiglia
- Bacinella orientabile manualmente

Versioni

Versione TS con cordon pendenti



Versione CS Sprido



Pacchetti utente



Start

- Siringa standard a 3 vie
- Alimentazione fibre ottiche nell'elemento medico
- 2 cordon ad aria per turbina
- LEDlight Plus*



Advance

- Pedale elettronico C+
- Sprayvit E nell'elemento medico
- Alimentazione fibre ottiche nell'elemento medico
- 1 cordone turbina
- 1 micromotore BL ISO E con elettronica di alimentazione
- LEDlight Plus*



Innovation

- Pedale elettronico C+
- Sprayvit E nell'elemento medico
- Alimentazione fibre ottiche nell'elemento medico
- 1 cordone turbina
- 1 micromotore BL ISO E con elettronica di alimentazione
- Ablatore Sirosonic L
- LEDview Plus

Pacchetti opzionali



Sivation Ready

- Interfaccia USB per l'elemento medico o assistente
- Interfaccia di rete



Sivation Start con/senza monitor

- Interfaccia USB per l'elemento medico o assistente
- Interfaccia di rete
- SiroCam F (SiroCam AF o AF+ con sovrapprezzo)
- Montaggio monitor su tubo lampada
- Opzionale: monitor 22" AC



Ergo

- ErgoMotion
- Sistema di sollevamento poltrona sino a 185 kg
- 2 braccioli
- Poggiatesta a doppia articolazione



Endo Pro**

- Controllo di coppia integrato
- ApexLocator
- Endo 6:1 contrangolo
- e-Control

* LEDview Plus con sovrapprezzo

** Solo con pannello di comando EasyTouch

Intego Pro

Apparecchio base

Poltrona

- Rivestimento Premium
- Pedale pneumatico
- Poggiatesta piatto
- Joystick di comando a pedale
- Ambidextrous option

Elemento medico

- 5 posizioni strumenti
- Pannello di comando EasyPad
- 2 vie dinamiche
- Alimentazione fibre ottiche
- 2 vie dinamiche e predisposizione ablatore

Elemento assistente

- Versione Comfort, su braccio portante con ampio raggio di rotazione
- 4 posizioni manipoli
- Aspirasaliva e aspiratore chirurgico
- Alimentazione fibre ottiche per Sprayvit E

Gruppo idrico

- Design esteso
- Predisposto per l'integrazione di un impianto automatico di disinfezione
- Adattatori di pulizia integrati
- Bacinella orientabile manualmente
- Aspirazione a umido con valvola di zona
- Lavaggio ad acqua dei tubi di aspirazione
- Boiler

Versioni

Versione TS con tubi pendenti



Versione CS con SPRIDO



User packages

Start Pro

- Pedale elettronico C+
- Sprayvit E nell'elemento medico
- 1 tubo turbina
- 1 micromotore BL ISO E
- LEDlight Plus

Advance Pro

- Pedale elettronico C+
- Sprayvit E nell'elemento medico
- 1 tubo turbina
- 1 micromotore BL ISO E
- Ablatore Sirosonic L
- Pannello di comando EasyTouch
- LEDview Plus

Innovation Pro

- Pedale elettronico C+
- Sprayvit E nell'elemento medico
- Terza via dinamica
- 1 tubo turbina
- 2 micromotori BL ISO E
- Ablatore Sirosonic L
- Pannello di comando EasyTouch
- Sprayvit E nell'elemento assistente
- LEDview Plus

Option packages

Sivision Ready

- Interfaccia USB per l'elemento medico o assistente
- Interfaccia di rete

Sivision Start **con/senza monitor**

- Interfaccia USB per l'elemento medico o assistente
- Interfaccia di rete
- SiroCam F (SiroCam AF o AF+ con sovrapprezzo)
- Montaggio monitor su tubo lampada
- Opzionale: monitor 22" AC

Endo Pro**

- Controllo di coppia integrato
- ApexLocator
- Endo 6:1 contrangolo
- e-Control

* LEDview Plus con sovrapprezzo

** Solo con pannello di comando EasyTouch

Accessori

Qui è possibile visualizzare l'elenco completo degli accessori, con la specifica di quanto è di serie e di quanto è fornibile opzionalmente.

Intego

Poltrona		Pro - Ambidestro
2 memorie, S sciacquo, O azzeramento	■	■
Box di connessione integrato	■	■
Poltrona sino a 140 kg	■	■
Poltrona sino a 185 Kg	□Er	□Er
Poggiatesta piatto	■	■
Poggiatesta a doppia articolazione	□Er	□Er
Rivestimento Premium	■	■
Rivestimento Lounge	□	□
ErgoMotion	□Er	□Er
Pedale a croce	□	□
Cuscino pazienti piccoli	□	□
Bracciolo destro	□Er	□Er
Bracciolo sinistro	□Er	□Er
Prese per il collegamento di dispositivi esterni	□	□
Kit riduttore di pressione sottovuoto	□	□
Paretina anteriore per tubazioni a pavimento	□	□
Box di connessione separato	□	□
Piastrina di adattamento	□	□

Elemento medico		Pro - Ambidestro
Regolazione in altezza con bloccaggio pneumatico	■	■
5 posizioni strumenti	■	■
Alimentazione ad aria per 2 azionamenti trapani senza fibre ottiche	□	—
Alimentazione idropneumatica per 2 unità dinamiche senza fibre ottiche	■	■
Pedale pneumatico	■	■
Pedale elettronico C+	□A, I	□A, I
Pannello di comando EasyPad con 2 impostazioni specifiche per utente	■	■
Interfaccia EasyTouch con 4 impostazioni specifiche per utente	□T	□T
Sprayvit E con luce	□A, I	□A, I
Sprayvit E con luce (pulsante acqua a sinistra)	□A, I	□A, I
Siringa standard	□S	□S
Cordone turbina con luce	□Sx2, A, I	□Sx2, A, I
Cordone ad aria Borden	□	□
1° micromotore BL ISO E con cordone	□A, I	□A, I
2° micromotore BL ISO E con cordone	□	□
Ablatore SiroSonic L	□I	□I
Terzo azionamento del trapano	□	□
Kit fonte di luce endorale per turbina e Sprayvit E	□S, A, I	□S, A, I
Controllo coppia per trattamenti endodontici	□E	□E
eControl: intervallo di velocità 100 - 40.000 giri/min	□E	□E
ApexLocator integrato	□E	□E
Endo 6:1 contrangolo	□E	□E
Negatoscopio per radiografie intraorali	□	□
Funzione spurgo e igienizzazione manuale	□	□
Supporto vassoio TS flessibile per 2 vassoi di dimensioni standard	—	□
Portatray aggiuntivo per TS per 2 tray standard	□	—
Tappetino in silicone, per elemento medico TS	□	□
Portatray aggiuntivo per CS per 1 tray standard	□	□
Portatray aggiuntivo per CS per 2 tray standard	□	□
Tappetino in silicone, per elemento medico CS	□	□

Removable silicone sleeves for handles	□	□
Elemento assistente		Pro - Ambidestro
Elemento assistente compatto, braccio orientabile montato direttamente sul braccio della bacinella	■	■
Elemento assistente Comfort, ideale per le operazioni a due mani	□	□
4 posizioni strumenti	■	■
Aspirasaliva e aspiratore chirurgico	■	■
Sprayvit E con luce	□	□
Sprayvit E con luce (pulsante acqua a sinistra)	□	□
Siringa standard	□	□
Secondo aspiratore chirurgico	□	□
Lampada fotopolimerizzante Satelec Mini LED	□	□
Touch pad	□	□
Alimentazione fibre ottiche per Sprayvit E	□	□
Tappetino in silicone per elemento assistente Comfort	□	□

Unità idrica		Pro - Ambidestro
Predisposto per il flacone d'acqua	■	■
Bacinella orientabile manualmente	■	■
Gruppo idrico bianco	■	■
Gruppo idrico senza bacinella	□	□
Predisposto per aspirazione a umido standard	■	■
Predisposto per aspirazione a umido standard con controllo automatico dell'aspirazione	□	□
Valvola parzializzatrice multistudio	□	□
Valvola della bacinella per aspirazione a umido standard	□	□
Separatore automatico	□	□
Separatore centrifugo di amalgama	□	□
Flacone d'acqua senza connessione alla rete idrica pubblica	□	□
Flacone d'acqua con connessione alla rete idrica pubblica	□	□
Boiler	□	□
Sistema di lavaggio ad acqua dei tubi di aspirazione	□	□

Lampade operatorie/Heliudent Plus		Ambidestro
LEDlight Plus	□S, A	□S, A
LEDview Plus	□I	□I
Lampada a soffitto LEDview Plus	□	—
Predisposizione per combinazione a soffitto LEDview Plus/Heliudent Plus	□	—
Predisposizione per montaggio Heliudent Plus	□	—

Comunicazione pazienti		Ambidestro
Interfaccia USB nell'elemento medico o assistente	□SiR, SiS	□SiR, SiS
SiroCam F	□SiS	□SiS
SiroCam AF	□	□
SiroCam AF+	□	□
Montaggio monitor su tubo lampada	□SiS	□SiS
Monitor da 22" AC (con alimentatore integrato)*	□SiS*	□SiS*
Interfaccia di rete	□SiR, SiS	□SiR, SiS

■ Inclusa nell'unità di base
 □ Accessorio opzionale a pagamento
 — Non possibile/non disponibile
 SiR Pacchetto Sivation Ready
 SiS Pacchetto Sivation Start
 SiS* Pacchetto Sivation Start con monitor

S Pacchetto Start
 A Pacchetto Advance
 I Pacchetto Innovation
 E Pacchetto Endo Pro
 Er Pacchetto Ergo

La disponibilità di opzioni e accessori può variare da paese a paese.

Intego Pro

Poltrona		Pro - Ambidestro
2 memorie, S sciacquo, O azzeramento	■	■
Box di connessione integrato	■	■
Sistema di sollevamento poltrona sino a 185 kg	■	■
Poggiatesta piatto	■	■
Poggiatesta a doppia articolazione	□	□
Rivestimento Premium	■	■
Rivestimento Lounge	□	□
ErgoMotion	□	□
Joystick a 4 vie	■	■
Cuscino per pazienti piccoli	□	□
Bracciolo destro	□	□
Bracciolo sinistro	□	□
Prese per il collegamento di dispositivi esterni	□	□
Kit riduttore di pressione sottovuoto	□	□
Kit di installazione della copertura	□	□
Box di connessione separato	□	□
Base di montaggio	□	□

Elemento medico		Pro - Ambidestro
Regolazione in altezza con bloccaggio pneumatico	■	■
5 posizioni strumenti	■	■
Braccetto aggiuntivo per telecamera, per elemento medico TS	□	—
Braccetto flessibile per telecamera, per elemento medico TS	—	□
Alimentazione ad aria per 2 vie dinamiche senza fibre ottiche	■	■
Pedale pneumatico	■	■
Pedale elettronico C+	□ S, A, I	□ S, A, I
Pannello di comando EasyPad con 2 impostazioni specifiche per utente	■	■
Interfaccia EasyTouch con 4 impostazioni specifiche per utente	□ A, I	□ A, I
Sprayvit E con luce	□ S, A, I	□ S, A, I
Sprayvit E con luce (pulsante acqua a sinistra)	□ S, A, I	□ S, A, I
Tubo turbina con luce	□ S, A, I	□ S, A, I
1° micromotore BL ISO E con tubo	□ S, A, I	□ S, A, I
2° micromotore BL ISO E con tubo	□ I	□ I
Ablatore SiroSonic L	□ A, I	□ A, I
Terza via dinamica	□ I	□ I
Lampada fotopolimerizzante Satelec Mini LED	□	□
Kit fonte di luce endorale per turbina e Sprayvit E	■	■
Controllo coppia per trattamenti endodontici	□ E	□ E
eControl: intervallo di velocità 100 - 40.000 giri/min	□ E	□ E
ApexLocator integrato	□ E	□ E
Contrangolo Endo 6:1	□ E	□ E
Visualizzatore per radiografie intraorali	□	□
Purge e AutoPurge	■	■
Supporto tray TS flessibile per 2 vassoi di dimensioni standard	—	□
Portatray aggiuntivo per TS per 2 tray standard	□	—
Tappetino in silicone, per elemento medico TS	□	□
Portatray aggiuntivo per CS per 1 tray standard	□	□
Portatray aggiuntivo per CS per 2 tray standard	□	□
Tappetino in silicone, per elemento medico CS	□	□

Coprimaniglie in silicone rimuovibili	□	□
Elemento assistente		Pro - Ambidestro
Elemento assistente Compact, braccio orientabile montato direttamente sul braccio della bacinella	—	■
Elemento assistente Comfort, ideale per l'odontoiatria a due mani	■	□
4 posizioni strumenti	■	■
Aspirasaliva e aspiratore chirurgico	■	■
Sprayvit E con luce	□ I	□ I
Sprayvit E con luce (pulsante acqua a sinistra)	□ I	□ I
Secondo aspiratore chirurgico	□	□
Lampada fotopolimerizzante Satelec Mini LED	□	□
Pannello di comando	□	□
Alimentazione fibre ottiche per Sprayvit E	■	■
Tappetino in silicone per elemento assistente Comfort	□	□

Gruppo idrico		Pro - Ambidestro
Predisposto per impianto di disinfezione integrato	■	■
Bacinella orientabile manualmente	■	■
Bacinella bianca	■	■
Bacinella in vetro	□	—
Gruppo idrico senza bacinella	□	□
Valvola di zona per aspirazione a umido standard	■	■
Valvola della bacinella per aspirazione a umido standard	□	□
Separatore automatico	□	□
Separatore centrifugo di amalgama	□	□
Sistema integrato di disinfezione con disinfezione permanente delle condutture idriche e funzione automatica di igienizzazione	□	□
Boiler	■	■
Sistema di lavaggio ad acqua dei tubi di aspirazione	■	■
Sistema di pulizia chimica dei tubi di aspirazione	□	□

Opzioni lampade operatorie/Heliodont Plus		Pro - Ambidestro
LEDlight Plus	□ S	□ S
LEDview Plus	□ I, T	□ I, T
Lampada a soffitto LEDview Plus	□	—
Predisposizione per combinazione a soffitto LEDview Plus/Heliodont Plus	□	—
Predisposizione per montaggio Heliodont Plus	□	—

Comunicazione con il paziente		Pro - Ambidestro
Interfaccia USB nell'elemento medico o assistente	□ SIR, SIS	□ SIR, SIS
SiroCam F	□ SIS	□ SIS
SiroCam AF	□	□
SiroCam AF+	□	□
Montaggio monitor su tubo lampada	□ SIS	□ SIS
Monitor da 22" AC (con alimentatore integrato)*	□ SIS*	□ SIS*
Interfaccia di rete	□ SIR, SIS	□ SIR, SIS

■ Incluso nell'apparecchio base

□ Opzionale

— Non possibile/non disponibile

SIR Pacchetto Sivation Ready

SIS Pacchetto Sivation Start

SIS* Pacchetto Sivation Start con monitor

S Pacchetto Start Pro

A Pacchetto Advance Pro

I Pacchetto Innovation Pro

E Pacchetto Endo Pro

La disponibilità di opzioni e accessori può variare da paese a paese.

Decidi tu di cosa hai bisogno

Qui è possibile visualizzare le numerose opzioni disponibili per Intego ed Intego Pro.
Il tuo Centro di Trattamento - la tua scelta.



Seggiolino Hugo



Seggiolino Carl



Seggiolino Paul (figura con anello poggiapiedi supplementare)



Seggiolino a sella Theo



Tray orientabile aggiuntivo per elemento medico CS



Tray orientabile aggiuntivo per elemento medico TS



Poggiatesta a doppia articolazione



Poggiatesta piatto



Braccetto supplementare aggiuntivo per telecamera (per elemento medico TS)



Negatoscopio



Elemento assistente Comfort



Elemento assistente compatto



Pedale elettronico C+



LEDview Plus



LEDlight Plus



Prese per il collegamento di dispositivi esterni



Heliodent plus configurabile con il Centro di Trattamento



Monitor 22" AC



SiroCam F



SiroCam AF



SiroCam AF+



Lampada di polimerizzazione Saletec Mini LED



Intego senza bacinella



Pedale a 4 funzioni

Dentsply Sirona Italia

Piazza dell'Indipendenza 11B
00185 Roma
dentsplysirona.com

Soluzioni per tutte le procedure

Prevenzione
Conservativa
Ortodonzia
Endodonzia
Implantologia
Protesi

Tecnologie abilitanti

Radiologia
Centri di trattamento
CAD/CAM
Strumenti