



# TIベース マニュアル

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

 Dentsply  
Sirona

# 対応システム

## 【デザインソフト】

- 3Shape software version 2018 以上 + アバットメントデザイナー
- Exocad software + インプラントモジュール

## 【インプラントシステム】

- Astra tech implant EV (プロファイルは非対応)

# ワークフロー



【スキャンボディ】  
FLO、IO FLO



【CADソフト】  
• 3 shape  
• Exocad



【Ti base】




【ライブラリ】  
• 3 shape用  
• Exocad用

事前に専用ライブラリの  
インストールが必要

# ワークフロー (CEREC Primescan+milling)

組み合わせに注意！

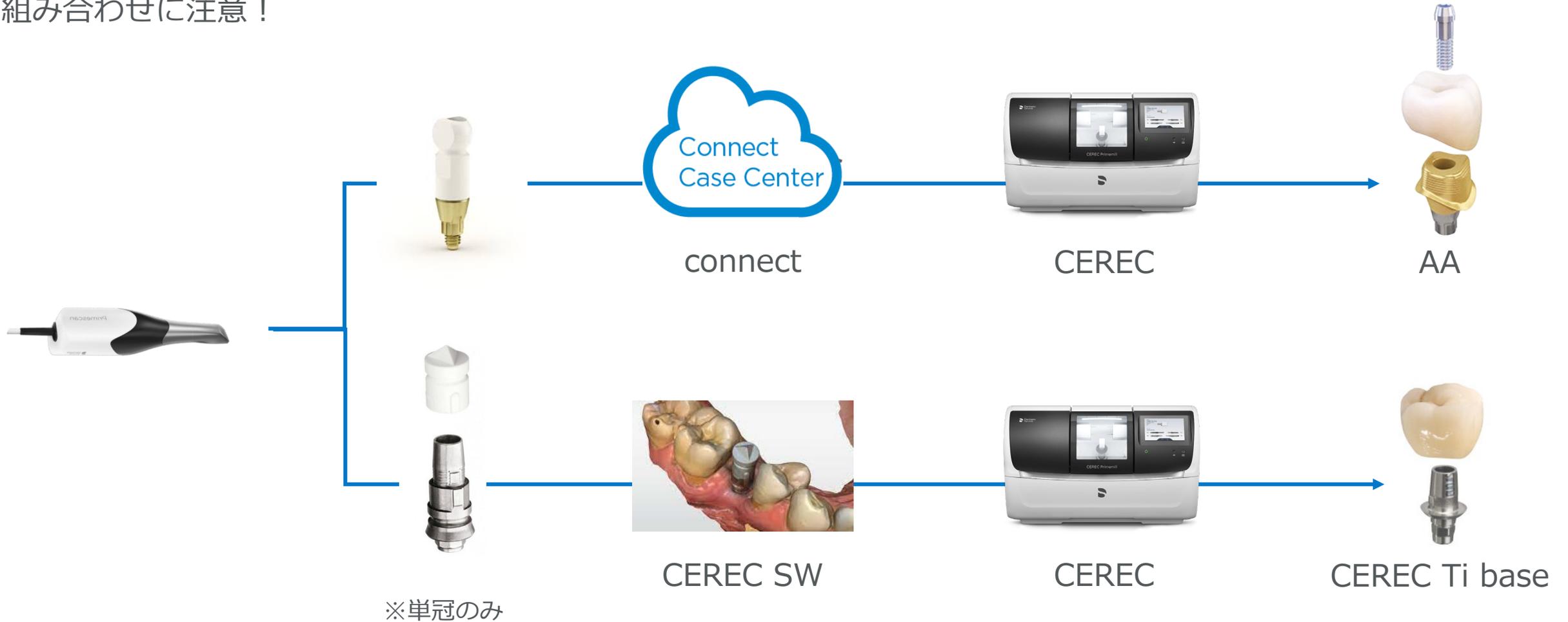


# ワークフロー (DI Primescan)

組み合わせに注意!



# ワークフロー（他社IOS）

組み合わせに注意！

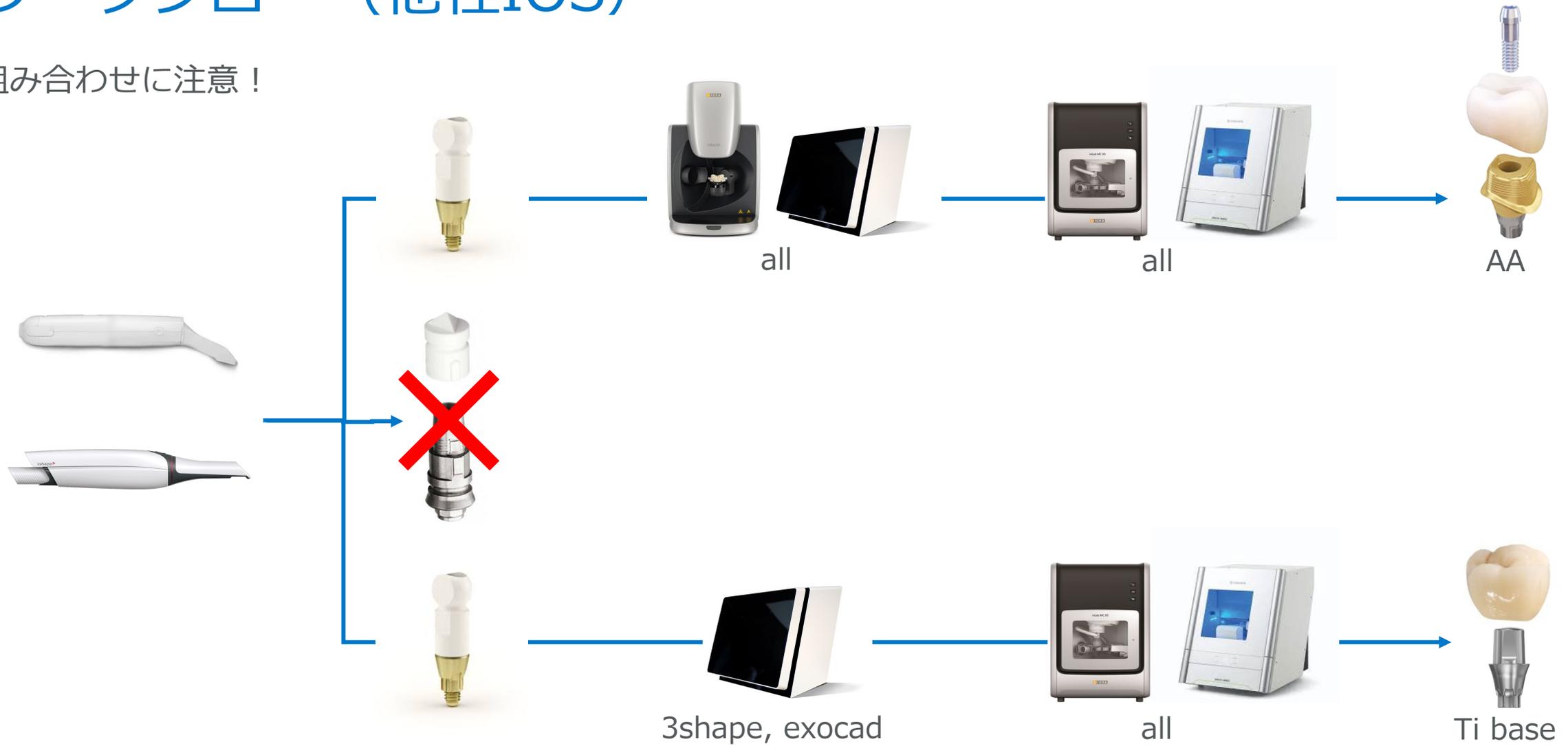

# Exocad

## 【ライブラリインストール】

- [デンツプライシロナインプラントライブラリ](#)  
もしくは
- [Exocad.com](#)

**exocad** Secure area EN

Prosthetic components libraries for usage with titanium bases and direct connections.

[View and download libraries](#)

**Dentsply Sirona Inc.**  
Libraries for Atlantis suprastructures FLO-S (US-cleared, restorations designed with this library can only be milled by Dentsply Sirona) and TitaniumBase. \*1)

**Package: DentsplySirona ModelCreator libraries exocad**  
Updated: 22-10-2020, 2 libraries included [+ Add to download list](#)

**Package: DentsplySirona DentalCAD US cleared libraries exocad**  
Updated: 22-10-2020, 1 libraries included [+ Add to download list](#)

**Package: DentsplySirona DentalCAD libraries exocad**  
Updated: 09-07-2020, 1 libraries included [+ Add to download list](#)

**DESS® Dental Smart Solutions by Terrats Medical S.L.**  
Extended Implant libraries for usage with titanium bases for Intraoral and Desktop scanbodies.

## Dentsply Sirona Implants library - installation instruction for Exocad

## Dentsply Sirona Implants libraries - how to use in Exocad

# 3shape

ライブラリインストール】


- [デンツプライシロナインプラントライブラリ](#)  
もしくは
- ~~デンタルシステムズ > コントロールパネル~~

Download from 3Shape Dental System Control Panel - Download center

Library name	Manufacturer	Implant library	Version	Size	Notes
<input type="checkbox"/> Dentsply Sirona Implants Atlantis suprastructures FLO-S	Dentsply Sirona Implants	Implant library	1.0.0		
<input type="checkbox"/> Dentsply Sirona Implants TitaniumBase	Dentsply Sirona Implants	Implant library	1.0.0		
<input type="checkbox"/> Dentsply Sirona Implants Atlantis suprastructures 1.0.0	Dentsply Sirona Implants	Implant library	1.0.0	6.087 KB	This library is used for digital design guidance for Atlantis suprastructures and for building and printing models. Includes Ankylos®, Astra Tech Implant System®, Invisi® and FLO-S.
<input type="checkbox"/> Dentsply Sirona Implants TitaniumBase	Dentsply Sirona Implants	Implant library	1.0.0	9.327 KB	This library is used when designing restorations for TitaniumBase and for building and printing models. Includes Ankylos®, Astra Tech Implant System® EV and Invisi® S. Support for 3Shape software.

# 3shape ライブラリインストール手順

- 3shapeのデスクトップより、“Dental System Control Panel”をクリック。この時に、3shapeデンタルシステムのバージョンを確認しておく

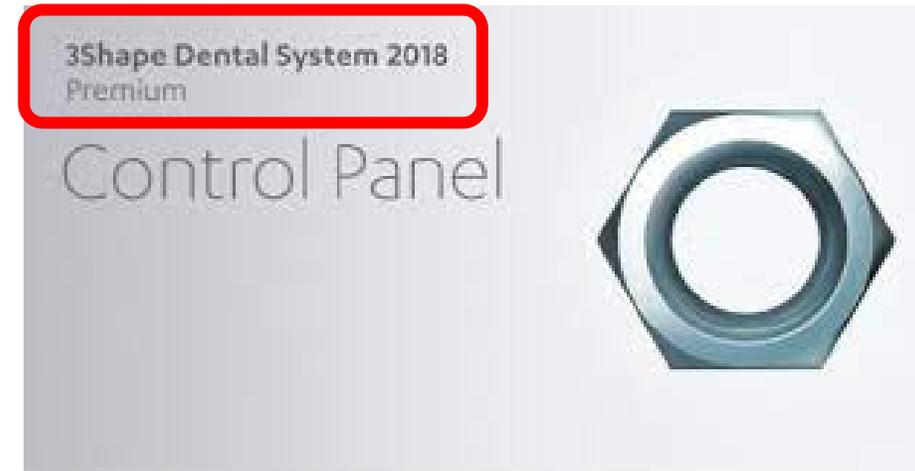

# 3shape ライブラリインストール手順


- コントロールパネルより、左下の“インポート/エクスポート”をクリック



- 
- 定期利用権 (ドングル)
  - インポート/エクスポート
  - ダウンロードセンター
  - トレーニングセンター
  - 3Shape Communicate

# 3shape ライブラリインストール手順

- 3shapeデンタルシステムのバージョンに合わせてDMEファイルを選択

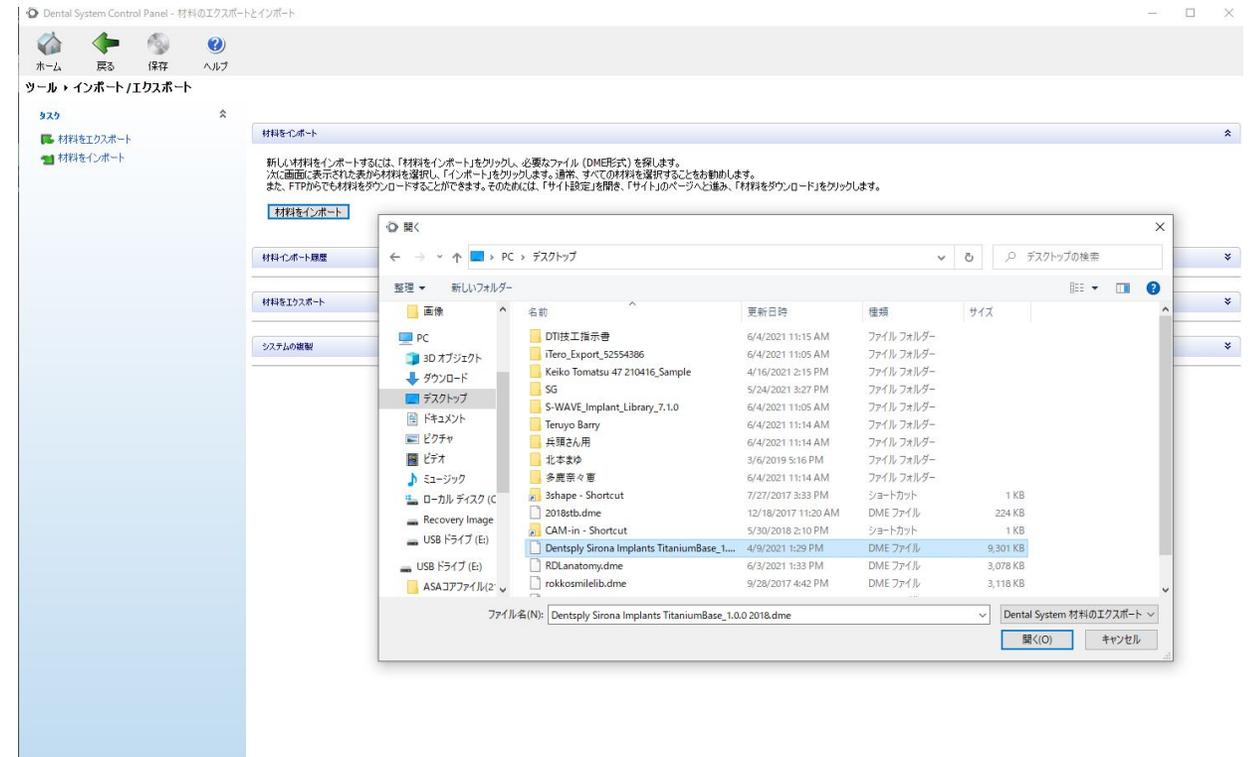

# 3shape ライブラリインストール手順

- インポートをクリック

材料をインポート

新しい材料をインポートするには、「材料をインポート」をクリックし、必要なファイル（DME形式）を探します。  
次に画面に表示された表から材料を選択し、「インポート」をクリックします。通常、すべての材料を選択することをお勧めします。  
また、FTPからでも材料をダウンロードすることができます。そのためには、「サイト設定」を開き、「サイト」のページへと進み、「材料をダウンロード」をクリックします。

材料をインポート

材料をインポート履歴

材料をエクスポート

システムの複製

材料をインポートおよび更新

インポートする材料を選択してください

使用可能な材料  
     インプラントシステム

ライブラリ名  
Dentsply Sirona Implants TitaniumBase

提供者  
Dentsply Sirona Implants

ライブラリタイプ  
インプラントライブラリ

バージョン  
1.0.0 2018

ライブラリ作成日  
8/4/2020

説明

インポート キャンセル

材料をインポート

新しい材料をインポートするには、「材料をインポート」をクリックし、必要なファイル（DME形式）を探します。  
次に画面に表示された表から材料を選択し、「インポート」をクリックします。通常、すべての材料を選択することをお勧めします。  
また、FTPからでも材料をダウンロードすることができます。そのためには、「サイト設定」を開き、「サイト」のページへと進み、「材料をダウンロード」をクリックします。

材料をインポート

材料をインポート履歴

材料をエクスポート

システムの複製


情報

材料のインポートに成功しました

OK

# 3shape ライブラリインストール手順

- 指示書入力時に選択できるか確認（以降を説明するなら、FLO or IO FLOのSTLデータ必須）

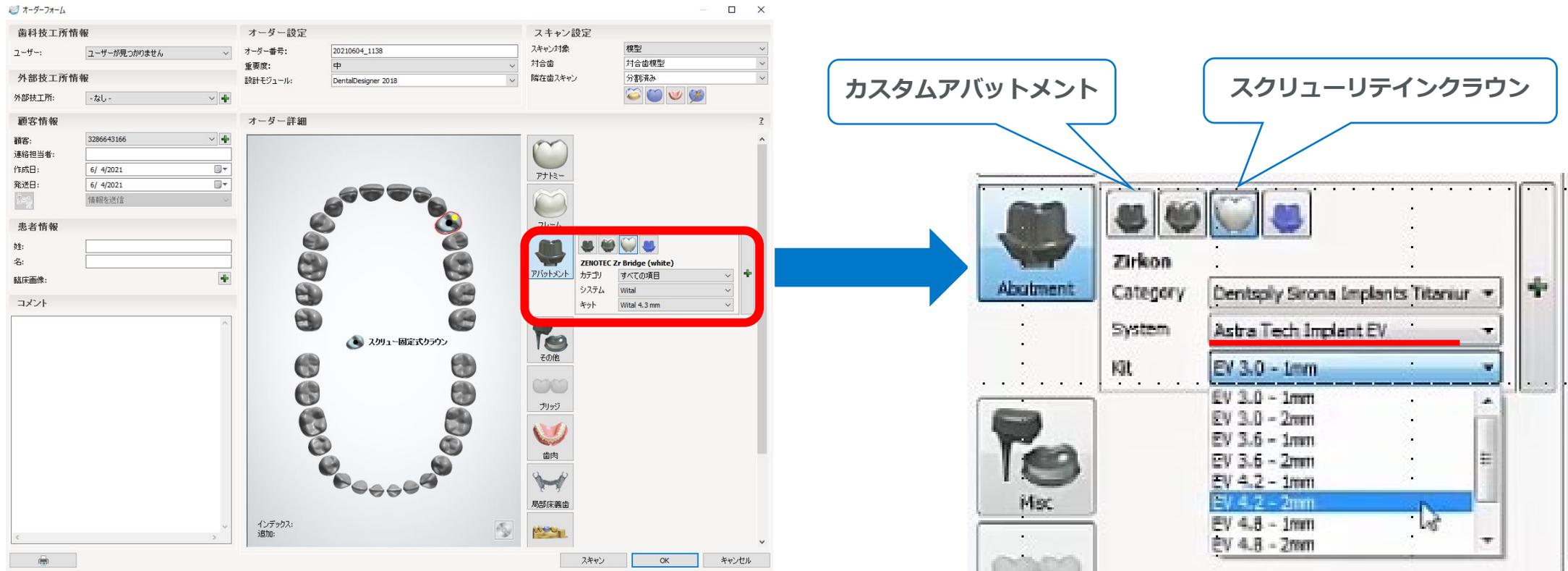

## Dentsply Sirona Implants libraries - how to use in 3Shape

Thank You

