





SpaceFile®

Interproximaal reductiesysteem

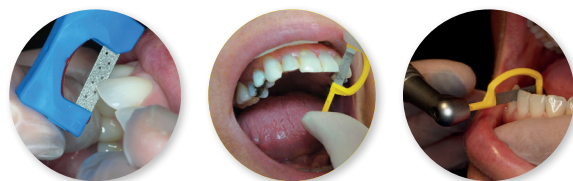

De SpaceFile® Interproximal reduction kit biedt een effectieve en veilige oplossing voor de interproximale reductie.

- diamant-geïmpregneerde strips (gebruik 4-6x)
- enkelzijdig links / rechts diamant gecoat of
- dubbelzijdig diamant gecoat
- handmatig gebruik met de verwijderbare grip
- of hoekstuk gedreven
- autoclaveerbaar
- flexibiliteit voor het volgen van de contouren
- starterset incl. mini griphouder / 9 strips ass.

DIAMANTGEÏMPREGNEERD	Dubbelzijdig	Enkelzijdig Links	Enkelzijdig Rechts
Assortimentspakket Bevat (1) afneembare greep, 8 vijlen (een van elke dikte) en 1 gekartelde contactpuntzaag. 	40034	40034-LS	40034-RS
KITS PER KLEUR BEVATTEN VERWIJDERBARE GRIP EN 8 VIJLEN			
Polijsstenen: Een laatste stap in het restaureren van het tandoppervlak.	40035-G 0,085 mm	40035-LS-G 0,070 mm	40035-RS-G 0,070 mm
Afwerking: Voor het afwerken voorafgaand aan het polijsten.	40035-P 0,110 mm	40035-LS-P 0,100 mm	40035-RS-P 0,100 mm
XX Fijn: Voorpolijsten en afwerking van verkleinde gebieden. Ook te gebruiken als eerste strip voor overmatige crowding.	40035-W 0,140 mm	40035-LS-W 0,123 mm	40035-RS-W 0,123 mm
X Fijn: RX Fijn: Voorpolijsten van gestripte gebieden. Ook te gebruiken als eerste strip bij crowding.	40035-Y 0,160 mm	40035-LS-Y 0,138 mm	40035-RS-Y 0,138 mm
Fijn: Te gebruiken om reductie te initiëren bij crowding. Ook te gebruiken voor contouren na reductie.	40035-R 0,270 mm	40035-LS-R 0,180 mm	40035-RS-R 0,180 mm
Medium: Gebruik voor reductie bij enige crowding of als er wat ruimte is. Kleinere korrels kunnen resultaten behalen vóór het gebruik van grove strip.	40035-BL 0,330 mm	40035-LS-BL 0,210 mm	40035-RS-BL 0,210 mm
Grof: Primaire werkstrip voor IPR. Ook te gebruiken om bij te werken en contouren aan te brengen.	40035-GR 0,370 mm	40035-LS-GRL 0,235 mm	40035-RS-GRL 0,235 mm
X Grof: Gebruik voor maximale reductie bij het begin van IPR.	40035-BLK 0,490 mm	40035-LS-BLK 0,290 mm	40035-RS-BLK 0,290 mm
Gekartelde contactpuntzaag: Te gebruiken om contactpunten op glazuur, composiet, amalgaam, porselein of goud te verbreken.	40035-CS	—	—

SpaceFile® accessoires



IPR GAUGE SET

- Use to measure and confirm space
- Six stainless steel gauges: 0.1mm, 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.4mm, and 0.5mm
- Autoclavable
- Patent #6,413,086

Art. nr: IPR01




SIRONA CONTRA ANGLE water cooled + TIP EJECTOR

Dealer product



SPACEFILE® REMOVABLE GRIP

Art. nr:
40035-GRIP
3 pc./pack

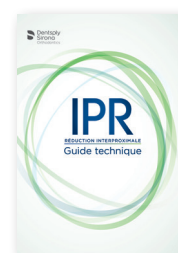

IPR TECHNICAL GUIDE