

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™




Spitzen-Programm für Ultraschallhandstücke
Vielfalt bis in die Spitze,
Qualität bis ins Detail

dentsplysirona.com



Spitzen und Ultraschallscaler in Markenqualität

Gemeinsam stark: Die Voraussetzung für ein ideales Arbeitsergebnis – welche Behandlung Sie auch durchführen – ist die ideale Kombination von Scaler und Spitze. Dentsply Sirona hat beide Elemente präzise aufeinander abgestimmt und trägt für eine durchgängig hohe Qualität Sorge. Das Ergebnis: Ultraschallscaler, die Flexibilität und Komfort aufweisen, und eine zugehörige Spitzenauswahl mit hoher Differenzierungsmöglichkeit in den einzelnen Behandlungsgebieten.

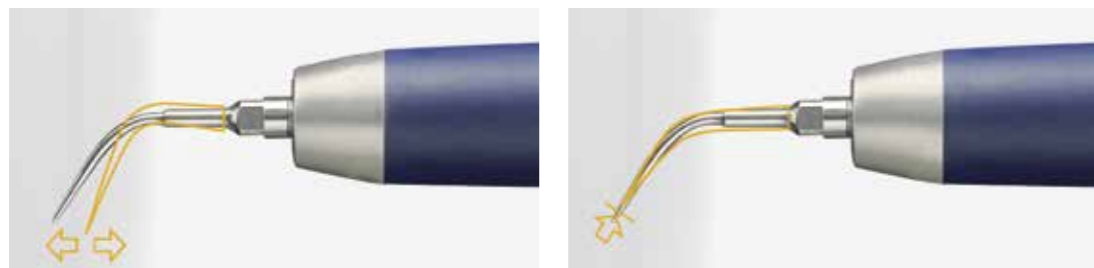


Oben - unten und vor - zurück. Die zweidimensionale Schwingung der Spitze schont den zu behandelnden Zahn.

SiroSonic/L/TL – der hohe Anspruch: Flexibilität direkt im Arztelement integriert

Die Ultraschallhandstücke SiroSonic/SiroSonic L und SiroSonic TL mit leistungsstarker Ringbeleuchtung sind ideale Instrumente für zahlreiche Behandlungsgebiete der modernen Zahnarztpraxis. Denn mit der zuverlässigen Leistungsregelung ermöglichen sie sowohl hochsensible Parodontalbehandlungen als auch die Anwendung in der Mikropräparation. Darüber hinaus kann bei beiden Handstücken mit Hilfe eines externen Sprayadapters eine externe Spülflüssigkeit (z.B. NaOCl- oder CHX-Lösung) zugeführt werden.

Sicher arbeiten

Das bietet Ihnen nur Dentsply Sirona: Alle Spitzen verfügen grundsätzlich über eine optimale Schwingungsauslenkung – individuell abgestimmt auf die speziellen Anforderungen der einzelnen Behandlungsgebiete. Die Schwingungen der Scaling- und PA-Spitzen verlaufen z.B. zweidimensional bzw. nur in einer Ebene. Seitliche Bewegungen werden vermieden, zu therapierende Zähne effektiv geschützt. Die Abtragsleistung wird durch den Abnutzungsgrad der Spitze beeinflusst. Diesen können Sie mit Hilfe einer Spitzenlehre jederzeit schnell und einfach überprüfen.

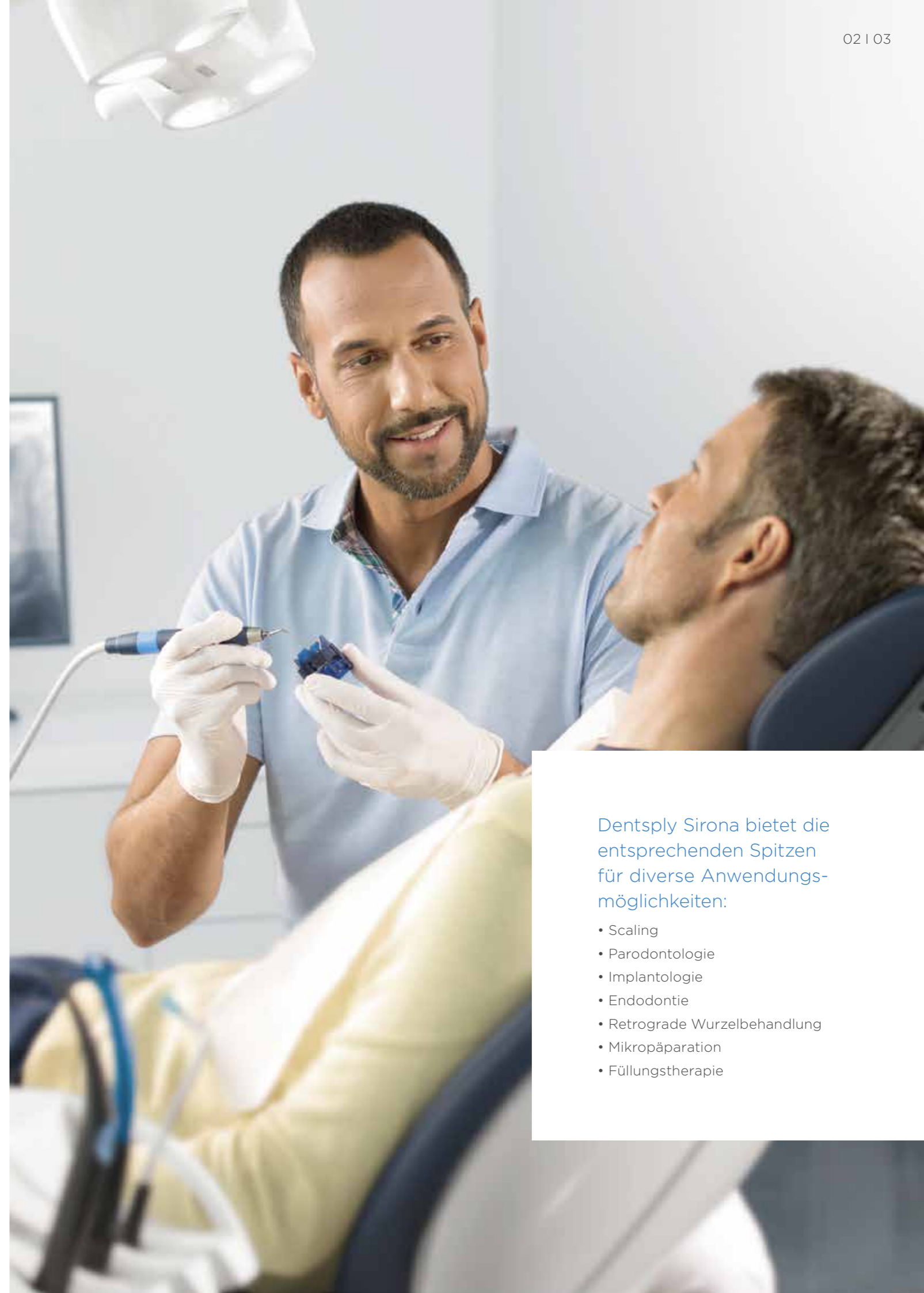

Dentsply Sirona bietet die entsprechenden Spitzen für diverse Anwendungsmöglichkeiten:

- Scaling
- Parodontologie
- Implantologie
- Endodontie
- Retrograde Wurzelbehandlung
- Mikropäparation
- Füllungstherapie

Die große Wirkung hochwertiger Spitzen

Klein aber entscheidend

Nahezu alle Spitzen von Dentsply Sirona passen auf alle Ultraschallscaler, die es von Dentsply Sirona gibt. Ganz gleich welche Baureihe, ganz gleich welches Baujahr. Dafür tragen wir Sorge in jedem Entwicklungsprozess. Dies gilt für: SiroSon S, SiroSon L, SiroSonic, SiroSonic L, SiroSonic TL, PerioSonic.

Qualitativ hochwertig

Selbstverständlich sind sämtliche Spitzen von Dentsply Sirona von allerbesten Qualität. So wird bei der Herstellung ausschließlich hochvergüteter Edelstahl verwendet, der streng nach dem bewährten Dentsply Sirona Härteverfahren verarbeitet und gehärtet wird. Zudem setzen wir auch durch den stetigen Einsatz modernster CNC-gesteuerter Bearbeitungstechnologie kontinuierlich neue Maßstäbe in Sachen Qualität.

Produkte

Typen		Ausführungen	Ref.
SiroSonic ¹		Ohne Licht, inkl. Spitzen Nr. 3L und Nr. 4L	59 13 517
SiroSonic L ¹		Mit Licht, inkl. Spitzen Nr. 3L und Nr. 4L	59 13 509
Set SiroSonic L ¹		Mit Licht, 2 Stück	65 62 834
SiroSonic TL ²		Mit Licht, inkl. Spitzen Nr. 3L und Nr. 4L	62 12 216
Set SiroSonic TL ²		Mit Licht, 2 Stück	65 62 842
PerioSonic		Mit Licht und Signalring	60 30 410

¹ Geeignet für Intego und Intego Pro

² Geeignet für Behandlungseinheiten Teneo und Sinuis

Zubehör für Scaler

Zubehör		Verwendung	Ref.
Sprayadapter L		Für SiroSon L und SiroSonic/ SiroSonic L zur Anwendung von extern zugeführten speziellen Spülflüssigkeiten	60 02 286
Sprayadapter PerioSonic		Für SiroSonic TL und PerioSonic zur Anwendung von extern zugeführten speziellen Spülflüssigkeiten	61 41 852
Drehmoment-schlüssel		Zum sicheren Fixieren der Spitze auf dem Handstück	60 06 196

Technische Daten







Technische Daten	PerioSonic SiroSonic SiroSonic L SiroSonic TL
Antriebskraft	Piezoelektrisch
Schwingungsform	Linear
Schwingfrequenz [kHz]	- 25-32
Ringbeleuchtung*	LED
Ø Handstück [mm]	max. 18
Ø im Griffbereich [mm]	- 12 / - 18
Handstücklänge [mm] (ohne Instrumentenspitze)	- 96 / - 101
Gewicht [g]	- 47 / - 50

* Nicht bei SiroSonic.




Parodontologie

Zum Entfernen von Konkrementen im subgingivalen Einsatz auch in tiefen Zahnfleischtaschen. Mit SiroPerio haben Sie in allen Bereichen den bestmöglichen Zugang, um Konkremente effizient zu entfernen. Maximaler Komfort durch gute Zugänglichkeit selbst in Bifurkationen.

Zubehör	Verwendung	Ref.
SiroPerio PE1* Gerade filigran	 Zur Spülung und Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen	60 44 825
SiroPerio PE2* Rechts gebogen	 Zur Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich	60 44 833
SiroPerio PE3* Links gebogen	 Zur Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich	60 44 841
SiroPerio 4 PS* Gerade	 Zur Detektion und Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen mit PerioScan	61 77 005
SiroPerio PE5* Rechts gebogen	 Zur Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich	63 43 078
SiroPerio PE6* Links gebogen	 Zur Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich	63 43 086


Endodontie

Zum Spülen von Wurzelkanälen, in die zuvor Natriumhypochlorid appliziert wurde. Die Ultraschallschwingung verstärkt die Wirkungsweise der Spülflüssigkeit und bewirkt ihr Vordringen auch in Kapillare.

Zubehör	Verwendung	Ref.
Endospitze Nr. 5 nur für SiroSon L, SiroSonic L/TL und PerioSonic	 Zum Spülen von Wurzelkanälen mit NaOCl	60 02 310

Füllungstherapie

Zum schonenden und sicheren Einsetzen von Inlays.

Zubehör	Verwendung	Ref.
CEM-Set Nr. 6L* (1 CEM Spitze Nr. 6L, 2 Kontaktaufsätze für Inlays)	 Zum Einsetzen von Keramik-Inlays (z.B. CEREC) mit thixotropen Composites	18 94 307
Kontaktaufsatz	Für CEM-Spitze Nr. 6L, 10 Stück für Inlays	18 94 372

Mikropräparation


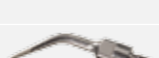
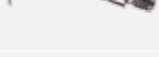

Selektiv diamantierte Spitzen mit Randabschrägung von 20° für die minimal-invasive Präparation und adhäsive Versorgung von kleinen approximalen Kavitäten. Kühlsprayaustritt erfolgt direkt im Präparationsbereich. Kontrabiegung ermöglicht universellen Zugang zu allen Quadranten mit nur 2 Spitzen/Größe.

Zubehör	Verwendung	Ref.
SiroPrep M1* klein	 Mesial	59 04 276
SiroPrep D1* klein	 Distal	59 47 309
SiroPrep M2* Standard	 Mesial	59 47 358
SiroPrep D2* Standard	 Distal	59 47 366

* Inklusive Drehmomentschlüssel.

Retrograde Wurzelbehandlung

Selektiv diamantierte Spitzen zur retrograden Wurzelspitzenresektion. Um einen einfacheren Zugang zur Präparationsstelle zu erreichen, sind die Spitzen um ca. 20° (rechts bzw. links) abgewinkelt.

Zubehör	Verwendung	Ref.
SiroRetro KR* Kurz, rechts abgewinkelt	 Für den linken Unterkiefer bzw. rechten Oberkiefer	54 57 895
SiroRetro KL* Kurz, links abgewinkelt	 Für den rechten Unterkiefer bzw. linken Oberkiefer	54 57 887
SiroRetro GR* Groß, rechts abgewinkelt	 Für den linken Unterkiefer bzw. rechten Oberkiefer	54 57 911
SiroRetro GL* Groß, links abgewinkelt	 Für den rechten Unterkiefer bzw. linken Oberkiefer	54 57 903





Implantologie

Optimales Biofilmmangement und sanfte Reinigung von Implantaten sowie metallischen und keramischen Restaurationen. Die Kunststoffbeschichtung des Reinigungseinsatzes arbeitet sanft auf den empfindlichen Oberflächen und sorgt für eine optimale und schonende Reinigung.

Zubehör	Verwendung	Ref.
SiroImplant IP1 nur für SiroSon L, SiroSonic/L/TL und PerioSonic	 Reinigung von Implantaten sowie metallischen und keramischen Restaurationen	63 43 052
Einsatz IP1 für SiroImplant IP1	Lieferumfang: 5 Stück	63 43 094

Scaling

Vielfältige Spitzenvarianten für alle Schritte der supragingivalen Zahnsteinentfernung.

Zubehör	Verwendung	Ref.
Spitze Nr. 1L*	 Für grobe Reinigung, lingual und bukkal	89 24 250
Spitze Nr. 2L*	 Vielseitig, lingual, bukkal und approximal	89 24 268
Spitze Nr. 3L*	 Universell beidseitig, subgingival und interdental	18 94 455
Set Nr. 3L* (2 Stk)	s. Spitze Nr. 3L	64 12 451
Set Nr. 3L* (6 Stk)	s. Spitze Nr. 3L	65 41 044
Spitze Nr. 4L*	 Universell, besonders geeignet für supra- und subgingivale Zahnflächen sowie für den interdentalen Bereich	18 94 463
Set Nr. 4L* (2 Stk)	s. Spitze Nr. 4L	64 12 469
Set Nr. 4L* (6 Stk)	s. Spitze Nr. 4L	65 41 051

* Inklusive Drehmomentschlüssel.

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland
dentsplysirona.com

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments