


Arcs esthétiques GAC :
Sentalloy et BioForce

Très esthétiques. Peu visibles.

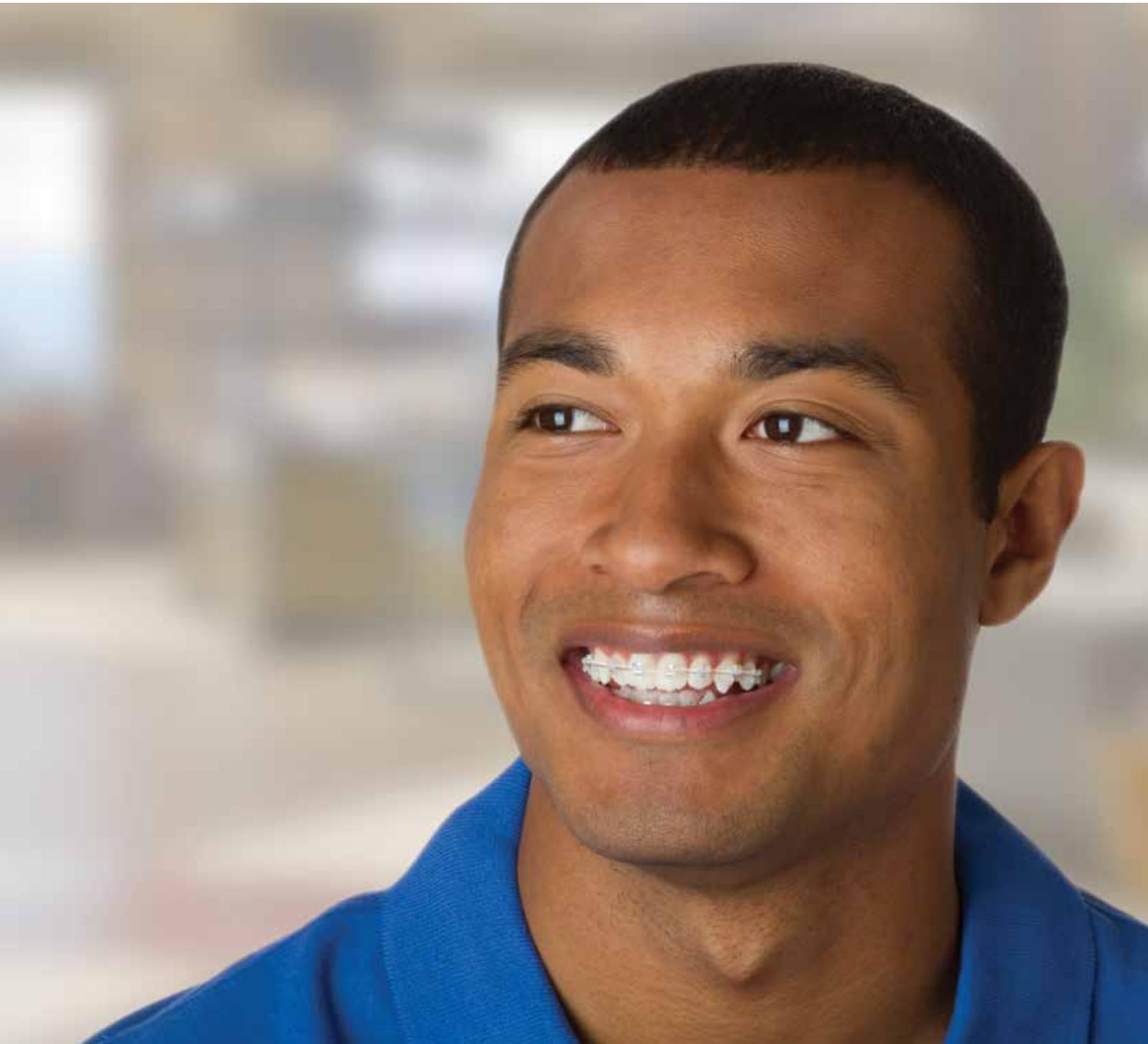

Arcs esthétiques : Sentalloy et BioForce

D'après une étude¹ parue dans la revue " American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ", les appareillages céramiques dotés d'arcs clairs ou transparents devancent constamment et largement leurs homologues en métal en termes d'esthétisme. Les arcs esthétiques combinent, dans un même traitement, les atouts d'une visibilité réduite avec les atouts scientifiques d'une ingénierie dernier cri. Personnalisés au moyen d'un traitement unique au rhodium, tous les arcs esthétiques GAC mettent en avant une surface à faible réflectivité pour un aspect dépoli doux. Ils offrent les mêmes propriétés et performances exceptionnelles que leurs homologues standards, mais sous une forme esthétique recherchée par les patients. Ils s'adaptent parfaitement aux brackets de notre gamme In-Ovation C ou à tout autre bracket céramique.

Arc esthétique Sentalloy

Un excellent arc NiTi, avec peu de friction, très élastique, pour le nivellement et l'alignement. Les arcs Sentalloy, dotés d'une mémoire de forme thermo-active, appliquent des forces quasiment constantes. Les arcs esthétiques Sentalloy sont disponibles en section 0,014, 0,016 et 0,018 pour les tailles d'arc moyennes et larges.

Arc esthétique BioForce

L'arc esthétique BioForce fait partie de la première et unique gamme d'arcs biologiques. Les arcs NiTi BioForce appliquent une force légère et douce sur les dents antérieures et des forces de plus en plus importantes sur les dents postérieures, pour atteindre un plateau au niveau des molaires. En commençant par une force à environ 80 grammes puis en augmentant jusqu'à environ 300 grammes, BioForce applique la force nécessaire pour bouger chaque dent, en réduisant éventuellement le nombre de changements d'arcs requis tout en améliorant le confort du patient. Les arcs esthétiques BioForce sont disponibles en section 0,018 x 0,018 et 0,020 x 0,020 pour les tailles d'arc moyennes et larges.

¹James P. Ziuchkovski, Henry W. Fields, William M. Johnston, Delwin T. Lindsey. Assessment of perceived orthodontic appliance attractiveness. Am J Orthod & Dentofac Orthop, April 2008; 133: S68-S78

Bioforce et Sentalloy sont des dispositifs médicaux de classe IIa pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, indiqués pour le déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. Organisme certificateur: Emergo Europe. Fabriqué par Dentsply Sirona. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice (ou sur l'étiquetage) avant toute utilisation - non remboursé par la Sécurité Sociale.

Dentsply GAC Europe
1 rue des Messagers CS20115
37210 Rochecorbon, France
Tel +33 (0)2 47 40 23 30
Fax +33 (0)2 47 40 23 39
www.dentsplysirona.com

©2017 Dentsply Sirona.
Tous droits réservés.

