

L'esthétique
sans
compromis



In-Ovation® C
Le bracket auto-ligaturant
esthétique de GAC



L'Orthodontie par excellence

Facile à utiliser pour les praticiens, le brackets In-Ovation® C offre d'excellents résultats, améliore l'esthétique et le confort pour le patient. Conçu dans le but d'avoir une performance fiable, le bracket a une base 100% mécanique qui assure un collage et décollage fiable, ainsi qu'un répositionnement facile. Le clip interactif en Coballoy avec l'effet de ressort offre une excellente expression de torque. Sa conception innovante permet une facilité d'ouverture et de fermeture du clip tout au long du traitement: la fermeture peut se faire avec le pouce (vous entendrez un "clic" quand le clip sera correctement placé) – ainsi, le changement d'arc ne prend que quelques instants.


In-Ovation® C Avantages pour le praticien

- Moins d'ajustements nécessaires
- Ajustements plus rapides permettant de raccourcir les rendez-vous
- Temps de traitement plus court
- Résultats rapides de bonne qualité indépendamment de la technique employée
- Contrôle flexible pour une fin de traitement efficace
- Un clip facile à ouvrir et à fermer
- Aucune ligature métallique ou élastomérique pour une meilleure hygiène et une plus belle esthétique

In-Ovation® C Avantages pour le patient

- Rendez-vous plus courts et moins fréquents
- Temps de traitement plus court
- Résultat excellent
- Hygiène buccale améliorée

In-Ovation® C Les détails uniques

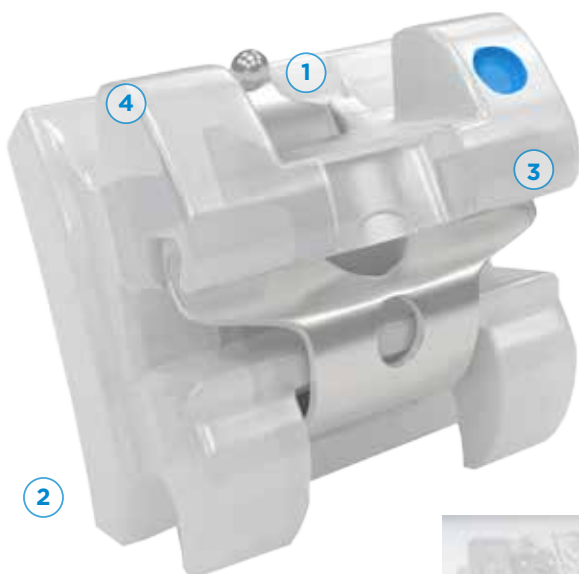

- 1** Véritable bracket bi-plot
Un vrai bracket bi-plot avec une largeur mésio-distale optimale et une distance inter-bracket adéquate.
- 2** Entrée de gorge à triple chanfrein
L'entrée de gorge à triple chanfrein facilite l'insertion de l'arc.
- 3** Couverture complète de la gorge
Le clip interactif est unique grâce à deux points de contact, ce qui assure une couverture complète de la gorge, et son traitement au rhodium améliore l'esthétique..
- 4** Des ailettes galbées à la surface adoucie
Des ailettes galbées à la surface adoucie diminuent le risque d'interférences occlusales et améliorent le confort du patient.
- 5** Design de la base
Base 100% mécanique pour un collage fiable et repositionnement facile.





Temps

302.55 minutes vs 476.76 minutes

Les praticiens utilisant les brackets In-Ovation®* bénéficient d'un gain de temps de 3h par patient.



Durée de traitement

19.83 mois vs 23.97 mois

Les brackets In-Ovation® ont la capacité de finir les cas d'une complexité équivalente 4 mois plus tôt que les brackets traditionnels non-autoligaturants.



Rendez-vous

9.6 vs 16.26

Un traitement avec les brackets In-Ovation® nécessite 40% de rendez-vous en moins qu'avec les brackets traditionnels non-autoligaturants.

Le pouvoir d'un contrôle interactive™ du début à la fin

In-Ovation® C vous offre une possibilité de commencer et de finir efficacement votre traitement en un seul système. Il vous permet de maintenir le niveau de contrôle précis nécessaire pour toutes les phases du traitement.

Avec la technologie révolutionnaire des brackets In-Ovation® C appelée Interactive™ vous pouvez choisir le degré d'interaction entre le bracket et le fil. L'In-Ovation® C peut être passif dans la phase de nivellement et d'alignement, interactif au milieu du traitement où le contrôle est réalisé mais le glissement libre du fil est maintenu et actif pour un contrôle optimal des finitions. C'est votre choix, l'avantage dont les brackets traditionnels non-autoligaturants ne bénéficient pas.

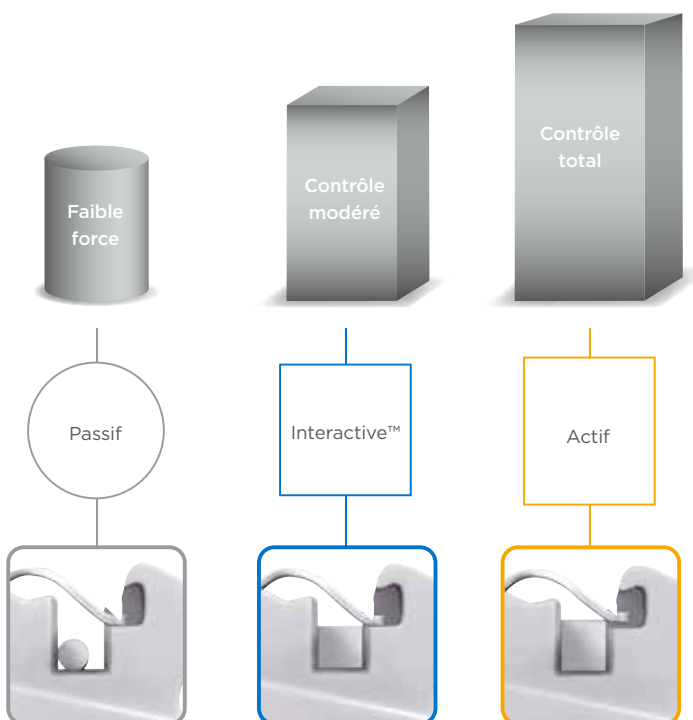


Tableau d'interactivité

Section d'arc	.018"	.022"
Passif	.014" .016"	.014" x .016" .018" x .020"
Interactive™	.016" x .016" .018" x .018"	.018" x .018" .020" x .020" .022" x .018"
Actif	.016" x .022" .017" x .025" .018" x .025"	.018" x .025" .019" x .025" .021" x .028"

*Jerry R. Clark, DDS, MS, Jack Gebbie, BS, Datatex Market Research Report Summary: Increasing Practice Efficiency and Profitability Using In-Ovation® Self-Ligating Brackets, March, 2007. Datatex is a member of CASRO® - Council of American Survey Research Organizations

In-Ovation® C

Le bracket auto-ligaturant esthétique de GAC



The Dental Solutions Company

Dentsply Sirona est le plus grand fabricant mondial de solutions et technologies dentaires professionnelles. Avec notre position de pionnier de l'industrie, nous créons des plateformes à l'avant-garde, intégrant aussi bien des consommables que de l'équipement, de la technologie ou encore des produits spécialisés. Nous nous engageons à présenter de nouveaux produits innovants, et des solutions complémentaires intégrales afin de favoriser une dentisterie mieux adaptée, plus sûre et plus rapide.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site dentsplysirona.com.

In-Ovation® C est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. Contient du nickel et du chrome. Classe : II. Organisme certificateur : Emergo Europe. Fabricant : Dentsply GAC. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice (ou sur l'étiquetage) avant toute utilisation. Non remboursé par la Sécurité Sociale.

