

## In-Ovation® L par GAC




## The Dental Solutions Company

Dentsply Sirona est le plus grand fabricant mondial de solutions et technologies dentaires professionnelles. Avec notre position de pionnier de l'industrie, nous créons des plateformes à l'avant-garde, intégrant aussi bien des consommables que de l'équipement, de la technologie ou encore des produits spécialisés. Nous nous engageons à présenter de nouveaux produits innovants, et des solutions complémentaires intégrales afin de favoriser une dentisterie mieux adaptée, plus sûre et plus rapide.

Pour en savoir plus, rendez vous sur notre site [dentsplysirona.com](http://dentsplysirona.com).

Dentsply GAC Europe  
1 rue des Messagers  
37210 Rochecorbon, France  
Tél : +33 (0) 2 47 40 23 30  
[gac-fr.info@dentsplysirona.com](mailto:gac-fr.info@dentsplysirona.com)  
[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)

In-Ovation® est une marque déposée de DENTSPLY Intl.  
©2016 Dentsply GAC Intl.  
Tous droits réservés

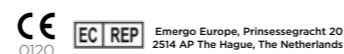

In-Ovation® L est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. Contient du nickel et du chrome. Classe : IIa. Organisme certificateur : Emergo Europe. Fabricant : Dentsply GAC. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice (ou sur l'étiquetage) avant toute utilisation. Non remboursé par la Sécurité Sociale.

120-090-01f 02/2018

## In-Ovation® L par GAC Bracket lingual auto-ligaturant

# La solution esthétique sans compromis



# La solution parfaitement esthétique

De plus en plus d'adultes souhaitent expérimenter les bénéfices d'un sourire parfait, sans que leur traitement ne se voit. Grâce aux brackets In-Ovation L, vous avez maintenant la possibilité d'offrir à vos patients une solution parfaitement invisible.

## In-Ovation® L Avantages pour le patient

- Absolument invisible
- Petit, confortable à porter
- Permet de parler clairement sans gêne
- Temps de traitement plus court
- Rendez-vous plus courts et plus espacés

## Une facilité d'utilisation sans précédent

In-Ovation L bénéficie de tous les avantages de la gamme des brackets auto-ligaturants In-Ovation afin de résoudre l'un des plus grands problèmes des systèmes linguaux : l'insertion d'arc et placement des ligatures.

Le clip de l'In-Ovation L s'ouvre et se ferme facilement et rapidement ce qui rend l'insertion d'arc et mise en place de ligatures facile et rapide.

## Les avantages pour le docteur et son équipe


- Le clip interactif à ressort qui peut jouer un rôle passif, interactif ou actif permettant le contrôle optimal d'engagement d'arc pendant toutes les phases de traitement.
- Le procédé de fabrication amélioré est mis au profit du succès du système In-Ovation.
- Une solution de traitement complètement indétectable pour les patients qui cherchent un traitement invisible.
- La faible épaisseur permet d'éviter les interférences gingivales et améliore le confort du patient.
- L'entrée de gorge chanfreinée facilite l'engagement de l'arc et permet une meilleure mécanique de glissement.
- Véritable design bi-plot avec une distance mésio-distale optimale offre un contrôle accru de la rotation.



## Découvrez la différence qu'apporte In-Ovation® L

GAC a transmis au design lingual tous les avantages cliniquement prouvés du système auto-ligaturant In-Ovation. Seul un bracket interactif peut fournir la fonctionnalité complète tout au long du traitement. Cela vous permet de profiter du glissement libre en phase passive ainsi que du contrôle précis en phase active au cours de l'étape avancée du traitement.

Le simple fait de changer un arc associé avec le bracket auto-ligaturant In-Ovation L vous offre un spectre complet de niveau de contrôle.

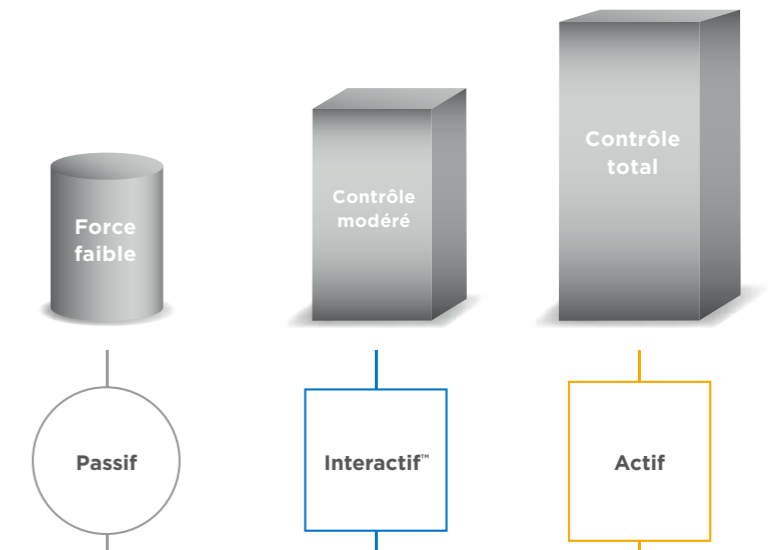

### Arcs linguaux Sentalloy

Taille	Références Petit		Références Médium		Références Large		Références Extra Large	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
.012"	02-911-101	02-911-601	02-911-102	02-911-602	02-911-103	02-911-603	02-911-104	02-911-604
.014"	02-911-111	02-911-611	02-911-112	02-911-612	02-911-113	02-911-613	02-911-114	02-911-614

### Arcs linguaux Neo Sentalloy

Taille	Références Petit		Références Médium		Références Large		Références Extra Large	
	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
.017" x .025"	02-923-131	02-923-631	02-923-132	02-923-632	02-923-133	02-923-633	02-923-134	02-923-634

### Arcs Universels en Beta-Titane

Taille	Références
.016"	03-016-000
.016" x .022"	03-622-000

