


In-Ovation® *mini* par GAC  
Le bracket auto-ligaturant

Un bracket remarquable  
qui ne se remarque pas

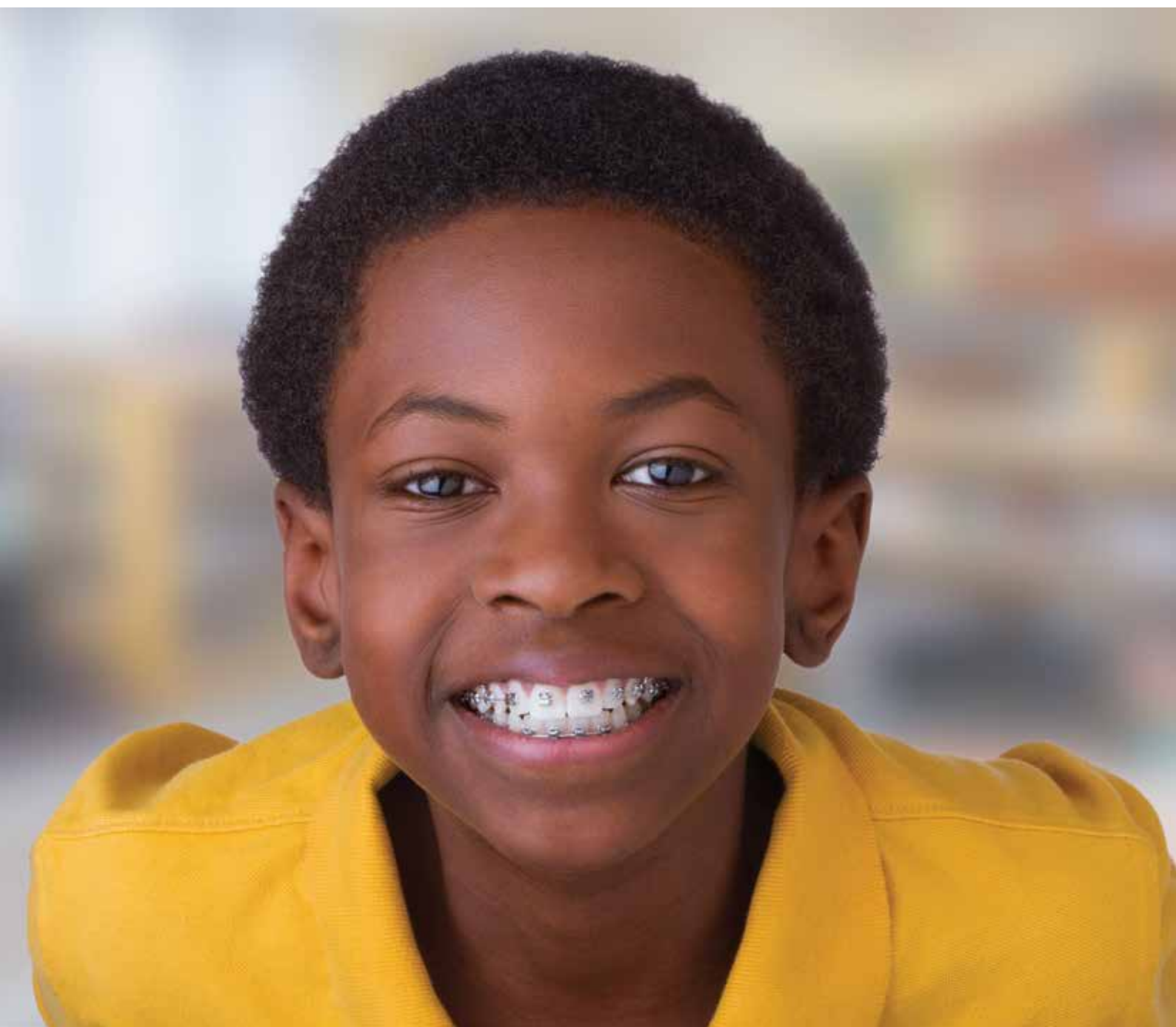

# Une grande réussite dans l'orthodontie esthétique

Le bracket In-Ovation *mini* possède les caractéristiques de la ligne In-Ovation que vous appréciez déjà. Sa petite taille, son profil surbaissé et son esthétique font d'In-Ovation *mini* un bracket de choix pour les patients.



## Caractéristiques d'In-Ovation® *mini*



### Véritable appareil d'arc droit -

La véritable appareil d'arc droit est celui dont tous les brackets sont conçus pour guider les dents jusqu'à leur position idéale avec un arc préformé. In-Ovation *mini* est un véritable appareil d'arc droit et possède une base anatomique, le torque dans la base, le contrôle in/out programmé et les gorges de niveau.



**Ouverture et fermeture faciles du clip** - Avec un instrument spécialement conçu à cet effet.



**Véritable bracket bi-plot à faible épaisseur** - Grâce à 4 ailettes de ligature adoucies et aux espaces sous ailettes, il est facile d'attacher des chaînettes élastomériques ou d'utiliser des ligatures colorées si le patient le désire.



Disponible en version Rhodium pour encore plus d'esthétique

**Base anatomique** - La base anatomique de calibre 80 et la notation de Palmer, gravée au laser sur la grille, facilitent la gestion des brackets avec une référence disponible par quart, par dent et par prescription.



**Marquage disto-gingival** - Un point de couleur sur l'ailette disto-gingivale permet une identification immédiate de la dent à laquelle le bracket est destiné.



**Entrée de gorge à triple chanfrein** - Pour une facilité d'engagement de l'arc, réduisant les risques qu'il soit contraint ou serti.



**Clapet** - Un clapet breveté empêche l'arc de s'échapper de la gorge.



## Programmé pour s'adapter

In-Ovation *mini* vous offre une conception unique associant les phases interactive et passive dans un même bracket, mettant à votre disposition des options de traitement sans précédent. Des brackets passifs sont disponibles pour les canines et les prémolaires, permettant une réduction de la friction pendant le glissement de l'arc.

In-Ovation® *mini* est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. Organisme certificateur: Emergo Europe. Fabriqué par DENTSPLY GAC. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice (ou sur l'étiquetage) avant toute utilisation - non remboursé par la Sécurité Sociale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site [dentsplysirona.com](http://dentsplysirona.com).

DENTSPLY GAC Europe  
1, rue des Messagers CS20115  
37210 Rochecorbon, France  
Tél : +33 (0)2 47 40 23 30  
[gac-fr.info@dentsplysirona.com](mailto:gac-fr.info@dentsplysirona.com)  
[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)

In-Ovation® est une marque déposée de DENTSPLY Intl.  
©2016 Dentsply GAC Intl.  
Tous droits réservés.