

Produits

Types		Versions	Réf.
SiroSonic ¹		Sans éclairage, y compris inserts n° 3L et n° 4L	59 13 517
SiroSonic L ¹		Avec éclairage, y compris inserts n° 3L et n° 4L	59 13 509
Kit SiroSonic L ¹		Avec éclairage, 2 unités	65 62 834
SiroSonic TL ²		Avec éclairage, y compris inserts n° 3L et n° 4L	62 12 216
Kit SiroSonic TL ²		Avec éclairage, 2 unités	65 62 842
PerioSonic		Avec éclairage et bague de signalisation	60 30 410

¹ Convient pour Intego et Intego Pro
² convient pour les postes de traitement Teneo et Sinius

Accessoires pour détartreur

Accessoires		Utilisation	Réf.
Adaptateur de spray L		Pour SiroSon/SiroSon L et SiroSonic/SiroSonic L pour l'application de liquides de rinçage spéciaux alimentés de l'extérieur	60 02 286
Adaptateur de spray PerioSonic		Pour SiroSonic TL et PerioSonic pour l'application de liquides de rinçage spéciaux alimentés de l'extérieur	61 41 852
Clé dynamométrique		Pour une fixation sûre de l'insert sur la pièce à main	60 06 196

Spécifications techniques

Spécifications techniques	PerioSonic SiroSonic SiroSonic L SiroSonic TL
Moteur	Piézoélectrique
Forme des oscillations	Linéaire
Fréquence d'oscillation [kHz]	~ 28-32
Éclairage annulaire*	DEL
Ø pièce à main [mm]	max. 18
Ø de la partie tenue de la pièce à main [mm]	~ 12 / ~ 18
Longueur de la pièce à main [mm] (sans insert)	~ 96 / ~ 101
Poids [g]	~ 47 / ~ 50

* Pas pour SiroSonic.



Parodontologie

Pour l'élimination de concrétions en utilisation sous-gingivale, également dans des poches gingivales profondes. SiroPerio permet un accès optimal à toutes les zones pour une élimination efficace et en douceur des concrétions. Une utilisation extrêmement aisée grâce à la bonne accessibilité des zones à traiter, même dans les bifurcations.

Accessoires		Utilisation	Réf.
SiroPerio PE1* Droit, filigrane		Pour le rinçage et le nettoyage des racines dans les poches gingivales profondes	60 44 825
SiroPerio PE2* Courbé à droite		Pour le nettoyage des racines dans les poches gingivales profondes dans la zone latérale	60 44 833
SiroPerio PE3* Courbé à gauche		Pour le nettoyage des racines dans les poches gingivales profondes dans la zone latérale	60 44 841
SiroPerio 4 PS* Droit		Pour la détection et le nettoyage des racines dans les poches gingivales profondes avec PerioScan	61 77 005
SiroPerio PE5* Courbé à droite		Pour le nettoyage des racines dans les poches gingivales profondes dans la zone latérale	63 43 078
SiroPerio PE6* Courbé à gauche		Pour le nettoyage des racines dans les poches gingivales profondes dans la zone latérale	63 43 086

Endodontie

Pour rincer des canaux radiculaires préalablement traités à l'hypochlorite de sodium. Les oscillations générées par les ultrasons amplifient l'efficacité du liquide de rinçage et lui permettent de pénétrer jusque dans les capillaires.

Accessoires		Utilisation	Réf.
Insert Endo n° 5 uniquement pour SiroSon L, SiroSonic L, SiroSonic TL et PerioSonic		Pour le rinçage des canaux radiculaires avec une solution NaOCl	60 02 310

Obturations

Pour l'insertion sûre et non agressive d'inlays.

Accessoires		Utilisation	Réf.
Kit CEM n° 6L* (1 insert CEM n° 6L, 2 embouts de contact pour inlays)		Pour la mise en place d'inlays (p. ex. CEREC) avec des composites thixotropiques.	18 94 307
Embout de contact		Pour insert CEM n° 6L, 10 embouts de contact pour inlays	18 94 372

Micropréparation

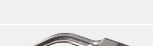
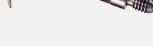
Sélection d'inserts diamantés avec un chanfrein de 20 ° pour une préparation peu invasive et un traitement adhésif des petites cavités proximales. Le spray de refroidissement s'écoule directement dans la zone de préparation. La forme du contre-angle garantit un accès universel à tous les quadrants avec seulement deux inserts par taille.

Accessoires		Utilisation	Réf.
SiroPrep M1* Petit		Mésial	59 04 276
SiroPrep D1* Petit		Distal	59 47 309
SiroPrep M2* Standard		Mésial	59 47 358
SiroPrep D2* Standard		Distal	59 47 366

* clé dynamométrique incluse.

Traitement du canal radiculaire rétrograde

Inserts diamantés spécialement sélectionnés pour la résection apicale rétrograde. Afin de faciliter l'accès à la zone de la préparation, les inserts sont coudés selon un angle d'environ 20° (à droite et à gauche).

Accessoires		Utilisation	Réf.
SiroRetro KR* court, coudé à droite		Pour le maxillaire inférieur gauche et le maxillaire supérieur droit	54 57 895
SiroRetro KL* court, coudé à gauche		Pour le maxillaire inférieur droit et le maxillaire supérieur gauche	54 57 887
SiroRetro GR* Long, coudé à droite		Pour le maxillaire inférieur gauche et le maxillaire supérieur droit	54 57 911
SiroRetro GL* grand, coudé à gauche		Pour le maxillaire inférieur droit et le maxillaire supérieur gauche	54 57 903

Implantologie

Pour la gestion de dépôts biologiques et le nettoyage d'implants ainsi que les restaurations métalliques et céramiques. Grâce à un revêtement synthétique spécial, l'insert de nettoyage agit en douceur sur les surfaces sensibles, assurant ainsi un nettoyage optimal et non agressif.

Accessoires		Utilisation	Réf.
SiroImplant IP1 uniquement pour SiroSon L, SiroSonic L, SiroSonic TL et PerioSonic		Nettoyage d'implants ainsi que de restaurations métalliques et céramiques	63 43 052
Insert IP1 pour SiroImplant IP1		Volume de livraison : 5 unités	63 43 094

Détartrage dentaire

Une large gamme d'inserts est disponible pour toutes les étapes de détartrage sus-gingival.

Accessoires		Utilisation	Réf.
Insert n° 1L*		Pour un nettoyage lingual et buccal grossier	89 24 250
Insert n° 2L*		Polyvalent, lingual, buccal et proximal	89 24 268
Insert n° 3L*		Universel bilatéral, sous-gingival et interproximal	18 94 455
Kit n° 3L* (2 unités)		v. Insert n° 3L	64 12 451
Kit n° 3L* (6 unités)		v. Insert n° 3L	65 41 044
Insert n° 4L*		Universel, idéal pour les surfaces sus-gingivales et sous-gingivales ainsi que pour la zone interproximale	18 94 463
Kit n° 4L* (2 unités)		v. Insert n° 4L	64 12 469
Kit n° 4L* (6 unités)		v. Insert n° 4L	65 41 051

* clé dynamométrique incluse.