

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Intego

La performance
en toute confiance

dentsplysirona.fr





Votre partenaire de confiance

Intego représente un des meilleurs postes de traitement de sa catégorie. Il repose sur la force d'innovation et sur le design primé de nos postes de traitement existants. En tant que partenaire de confiance de cabinets dentaires performants, Intego présente toutes les caractéristiques nécessaires pour vous assister de manière optimale : un design ergonomique pour de meilleurs flux de travail, des normes de qualité élevées en termes d'usinage et de façonnage ainsi qu'un excellent rapport qualité-prix ; Intego appartient donc à notre catégorie performance.

Valeur sûre

Une grande performance et des fonctions ergonomiques à un prix très avantageux, des options personnalisées adaptées à vos besoins.

Design ergonomique

Orientée vers une utilisation intuitive et un flux de travail intégré et harmonieux.

Qualité « Made in Germany »

Des procédures de garantie de la qualité précises, des matériaux durables et un design robuste évolutif.

Intego TS

- Positionnement ergonomique de l'élément praticien grâce à un système de soutien du bras support
- Système de tray fonctionnel avec plateau amovible à positionner en toute flexibilité
- Concept global, intégration d'un système de prévention des infections pour un bon résultat



Une valeur sûre en toute confiance

Vos journées de travail sont complexes et représentent des exigences différentes pour les postes de traitement. Intego vous offre une solution adéquate : choisissez entre deux versions que vous pouvez configurer en toute flexibilité. Peu importe que vous optiez pour un système avec bras flexible ou tablette pivotante, chacune des options rime avec un niveau de performance élevé à des prix raisonnables.

Aperçu de vos avantages

- Poste de traitement avec un groupe d'eau compact pour une utilisation optimale de l'espace
- Interface utilisateur EasyPad pour une manipulation aisée et intuitive
- Élément assistante compact offrant une grande liberté de mouvements
- Qualité d'eau contrôlée grâce à une alimentation autonome avec une bouteille d'eau
- Disponible en version TS avec cordons pendants ou CS avec bras articulé

CS - Le concept de bras articulé



Le **concept de bras articulé** est conçu pour l'éventail le plus large de situations de prise en charge à deux ou quatre mains. L'élément Praticien peut pivoter jusqu'à 240° pour un positionnement adapté. La distance maximale entre l'élément Praticien et les instruments est de 90 cm.

Le monde de l'élégance

Couleurs de sellerie nobles pour un effet classique intemporel.

**Le monde du naturel**

Des couleurs chaudes, douces et reposantes.

**Le monde de la vitalité**

Des couleurs vives et lumineuses pour une atmosphère moderne et vivante.



* Couleurs disponibles pour la sellerie Lounge.

Un design ergonomique en toute confiance

Le poste de traitement est la pièce maîtresse de votre cabinet. Intego allie l'apparence et la fonctionnalité : vous pouvez travailler confortablement dans des bonnes conditions. Outre ses formes harmonieuses, ses composants adaptés les uns aux autres et sa large palette de coloris, les postes de traitement Intego remplissent les critères les plus exigeants de notre concept ergonomique. Ainsi, Intego valorise l'esthétique de votre cabinet dentaire et s'adapte idéalement à vos goûts !

Les options de sellerie**Sellerie Premium**

Une sellerie de haute qualité sans couture garantit un confort élevé à vos patients même en cas de traitements de longue durée.

**Sellerie Lounge**

Surface en matériau doux et agréable avec un rembourrage confortable pour une relaxation maximale. Assise profilée assurant un maintien ergonomique.

Concept largement récompensé

Dentsply Sirona a obtenu de nombreux prix pour la conception de ses produits.



Des résultats de qualité

Chacun de vos traitements représente un flux de travail complexe. Nos produits conçus de manière ergonomique vous offrent un accès facilité aux patients et permettent une fluidité optimale pour un confort patient élevé. Intego rassemble toutes les dimensions du monde de l'ergonomie pour vous faciliter le travail ; même après de longues journées de travail, vous obtenez des résultats de grande qualité, et ce grâce à votre savoir-faire avec le renfort de notre poste de traitement.



1 Une assise intuitive

- **Une grande liberté de mouvement**
Un dossier mince pour une liberté de mouvements adéquate pour vos jambes et un positionnement flexible de la pédale.
- **Placement ergonomique des instruments**
L'harmonie entre l'élément praticien et l'élément assistante ; le positionnement flexible du tray supplémentaire pour les modèles à bras articulé et les modèles à cordons pendants
- **Des tabourets confortables**
Hugo, Carl, Paul

2 Un positionnement confortable

- **Réglage du poste de traitement**
Réglage flexible de la hauteur et de la profondeur, crachoir pivotant.
- **Confort patient accru**
Système d'élévation en douceur, appui-bras, repose-pieds Vario, sellerie confortable, ErgoMotion

3 Visibilité adaptée

- **Éclairage de qualité de la zone de traitement**
LEDview Plus ou LEDlight, lampe à LED pour instruments
- **Têtières flexibles**
plates ou à double articulation
- **Images intra-orales de grande qualité**
SiroCam F, AF ou AF +, moniteur HD de 22" sur le poste de traitement

4 Flux de travail intégré

- **Un fonctionnement intuitif**
Interface utilisateur EasyPad ou écran tactile EasyTouch
- **Fonctions d'appareils de table intégrées**
Contrôle du couple intégré pour les traitements d'endodontie, fonction ApexLocator sur l'écran EasyTouch
- **Équipement moderne**
Instruments innovants, système communication patient moderne Sivation, raccords pour clés USB, cartes SD et interface Ethernet.

Des résultats concluants

- Cliniquement concluant
- Esthétiquement concluant

Utilisation intuitive

Des traitements complexes requièrent toute votre concentration. Voilà pourquoi Intego est une solution intuitive, grâce à deux interfaces utilisateur avancées et des instruments ergonomiques pour un traitement en toute tranquillité. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui est réellement important, à savoir votre patient et le résultat de traitement.

Des interfaces intuitives ultra-modernes



EasyPad

Interface utilisateur claire et intuitive, le standard chez Intego.



EasyTouch


Cette interface utilisateur peut être intégrée en option. Son écran tactile intuitif ainsi que les options de commande et d'affichage améliorent le confort d'utilisation.

Possibilités d'intégration pour les traitements d'endodontie



ApexLocator

En outre, vous pouvez intégrer la fonction ApexLocator dans le panneau de commande EasyTouch qui vous permet de contrôler en permanence la profondeur de travail lors de traitements d'endodontie, ainsi qu'une réduction de l'exposition aux rayonnements.

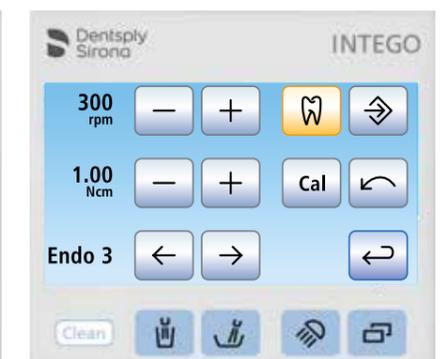

Réglage de couple intégré

La vitesse et le couple peuvent être ajustés et le moteur s'arrête automatiquement lorsque le couple maximal défini est atteint. Cela garantit une sécurité accrue et un flux de travail optimal dans le cadre des traitements d'endodontie.

- 1 Sprayvit E**
Une grande visibilité grâce à l'éclairage LED intégré.
- 2 Moteur BL ISO E**
Moteur brushless stérilisable avec contrôle de la vitesse et du couple pendant le traitement. Particulièrement léger, compact et avec une plage étendue de vitesses.
- 3 Détartreur SiroSonic L**
Pièces-à-main et inserts stérilisables, vibrations rectilignes contrôlées. Avec réglage électronique de la puissance et du débit d'eau.
- 4 SiroCam F ou AF ou AF+**
Images intra-orales détaillées grâce à la caméra facile d'utilisation SiroCam F ou AF/AF+ avec autofocus.



Intégration des instruments de Réciprocité® Dentsply Sirona

Dentsply Sirona est le seul fabricant de postes de traitement à intégrer les instruments de Réciprocité® Dentsply Sirona et VDW. Leur utilisation est ainsi facile et rapide. La librairie de limes peut être complétée avec d'autres systèmes d'instruments.

WaveOne® WaveOne® Gold
Limes à mouvement Limes à mouvement
réciproque réciproque

Reciproc®
Endo à une lime

Un niveau de confort élevé pour le patient

Vos patients eux-aussi vont apprécier ce confort : Le fauteuil Intego présente un design ergonomique ; et garantit, en combinaison avec le repose-tête, un niveau de confort élevé à votre patient. Le fauteuil peut être abaissé suffisamment pour que vos patients les plus petits puissent s'installer et sortir aisément. Il va sans dire que des patients allongés si confortablement se sentiront en sécurité et vous feront davantage confiance.



ErgoMotion, la solution unique de Dentsply Sirona, dédiée à la gamme Intego

Vos avantages :

- Bon positionnement pour le traitement de la zone maxillaire ou mandibulaire
- Réduction de l'étirement de la tête des patients
- Absence d'étirement excessif et aucune compression de la colonne vertébrale des patients
- La tête des patients reste dans la même position sur la tèteière lorsqu'ils sont assis et lors du traitement

Têteière à double articulation

S'adapte rapidement aux différentes situations de traitement et aux tailles variables de vos patients.

Sellerie Premium/Lounge

Une sellerie de haute qualité garantit un confort élevé à vos patients même en cas de traitements de longue durée.

ErgoMotion

La synchronisation des mouvements d'inclinaison du dossier et de l'assise du patient permet de prévenir étirements et compressions.

Appui-bras

Vos patients peuvent confortablement reposer leurs bras.

Système d'élévation

Le système d'élévation unique du fauteuil déplace doucement les patients en position allongée adéquate.

Repose-pied Vario

Le repose-pieds Vario, fourni avec la sellerie Premium, est aisément extensible pour assurer un positionnement ergonomique des patients les plus grands.

La sécurité en toute confiance

Les dentistes du monde entier sont extrêmement exigeants en ce qui concerne la sécurité de leurs patients et de leur équipe au sein du cabinet. Le concept de prévention des infections d'Intego a été conçu pour que vous puissiez satisfaire rapidement et sûrement les réglementations en matière d'hygiène. Le design de l'élément assistant et du groupe d'eau permettent de mettre en œuvre les procédures de prévention des infections de manière simple et rapide. Tout cela permet un bon contrôle des infections, pour vous, vos patients et votre équipe.



Crachoir

Amovible et pivotant,
facile d'entretien
et d'accès.

Fonction de rinçage

Rinçage automatique
de toutes les conduites
d'eau des instruments
sur l'élément praticien
et l'élément assistant..

Systèmes d'aspiration

Compatibles avec
tous les systèmes
d'aspiration sèche
ou humide courants,
y compris la centrifugeuse d'amalgame.

Intego

L'unité d'eau compacte et l'élément assistant peuvent être adaptés aux différents besoins et exigences grâce à une sélection totalement libre des systèmes d'aspiration et des options de prévention des infections.



Bouteille d'eau fraîche

Pour une qualité contrôlée de l'eau. Peut également être remplie de solution Dentosept P pour une désinfection permanente et un assainissement manuel.



Nettoyage automatique des flexibles d'aspiration

Adaptateur nettoyant pour le rinçage automatique du tire-salive et de l'aspirateur de pulvérisation.



Surfaces lisses

Le design sans interstices des surfaces assure une prévention maximale des infections pour une économie de temps maximale

Flexibilité pérenne

Dans tout bon cabinet dentaire, la personnalisation est source de bien-être. Intego vous offre la possibilité de configurer précisément l'équipement qui vous assistera de manière adaptée dans vos procédures de traitement. Mais pour nous, flexibilité signifie bien plus que cela : en effet, vous pouvez préparer Intego par l'intermédiaire des options et interfaces techniques disponibles de manière à être équipé en vue de futures applications.

De multiples versions

Choix entre deux têtes

La tête plate peut être ajustée rapidement et en toute flexibilité. Vous pouvez également choisir une tête à double articulation en option qui se positionne facilement et vous offre une bonne visibilité même dans les zones difficiles d'accès.



Tête plate



Tête à double articulation

Deux options d'éclairage - Un éclairage toujours optimal

Deux choix possibles de lampes à LED pour un bon éclairage du champ de traitement. La LEDview Plus avec ses LED polychromes et ses fonctionnalités techniques sophistiquées, assure un éclairage au naturel.



LEDlight



LEDview Plus

Élément Assistante : Version Confort ou Compact

Les deux éléments assistant sont très compacts et vous garantissent une liberté de mouvements maximale. La version Confort vous permet également de travailler confortablement sans assistance.



Élément Assistante Confort



Élément Assistante Compact

Équipement de pointe

Les caméras SiroCam F/AF/AF+ autofocus associent une qualité d'image élevée à une facilité d'utilisation.



	SiroCam F	SiroCam AF	SiroCam AF+
Focale	Focale fixe	Focale auto	Focale auto
Format de l'image 16:10	✓	✓	✓
Pixels (utiles)	0,42 mégapixel	0,65 mégapixel	1,00 mégapixel
Espace de travail	✓ 5-20 mm	✓ 2-130 mm	✓ 2-130 mm
Résolution image en direct	824 x 514	824 x 514	824 x 514
Résolution image figée	824 x 514	1024 x 640	1276 x 796

Un design paré pour l'avenir

Interfaces : Flexibilité pérenne

Une interface réseau dans le fauteuil ainsi qu'un port USB dans l'élément praticien ou assistante vous permettent d'intégrer de nouvelles fonctions et de connecter votre cabinet tout en améliorant de manière significative l'analyse d'erreurs par le technicien SAV.



Port USB intégré

Écran Sivision 22" AC

Cet écran HD vous permet d'expliquer à vos patients les images intra-orales, les radiographies, les vues de logiciels et de planification, les vidéos ainsi que les présentations PowerPoint directement sur le poste de traitement.



Écran Sivision 22" AC

La qualité en toute confiance

Notre objectif n'est pas seulement de satisfaire nos clients, mais de les impressionner. Par conséquent, la qualité, les performances et le service sont au cœur de nos préoccupations. Les postes de traitement Dentsply Sirona allient qualité élevée et véritable innovation, ce qui améliore le confort et le flux de travail de manière significative en matière de traitements.

Fiabilité et longévité



Des tests de qualité précis et approfondis alliés à des matériaux robustes font d'Intego un poste de traitement fiable avec une durée de vie supérieure à la moyenne.

Produit haut de gamme



Notre sens du détail transparaît au premier coup d'oeil sur le poste de traitement Intego. Les matériaux utilisés (des plastiques robustes et malléables, des composants solides en acier et en aluminium à l'intérieur, des produits en verre et de sellerie haut de gamme) sont conformes aux exigences élevées en termes de qualité inhérentes à un produit Premium.

Des standards élevés



Dentsply Sirona est expert technologique avec plus de 130 années d'innovations et mise sur des normes de qualité élevées. Nos ingénieurs et scientifiques du département Recherche & Développement travaillent avec le plus grand soin lorsqu'il est question de qualité.

Un design paré pour l'avenir

Au cœur du centre d'innovation de Dentsply Sirona, on prédit les tendances futures et on prépare les produits de manière à ce que vous soyez également équipés pour les exigences technologiques de demain.



Configuration personnalisée

Vous pouvez configurer votre poste de traitement Intego exactement selon vos besoins pour définir votre propre rapport qualité-prix.

Intego

Appareil de base	Version	Packs utilisateurs	Packs en option
<p>Fauteuil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sellerie Premium • Tête plate • Pédale de commande pneumatique des instruments <p>Élément Praticien</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Positions d'instruments • Interface utilisateur EasyPad • Alimentation pour 2 instruments rotatifs <p>Élément Assistante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Version compacte, bras support pivotant adapté directement sur l'unité d'eau • 4 positions d'instruments • Tire-salive et dispositif d'aspiration <p>Unité d'eau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Design compact • Aspiration humide standard • Prévu pour une bouteille d'eau fraîche • Crachoir avec fonction pivotante manuelle 	<p>Version TS à cordons pendants</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Élément praticien facilement réglable en hauteur et fixé fermement grâce à un frein pneumatique. • Travail ergonomique avec positionnement flexible de l'élément Praticien et un support de tray mobile • Grandes surfaces dédiées aux instruments sur l'élément Praticien et porte-tray <p>Version CS avec bras articulé</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour toutes les situations de traitement pour un travail autonome ou en équipe. • Portée optimale des instruments jusqu'à 90 cm. • Élément praticien facilement réglable en hauteur et fixé fermement grâce à un frein pneumatique. 	<p>Start</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seringue à 3 voies standards • Éclairage pour l'élément Praticien • 2 cordons de turbine • LEDlight* <p>L'Innovation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commande par pédale électronique C+ • Sprayvit E sur l'élément Praticien • Éclairage pour l'élément Praticien • 1 cordon de turbine • 1 micro-moteur BL ISO E avec alimentation • Détartreur SiroSonic L • LEDview Plus <p>Ergo</p> <ul style="list-style-type: none"> • ErgoMotion • Système d'élévation du fauteuil jusqu'à 185 kg • 2 accoudoirs • Tête à double articulation <p>Endo Pro**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit réglage de couple • Apex Locator • Contre-angle Endo 6:1 • e-Control <p>Advance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commande par pédale électronique C+ • Sprayvit E sur l'élément Praticien • Éclairage pour l'élément Praticien • 1 cordon de turbine • 1 micro-moteur BL ISO E avec alimentation • LEDlight* <p>Touch Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commande par pédale électronique C+ • 1 micro-moteur BL ISO E avec alimentation • 1 cordon de turbine • Éclairage pour l'élément Praticien • Interface utilisateur EasyTouch • LEDview Plus <p>* LEDview Plus en supplément ** Uniquement avec l'interface utilisateur EasyTouch</p>	<p>Sivision Ready</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port USB sur l'élément Praticien ou Assistante • Interface de réseau <p>Sivision Start</p> <p>avec/sans écran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port USB sur l'élément Praticien ou Assistante • Interface de réseau • SiroCam F (SiroCam AF ou AF+ en supplément) • Adaptation de l'écran sur la colonne du scialytique • En option : Écran 22" AC

Vos options individuelles

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des différentes options ; vous pouvez ainsi visualiser quels équipements font partie des appareils de base.

Fauteuil	
2 positions de traitement, position S et O	■
Boîte de jonction intégrée	■
Système d'élévation du fauteuil 140 kg	■
Tête à plate	■
Tête à double articulation	□ Er
Sellerie Premium	■
Sellerie Lounge	□
ErgoMotion	□ Er
Pédale 4 voies	□
Coussin rembourré pour les petits patients	□
Accoudoir à droite	□ Er
Accoudoir à gauche	□ Er
Jeu de vannes pour le raccordement d'appareils externes	□
Kit de réduction de pression	□
Kit d'installation de recouvrement	□
Boîte de jonction séparée	□
Plaque d'adaptation	□

Élément Praticien	
Bras support à freinage pneumatique, réglable en hauteur	■
5 Positions d'instruments	■
Alimentation pour 2 instruments dynamiques sans fibre optique	■
Pédale pneumatique	■
Pédale électronique C*	□ A, I, T
Interface utilisateur EasyTouch avec 4 utilisateurs programmables	■
Sprayvit E avec lumière	□ A, I
Sprayvit E avec lumière (touche d'eau à gauche)	□ A, I
Seringue à 3 voies standard	□ S
Cordon de turbine avec lumière	□ 2xS, A, I, T
Cordon de turbine Borden	□
1 ^{er} moteur BL ISO E avec cordon	□ A, I, T
2 ^{ème} moteur BL ISO E avec cordon	□
Détartreur SiroSonic L	□ I
Kit 3 ^{ème} instrument dynamique	□
Alimentation lumière pour turbine et Sprayvit E	□ S, A, I, T
Kit réglage de couple pour les traitements d'endodontie	□ E
eControl : Plage de vitesse de rotation de 100 à 40 000 tr/min	□ E
Fonction ApexLocator intégrée	□ E
Contre-angle Endo 6:1	□ E
Négatoscope intra-oral	□
Fonction rinçage et assainissement manuel	□
Tapis en silicone pour élément Praticien TS	□
Porte-tray CS supplémentaire pour 1 tray standard	□
Porte-tray TS/CS supplémentaire pour 2 trays standard	□
Tapis en silicone pour élément Praticien CS	□
Revêtement en silicone pour les poignées	□

Élément Assistante	
Compact, bras-support pivotant adapté directement sur l'unité d'eau	■
Confort, idéal pour les traitements à deux mains	□
4 positions d'instruments	■
Tire-salive et dispositif d'aspiration	■
Sprayvit E avec lumière	□
Sprayvit E avec lumière (touche d'eau à gauche)	□
Seringue à 3 voies standard	□
2 ^{ème} tuyau d'aspiration	□
Lampe de polymérisation Satelec Mini LED	□
Tapis tactile	□
Alimentation lumière pour Sprayvit E	□
Tapis en silicone pour l'élément Assistante Confort	□

Unité d'eau	
Équipée pour bouteille d'eau fraîche	■
Crachoir avec fonction pivotante manuelle	■
Unité d'eau sans crachoir	□
Préparation pour aspiration humide standard	■
Préparation pour aspiration humide standard avec commande d'aspiration	□
Vanne de sélection de poste	□
Vanne de crachoir pour aspiration humide standard	□
Centrifugeuse automatique	□
Centrifugeuse d'amalgame	□
Bouteille d'eau fraîche sans inverseur au réseau d'alimentation en eau	□
Bouteille d'eau fraîche avec inverseur au réseau d'alimentation en eau	□
Chauffage pour l'eau	□
Système de nettoyage automatique des tuyaux d'aspiration par rinçage à l'eau	□

Options lampe opératoire	
LEDlight	□ S, A
LEDview Plus	□ I, T
Adaptation pour modèle d'unité Heliodent Plus	□

Communication patient	
Port USB dans l'élément Praticien ou Assistante	□ SiR, SiS
SiroCam F	□ SiS
SiroCam AF	□
SiroCam AF+	□
Adaptation de l'écran sur la colonne du scialytique	□ SiS
Écran 22" AC (avec bloc d'alimentation électrique intégré)*	□ SiS*
Interface de réseau	□ SiR, SiS

■ Inclus dans l'appareil de base
 □ Option
 - Impossible/non applicable
 SiR Pack Sivation Ready
 SiS Pack Sivation Start
 SiS* Pack Sivation Start avec écran

S Pack Start
 A Pack Advance
 I Pack Innovation
 E Pack Endo pro
 Er Pack Ergo
 T Pack Touch Plus

La disponibilité des options et des fonctionnalités peut varier selon le pays.



Tabouret Hugo



Tabouret Carl



Tabouret Paul (illustré avec repose-pied annulaire supplémentaire)



Porte-tray pivotant supplémentaire pour Élément Praticien CS



Porte-tray pivotant supplémentaire pour élément Praticien TS



Tête à double articulation



Lampe de polymérisation Satelec Mini LED



Négatoscope



Support de caméra supplémentaire (pour élément Praticien TS)



Élément Assistante Confort



Pédale électronique C*




Tête à plate



Jeu de vannes pour le raccordement d'appareils externes



Adaptation pour modèle d'unité Heliodent Plus

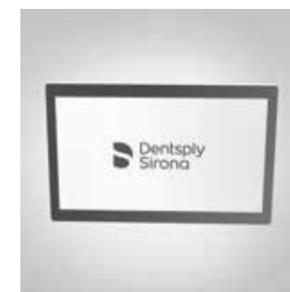

Écran 22" AC



Intego sans crachoir



LEDlight



LEDview Plus



SiroCam AF



SiroCam AF+

Mentions Légales

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. **Intego**. Indications : Poste de traitement pour cabinet dentaire. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **LEDlight / LEDview Plus**. Indications : Eclairage opératoire pour poste de traitement dentaire. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **Heliodont Plus**. Indications : Appareil pour radiologie dentaires, servant à réaliser des radiographies intra-orales pour l'examen et le diagnostic des affections des dents, de la mâchoire et des structures buccales. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **Sprayvit E**. Indications : Seringue multifonction utilisée pour l'alimentation en fluides (ou en air) chauffée ou non et l'éclairage lors des traitements dentaires. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **Moteur BL ISO**. Indications : Moteur destiné à l'entraînement de pièces-à-main et de contre-angles rotatifs et oscillants en connexion avec une unité de soins dentaires. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **SiroSonic L**. Indications : Traitement d'affections dentaires pour les applications suivantes : élimination supra-gingivale de dépôts et de tartre (détartrage), élimination sousgingivale de la plaque et des concrétions (parodontologie), nettoyage et gestion du biofilm des implants, ainsi que des restaurations métalliques et céramiques (insert de nettoyage d'implants), rinçage de canaux radiculaires préparés (endodontie), liquéfaction de colles thixotropes (CEM), micro-préparation, traitement radiculaire rétrograde (endodontie) et évaluation de la profondeur de travail (insert avec repère de profondeur). PerioSonic sert également à la création d'un signal de tension en vue de l'évaluation dans PrioScan. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **SiroCam F/AF /AF+**. Indications : Caméra pour l'enregistrement de radiographies intra-orales. Classe / Organisme certificateur : I / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. 11/2017

Dentsply Sirona France

7 Ter Rue de la Porte de Buc
78008 Versailles Cedex - France
dentsplysirona.fr

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

Solutions procédurales

Prévention
Odontologie conservatrice
Orthodontie
Endodontie
Prothèses
Implants

Technologies habilitantes

Systèmes de CFAO
Systèmes d'imagerie
Postes de traitement
Instrumentation

 **Dentsply
Sirona**