

Punti di contatto  
e margini precisi  
sulla punta delle dita.



Palodent® V3  
Sistema di matrici sezionali  
Progettato da Triodent®

Palodent® 360  
Sistema di matrici circolari

# Un sigillo stretto. Contatti predicibili. I margini giusti per il successo clinico.


97%

dei clinici afferma di avere difficoltà nel creare un **corretto isolamento** della cavità di II Classe in almeno 1 caso su 10.<sup>1</sup>

70%

dei clinici ritiene che la **creazione del punto di contatto** sia la fase più critica in un restauro di II Classe.<sup>2</sup>

I sistemi di matrici Palodent® consentono di ottenere un isolamento affidabile con un sigillo gengivale stretto. Grazie al design avanzato di Dentsply Sirona, ricreare punti di contatto interprossimali perfetti e predicibili è più semplice che mai. Inoltre, la forma anatomica delle matrici garantisce contorni naturali per risultati clinici elevati – senza dover utilizzare strumenti ingombranti, che potrebbero ostacolare l'area di lavoro o la necessità di una finitura interprossimale eccessiva.

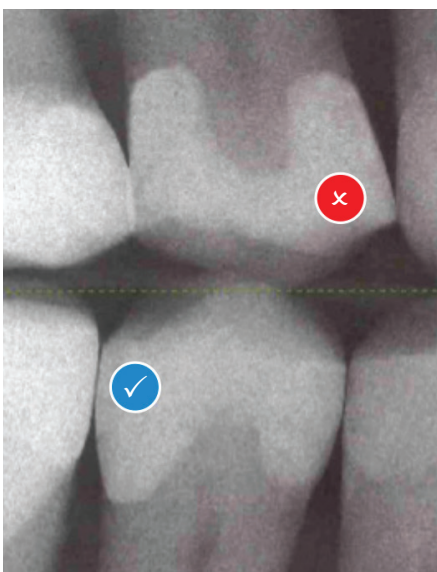

#### Matrici tradizionali per restauri circonferenziali

- ✗ Sistema ingombrante e scomodo
- ✗ Mancato ripristino dell'anatomia prossimale, aumento del rischio di frattura, di carie recidive e di malattie parodontali
- ✗ Punto di contatto sottile o aperto con rischio di infiltrazione di alimenti a livello della cresta marginale
- ✗ Richiede una elevata finitura

#### Sistema di matrici Palodent®

- ✓ Semplice da posizionare
- ✓ Contorni naturali
- ✓ Punti di contatto stretti e anatomicamente perfetti
- ✓ Finitura interprossimale minima

1. Dental Learning Systems, Direct Restoratives Survey, May 2016. N=143

2. DentalTown (2012). Restorative Dentistry. Monthly Poll: What is the most challenging part of Class II Restoration?

3. Owens BM, Phebus JG. An evidence-based review of dental matrix systems. "General Dentistry," September/October 2016

## Palodent® V3

Sistema di matrici sezionali  
Progettato da Triodent®


Otteni facilmente contorni naturali e punti di contatto stretti per risultati migliori.

Il sistema Palodent® V3 è l'ideale per i restauri in composito della maggior parte delle cavità prossimali di II Classe.




### Utilizza il sistema di matrici Palodent® V3 nei restauri:


Mesio-occlusali

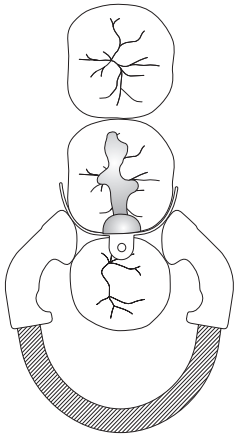

Distali-occlusali

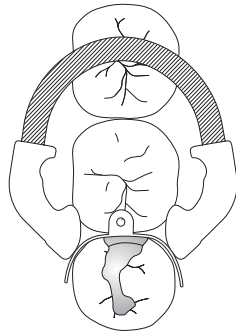

Mesio-occluso-distali

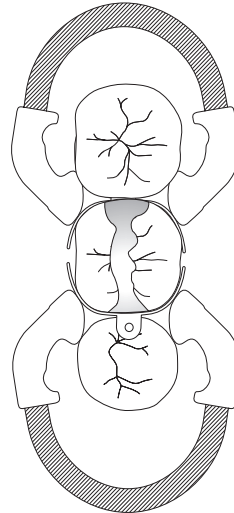


## Palodent® 360

Sistema di matrici circonferenziali


Profili anatomici naturali e punti di contatto precisi con una semplice rotazione delle dita, senza essere ostacolati da scomodi applicatori e retainer.

Scegli il sistema Palodent® 360 per i casi di II Classe in cui non è possibile utilizzare una matrice sezionale e per la ricostruzione su perno.

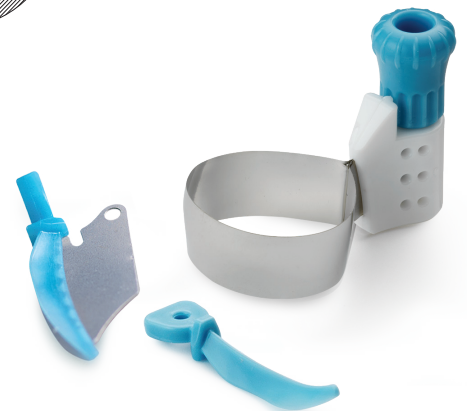


### Utilizza il sistema Palodent® 360 nei seguenti casi:


Mancanza di una cuspid

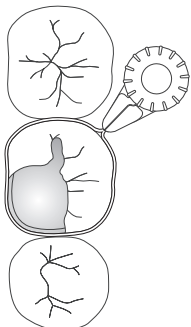


Mancanza del dente adiacente

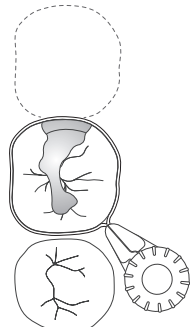

Dente adiacente disallineato

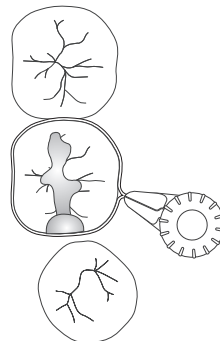

Isolamento del dente per la sua ricostruzione

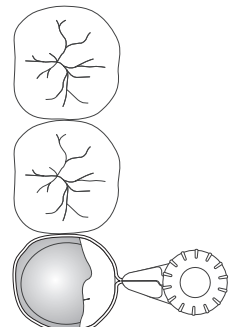

**TIP**

Per posizionarle in spazi interprossimali stretti, è possibile pre-allargare lo spazio usando l'anello separatore Palodent® V3 o un cuneo di legno per creare temporaneamente lo spazio richiesto, al fine di ottenere una lieve separazione.

## Confezionamenti

### Sistema di matrici Palodent®

659600v

#### Palodent System Intro Kit

100 Matrici Sezionali Palodent® V3 - 25 pz per misura: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm  
75 Cunei Palodent® V3 - 25 pz per misura: Piccolo, Medio, Largo  
30 Cunei con schermo protettivo Palodent® V3 - 10 pz per misura: Piccolo, Medio, Largo  
1 Anello Universale Palodent® V3  
1 Anello Stretto Palodent® V3  
1 Pinza per anello Palodent®  
1 Pinza con perno per matrici e cunei Palodent® V3  
24 Matrici Circonferenziali Palodent® 360 - 5.5mm

### Palodent® V3

Sistema di matrici sezionali

Progettato da Triodent®



62500005

#### Palodent V3 Starter Kit

20 Matrici - Misura 5.5mm  
15 Cunei Medi  
5 Cunei con schermo protettivo Medi  
2 Anelli Universali  
1 Pinza per anello  
1 Pinza con perno per matrici e cunei

#### Ricambi Matrici EZ Coat

659610v Misura 3.5 mm (50)  
659620v Misura 4.5 mm (50)  
659630v Misura 5.5 mm (50)  
659640v Misura 5.5 mm (90)  
659650v Misura 6.5 mm (50)  
659660v Misura 7.5 mm (50)

#### Ricambi Anelli

659900v Universale (azzurro) (1 pezzo)  
659760v Universale (azzurro) (2 pezzi)  
659770v Stretto (blu) (2 pezzi)

#### Ricambi Cunei

659780v Piccolo (blu) (100 pezzi)  
659790v Medio (azzurro) (100 pezzi)  
659800v Largo (bianco) (100 pezzi)

#### Ricambi Matrici

659710v Misura 3.5 mm (50)  
659720v Misura 4.5 mm (50)  
659730v Misura 5.5 mm (50)  
659740v Misura 5.5 mm (100)  
659750v Misura 6.5 mm (50)  
659860v Misura 7.5 mm (50)

#### Ricambi Cunei con Schermo Protettivo

659830v Piccolo (blu) (50 pezzi)  
659840v Medio (azzurro) (50 pezzi)  
659850v Largo (bianco) (50 pezzi)

#### Ricambi pinze

659810v Pinza per anello (1 pezzo)  
659820v Pinza con perno per matrici e cunei (1 pezzo)

### Palodent® 360

Sistema di matrici circonferenziali



#### Ricambi Matrici

659607 **Intro Kit**  
(24 da 5.5 mm, 16 da 6.5 mm, 8 da 4.5 mm)  
659601 4.5mm (48)  
659602 5.5mm (48)  
659603 6.5mm (48)

Per maggiori informazioni contatta il tuo referente Dentsply Sirona  
oppure scrivi a [infoweb.italia@dentsplysirona.com](mailto:infoweb.italia@dentsplysirona.com)

[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)

I marchi della concorrenza non sono marchi registrati Dentsply Sirona. ©2019 Dentsply Sirona Inc. Tutti i diritti riservati ML590026B (R 11-15-19)