

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Intego Ambidestro

Rotazione perfetta

dentsplysirona.com





Un campione di flessibilità

La nostra epoca è segnata dalla rapidità del progresso. Di conseguenza, è necessaria flessibilità per reagire ai cambiamenti sempre più incalzanti. I dentisti lo sanno già perché lo vedono tutti i giorni all'interno del loro studio. Noi di Dentsply Sirona vogliamo concedervi ancora più flessibilità per permettervi di rispondere nel modo consono alle vostre esigenze e a quelle dei vostri pazienti, ora e nel futuro. A questo scopo abbiamo sviluppato il riunito Intego Ambidestro.

Intego Ambidestro è pensato per i dentisti mancini e destrorsi che chiedono ergonomia perfetta, senza dover abbassare gli standard del trattamento. Questo riunito permette inoltre al dentista di cambiare agevolmente posizione di trattamento.

Il meccanismo di rotazione, unico nel suo genere, rende possibile convertire il riunito dalla posizione per destrorsi a quella per mancini in solo 15 secondi, rivelandosi così uno strumento estremamente flessibile, soprattutto negli studi associati.

Dentsply Sirona ha dato vita a un campione di flessibilità per lo studio odontoiatrico.



**Intego pro Ambidestro TS
(design con braccio OTP) nella
posizione per intervento con la
mano sinistra.**

I vantaggi per voi:

- Posizionamento ergonomico dell'elemento medico grazie al braccio portante ad ampio raggio
- Sistema tray funzionale con tray asportabile e posizionabile con grande flessibilità
- Sistema di prevenzione delle infezioni integrato e completo per una igiene ottimale

Massima flessibilità sotto tutti gli aspetti

La giornata lavorativa è complessa e pone una serie di sfide che il vostro riunito è chiamato ad affrontare. Intego Ambidestro è la soluzione perfetta: qualsiasi sia l'opzione scelta, ovvero un riunito in esecuzione CS Sprido o TS a cordoni pendenti o un Intego Ambidestro o Intego pro Ambidestro, sono garantite performance impeccabili a un prezzo ragionevole.

CS: il design del sistema in esecuzione Sprido



Il design del **sistema in esecuzione Sprido** è pensato per affrontare trattamenti in cui è richiesta la massima estensione durante trattamenti odontoiatrici a quattro o due mani.



Il mondo elegante

Combinazioni classiche, intramontabili per un look raffinato.



Il mondo naturale

Tonalità calde e delicate con un effetto rilassante.



Il mondo vitale

Tinte brillanti e colori freschi che creano un'atmosfera vivace.



* Colori disponibili per il rivestimento Lounge.

Design ergonomico

Intego Ambidestro integra perfettamente aspetto e funzionalità.

I riuniti Dentsply Sirona hanno vinto premi prestigiosi di design, tra cui il **Red Dot Design Award**, l'**iF Product Design Award Gold**, l'**iF Communication Design Award**, e il **GOOD DESIGN Award**. È il

momento di adattare il design del seggiolino al vostro stile e gusto personale.

Oltre all'estetica armoniosa, Intego Ambidestro presenta una struttura funzionale estremamente sofisticata, in linea con i severi criteri del nostro

principio di ergonomicità. I prodotti ergonomici Dentsply Sirona garantiscono accesso ottimale al paziente e allo stesso tempo un flusso di lavoro fluido con il risultato di un grande comfort per il paziente.

Un design perfettamente ergonomico non è solo molto importante per il dentista, ma anche per gli assistenti e per i pazienti.



Design ergonomico
per gli assistenti



Design ergonomico
per voi



Design ergonomico
per i pazienti





Rotazione perfettamente ergonomica

Nell'organizzazione efficace del lavoro quotidiano dello studio è fondamentale adattare la strumentazione non solo all'ambiente di lavoro del dentista, ma anche a quello degli assistenti. Questa difficoltà è ancora maggiore in uno studio associato, dove uno stesso riunito è usato da diversi dentisti. La zona di lavoro deve poter essere adattata rapidamente e facilmente e la procedura deve essere assolutamente sicura e affidabile. Intego Ambidestro è progettato esattamente per questo scopo.

La procedura di rotazione in breve:

Fase 1:

La rotazione è attivata in un singolo passaggio con il relativo pedale. Lo schienale si muove automaticamente nella posizione impostata.



Fase 2:

Grazie allo spostamento fluido del gruppo idrico dietro allo schienale su un robusto braccio di supporto, l'elemento medico e la lampada operatoria possono essere orientati simultaneamente nella nuova posizione senza dover creare spazio aggiuntivo.



Fase 3:

In un ultimo passaggio avviene il cambio di posto tra portatray e supporto della telecamera, se presenti.



I vantaggi per voi:

Velocità

Grazie a un meccanismo progettato in modo intelligente è possibile cambiare posizione di trattamento in solo 15 secondi.

Semplicità

Non serve un training speciale, la procedura è facilmente eseguibile dagli assistenti. È sufficiente premere il pedale una volta per attivare il meccanismo di rotazione e lo schienale si sposta automaticamente nella posizione corretta.

Eleganza

Il riunito è convertibile senza sforzo e con fluidità in un unico passaggio. Non sono necessari movimenti energici, viti, operazioni di assemblaggio.

Posizione perfettamente ergonomica per tutti i trattamenti

Risultati perfetti al termine di una lunga giornata di lavoro grazie alla vostra esperienza e al supporto del vostro riunito. Che siate mancini o destrorsi, potrete godere in ogni situazione della postura intuitiva, della posizione confortevole, dell'ottima visibilità e del flusso di lavoro integrato. Tutto questo si traduce in risultati clinici perfetti.

1 Postura intuitiva

Maggiore libertà di movimento

Schienale sottile per la massima libertà delle gambe, posizionamento flessibile del pedale

Posizionamento strumenti ottimizzato

Perfetto coordinamento tra elemento medico e assistente, posizionamento flessibile del tray aggiuntivo nei modelli in esecuzione CS Sprido o TS a cordoni pendenti

Seggiolini comodissimi

Hugo, Carl, Paul

2 Posizione confortevole

Facile regolazione del riunito

Flessibilità di regolazione in altezza, bacinella orientabile

Maggiore comfort per il paziente

Sollevamento del seggiolino delicato e senza scatti, braccioli, poggiatesta Vario, imbottitura confortevole, ErgoMotion

3 Ottima visibilità

Perfetta illuminazione della zona operativa

Lampada operatoria LEDView Plus o LEDlight, fibre ottiche a LED.

Poggiatesta flessibili

Poggiatesta piatto o a doppia articolazione

Riprese intraorali perfette

SiroCam F, AF o AF*, monitor HD da 22" sul riunito

4 Flusso di lavoro integrato

Funzionamento intuitivo

Pannello di comando EasyPad o touch screen EasyTouch

Funzioni integrate nella tavoletta strumenti

Controllo di coppia integrato per endodonzia, rilevatore apicale su EasyTouch

Moderna dotazione

Strumenti innovativi, moderno sistema Sivision di comunicazione con il paziente, presa USB, scheda SD e interfaccia Ethernet

Risultati perfetti

- Perfezione clinica
- Perfezione estetica
- Perfezione del successo dello studio





3

1

4

2

Intuitivo sotto ogni aspetto

I trattamenti più impegnativi richiedono la massima concentrazione. Per questo abbiamo reso Intego Ambidestro intuitivo, con due interfacce di facile utilizzo, strumenti innovativi e diverse possibilità di integrazione per un trattamento senza stress. Così è possibile concentrarsi solo su ciò che è veramente importante: il vostro paziente e un risultato perfetto.

Sprayvit E

Visibilità ottimale grazie alle luci LED integrate.

Ablatore SiroSonic L

Possibilità di sterilizzazione per manipoli e punte. Oscillazione controllata, retta con azionamento elettronico e controllo dell'acqua.

Micromotore BL ISO E

Motore brushless sterilizzabile con controllo velocità e coppia durante il trattamento. Particolarmente leggero, compatto e con un'ampia gamma di velocità.

SiroCam F o AF o AF+

Immagini intraorali dettagliate con la facilità di utilizzo di SiroCam F o AF/AF+ e funzione autofocus.



Interfacce moderne e intuitive



EasyPad

Pannello di comando chiaro ed intuitivo, di serie su Intego Ambidestro e Intego pro Ambidestro.



EasyTouch

Interfaccia operativa integrabile a scelta, assicura maggiore facilità d'uso grazie alla tecnologia touch-screen intuitiva e alle opzioni d'uso e visualizzazione aggiuntive.

Possibilità di integrazione per trattamenti endodontici



Rilevatore apicale

È possibile integrare in EasyTouch un rilevatore apicale che consente il controllo permanente della profondità di lavoro durante il trattamento endodontico e garantisce un'esposizione ridotta ai raggi X.



Controllo di coppia integrato

Velocità e coppia sono regolabili e il motore si arresta automaticamente quando raggiunge la coppia massima impostata. Ciò assicura maggiore sicurezza e un flusso di lavoro perfetto per i trattamenti endodontici.

Comfort ergonomico per ogni paziente

Il design ergonomico della poltrona Intego Ambidestro, in aggiunta al poggiatesta, assicura particolare comfort per il paziente. Quando i pazienti sono comodi si sentono anche più sicuri e rimangono più fedeli al vostro studio.



Poggiatesta a doppia articolazione

Rapidamente regolabile per adattarsi a varie situazioni di trattamento e alle diverse stature dei pazienti.

Rivestimento Premium/Lounge

Il rivestimento di alta qualità mantiene elevato il comfort anche durante trattamenti lunghi.

NOVITÀ: ErgoMotion

Il cinematismo dello schienale segue perfettamente l'anatomia del paziente, evitando stiramento e compressione della schiena.

Braccioli

I pazienti possono appoggiare comodamente le loro braccia.



Sistema di sollevamento

Lo straordinario sistema di sollevamento posiziona delicatamente e con precisione i pazienti nella posizione corretta.

Poggiapiedi Vario

Nella versione Premium, il poggiapiedi Vario può essere regolato in maniera semplice e consente al paziente di assumere una posizione ergonomica.

Le opzioni per il rivestimento



Rivestimento Lounge

Materiale morbido, piacevole e imbottitura soffice per il massimo relax. Superficie sagomata per un posizionamento perfetto.



Rivestimento Premium

Il pregiato rivestimento, privo di cuciture, garantisce il massimo comfort anche durante trattamenti lunghi.

NOVITÀ: l'unicità di ErgoMotion di Dentsply Sirona per la famiglia Intego

I vantaggi per voi:


- Migliore posizionamento per trattamenti mascellari o mandibolari
- Minore stiramento della nuca
- Nessun stiramento e compressione della colonna vertebrale
- La testa del paziente mantiene la stessa posizione sul poggiatesta durante la seduta e il trattamento

Maggiore libertà di movimento senza necessità di creare spazio aggiuntivo


Intego Ambidestro assicura massima flessibilità in uno spazio ridotto. Nonostante la possibilità di conversione non è richiesto spazio aggiuntivo rispetto a quello necessario per i riuniti Dentsply Sirona.

Grazie al meccanismo di rotazione studiato in modo intelligente, il movimento è compatto e discreto in qualsiasi fase. Durante la procedura di rotazione il riunito rimane costantemente stabile in tutte le posizioni. Il gruppo idrico è guidato in modo controllato e sicuro attorno allo schienale, escludendo il rischio di danneggiamento.

Le immagini di seguito mostrano come Intego Ambidestro non occupi più spazio di qualsiasi altro riunito Intego in tutte le fasi della rotazione.

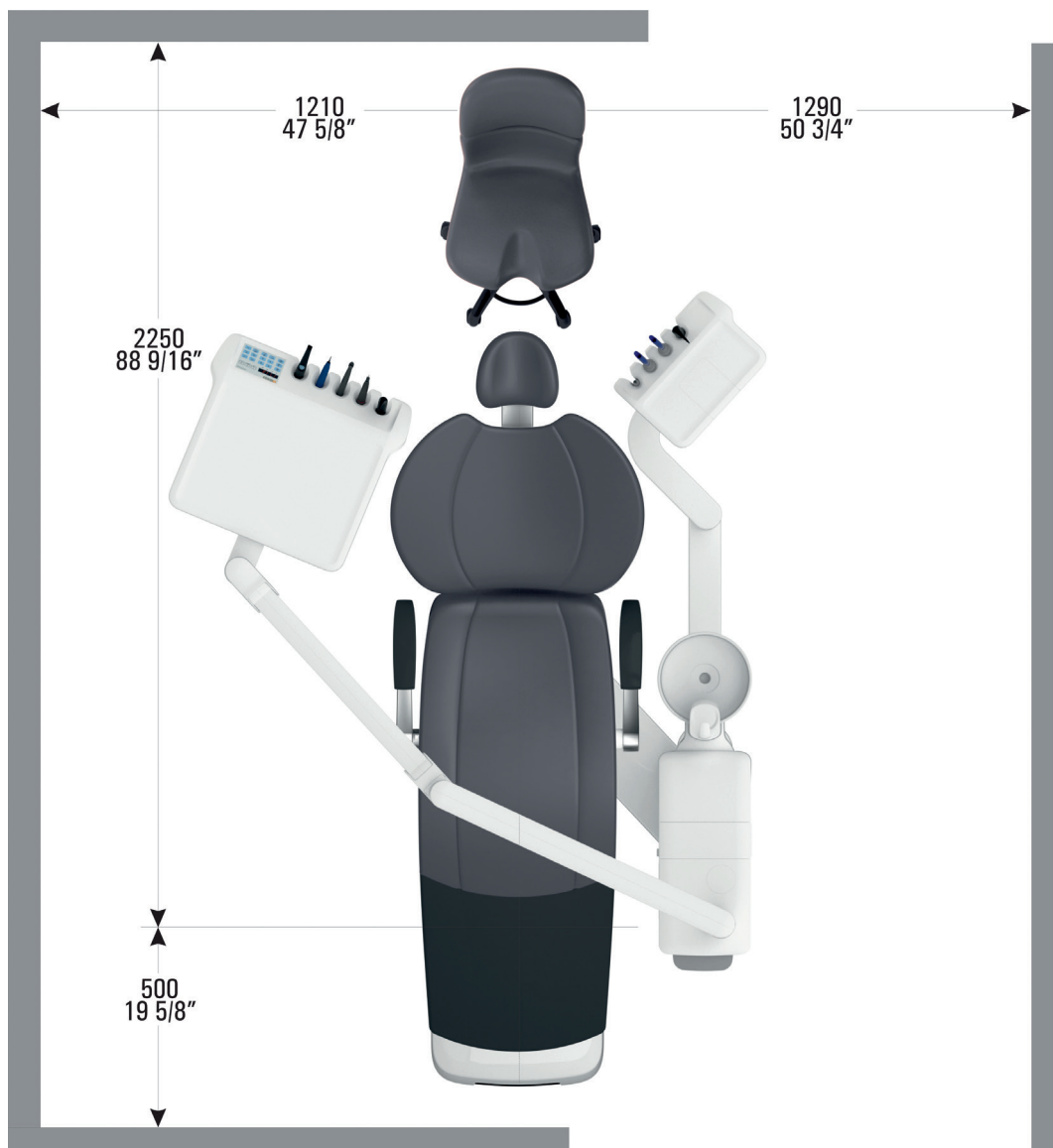

Questa immagine illustra lo spazio richiesto di qualsiasi Intego usato nella posizione ore 12.

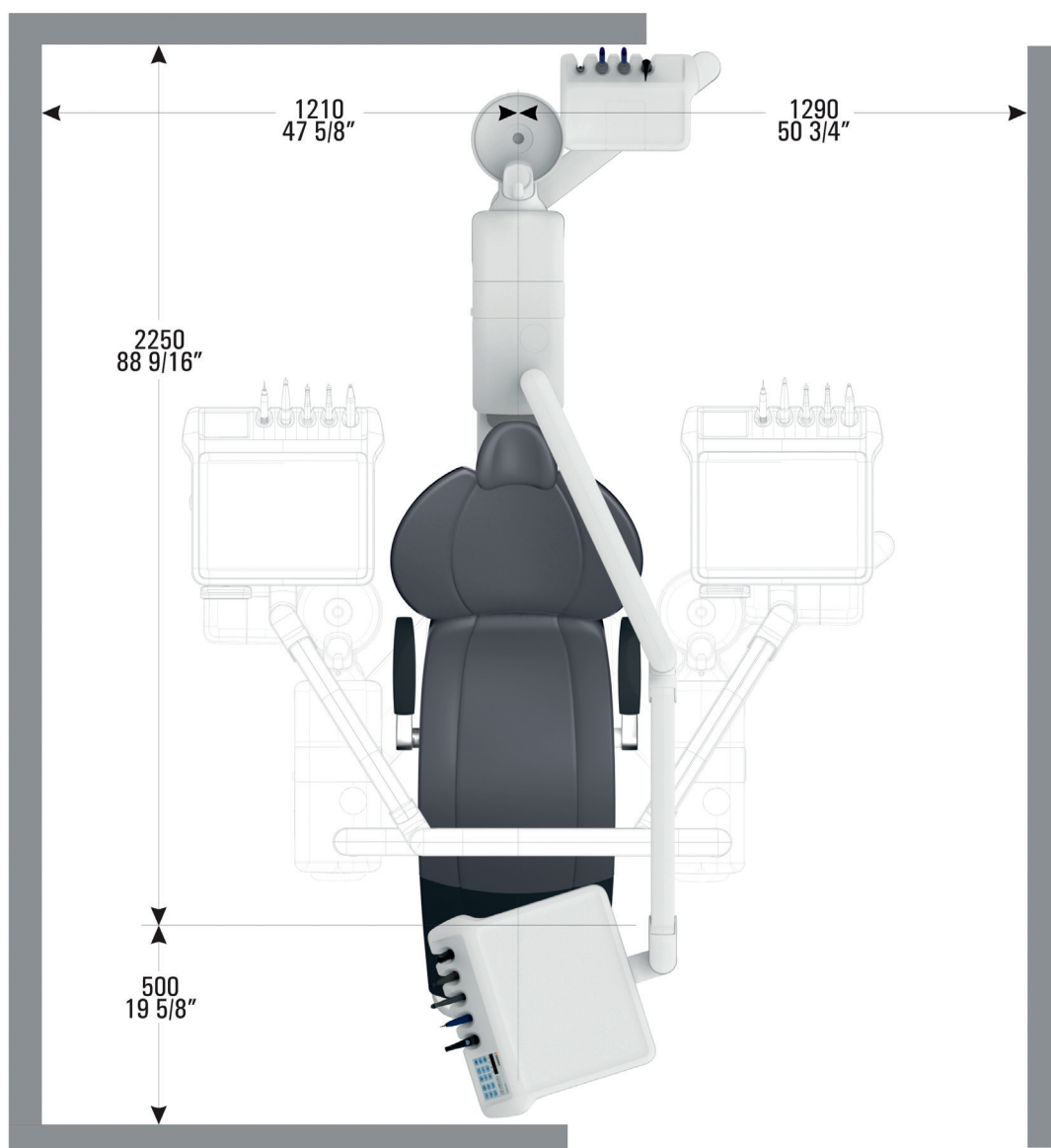

Questa immagine illustra lo spazio massimo richiesto di Intego Ambidestro con elemento assistente Comfort durante il processo di conversione.

La prevenzione intelligente delle infezioni garantisce flessibilità durante il lavoro

In tutto il mondo i dentisti condividono esigenze molto elevate in termini di sicurezza dei pazienti e del personale dello studio. Il concetto di prevenzione delle infezioni di Intego Ambidestro è progettato per garantire la rapida e facile conformità a tutti i regolamenti di controllo delle infezioni senza mai intaccare la flessibilità e l'ergonomicità durante il lavoro.

Bacinella


Orientabile e estraibile, facile da pulire e immediatamente accessibile.

Funzione Purge e Autopurge

I cordoni degli strumenti possono essere risciacquati rapidamente oppure disinfettati in modo accurato tramite gli adattatori specifici.

Sistemi di aspirazione

Compatibili con tutti i più comuni sistemi di aspirazione a umido o a secco, compreso il separatore di amalgama.

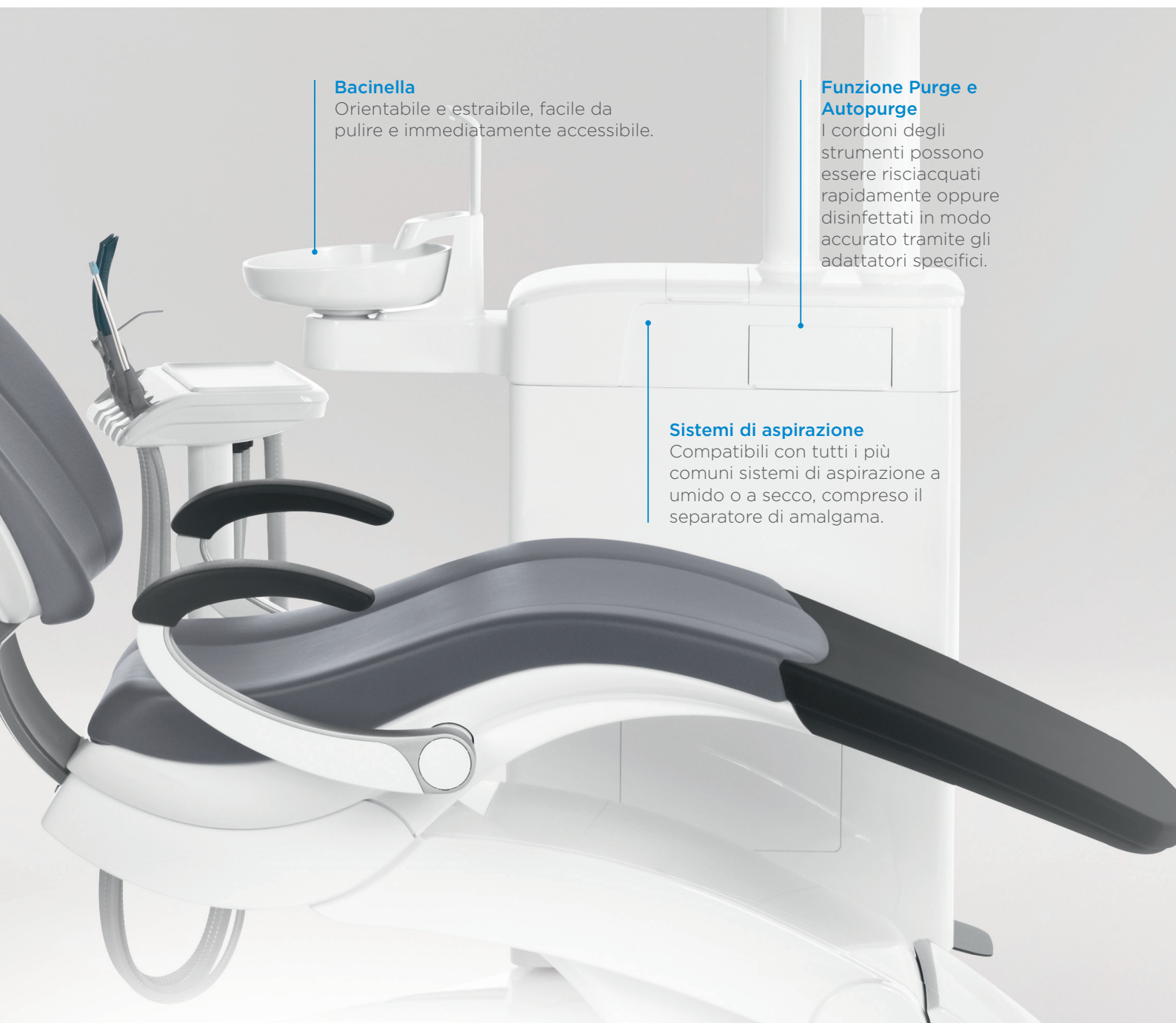

Intego Ambidestro

Grazie ai sistemi di aspirazione e alle opzioni igieniche selezionabili per la prevenzione dell'infezione, il gruppo idrico può essere adattato per soddisfare qualsiasi esigenza e qualsiasi requisito.



Kit bottiglia per l'alimentazione separata

Per un'acqua di qualità controllata. Può essere inoltre riempito con una soluzione Dentosept P per la disinfezione continua e per la sanificazione manuale.



Pulizia automatica dei cordoni di aspirazione

Adattatore per il risciacquo automatico dell'aspiratore di saliva e dell'aspiratore spray.



Superfici lisce

La struttura della superficie per lo più priva di scanalature e fessure assicura massima efficacia della disinfezione in tempi rapidissimi.

Intego Pro Ambidestro

Il gruppo idrico si basa su un'idea omnicomprensiva di prevenzione dalle infezioni. Gli standard più elevati di controllo delle infezioni sono raggiunti rapidamente e facilmente.



Sistema integrato di disinfezione

Disinfezione permanente di tutte le condutture idriche con Dentosept P. Funzione di sanificazione automatica per una disinfezione intensiva e regolare. Può essere usato anche come sistema autonomo di alimentazione dell'acqua.



Adattatori integrati per la pulizia

Per il lavaggio automatico dei cordoni degli strumenti (AutoPurge) e la sanificazione delle condutture idriche.



Pulizia chimica dei cordoni di aspirazione

Flacone del detergente per il risciacquo chimico delle condutture di aspirazione. La concentrazione di detergente può essere regolata.

Qualità made in Germany

Non vogliamo solo soddisfare i nostri clienti, vogliamo impressionarli. Ecco perché qualità, prestazioni, e servizio sono fondamentali per noi. I riuniti Dentsply Sirona coniugano l'alta qualità con innovazioni reali che migliorano sensibilmente il flusso di lavoro e il comfort durante i trattamenti.

Affidabilità e durata

Materiali resistenti e rigorosi test di qualità rendono Intego un riunito affidabile e dalla durata al di sopra della media. Progettato e fabbricato in Germania con processi definiti con precisione per garantire la massima affidabilità.




Standard elevati

Dentsply Sirona è leader tecnologico con oltre 130 anni di storia e innovazione. I nostri ingegneri e progettisti nel campo della ricerca e dello sviluppo non si limitano a prestare attenzione solo agli aspetti legati all'innovazione, ma anche alla qualità.



Alta qualità

Intego Ambidestro dimostra subito la nostra attenzione per i dettagli. I materiali usati soddisfano gli elevati requisiti di qualità di un prodotto premium.

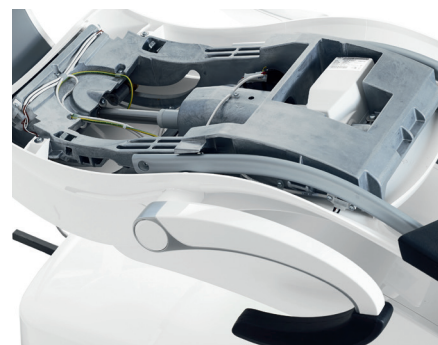

Design a prova di futuro

Presso il centro d'innovazione Dentsply Sirona vengono anticipate le tendenze e sviluppati prodotti in grado di rispondere ai requisiti tecnologici futuri.





Sempre flessibile, oggi e domani

Intego Ambidestro è il nostro campione di flessibilità. Non solo per oggi, ma anche per il futuro, quando diventerà necessario adattare il riunito a requisiti individuali. Per questo motivo Intego Ambidestro consente una configurazione dei componenti che vi assiste in maniera ottimale durante i trattamenti.

Versatile

Due poggiatesta

Il poggiatesta piatto può essere regolato in maniera rapida e flessibile. Opzionalmente è possibile scegliere un poggiatesta a doppia articolazione, di ancora più facile posizionamento, che consente una visione migliore anche nelle aree più difficilmente accessibili.



Poggiatesta piatto



Poggiatesta a doppia articolazione

Due lampade operatorie per vederci sempre bene

Due lampade LED per illuminazione ottimale del campo di intervento. La nostra lampada operatoria premium LEDview Plus offre con le sue luci LED policrome e caratteristiche tecniche sofisticate un'illuminazione naturalmente perfetta.



LEDlight



LEDview Plus

Elemento assistente: Comfort o Compact

I due elementi assistente sono decisamente poco ingombranti e garantiscono massima libertà di movimento. Con il modello Comfort l'operazione avviene in modo confortevole anche senza assistente.



Elemento assistente Comfort



Elemento assistente Compact

Dotazione all'avanguardia

Le telecamere SiroCam F/AF/AF+ autofocus abbinano qualità superiore dell'immagine a facilità d'uso.



	SiroCam F	SiroCam AF	SiroCam AF+
Fuoco	Fuoco fisso	Fuoco auto	Fuoco auto
Formato immagine 16:10	✓	✓	✓
Pixel (effettivi)	0.42 megapixel	0.65 megapixel	1.00 megapixel
Campo di lavoro	✓ 5-20 mm	✓ 2-130 mm	✓ 2-130 mm
Risoluzione immagine in movimento	824 x 514	824 x 514	824 x 514
Risoluzione immagine fissa	824 x 514	1024 x 640	1276 x 796

Design a prova di futuro

Interfaccia: pronte per il futuro

Un'interfaccia di rete nella poltrona del paziente e una presa USB sull'elemento medico o assistente vi consentiranno di integrare nuove funzioni e di collegare in rete il vostro studio. In questo caso è possibile attivare molto più facilmente l'assistenza da remoto.



Presa USB integrata

Sivision Monitor AC da 22"

Il monitor HD vi permette di illustrare ai vostri pazienti, direttamente sul riunito, immagini intraorali e radiografie, software e pianificazioni, video e presentazioni PowerPoint.



Sivision Monitor AC da 22"

Configurazione personalizzata

Intego Ambidestro

Unità di base

Poltrona paziente

- Imbottitura premium
- Pedale pneumatico
- Poggiatesta piatto

Elemento medico

- 5 posizioni strumenti
- Pannello di comando EasyPad
- 2 vie dinamiche

Elemento assistente

- Versione compatta su un braccio orientabile montato direttamente sulla bacinella
- 4 posizioni per i manipoli
- Aspirasaliva e HVE

Gruppo idrico

- Aspirazione a umido standard
- Compatibile per l'integrazione del kit bottiglia
- Bacinella con funzione di orientamento manuale

Versione

Versione in esecuzione TS a cordoni pendenti



- L'altezza dell'elemento medico può essere regolata e bloccata con un freno pneumatico
- Design ergonomico con elemento medico posizionabile in modo flessibile e portatray mobile
- Ampia area strumenti sull'elemento medico e sul portatray

Versione in esecuzione CS Sprido



- Ideale per la più ampia serie di situazioni di trattamento, sia a due mani sia a quattro mani
- Portata ottimale dei cordoni degli strumenti: fino a 90 cm
- L'altezza dell'elemento medico può essere regolata e bloccata con un freno pneumatico

Intego pro Ambidestro

Unità di base

Poltrona paziente

- Imbottitura premium
- Pedale pneumatico
- Poggiatesta piatto
- Pedale a croce

Elemento medico

- 5 posizioni strumenti
- Pannello di comando EasyPad
- 2 vie dinamiche
- Alimentazione fibre ottiche per strumenti
- Elettronica di alimentazione per 2 motori e ablatore

Elemento assistente

- Versione compatta su un braccio orientabile montato direttamente sulla bacinella
- 4 posizioni per i manipoli
- Aspirasaliva e HVE
- Alimentazione fibre ottiche per Sprayvit E

Gruppo idrico

- Compatibile per l'integrazione di un dispositivo di disinfezione automatica
- Adattatori integrati per la pulizia
- Bacinella con funzione di orientamento manuale
- Aspirazione a umido con valvola multistazione
- Lavaggio ad acqua delle cannule di aspirazione
- Boiler

Versione

Versione in esecuzione TS a cordoni pendenti



- L'altezza dell'elemento medico può essere regolata e bloccata con un freno pneumatico
- Design ergonomico con elemento medico posizionabile in modo flessibile e portatray mobile
- Ampia area strumenti sull'elemento medico e sul portatray

Versione in esecuzione CS Sprido



- Ideale per la più ampia serie di situazioni di trattamento, sia a due mani sia a quattro mani
- Portata ottimale dei cordoni degli strumenti: fino a 90 cm
- L'altezza dell'elemento medico può essere regolata e bloccata con un freno pneumatico

Il riunito Intego Ambidestro può essere personalizzato in funzione delle vostre specifiche esigenze, raggiungendo così la vostra massima soddisfazione.

Pacchetti accessori

Start

- Siringa standard a 3 vie
- Alimentazione fibre ottiche nell'elemento medico
- 2 cordoni turbina
- LEDlight*

Innovation

- Pedale elettronico C⁺
- Sprayvit E nell'elemento medico
- Alimentazione fibre ottiche nell'elemento medico
- 1 cordone turbina
- 1 micromotore BL ISO E con elettronica di alimentazione
- Ablatore Sirosonic L
- LEDview Plus

Ergo

- ErgoMotion
- Poltrona sino a 185 kg
- 2 braccioli
- Poggiatesta a doppia articolazione

* LEDview Plus con pagamento di sovrapprezzo

Advance

- Pedale elettronico C⁺
- Sprayvit E nell'elemento medico
- Alimentazione fibre ottiche nell'elemento medico
- 1 cordone turbina
- micromotore BL ISO E con elettronica di alimentazione
- LEDlight*

Touch Plus

- Pedale elettronico C⁺
- 1 micromotore BL ISO E con elettronica di alimentazione
- 1 cordone turbina
- Alimentazione fibre ottiche nell'elemento medico
- Interfaccia utente EasyTouch
- LEDview Plus

Endo Pro

- Controllo coppia integrata
- ApexLocator
- Contrangolo ENDO 6:1
- e-Control

Pacchetti opzionali

Sivision ready

- Interfaccia USB per l'elemento medico o assistente
- Interfaccia di rete

Sivision Start con/senza monitor

- Interfaccia USB per l'elemento medico o assistente
- Interfaccia di rete
- SiroCam F (SiroCam AF o AF⁺ con pagamento di sovrapprezzo)
- Montaggio monitor su tubo lampada
- Opzionale: monitor AC 22"

Pacchetti accessori

Start Pro

- Pedale elettronico C⁺
- Sprayvit E nell'elemento medico
- 1 cordone turbina
- 1 micromotore BL ISO E
- LEDlight*

Advance Pro

- Pedale elettronico C⁺
- Sprayvit E nell'elemento medico
- 1 cordone turbina
- 1 micromotore BL ISO E
- Ablatore Sirosonic L
- Interfaccia utente EasyTouch
- LEDview Plus

Innovation Pro

- Pedale elettronico C⁺
- Sprayvit E nell'elemento medico
- Terza via dinamica
- 1 cordone turbina
- 2 micromotori BL ISO E
- Ablatore SiroSonic L
- Interfaccia utente EasyTouch
- Sprayvit E nell'elemento assistente
- LEDview Plus

Endo Pro

- Controllo coppia integrata
- ApexLocator
- Contrangolo ENDO 6:1
- e-Control

* LEDview Plus con pagamento di sovrapprezzo

Pacchetti opzionali

Sivision Ready

- Interfaccia USB per l'elemento medico o assistente
- Interfaccia di rete

Sivision Start con/senza monitor

- Interfaccia USB per l'elemento medico o assistente
- Interfaccia di rete
- SiroCam F (SiroCam AF o AF⁺ con pagamento di sovrapprezzo)
- Montaggio monitor su tubo lampada
- Opzionale: monitor AC 22"

Accessori

Qui è possibile visualizzare l'elenco completo degli accessori, con la specifica di quanto è di serie e di quanto è opzionale a pagamento.

Intego Ambidestro

Pro

Separatore automatico		
2 memorie, S sciacquo, O azzeramento	■	■
Box di connessione integrato	■	■
Poltrona sino a 140 kg	■	-
Poltrona sino a 185 kg	□Er	■
Poggiatesta piatto	■	■
Poggiatesta a doppia articolazione	□Er	□
Rivestimento Premium	■	■
Rivestimento lounge	□	□
ErgoMotion	□Er	□
Pedale a croce	□	■
Cuscino pediatrico	□	□
Bracciolo destro	□Er	□
Bracciolo sinistro	□Er	□
Prese per il collegamento di dispositivi esterni	□	□
Kit riduttore di pressione sottovuoto	□	□
Paretina anteriore per tubazioni a pavimento	□	□
Box di connessione separato	□	□
Piastrina di adattamento	□	□

Elemento medico		
Regolazione in altezza con bloccaggio pneumatico	■	■
5 posizioni strumenti	■	■
Alimentazione ad aria per 2 azionamenti strumenti senza fibre ottiche	■	■
Pedale pneumatico	■	■
Pedale elettronico C*	□A, I, T	□S, A, I
Pannello di comando EasyPad con 2 impostazioni specifiche per utente	■	■
Interfaccia EasyTouch con 4 impostazioni specifiche per utente	□T	□A, I
Sprayvit E con Luce	□A, I	□S, A, I
Sprayvit E con Luce (pulsante acqua a sinistra)	□A, I	□S, A, I
Siringa standard a 3 vie	□S	-
Cordone ad aria a f.o.	□2xS, A, I, T	□S, A, I
Cordone ad aria Borden	□	-
Micromotore BL ISO E con cordone	□A, I, T	□S, A, I
2° micromotore BL ISO E con cordone	□	□I
Ablatore SiroSonic L	□I	□A, I
Terza via dinamica	□	□I
Lampada fotopolimerizzante SATELEC Mini LED	-	□
Alimentazione fibre ottiche per turbina e Sprayvit E	□S, A, I, T	■
Controllo coppia per trattamenti endodontici	□E	□E
eControl: con intervallo di velocità da 100 a 40.000 g/min	□E	□E
Rilevatore apicale integrato	□E	□E
Contrangolo Endo 6:1	□E	□E
Negatoscopio per radiografie intraorali	□	□
Funzione spurgo e sanificazione manuale	□	-
Purge e AutoPurge	-	■
Portatray flessibile per TS per 2 tray standard	□	□
Supporto flessibile per telecamera, per TS	□	□
Tappetino in silicone, per TS	□	□
Portatray aggiuntivo per CS per 1 tray standard	□	□
Portatray aggiuntivo per CS per 2 tray standard	□	□
Tappetino in silicone, per CS	□	□
Coprimaniglie in silicone	□	□

Intego Ambidestro

Pro

Elemento assistente		
Elemento assistente compatto, braccio orientabile montato direttamente sul braccio della bacinella	■	■
Elemento assistente Comfort, ideale per le operazioni a due mani	□	□
4 posizioni	■	■
Aspirasaliva e aspiratore chirurgico	■	■
Sprayvit E con luce	□	□I
Sprayvit E con luce (pulsante acqua a sinistra)	□	□I
Siringa standard a 3 vie	□	-
Secondo aspiratore chirurgico	□	□
Lampada fotopolimerizzante SATELEC Mini LED	□	□
Tastiera	□	□
Alimentazione fibre ottiche per Sprayvit E	□	■
Tappetino in silicone per elemento assistente comfort	□	□

Gruppo idrico		
Predisposto per il kit bottiglia	■	-
Predisposto per impianto di disinfezione integrato	-	■
Bacinella orientabile manualmente	■	■
Gruppo idrico senza bacinella	□	□
Predisposto per aspirazione a umido standard	■	-
Predisposto per aspirazione a umido standard con controllo automatico dell'aspirazione	□	-
Valvola parzializzatrice multistudio	□	■
Valvola della bacinella per aspirazione a umido standard	□	□
Separatore automatico	□	□
Separatore di amalgama	□	□
Kit bottiglia d'acqua senza connessione alla rete idrica pubblica	□	-
Kit bottiglia d'acqua con connessione alla rete idrica pubblica	□	-
Impianto di disinfezione integrato	-	□
Boiler	□	■
Lavaggio ad acqua delle cannule di aspirazione	□	■
Disinfezione cannule di aspirazione	-	□

Lampada operatoria		
LEDlight	□S, A	□S
LEDview Plus	□I, T	□A, I

Comunicazione pazienti		
Interfaccia USB nell'elemento medico o assistente	□SiR, SiS	□SiR, SiS
SiroCam F	□SiS	□SiS
SiroCam AF	□	□
SiroCam AF*	□	□
Montaggio monitor su tubo lampada	□SiS	□SiS
Monitor AC 22" (con alimentatore integrato)*	□SiS*	□SiS*
Interfaccia di rete	□SiR, SiS	□SiR, SiS

- Inclusa nell'unità di base
- Accessorio opzionale a pagamento
- Non possibile/non disponibile
- SiR Pacchetto Sivision Ready
- SiS Pacchetto Sivision Start
- SiS* Pacchetto Sivision Start con monitor
- S Pacchetto Start/Start Pro
- A Pacchetto Advance/Advance Pro
- I Pacchetto Innovation/Innovation Pro
- E Pacchetto Endo Pro
- Er Pacchetto Ergo
- T Pacchetto Touch Plus

La disponibilità di opzioni e accessori può variare da paese a paese.



Seggiolino Hugo



Seggiolino Carl



Seggiolino Paul (figura con anello poggipiedi supplementare)



Tray orientabile aggiuntivo per elemento medico CS



Pedale a croce



Siringa standard a 3 vie



Lampada fotopolimerizzante Satelec Mini LED



Negatoscopio



Portatray e supporto per telecamera flessibili



Elemento assistente Comfort con interfaccia utente



Pedale elettronico C+



Poggiatesta a doppia articolazione



Prese per il collegamento di dispositivi esterni



Monitor 22" AC



LEDlight



LEDview Plus



Intego Ambidestro senza bacinella



SiroCam F



SiroCam AF



SiroCam AF+

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Germania
dentsplysirona.com

Clinical Procedures

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Platform Technologies

CAD/CAM
Imaging Systems
Treatment Centers
Instruments