
THE DENTAL SOLUTIONS COMPANY™



Teneo

Innovazione in perfetta armonia

dentsplysirona.com

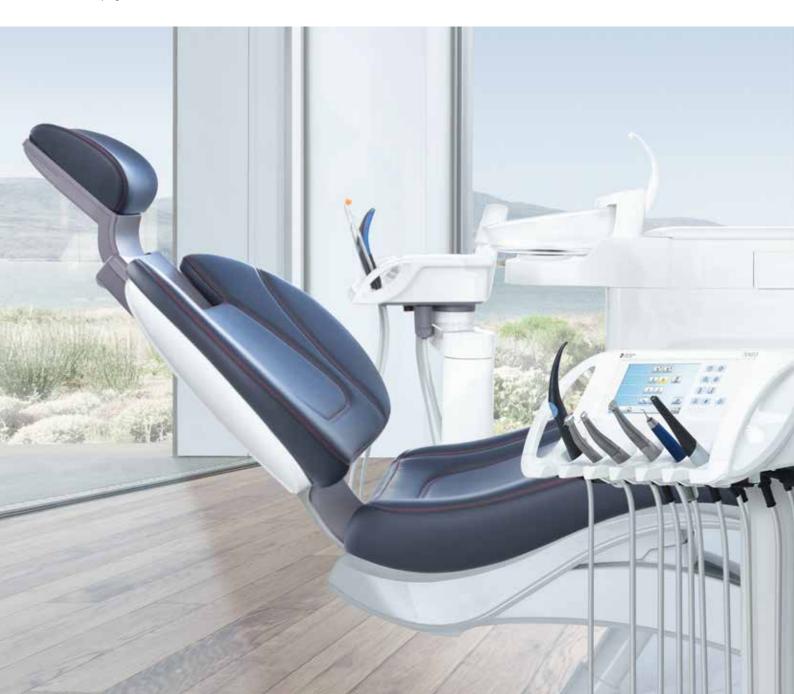



Innovazione in perfetta armonia



La filosofia di Teneo non conosce compromessi: non esiste niente oltre al meglio. Se il dentista e il Centro di Trattamento riescono ad interagire in modo ottimale, il risultato è un flusso di lavoro perfettamente armonioso. Per questo motivo Teneo è studiato per rispondere in modo automatico e individuale a tutte le vostre esigenze. Funzioni selezionate con cura vi assistono in tutte le situazioni di trattamento, fino al più piccolo dettaglio. Funzioni studiate per migliorare il comfort permettono al paziente di rilassarsi durante il trattamento e a voi di concentrarvi interamente sul lavoro. Perché accontentarsi di meno?



La ridefinizione di trattamento

I trattamenti che eseguite ogni giorno sono la chiave del successo del vostro studio. Teneo è stato sviluppato per accompagnare in modo coerente il flusso di lavoro dei trattamenti odontoiatrici. Solo se il dentista può lavorare in modo efficace ed ergonomico sarà in grado di mettere in pratica tutte le sue competenze professionali a beneficio del paziente. Teneo offre opzioni automatiche e motorizzate per adattarsi al 100% alle vostre esigenze. Teneo si inserisce direttamente nell'interazione tra voi e il paziente; ed il passaggio successivo dista solo un piccolo movimento.

Perché accontentarsi di meno?

Grazie alle sue funzionalità motorizzate, come la guida di scorrimento, il poggiatesta e la bacinella motorizzati, Teneo si adatta egregiamente al vostro flusso di lavoro.

Voi conoscete ogni passaggio... anche Teneo

Per permettere al dentista di concentrarsi pienamente sui suoi pazienti, Teneo, sfruttando la sua guida di scorrimento, letteralmente porge al dentista tutto ciò di cui ha bisogno, semplicemente e senza attivazione manuale. Il dentista e l'assistente possono mantenere una posizione di lavoro ergonomica in ogni momento.



Sistema di suddivisione per migliorare la raggiungibilità



È possibile posizionare l'elemento dentista e l'elemento assistente indipendentemente l'uno dall'altro per permettervi di passare in piena flessibilità dalla modalità di trattamento in team alla modalità di trattamento senza team.

Operatività senza l'uso delle mani



Il comando wireless a pedale è l'elemento di controllo multifunzione per tutte le funzionalità della poltrona. Permette di comandare il display EasyTouch e la guida di scorrimento senza utilizzare le mani.

Voi volete operare in ergonomia -Teneo si adatta

Per poter mantenere una postura corretta durante il trattamento, è necessario che il paziente sia posizionato in modo tale da permettere al dentista di accedere ad ogni punto. Teneo garantisce un comfort completo durante il trattamento, sia per il dentista sia per il paziente, grazie al poggiatesta, alla bacinella e alla guida di scorrimento motorizzati.



Posizionamento del punto verticale della bocca (Vertical Mounth Positioning)





Teneo conosce la vostra postura preferita durante il lavoro. Per permettervi di lavorare mantenendo sempre la vostra postura preferita, il punto verticale della bocca è posizionato sempre alla stessa altezza di lavoro, indipendentemente dalla statura del paziente (come illustrato nelle immagini).

Poggiatesta motorizzato



Per permettere un accesso ottimale al punto in cui deve essere somministrato il trattamento, è possibile regolare l'estensione e l'inclinazione del poggiatesta motorizzato utilizzando il comando a pedale, l'interfaccia utente oppure manualmente tramite EasyTouch.

Bacinella motorizzata



La bacinella è motorizzata ed è orientabile. È possibile programmarne la posizione, rendendo la procedura di lavoro ancora più rapida e sicura.



I dettagli fanno la differenza

Un aspetto importante di ogni trattamento è riuscire a mantenere intatto il flusso delle sequenze di lavoro. Per questo motivo è necessario che le funzioni di un riunito odontoiatrico si integrino armoniosamente nel flusso di lavoro, e non il contrario. A tal fine Teneo si presenta con un'ampia serie di funzioni già disponibili. L'interfaccia utente EasyTouch può essere completamente personalizzata per permettervi di utilizzare l'intera serie di modalità di trattamento.

Perché accontentarsi di meno?


Teneo è già preconfigurato con un'interfaccia utente ampia, 6+1 posizioni personalizzabili per gli strumenti e numerosi strumenti di supporto alla comunicazione con il paziente. Premendo un semplice tasto, il Centro di Trattamento si predispone alla procedura di endodonzia o di implantologia.

Chi cerca la libertà la troverà in Teneo


Le funzioni integrate per lo svolgimento degli interventi di implantologia ed endodonzia permettono di risparmiare tempo prezioso e rendono superflui eventuali dispositivi aggiuntivi da tavolo. Tutte le funzioni possono essere controllate tramite il comando a pedale. Ciò permette un passaggio fluido tra la fase di esame del paziente, di spiegazione e di svolgimento del trattamento. In combinazione con numerose altre funzioni, come ApexLocator o Implant Terminal in Sidexis 4, Teneo diventa la soluzione più professionale per ogni situazione di trattamento.



Endodonzia

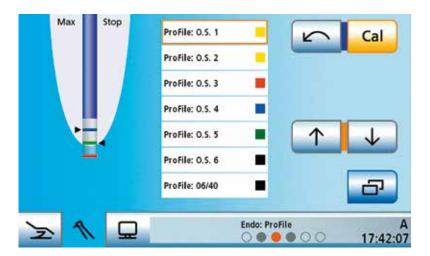


Controllo preciso della potenza, ApexLocator e libreria di file fornitissima: così il flusso di lavoro è sempre fluido e la sicurezza clinica è garantita. L'unico comando da azionare è il comando a pedale di Teneo.

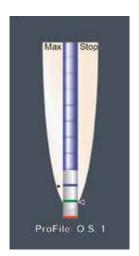

ApexLocator*

Implantologia

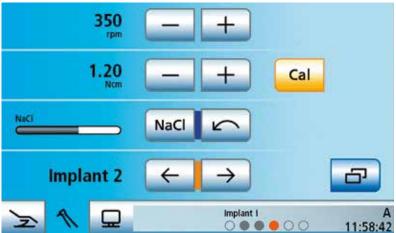

proprie esigenze oppure selezionare un sistema di impianti dalla libreria integrata. Importanti parametri come velocità, potenza e flusso del liquido refrigerante rimangono costantemente sotto



Implant Terminal*

È possibile impostare Teneo manualmente per adattarlo alle controllo, in modo efficiente, sterile e senza l'utilizzo delle mani.

^{*} ApexLocator e Implant Terminal aperti sul monitor Sivision.

Voi volete dare il massimo in ogni dettaglio -Teneo offre ancora di più

Teneo, con le sue funzioni studiate nel dettaglio, offre tutto ciò di cui avete bisogno per lavorare in modo impeccabile in ogni situazione. Dall'ampia interfaccia utente alla massima flessibilità di configurazione delle posizioni degli strumenti, Teneo sa come fare la differenza.



Display EasyTouch da 7"



L'ampio touch screen garantisce un uso intuitivo ed autoesplicativo. È personalizzabile e aggiornabile. In modalità facile, mostra solo le funzioni necessarie in un determinato momento. La navigazione è semplice e sicura.

6+1 posizioni degli strumenti



Strumenti e comandi ben organizzati e strutturati: le sei posizioni degli strumenti vi permettono di configurare il Centro di Trattamento, rendendolo ancora più adattabile al contesto in cui viene utilizzato. La videocamera può essere posizionata a scelta in una posizione ausiliaria di appoggio sul tray.

Lampada operatoria LEDview Plus



LEDview Plus consente una combinazione perfetta di intensità della luce, del colore e dell'ampiezza del campo luminoso. In modalità "composite", è possibile lavorare i materiali di otturazione fotopolimerizzabili senza che questi induriscano prematuramente. La lampada operatoria può essere posizionata nel punto più idoneo e comandata tramite un sensore senza l'utilizzo delle mani. Anche disponibile come modello a soffitto o combinato LEDview Plus/Heliodent Plus.

Videocamera SiroCam AF+



Ottimizzazione della visualizzazione e della documentazione del trattamento: la telecamera SiroCam AF+ unisce eccellente qualità dell'immagine a semplicità d'uso. L'immagine viene visualizzata nel monitor da 22" in modalità HD.





Voi create fiducia -Teneo vi aiuterà

Una buona comunicazione con il paziente è fondamentale per ottenere risultati di primissima qualità. La trasparenza delle procedure di trattamento contribuisce in modo significativo a guadagnare la fiducia del paziente. Con Teneo è possibile condurre consulenze in loco, memorizzare le posizioni di ogni paziente e quindi guadagnare più efficacemente la fiducia del paziente.

I buoni consigli di Teneo

- Il monitor integrato permette di visualizzare le immagini intraorali, le radiografie 3D o le presentazioni tramite il menu per la comunicazione con il paziente.
- La spiegazione della procedura del trattamento permette di creare un rapporto di fiducia con il paziente, il quale è messo in condizioni di capire l'intervento e di affrontarlo con meno ansia.
- La spiegazione e la documentazione degli esiti del trattamento sono possibili grazie alla videocamera intraorale SiroCam AF+, naturalmente con immagini di altissima qualità.



Comfort eccezionale

Per molti pazienti è particolarmente importante percepire che le proprie esigenze sono tenute in considerazione quando si tratta di sottoporsi a un intervento odontoiatrico e l'atmosfera che si crea durante l'intervento può essere determinante. La tecnologia di Teneo, studiata per favorire il comfort, permette al dentista di ottenere questo risultato senza interferire con l'intervento vero e proprio. I pazienti, sentendosi in buone mani, avranno più fiducia nel trattamento e non cercheranno altri dentisti.

Perché accontentarsi di meno?

Teneo può adattarsi alle esigenze di tutti i pazienti, anziani o bambini, alti o bassi, grazie alla possibilità di adattarsi alle esigenze individuali di ogni il paziente e di memorizzarne l'impostazione, grazie alla funzione di massaggio e al sostegno lombare nonché alla modalità slow-motion e all'imbottitura Thermo o Lounge.



Voi conoscete i vostri pazienti anche Teneo

Quando il paziente è rilassato, il trattamento diventa più agevole ed è più facile ottenere risultati impeccabili. Teneo è in grado di rispondere alle più diverse esigenze, sia dei pazienti anziani che hanno bisogno di supporto per posizionarsi sulla poltrona, sia dei pazienti preoccupati dal trattamento. La sua funzione massaggio e il sostegno lombare aiuta i pazienti a rilassarsi.



Postura in funzione delle esigenze

La funzione di posizionamento che sfrutta OrthoMotion è particolarmente idonea per i pazienti più anziani o disabili: lo schienale e la seduta mantengono lo stesso angolo, proteggendo le vertebre lombari.



Posizionamento ergonomico del paziente

La funzione ErgoMotion si traduce in movimento combinato dello schienale e della seduta per permettere un allungamento ergonomico della schiena. Il paziente viene spostato comodamente nella posizione di trattamento.



Forma e colore

Una vera e propria festa per gli occhi: con una combinazione perfetta di forma e colore, Teneo saprà creare un'atmosfera unica nello studio. Qualunque sia lo stile che preferite, classico o moderno, Teneo si integrerà sempre elegantemente nel contesto del vostro studio. Lo confermano anche i premi per il design, come l'iF Design Gold Award o la nomina al German Design Award.







Colori dei rivestimenti

Il mondo elegante

Carbone*	Merlot*	Platino	Pacifico*	Colori raffinati dei rivestimenti che regalano un'immagine classica e senza tempo.
II mondo natu	rale			
Umbra*	Zaffiro	Basalto*	Cherry	Tonalità calde e delicate dall'effetto rilassante.
Il mondo vital	e			
Aloe	Aqua	Flamingo	Orchidea*	Tinte brillanti e toni luminosi che creano un'atmosfera vivace e moderna.

^{*} Colori disponibili per l'imbottitura Lounge.

Colori delle cuciture



Colori della vernice



Qualità senza compromessi



Imbottitura Thermo Premium

L'effetto rinfrescante dell'imbottitura Thermo riduce il calore accumulato nella zona dorsale e nella poltrona e permette al paziente di rilassarsi.



Rivestimento Lounge

Il materiale innovativo conferisce a questo tipo di imbottitura ancora più morbidezza e quindi ancora più comfort.



Teneo - quando la sicurezza è semplice

Il Centro di Trattamento Teneo vi permetterà di soddisfare i più severi standard in materia di prevenzione delle infezioni grazie alle sue superfici lisce e facili da pulire, ai componenti amovibili e agli adattatori integrati per l'igienizzazione. Tutto è studiato per garantire il massimo controllo delle infezioni nel minor tempo possibile e con il minor sforzo possibile, per sollevare il team da incombenze superflue e per soddisfare i più severi standard di igiene.










Superfici facili da pulire: Teneo è stato progettato fin dall'inizio per consentire un'efficace gestione del controllo delle infezioni. Tutte le sue superfici sono lisce e facili da pulire e disinfettare.



Componenti termodisinfettabili: tutte le parti a rischio di trasmissione di infezioni possono essere staccate e disinfettate con procedimento termico, riducendo così il rischio di contaminazione crociata.

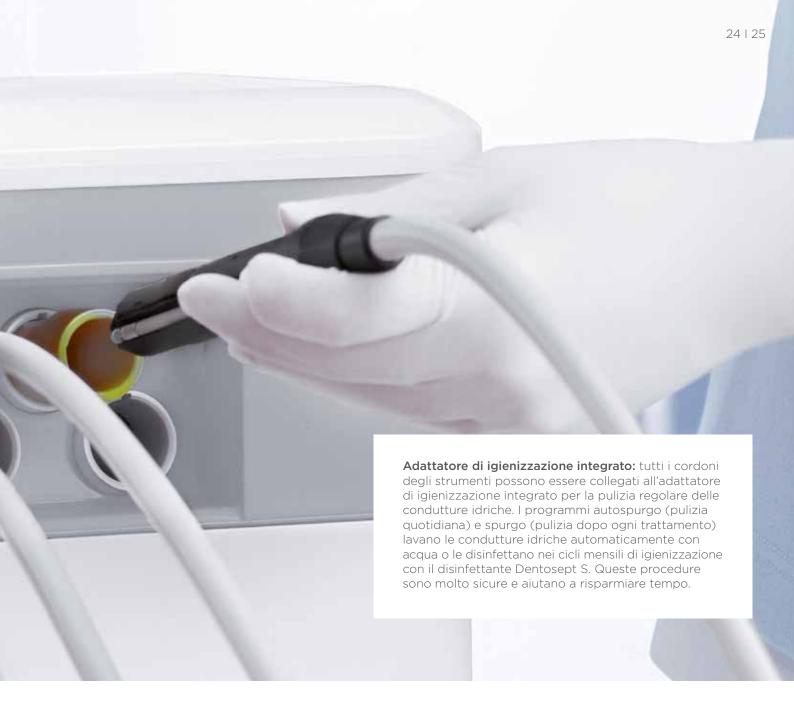



Bacinella: per permettere il massimo controllo delle infezioni, la bacinella motorizzata e i suoi comandi possono essere facilmente staccati per essere puliti.



Adattatori di igienizzazione per la pulizia dei cordoni di aspirazione: è possibile sciacquare automaticamente i cordoni di aspirazione premendo un pulsante tra un trattamento e l'altro o anche durante interventi di lunga durata. Per il massimo controllo contro le infezioni, è possibile impostare anche l'utilizzo automatico di detergenti opzionali.

Non un Teneo qualsiasi, il vostro Teneo

Teneo è più di un semplice riunito odontoiatrico. È l'espressione della vostra individualità. Qualsiasi sia la configurazione impostata, Teneo garantirà sempre una cosa fondamentale: interoperabilità in perfetta armonia. Lasciatevi ispirare!

Teneo determina gli standard

La sofisticata ergonomia e funzionalità, unite ai materiali di qualità, vi aiutano a dare forma al vostro personale flusso di lavoro ideale.



Poltrona



Elemento assistente



Sivision



Elemento medico



Unità idrica



Seggiolini

Accessori

Questo è un elenco completo della strumentazione standard per l'unità base e di tutte le singole opzioni disponibili.

Poltrona	
Posizioni della poltrona specifiche per paziente*	
Poggiatesta motorizzato con sistema automatico di regolazione specifico per paziente*	
Imbottitura Thermo Premium	
Rivestimento Lounge, a richiesta con impunture colorate	
Sostegno lombare/funzione massaggio	
Bracciolo amovibile, bracciolo destro orientabile lateralmente	
Bracciolo sinistro amovibile	
Joystick a quattro vie	
Comando a pedale senza fili	
Collegamento per apparecchi esterni	
Cuscino pediatrico	
Base di montaggio	
OrthoMotion	
ErgoMotion	
Modalità SlowMotion	

Elemento medico (con EasyTouch, 6 posizioni, maniglie e portastrumenti amo	vibili)
Sprayvit M con luce	
1° azionamento del trapano (per motore o turbina)	
2° azionamento del trapano (per motore senza turbina)	
3° azionamento del trapano (per motore senza turbina)	
4° azionamento del trapano (per motore senza turbina)	
Motore elettrico BL	
Motore elettrico BL ISO C	
Motore elettrico Implant BL	
Cordone turbina	
SiroSonic TL manipolo a ultrasuoni	
Sirotom kit elettrochirurgia	
Funzione implantologia	
Funzione endodonzia	
Funzione lime reciprocanti	
ApexLocator con finestra in monitor Sivision	
Pompa per soluzione salina integrata	
Interfaccia USB	
Utilizzo a mani libere con controllo mediante cursore	
Contrangolo T1 Line Endo 6 L con illuminazione	
Contrangolo Implant 20 :1	

Elemento assistente (con 4 posizioni, supporto amovibile)	
Lampada per polimerizzazione mini L.E.D.	
Aspiratore chirurgico	
Sprayvit M con luce	
Dispositivo di aspirazione	
Aspira-saliva	
Cordoni di aspirazione con guida	

Unità idrica	
Impianto di disinfezione con sterilizzazione continua e funzione di igienizzazione	•
Bonificazione delle vie d'aspirazione con agenti chimici	
Attacchi per idrocolloide	
Valvola della bacinella per aspirazione a umido	
Separatore automatico	
Separatore centrifugo di amalgama	
Bacinella in vetro, funzione orientamento motorizzato, amovibile	•
Funzione di spurgo con autospurgo	
Funzione Aqua	

Sivision digital	
SiroCam AF+	
Monitor da 22" sul tray, tray compreso	
Monitor da 22" su supporto per lampada	
Raccordo telecamera nell'elemento medico	
Set di cavi per collegamento al PC	

Seggiolini (molla a gas lunga o corta)	
Hugo Freehand (con rilascio a pedale)	
Hugo Manual (con rilascio manuale)	
Hugo Manual Plus (con rilascio manuale e poggiapiedi ad anello)	
Carl Manual (con rilascio manuale)	
Carl Manual Plus (con rilascio manuale e poggiapiedi ad anello)	
Seggiolino Theo	

Altre opzioni	
Tray Sirona	
Interfaccia PC (Ethernet)	
Comando PC con EasyTouch	
Diagnosi remota	
Lampada operatoria LEDview Plus	
Lampada a soffitto LEDview Plus	
Predisposizione per combinazione a soffitto Heliodent Plus	
Predisposizione per montaggio Heliodent Plus	

^{*} Disponibile con Sidexis 4.

[■] In unità base o come pacchetto.

[☐] Opzionale.

Opzioni di dotazione

Pacchetti di valore



Innovation

- Sprayvit M per gli elementi dentista e assistente
- 2 motori elettrici BL (sovrapprezzo per BL ISO C)
- SiroSonic TL manipolo a ultrasuoni
- Lampada operatoria LEDview Plus
- Fino a due seggiolini Hugo o Carl a prezzo ridotto



Endo

- Funzione endodonzia
- Gruppo ApexLocator
- Contrangolo T1 Line Endo 6 L
- con illuminazione
- Adattatore Basic Apex (opzionale)
- Supporto per ApexLocator
- Opzione aggiuntiva: Funzione lime reciprocanti



Implant

- Funzione implantologia estesa
- Pompa per soluzione salina integrata
- Motore elettrico Implant BL
- Contrangolo implantologia (20 : 1)



Sivicion

- Monitor, 22"
- SiroCam AF+
- Monitor posizionato sul tray o su supporto per lampada
- Raccordo per videocamera nell'elemento dentista



Cuscino pediatrico



ApexLocator



CEREC AI



Collegamento per apparecchi esterni



Pompa per soluzione salina integrata



Adattatore implantologia



Modello Heliodent Plus



Monitor da 22" sul tray



Monitor da 22" su supporto per lampada

Dentsply Sirona per voi

Aiutiamo i dentisti a fornire trattamenti odontoiatrici migliori, più sicuri e più veloci. Ogni giorno date il meglio e i vostri strumenti non saranno da meno. Per questo motivo forniamo soluzioni innovative che contribuiscono al miglioramento della salute dentale. Questo significa che con Dentsply Sirona potrete lavorare sempre al massimo livello di eccellenza. Di questo potete essere certi, oggi e in futuro.

Innovazione concreta



In qualità di leader globale nella produzione di apparecchiature odontoiatriche innovative, investiamo costantemente nella ricerca e, quindi, nel futuro dell'odontoiatria moderna. Interconnettendo tecnologie digitali con soluzioni integrate e ottimizzando il flusso di lavoro del trattamento, riusciamo a ottenere risultati terapeutici migliori, maggiore comfort e sicurezza per il paziente, nonché un risparmio di tempo e denaro per lo studio odontoiatrico.

Cosa significa questo per Teneo?

Qualità "Made in Germany"

Questo Centro di Trattamento è sviluppato, prodotto e testato in tutto e per tutto presso lo stabilimento Dentsply Sirona di Bensheim, in Germania. Il montaggio accurato nello stabilimento giustifica le elevate aspettative di Teneo e garantisce la migliore qualità e affidabilità sul lungo termine.

Avanguardistico e innovativo

Teneo è in continua evoluzione: questo Centro di Trattamento può essere aggiornato ed è dotato di un'interfaccia USB per l'integrazione di nuove funzioni e di un'interfaccia Ethernet per permettere una facile risoluzione dei problemi.

Realizzazione di alta qualità

Per Teneo vengono utilizzati solo i materiali migliori. La struttura, la poltrona e lo schienale sono realizzati con una combinazione ben studiata di acciaio e alluminio. Di conseguenza, Teneo risulta leggero ma allo stesso tempo molto robusto.

Soluzioni per tutte le procedure

Prevenzione Conservativa Ortodonzia Endodonzia Implantologia Protesi

Tecnologie abilitanti

Radiologia Centri di trattamento CAD/CAM Strumenti

Dentsply Sirona Italia

Piazza dell'Indipendenza 11B 00185 Roma dentsplysirona.com

