

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Programma di punte per manipoli ad ultrasuoni

Punte per tutte le applicazioni,
qualità in ogni dettaglio

dentsplysirona.com



Punte e scaler ad ultrasuoni di altissima qualità.

L'unione fa la forza: il presupposto di un risultato di lavoro ideale, qualunque sia il trattamento da eseguire, è la combinazione perfetta di scaler e punta. Dentsply Sirona ha creato un abbinamento perfetto fra questi due elementi facendosi garante di una qualità costantemente elevata. Da questo connubio nascono scaler ad ultrasuoni che si distinguono per flessibilità e comfort e un'ampia scelta di punte che offrono elevate possibilità di differenziazione nei diversi campi di trattamento.



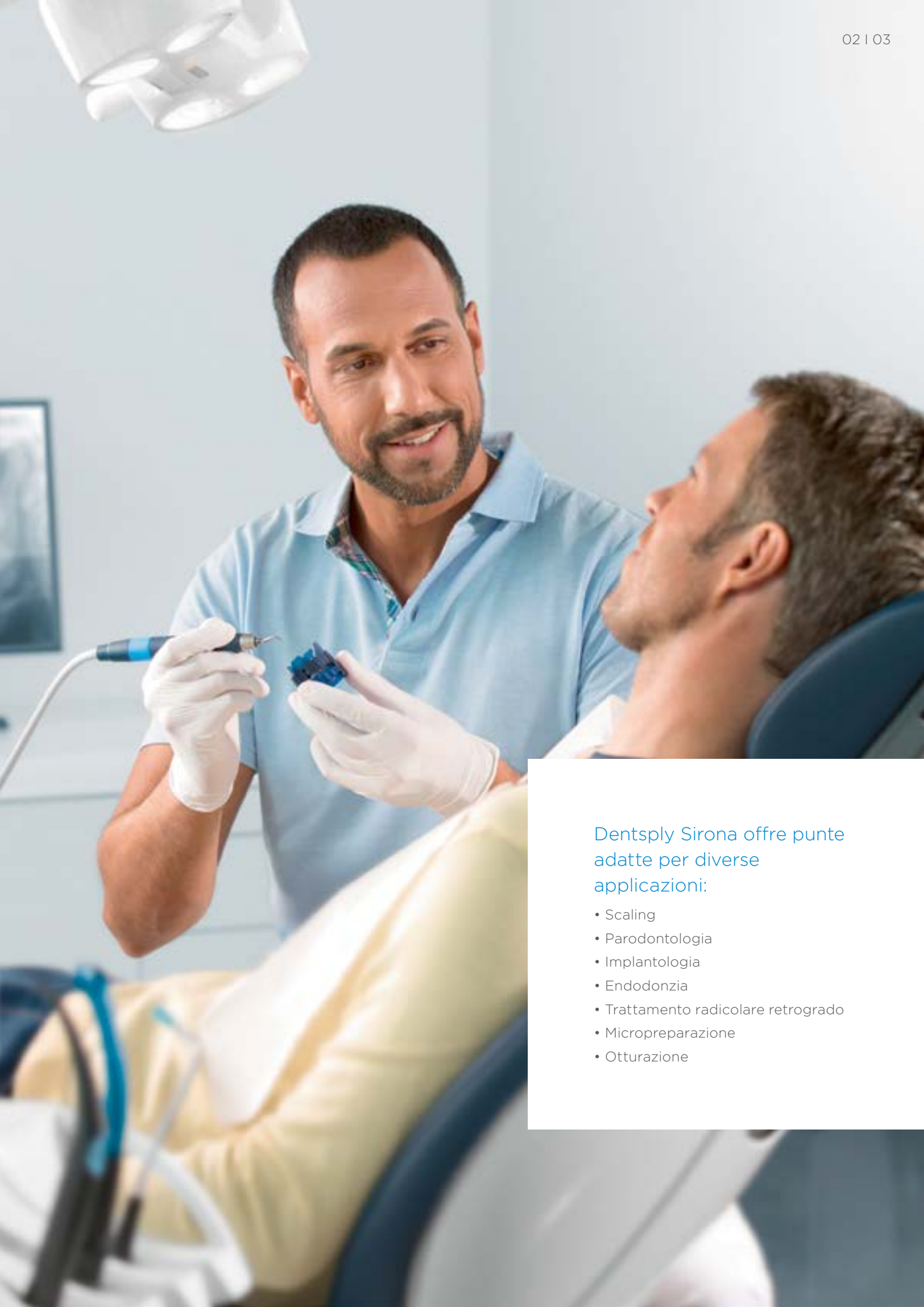
Su e giù, avanti e indietro. La vibrazione bidimensionale della punta protegge il dente da trattamenti da sollecitazioni eccessive.

SiroSonic/L/TL - per esigenze elevate: la flessibilità integrata direttamente nell'elemento medico

I manipoli ad ultrasuoni SiroSonic/SiroSonic L e SiroSonic TL con la potente illuminazione ad anello sono gli strumenti ideali per moltissimi trattamenti nella moderna pratica odontoiatrica. Grazie alla regolazione precisa della potenza, permettono di eseguire sia delicatissimi trattamenti parodontali che operazioni di micropreparazione. Inoltre, entrambi i manipoli possono essere dotati di un adattatore spray esterno per l'erogazione di liquidi di lavaggio esterni (ad es. soluzione di NaOCl o CHX).

Lavorare in modo sicuro

Caratteristiche che solo Dentsply Sirona sa offrirvi: tutte le punte si distinguono per l'ampiezza di vibrazione sempre ottimale, perfettamente sincronizzata e specifica per ciascuno dei diversi campi d'impiego. Le punte per lo scaling e per la parodontologia vibrano, ad es., in modo bidimensionale oppure su di un solo piano. Vengono evitati i movimenti laterali per proteggere i denti sottoposti al trattamento. La capacità di asportazione dipende anche dallo stato di usura della punta, monitorabile in modo semplice e rapido grazie ad un calibro per le punte.



Dentsply Sirona offre punte adatte per diverse applicazioni:

- Scaling
- Parodontologia
- Implantologia
- Endodonzia
- Trattamento radicolare retrogrado
- Micropreparazione
- Otturazione

Il grande effetto delle punte di alta qualità.



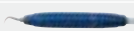
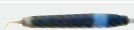


Piccole ma decisive

Quasi tutte le punte Dentsply Sirona possono essere montate su tutti gli scaler ad ultrasuoni Dentsply Sirona, di qualsiasi serie e anno di produzione. Lo garantisce Dentsply Sirona tenendone conto in tutti i processi di sviluppo. Questo vale per: SiroSon S, SiroSon L, SiroSonic, SiroSonic L, SiroSonic TL, PerioSonic.

Altissima qualità

Tutte le punte Dentsply Sirona sono naturalmente di primissima qualità. Nella produzione viene infatti utilizzato solo acciaio inossidabile altamente bonificato che è sottoposto ad un severo trattamento di lavorazione e di tempra messo a punto da Dentsply Sirona. Anche per quanto riguarda la tecnologia di lavorazione, effettuata con macchinari a controllo numerico (CNC) di ultima generazione, Dentsply Sirona definisce continuamente nuovi standard di qualità.

Prodotti

Tipi		Versioni	Rif.
SiroSonic ¹		Senza luce, incl. punte n. 3L e n. 4L	59 13 517
SiroSonic L ¹		Con luce, incl. punte n. 3L e n. 4L	59 13 509
Set SiroSonic L ¹		Con luce, 2 pezzi	65 62 834
SiroSonic TL ²		Con luce, incl. punte n. 3L e n. 4L	62 12 216
Set SiroSonic TL ²		Con luce, 2 pezzi	65 62 842
PerioSonic		Con luce e anello di segnalazione	60 30 410

¹ Adatta per Intego e Intego Pro

² Adatta per tutti i riuniti Teneo e Sinuis



Accessori per scaler

Accessori		Utilizzo	Rif.
Adattatore spray L		Per SiroSon L e SiroSonic/SiroSonic L con utilizzo di liquidi di lavaggio speciali condotti dall'esterno	60 02 286
Adattatore spray PerioSonic		Per SiroSonic TL e PerioSonic con utilizzo di liquidi di lavaggio speciali condotti dall'esterno	61 41 852
Chiave dinamometrica		Per il perfetto fissaggio della punta al manipolo	60 06 196

Dati tecnici







Tabella dei dati tecnici	PerioSonic SiroSonic SiroSonic L SiroSonic TL
Azionamento	Piezoeltrico
Forma di vibrazione	Lineare
Frequenza di vibrazione [kHz]	~ 25-32
Illuminazione ad anello*	LED
Ø manipolo [mm]	max. 18
Ø impugnatura [mm]	~ 12 / ~ 18
Lunghezza manipolo [mm] (punta esclusa)	~ 96 / ~ 101
Peso [g]	~ 47 / ~ 50

* Non per SiroSonic.




Parodontologia

Per la rimozione di concrezioni a livello subgingivale anche nelle tasche gengivali profonde. Con SiroPerio è semplice e agevole accedere a tutte le regioni per rimuovere le concrezioni in modo efficace. Massimo comfort grazie alla buona accessibilità anche nelle biforcazioni.

Accessori		Utilizzo	Rif.
SiroPerio PE1* Diritta, molto sottile		Per il lavaggio e la pulizia radicolare in tasche gengivali profonde	60 44 825
SiroPerio PE2* Curvatura a destra		Per la pulizia radicolare in tasche gengivali profonde nel settore posteriore	60 44 833
SiroPerio PE3* Curvatura a sinistra		Per la pulizia radicolare in tasche gengivali profonde nel settore posteriore	60 44 841
SiroPerio 4 PS* Diritta		Per il rilevamento e la pulizia radicolare in tasche gengivali profonde con PerioScan	61 77 005
SiroPerio PE5* Curvatura a destra		Per la pulizia radicolare in tasche gengivali profonde nel settore posteriore	63 43 078
SiroPerio PE6* Curvatura a sinistra		Per la pulizia radicolare in tasche gengivali profonde nel settore posteriore	63 43 086


Endodonzia

Per il lavaggio dei canali radicolari previa applicazione di ipoclorito di sodio. Le vibrazioni ultrasonore potenziano l'effetto del liquido di lavaggio e ne determinano la penetrazione anche nei capillari.

Accessori		Utilizzo	Rif.
Punta per endodonzia n. 5 solo per SiroSon L, SiroSonic L/TL e PerioSonic		Per il lavaggio dei canali radicolari con NaOCl	60 02 310

Otturazione

Per l'inserimento delicato e sicuro di inlay.

Accessori		Utilizzo	Rif.
Set CEM n. 6L* (1 punta CEM n. 6L, 2 cappucci di contatto per inlay)		Per l'inserimento di inlay in ceramica (ad es. CEREC) con composti tissotropici	18 94 307
Cappuccio di contatto		Per punta CEM n. 6L, 10 pezzi per inlay	18 94 372

Micropreparazione





Punte parzialmente diamantate con una bisellatura marginale di 20° per una preparazione mini invasiva e restauri adesivi in piccole cavità prossimali. Lo spray di raffreddamento viene erogato direttamente nella zona della preparazione. La controangolazione permette un accesso universale a tutti i quadranti con solo due punte per ciascuna misura.

Accessori		Utilizzo	Rif.
SiroPrep M1* Piccola		Mesiale	59 04 276
SiroPrep D1* Piccola		Distale	59 47 309
SiroPrep M2* Standard		Mesiale	59 47 358
SiroPrep D2* Standard		Distale	59 47 366

* Inclusa chiave dinamometrica.


Trattamento radicolare retrogrado

Punte diamantate selettivamente per l'apicectomia retrograda. Per facilitare l'accesso alla zona da preparare, le punte sono angolate di circa 20° (a sinistra o a destra).

Accessori		Utilizzo	Rif.
SiroRetro KR* corta, angolata a destra		Per i quadranti inferiore sinistro e superiore destro	54 57 895
SiroRetro KL* corta, angolata a sinistra		Per i quadranti inferiore destro e superiore sinistro	54 57 887
SiroRetro GR* lunga, angolata a destra		Per i quadranti inferiore sinistro e superiore destro	54 57 911
SiroRetro GL* lunga, angolata a sinistra		Per i quadranti inferiore destro e superiore sinistro	54 57 903

Implantologia

Gestione ottimale del biofilm e pulizia delicata di impianti e restauri, sia in metallo che in ceramica. Grazie al rivestimento in plastica, l'insero per la pulizia permette di operare senza difficoltà sulle superfici sensibili, assicurando così un trattamento ottimale e delicato.

Accessori		Utilizzo	Rif.
SiroImplant IP1 solo per SiroSon L, SiroSonic/L/ TL e PerioSonic		Per la pulizia di impianti e di restauri sia in metallo che in ceramica	63 43 052
Insero IP1 per SiroIm- plant IP1		Contenuto della fornitura: 5 pezzi	63 43 094

Scaling

Ampia gamma di punte per tutte le fasi della rimozione della placca sopragengivale.

Accessori		Utilizzo	Rif.
Punta n. 1L*		Per l'ablazione iniziale, linguale e vestibolare	89 24 250
Punta n. 2L*		Versatile, linguale, vestibolare e prossimale	89 24 268
Punta n. 3L*		Universale bilaterale, subgengivale e interdentale	18 94 455
Set n. 3L* (2 pz.)		cfr. Punta n. 3L	64 12 451
Set n. 3L* (6 pz.)		cfr. Punta n. 3L	65 41 044
Punta n. 4L*		Universale, ideale per superfici dentali sopragengivali e subgengivali nonché per l'area interdentale	18 94 463
Set n. 4L* (2 pz.)		cfr. Punta n. 4L	64 12 469
Set n. 4L* (6 pz.)		cfr. Punta n. 4L	65 41 051

* Inclusa chiave dinamometrica.

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Germania
dentsplysirona.com

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments