

AH Plus®

AH プラス

長期の封鎖性を維持できるレジン系シーラー

製品特長

1. 操作性の向上

シリンジタイプを追加 (AHプラスジェット)。練和の手間を省き、直接根管充填できます。

2. 高い封鎖性


低収縮かつ寸法安定性を有し封鎖性を保つだけでなく、自己接着力を有することにより長期にその封鎖性を維持することができます。



3. すぐれた物性


X線不透過性

X線不透過性は根管充填シーラにとって、最も重要な物性の1つです。AHプラスは自社従来品と比べて、有意に不透過性が高くなります。

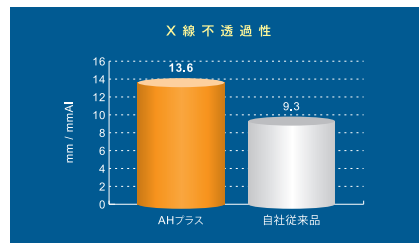

すぐれた寸法安定性

形状を変えず寸法が安定していることは、長期の封鎖性の維持に寄与します。自社従来品0.63ww (%)に対して、AHプラスは0.31ww (%)と溶解率が低く、収縮に関しても1.76ΔV (%)と収縮度を低く保ちます。

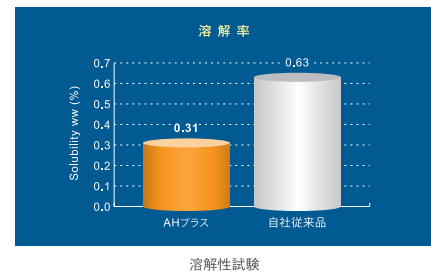

製品仕様

<p>AHプラス チューブ</p>	<p>セット</p>	<p>製品番号: 606.20.110</p> <p>定価: ¥9,800</p> <p>ベース(4mL) 1本、キャタリスト(4mL) 1本、ミキシングパッド 1冊</p>
<p>AHプラス ジェット</p>	<p>スターターセット</p>	<p>製品番号: 606.20.115</p> <p>定価: ¥10,000</p> <p>シリンジ(15g)、ミキシングチップ(インターオーラルチップ付き) 20個、ミキシングパッド 1冊</p>
<p>単品</p>		<p>シリンジリフィル 製品番号: 606.20.118 定価: ¥14,500 シリンジ(15g)×2本</p> <p>ミキシングチップ 製品番号: 606.20.116 定価: ¥5,000 ミキシングチップ(インターオーラルチップ付き) 40個</p>

販売名: AHプラス 一般的名称: 歯科用根管充填シーラ 医療機器認証番号: 220AABZX00327000 クラス分類: II (管理)

表示価格は、2020年6月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。*仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用途は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

カスタマーサービス

受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

<https://www.dentsplysirona.com>