

Small Body
Great Performance



X-Smart IQ – プロベックス IQ スターターキット


製品番号	製品名	価格
B00PPIQSTAKIT	プロベックス IQ ベーシックスターターキット	¥89,000

- キット内容**
- ・プロベックス IQ 根管長測定器
 - ・プロベックス IQ 測定ケーブル
 - ・X-Smart IQ 測定ケーブル
 - ・プロベックス IQ リップクリップ 5個入り
 - ・プロベックス IQ 外部デスター
 - ・プロベックス IQ ファイルクリップ 2個入り
 - ・プロベックス IQ ACアダプタープラグ
 - ・プロベックス IQ 使い捨て バリアスリーブ
 - ・Endo IQ iPad スタンド
- 製品仕様**
- 寸法 長さ：75mm、幅：46mm、高さ：20mm
重量 80g
充電時間（フル充電）：6時間

製品番号	製品名	価格
B00PPIQXIQKIT	X-Smart IQ & プロベックス IQ ベーシックスターターキット	¥319,000

- ・X-Smart IQ ハンドピースセット
- ・Endo IQ iPad スタンド
- ・プロベックス IQ 根管長測定器

根管治療の概要

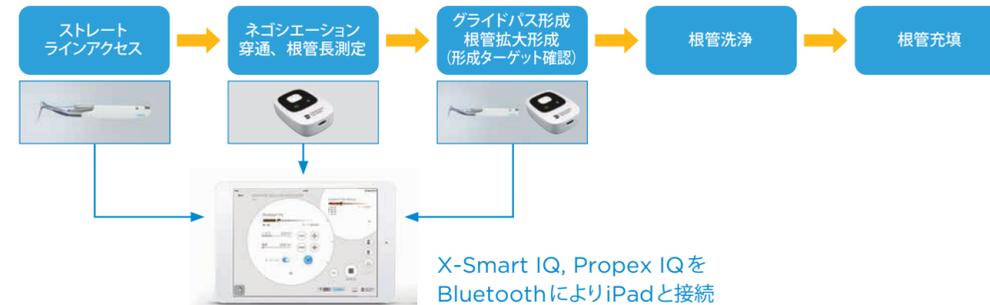

関連製品

製品名	用途	内容	価格
WaveOne® Gold Glider	ガイドパス (予備拡大形成) 用 NiTi ファイル	長さ：21 / 25 / 31mm サイズ：#15 / O2 - 06 各3本入	(単品) ¥6,430 (3シートパック) ¥19,290
ProGlider®	ガイドパス (予備拡大形成) 用 NiTi ファイル	長さ：21 / 25 / 31mm サイズ：#16 / O2 - 08.5 各3本入	¥6,200
WaveOne® Gold	根管拡大形成用 NiTi ファイル	長さ：21 / 25 / 31mm サイズ：スモール/プライマリー/ミディアム/ラージ 各3本入 (アソートは4本入)	(単品) ¥6,430 (アソート) ¥8,690 (3シートパック) ¥19,290
ProTaper Gold®	根管拡大形成用 NiTi ファイル	長さ：21 / 25 / 31mm (SXは19mm) サイズ：SX / S1 / S2 / F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / アソート 各6本入 (アソートはSX ~ F3 各1本入)	¥8,750
ProtaperNext®	根管拡大形成用 NiTi ファイル	長さ：21 / 25 / 31mm サイズ：X1 / X2 / X3 / X4 / X5 / アソート 各6本入 (アソートはX1 / X2 / X3 各2本入)	¥12,600
ProTaper Retreatment	根管充填材除去用 NiTi ファイル	長さ：D1 16mm / D2 18mm / D3 22mm / アソート 各6本入 (アソートはD1 / D2 / D3 各2本入)	¥8,750

販売名：X-Smart IQ 一般的名称：歯科用根管拡大装置 医療機器認証番号：229AGBZX00094000 クラス分類：Ⅱ (管理・特管)
販売名：X-Smart プラス 一般的名称：歯科用根管拡大装置 医療機器認証番号：224AKBZX00131000 クラス分類：Ⅱ (管理・特管)
販売名：プロベックス IQ 一般的名称：歯科用根管長測定器 医療機器認証番号：301AGBZX00016000 クラス分類：Ⅱ (管理・特管)
販売名：プログライダー 一般的名称：電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号：226AGBZX00011000 クラス分類：Ⅱ (管理)
販売名：ウェーブワン ゴールド 一般的名称：電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号：227AGBZX00033000 クラス分類：Ⅱ (管理)
販売名：プロテーパー ゴールド 一般的名称：電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号：228AGBZX00081000 クラス分類：Ⅱ (管理)
販売名：プロテーパー・ネクスト 一般的名称：電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号：225AKBZX00158000 クラス分類：Ⅱ (管理)
販売名：メルファープロテーパー 一般的名称：電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号：22200BZX00049000 クラス分類：Ⅱ (管理)

表示価格は、2020年3月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 *仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元
デンツプライシロナ株式会社
本社 / 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル
カスタマーサービス
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)
☎ 0120-789-123 FAX : 0120-120-659
<https://www.dentsplysirona.com>



MAILLEFER

DENTSPLY SIRONA



X-Smart IQ® ハンドピース & Propex IQ® 根管長測定器

Increase your IQ

+
WE
KNOW
ENDO.



X-Smart IQ® ハンドピース

手指に馴染みやすいバランスのとれた
スリムなコードレスタイプ



術野を確保し易い コントラアングル

360°ポジションが変えられる
ミニチュアヘッド



連続回転運動、レシプロケーティングモーション (反復回転運動) 両方の使用が可能

反復回転モード

ほとんどの根管拡大形成が1本で
できるWaveOne Gold専用の
レシプロケーティングモーション
を搭載

WaveOne® Gold



連続回転

ProTaper Next、ProTaper
Goldなど正回転で使用する
NiTiファイルに対応

ProTaper Next®



ProTaper Gold™



バッテリー残量が確認しやすく
充電しながらの使用も可能

16 TREATMENT
AUTONOMY



Endo IQ® アプリ

デジタルエンドソリューション



トルク表示

リアルタイムでトルク
グラフを表示

REAL-TIME
TORQUE
MONITORING



トルクリバース

連続回転、反復回転モードでトルクリバースします。

ハンドピースにかかっているトルクが最大規定トルクより大
きいと、トルクリバース機能によってX-Smart IQハンドピー
スが自動的に反転します。

CONTINUOUS AND
RECIPROCATING
MOTION



使用可能なiPad:

iPad mini 2-4,
iPad,
iPad Pro 10.5, 12.9



CUSTOMIZABLE
FILE LIBRARY

ファイルカスタマイズ

・プリセットプ
ログラムの使
用、または
ファイル使用
条件の設定・
登録が可能



TRANSFER
TO YOUR
PATIENT
FILE

治療記録の保存

・患者様ごとの治療記録・保存 (患
歯部位、作業長、最終形成用ファ
イル)
・治療記録のPDF出力、転送が可
能



CAPTURE
TREATMENT
NOTES

患者説明ツール

根管治療の流れを患者
様に説明



Propex IQ® 根管長測定器

X-Smart IQにPropex IQを接続して、根管長測定をしながら
拡大形成が可能。



CONNECT
WIRELESSLY

Endo IQ アプリで作業長をカスタマイズ

・アピカルリバース機能:

作業長の基準点に達すると、アピカルリバースによって
X-Smart IQハンドピースが自動的に反転します。

形成中にストッパーの位置ズレが起きても、アピカルリバースによって
ハンドピースが自動的に反転するため、過剰な拡大形成のリスク軽減に
つながります。

・形成ターゲットの設定機能:

デフォルトの作業長基準点を状況に合わせてカスタマイズ



EASY &
RELIABLE

操作が簡単

・ビジュアルでファイルの進行状況を確認。
・様々な*イリゲーションソリューションに対応。

・EndoIQアプリには、ファイル使用手順、回転数、
及びトルク数がプリセット。
手動設定の手間がなく、治療時間の短縮が可能。



*NaCl, NaOCl, EDTA 使用テスト済み



ULTRA
LIGHT &
PORTABLE

軽量

重さ80グラム。コンパクトでポータブル。付属のクランプで、ポケットに取り付け可能。



LONG
BATTERY LIFE

その他特長

・フル充電後、5.5時間の連続使用が可能 (X-Smart IQ と、Endo IQ 接続時)

・Endo IQ Appでファームウェアを適宜更新。最新版のソフトウェアを常に使用可能。



UPGRADE
VIA APP

・ハンドピースに繋げなくても使用可能