



アトランティス ウェブ オーダー

ユーザーガイド

ATLANTIS™

目次

このマニュアルはアトランティス ウェブ
オーダーを使用するために必要な情報
を記載したユーザーガイドです。

はじめに	4
オーダー入力	5
オーダーページ1 - 「オーバービュー」	6
オーダーページ2 - 「アイテム」	8
オーダーページ3 - 「パラレルリズム」	11
オーダーページ4 - 「請求および発送」	12
オーダーチケット	13
デザイン承認のための確認	14
レイター オーダー	15
アバットメントスクリーン	16
再スキャン不要	16
マイアカウント	19
詳細	21
デザイン設定	22
詳細の追加	23
新規設定入力	24
ヘルプ	25

無断複写・転載を禁じます。すべての商標、
会社名、および製品名は、それぞれ各社の
所有物です。

®および™の記載のない場合でもデンツブラ
イインプラントが自社の商標権を放棄するこ
とは一切ありません。

はじめに

トップページ

ウェブブラウザに www.atlantisweborder.com を入力してください。

ドロップダウンメニューから言語を選択してください。

登録ユーザーは、電子メール アドレスとパスワードを入力して、「**続行**」 ボタンを押してログインしてください。

ATLANTIS™
WebOrder

アトランティス™ ウェブ オーダーへようこそ

既存のアカウントがある場合は、電子メール アドレスとパスワードを入力して「続行」ボタンを押して開始します。

ログインしてオーダーを入力

電子メール アドレス:

パスワード:

パスワードを記憶する:

続行

パスワードをお忘れですか?

言語の選択:
Japanese ▼

サポートが必要な場合は、デンツプラインプラントにお問い合わせください。
デンツプラインプラント プライバシーポリシーおよび利用規約

オーダー入力

新規オーダー入力はオーダーページから入力します。「**新規オーダー入力 >>**」をクリックしてオーダーを開始してください。各項目ごとに、オーダー過程で案内が表示されます。

- 「**保存してホーム画面へ**」をクリックすると、いつでも入力内容を保存し、適宜オーダー入力を完了させて、デンツプライインプラントにオーダーを確定することが可能です。
- 「**オーダー名**」をクリックして、直接オーダーを行ってください。
- 各項目の見出しをクリックして、オーダーの並び替えが可能です。
- ステータス 欄のステータスが発送済の場合は、ステータスをクリックすると、発送の詳細をご覧いただけます。
- 「**到着日**」は、症例のお受け取り予定日になります。

ホーム画面

オーダーリスト

オーダー名	追加タイプ	歯科医院名 / 電話番号 / (患者名任意)	ユニット	オーダー入力日	スキャン画像の受理	発送予定日	ステータス	症例番号	アトランティス™ アブタメントコアファイル	操作
education order 03	アブタメント		3	2014-09-03	2014-09-03	2014-11-07	デザイン決定の保留	10598685		
education order 04	アブタメント		3	2014-09-03	2014-09-03	2014-11-07	デザイン決定の保留	10598678		
education order 02	アブタメント		1	2014-09-03	2014-09-03	2014-11-11	デザイン決定の保留	10598608		
education order 01	アブタメント		5	2014-09-03	2014-09-03	2014-11-11	デザイン決定の保留	10598584		
集計レポートページ: 4			12							

オーダーページ1 - 「オーバービュー」

「オーバービュー」に最初の症例情報を入力します。

「*」の付いている項目とインプラントの埋入部位の指定は必須項目です。

「デザイン確認有り - イメージ送付」

デザイン作成前に、アバットメント イメージ画像を受信して、デザインの決定をするためには、このオプションを選択してください。

「モデルタイプ」を選択してください。

該当する歯の番号のチェックボックスをクリックして、インプラントの埋入位置を選択してください。

注意：モデルタイプによって、ご利用いただけるデザインオプションが異なります。

「モデルタイプ」が「石膏模型 - 可撤式ガム模型なし」の場合、エマージェンス プロファイル 径 オプション は、「ノー ティッシュ ディスプレースメント」のみがご選択可能です。

「石膏模型 - 軟組織部なし」の場合、「粘膜縁下深さで設定」のマー ジン ポジションはご選択いただけません。

続けるには「次へ」を、保存して後で戻って注文を完了するには「保存してホーム画面へ」をクリックしてください。

「デザイン確認有り - イメージ送付」を選択されると、「アバットメント イメージ画像 送付先アドレス」欄が入力必須項目になります。アドレスは、アバットメントのデザイン過程で、デザインに関するご質問等がある場合の連絡先となります。

アカウントユーザーは、症例イメージを2Dまたは3Dで共有していただけます。1番目の欄に入力されたEメールの非アカウントユーザーは症例の3Dイメージにアクセスできます。2番目の欄に入力されたEメールの非アカウントユーザーは、症例の2Dイメージのみが受信できます。

アバットメントデザインにリクエストや変更を追加する場合は、アトランティス ウェブ オーダー内でアカウントユーザーによって入力される必要があります。

DENTSPLY Implants
ATLANTIS™
WebOrder

Log out | Contact us
Japanese

オーダー | マイアカウント | デザインプロフィール | 詳細 | ヘルプ

オーバービュー | アイテム | パラレルリズム | 請求および発送

オーダー名および歯科医院
オーダー名*: Test
プロフィールの選択: 初期設定
歯科医院名 / 電話番号 / (患者名:任意):
歯科医院の郵便番号*(半角)*: 1060041

画像
 日本未対応
 デザイン確認有り - イメージ送付 (アバットメント デザインのイメージが承認されるまで症例のオーダーが保留になります。)
 アバットメント イメージ画像 送付先アドレス、3D画像を含む (ある場合)* (電子メール アドレスが複数ある場合はコンマで区切る)
 xxxxxx@dentsply.com
 アバットメント イメージ画像 送付先アドレス - 2D画像のみ:

モデル
 DIH スキャンをリクエストする
 石膏模型 - 可撤式ガム模型あり
 石膏模型 - 可撤式ガム模型なし
 石膏模型 - 軟組織部なし
 スキャンをアトランティスに送信

症例のオーバービュー
 インプラントの位置を指定してください。
 18 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27 28
 |
 48 47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 37 38
 |

アバットメント デザインのイメージは、オーダー確定された後でも共有していただくことも可能です。そのためには、オーダーリストから該当する症例のオーダー名をクリックして、オーダーを開いてください。「**イメージを送信**」セクションにある「**情報を編集 >>**」をクリックしてください。

オーダーデータ& ご希望のデザイン設定
 オーダー日: 2014-11-10

歯	インプラント タイプ	補綴タイプ	アバットメント材質	エマージェンス プロファイル 径	エマージェンス プロファイル 形状	マージンポジション	類削側	遠心	近心	舌側	シャンファー	パラレルアバットメント
15	DENTSPLY Implants OsseoSpeed 3.5, 4.0 - Aqua	セント固 定式	ジルコニア - シェード20	フル アナトミカル	コンベックス	可能な限り接合部近くに設定	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	P1

特殊手順
 This is a test case.
 Please do not do milling.

イメージ送付
 デザイン確認有り - イメージ送付 (アバットメント デザインのイメージが承認されるまで症例のオーダーが保留になります。)
 イメージの電子メール: xxxxxx@dentsply.com [情報を編集 >>](#)

「**情報を編集 >>**」がクリックされると、ページが拡大されます。症例イメージを送信して情報を共有されたいEメールアドレスを入力してください。

2Dイメージのみを送信されたい場合は、「**3D画像を含める**」のチェックボックスからチェックを外して、「**アドレスを追加し、すぐに症例 イメージ送付 >>**」をクリックしてください。

さらに、再送信の簡便化のために、「**オーバービュー**」ページでのオーダー入力過程でアドレスを事前入力すると、情報を共有したいEメールアドレス一覧が、このリンクの下にチェックボックスと共に表示されます。

オーダー入力過程で間違ったEメールアドレスにアクセス権を与えた場合、Eメールアドレスを確認して削除することができます。これで先に送信されたEメール内のアクセスリンクが無効になります。

イメージ送付
 デザイン確認有り - イメージ送付 (アバットメント デザインのイメージが承認されるまで症例のオーダーが保留になります。) [デザイン決定済み]
 イメージの電子メール: xxxxxx@dentsply.com [情報を編集 >>](#)

xxxxxx@dentsply.com 3D画像を含める

[再送信](#) [削除](#)

3Dを共有しますか? [アドレスを追加し、すぐに症例イメージを送付](#) [キャンセル](#)

オーダーページ2 - 「アイテム」

「**アイテム**」を使用して、治療部位ごとにインプラントとアバットメントの詳細を決定します。

「**インプラントタイプ**」から、該当部位に対するインプラントの種類とサイズを選択して下さい。

DENTSPLY Implants ATLANTIS WebOrder Log out | Contact us Japanese

オーダー | マイアカウント | デザインプロフィール | 詳細 | ヘルプ

オーバービュー | **アイテム** | パラレルリズム | 請求および発送

オーダーデータ& ご希望のデザイン設定
 *追加料金の適用
 デザイン詳細を表示

歯	インプラント タイプ	補綴タイプ	材質	追加ク	アトランティス デュアル	マージンデザイン	リブ	リブ	リブ	リブ
12	DENTSPLY Implants OsseoSpeed 3.5, 4.0 - Aqua	セント固 定式	チタン	<input type="checkbox"/>						

エマージェンス プロファイル 形状: マージンポジション: 粘着降下溝まで設定

1.0 0.75 0.75 0.5

追加するインプラントタイプ: ANKYLOS C/X, ASTRA TECH Implant System, OsseoSpeed 3.0 - Yellow, OsseoSpeed 3.5, 4.0 - Aqua, OsseoSpeed 4.0 - Blue (Previous), OsseoSpeed 4.5, 5.0 - Lilac, OsseoSpeed TX 3.0 - Yellow, OsseoSpeed TX 3.5, 4.0 - Aqua, OsseoSpeed TX 4.5, 5.0 - Lilac, OsseoSpeed TX Profile 4.5, 5.0 (for sloped ridges)

保存してホーム画面へ 戻る 次へ

次に、「補綴タイプ」で、セメント固定式またはスクリュー固定式のいずれかを選択してください。
 ⓘをクリックすると、補綴オプションに関する追加情報が記載されたポップアップイメージが現れます。
 ドロップダウンメニューから該当部位にご使用になりたい材質を選択してください。


注意：選択されたインプラントと補綴タイプにご利用可能な材質のみが表示されます。

デザインされたアトランティス アバットメントの複製をご希望の場合、材質選択と共に「デュプリケートアバットメント」ボックスにチェックを追加してください。

ここで行われる変更は、初期設定の詳細を変更するものではありません。



アイテムページは、「デザイン設定表示」に初期設定されています。
 該当部位に対する詳細をご覧にならない場合は、「デザイン設定非表示」をクリックしてください。

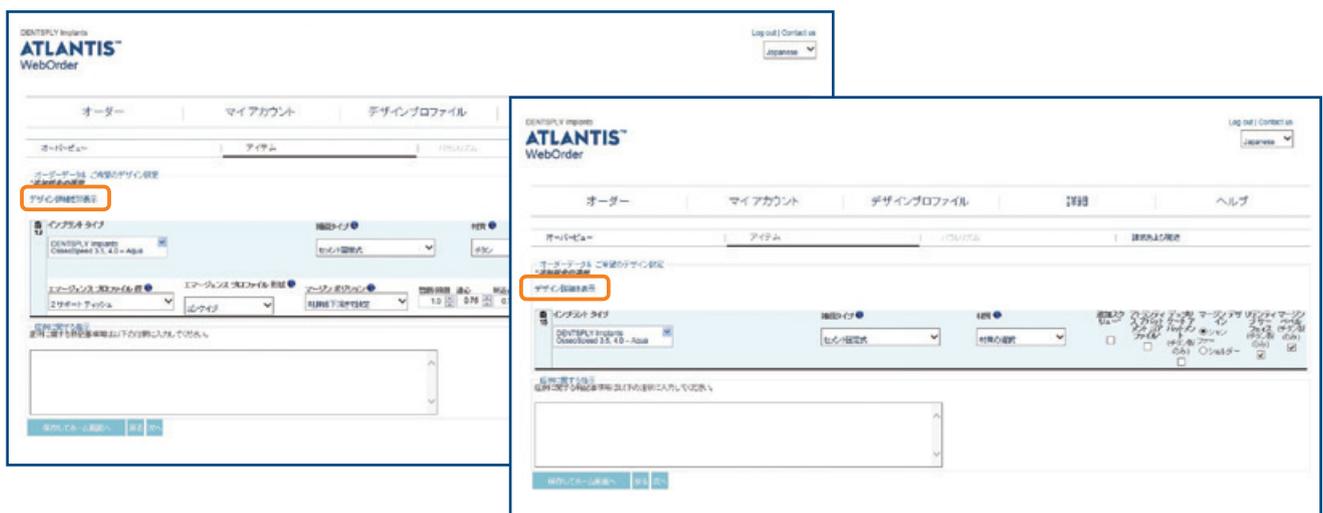

続けるには「次へ」を、進捗状況を保存して後からオーダーを再開してオーダーするには、「保存してホーム画面へ」をクリックしてください。

オーダーページ3 - 「パラレルリズム」

「パラレルリズム」を使用して、互いに平行にしたいアバットメントを選択してチェックボックスで選択します。平行に設定されたパラレルアバットメントは同一色でグループ化されます。

DENTSPLY Implants
ATLANTIS™
WebOrder

Log out | Contact us
Japanese

オーダー | マイアカウント | デザインプロファイル | 詳細 | ヘルプ

オーバービュー | アイテム | **パラレルリズム** | 請求および発送

パラレルアバットメント

これらのユニットを平行にしますか？ いいえ はい

18 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 37 38

保存してホーム画面へ 戻る 次へ

DENTSPLY Implants
ATLANTIS™
WebOrder

Log out | Contact us
Japanese

オーダー | マイアカウント | デザインプロファイル | 詳細 | ヘルプ

オーバービュー | アイテム | **パラレルリズム** | 請求および発送

パラレルアバットメント

これらのユニットを平行にしますか？ いいえ はい

18 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 37 38

最終補綴物を連結固定にする場合、アバットメントデザインを平行にする必要があります。以下から、デザインを平行にするアバットメントのグループを選択してください。平行なユニットに対して、同じ「P」列を選択し、同じ色にする必要があります。

アバットメント	P1	P2	P3
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

アバットメント P4

35	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

以下の例では、アバットメント11と21が平行です。アバットメント12は11、21、22に対して平行ではありません。アバットメント22は12、11、21に対して平行ではありません。

Abutment	P1	P2	P3	P4
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

保存してホーム画面へ 戻る 次へ

続けるには「次へ」をクリックしてください。

進捗状況を保存した後でウェブオーダーを再開してオーダーを完了するには「保存してホーム画面へ」をクリックしてください。

オーダーページ4 - 「請求および発送」

「請求および発送」は、事前に入力された詳細情報を示します。

DENTSPLY Implants
ATLANTIS™
WebOrder

Log out | Contact us
Japanese

オーダー | マイアカウント | デザインプロフィール | 詳細 | ヘルプ

オーバービュー | アイテム | パラメリズム | **請求および発送**

オーダーを確定する前に、発送先および請求先の情報がすべて正しいことを確認してください。

支払い方法 請求書 発注番号 (オプション): <input type="text"/>	発送の詳細 デンツプライインプラントによる最善の選択 終業時間
請求先 JPG9910 デンツプライIH株式会社 東京都港区麻布台1-8-10 麻布信成ビル5階 港区 106-0041 Japan 電話番号: xxxxxxxxxxxx Fax: xxxxxxxxxxxx	送付先 リストから住所を選択、 または新規住所を指定: DENTSPLY IH K.K. JPG9910 001 1 施設名*: DENTSPLY IH K.K. 住所1*: Azabu-Kaisei Building 6F, 1-8-10 住所2 (オプション): Azabudai Minato-ku Tokyo 住所3 (オプション): 市町村名*: Minato-ku 郵便番号: 106-0041 国*: Japan 電話番号 (オプション): xxxxxxxxxxxx Fax (オプション):

戻る | **オーダー確定**

完了して、オーダーをデンツプライインプラントに送信するには、「**オーダー確定**」ボタンをクリックしてください。

オーダーチケット

アトランティス ウェブ オーダーでオーダーの確定を行うと、オーダー内容の要約を含む「**オーダーチケット**」が表示されます。

デンツプライインプラントがオーダーチケットを受信すると、オーダーチケットによって症例が特定されます。

ページの最下部にある「**オーダーチケットを印刷**」をクリックして、お客様のオーダーチケットを印刷してください。アトランティス アバットメントオーダーに関して、お客様番号、アカウント名、オーダー設定、請求先等がオーダーチケットに表示されます。

デンツプライインプラントにご連絡いただく際に、この番号をお伝えいただくと、よりスムーズなサポートが可能となります。

ガムシリコン付き石膏模型と一緒に、必要に応じて対合模型（バイトインデックス必須）またはワックスアップ（最終歯冠形態）と共にオーダーチケットをデンツプライインプラントにお送りいただく必要があります。

「**オーダー情報を表示**」をクリックして、この症例のすべての入力項目を確認してください。

アトランティス ウェブ オーダーに入力されたあらゆるオーダーの状況をご確認いただくためには、「**オーダーリスト**」リンクをクリックしてオーダーページに戻っていただく必要があります。



Japanese ▼



AWO000 XXXX-XXXX

オーダー名: XXXXXXXX
製品タイプ: アトランティス アバットメント

プロフィール名:
歯科医院名 / 電話番号 / (患者名:任意): XXXX 歯科医院

歯科医院の郵便番号*(半角): XXXXXXXX
ライセンス:
電話番号:

歯	インプラントタイプ	補綴タイプ	FLO™	アバットメント材質	パラレルアバットメント
12	DENTSPLY Implants OsseoSpeed TX 3.5, 4.0 – Aqua	セメント固定式	C-02	ジルコニア - シェード 20	P1
11	DENTSPLY Implants OsseoSpeed TX 3.5, 4.0 – Aqua	セメント固定式	C-02	ジルコニア - シェード 20	P1
21	DENTSPLY Implants OsseoSpeed TX 3.5, 4.0 – Aqua	セメント固定式	C-02	ジルコニア - シェード 20	P1

スキャナのタイプ: アトランティス™ スキャン アップロード - 3Shape を使用した DIH スキャン

XXXXXX
有限会社 XXXXXXXX
東京都 XXXXXXXX

Japan
電話番号:
Fax:

[この価格リストを印刷](#) | [オーダー情報を表示](#) | [オーダーリスト](#) | www.dentsplyimplants.com

デザイン承認のための確認

The screenshot displays the Atlantis WebOrder interface. At the top, it shows the order number and a confirmation message: "オーダー# xxxxxx (デザイン決定の保留)". Below this, there are sections for order details, a 3D model of a dental arch, and a confirmation form. The confirmation form includes a section titled "デザイン決定" (Design Decision) with a red box around the "送信" (Send) button. The text in the red box reads: "送信: デザイン承認済みの状態で送信して、修正・変更等を行う場合は、必ずコメントを入力してください。デザイン承認済みの状態で送信すると、製造工程に進む事になります。必ずコメントを入力してください。" (Send: Send with design approval status. If you need to make corrections or changes, please enter a comment. Once sent with approval status, the production process will proceed. Please enter a comment.)

オーダー入力中に「デザイン確認有り - イメージ送付」を選択すると、デザイン承認のためにアバットメントデザインのイメージのご確認が可能になります。アバットメントデザインのイメージは、アトランティス ウェブ オーダーアカウントに掲載されます。

さらに変更があれば、コメントボックスに指示を入力して「送信」をクリックしてください。修正されたアバットメントデザインのイメージの準備ができましたら、Eメールにて通知いたします。デザインをご確認いただき、製造工程に進む事にご納得いただけましたら、「デザイン決定」にチェックをして、「送信」をクリックしてください。

レイター オーダー

オーダー確定済のアバットメント デザインは、デジタルデータとして保存されているため、最初のオーダーが発送された後に、同じデザインのアバットメント、またはデザインに変更を加えたアバットメント、またはアバットメントスクリューをオーダーして頂くことが可能です。

オーダーページからオーダー名を参照、もしくはステータスが「**発送済み**」の症例を検索してください。操作欄の「**レイター オーダー**」をクリックして開始してください。

注意：新規のオーダー番号が割り振られます。

The screenshot shows the ATLANTIS WebOrder interface. At the top, there is a navigation bar with 'オーダー' (Orders), 'マイアカウント' (My Account), 'デザインプロフィール' (Design Profile), '詳細' (Details), and 'ヘルプ' (Help). Below this, there is a search section with a dropdown menu set to '高度な検索' (Advanced Search) and a status filter set to '発送済み' (Shipped). A table below the search section lists orders with columns for 'オーダー名' (Order Name), '製品タイプ' (Product Type), '歯科医院名 / 電話番号 / (患者名任意)' (Dental Clinic Name / Phone Number / (Patient Name Optional)), 'ユニット' (Units), 'オーダー入力日' (Order Entry Date), 'スキャン画像の受信' (Scan Image Received), '発送予定日' (Shipping Date), 'ステータス' (Status), '症例番号' (Case Number), and 'アトランティス™ アバットメントコアファイル' (Atlantis™ Abutment Core File). A '操作' (Action) column contains 'レイター オーダー' (Later Order) and 'レイター オーダー' (Later Order) links, which are highlighted with a red box.

レイター オーダー ページには2つの選択肢があります。

The screenshot shows the 'レイター オーダー' (Later Order) page. It features a navigation bar with 'オーダー' (Orders), 'マイアカウント' (My Account), 'デザインプロフィール' (Design Profile), '詳細' (Details), and 'ヘルプ' (Help). Below the navigation bar, there is a section titled 'レイター オーダー' (Later Order) with the instruction '以下のいずれかのオプションを選択してください:' (Please select one of the following options:). There are two main options: 'スクリュー' (Screw) and 'アバットメント' (Abutment). Under 'スクリュー', there is a sub-section 'アバットメントスクリュー' (Abutment Screw) with a list of bullet points: 'オーダーした元のアバットメントに別売スクリューを追加オーダーします' (Add separate screws to the abutment you ordered) and '編集可能な発送情報' (Editable shipping information). Under 'アバットメント', there is a sub-section '再スキャン不要' (No Rescan Required) with a list of bullet points: '複製 - オーダーした元のアバットメントからの変更なし' (Replication - No changes from the original abutment you ordered), '材質タイプの変更、または最低限のデザインの変更' (Change of material type, or minimum design change), and '編集可能な発送情報' (Editable shipping information).

アバットメントスクリー

アバットメントをオーダーされなくても、アバットメントスクリーのみ単体でオーダーしていただくことができます。「アバットメントスクリー」リンクをクリックして、「オーバービュー」ページを開いてください。

担当者情報を確認して、アバットメントスクリーを単体で追加オーダーされたい歯番号とインプラントを選択してください。

注意：アバットメントスクリーが必要ない歯番号とインプラントは、チェックマークをはずしてください。

「オーダー確定」ボタンをクリックしてオーダーを確認されるか、「次へ」をクリックして、請求および発送情報を修正してください。

DENTSPLY Implants
ATLANTIS™
WebOrder

Log out | Contact us
Japanese

オーダー | マイ アカウント | デザインプロフィール | 詳細 | ヘルプ

オーバービュー | 請求および発送

オーダーに基づく:

オーダー名および歯科医院
オーダー名: Test 歯科医院の郵便番号*: 1060041

症例のオーバービュー
別売スクリーをオーダーするインプラントを指定してください

7 - DENTSPLY Implants OsseoSpeed 3.0 - Yellow ゴールド シェード
 29 - DENTSPLY Implants OsseoSpeed 3.0 - Yellow チタン

キャンセル | オーダー確定 | 次へ

再スキャン不要

オーダー確定済のアバットメント デザインと同じデザインのアバットメント、または材質の変更や、最小限のデザインの変更を加えたアバットメントをオーダーする場合のレイター オーダーには、「再スキャン不要」をクリックしてください。

オーダーページ 1 - 「オーバービュー」は、オリジナルの症例番号とオリジナルの症例のデータをすべてを表示します。グレー表示された欄以外のデータは変更することができます。

DENTSPLY Implants
ATLANTIS™
WebOrder

Log out | Contact us
Japanese

オーダー | マイ アカウント | デザインプロフィール | 詳細 | ヘルプ

オーバービュー | アイテム | パラレリズム | 請求および発送

オーダー名および歯科医院
オーダー名: Test 歯科医院の郵便番号*: 1060041

プロフィールの選択: 初期設定 歯科医院名 / 電話番号 / (患者名:任意):

画像
 日本未対応
 デザイン確認有り - イメージ送付 (アバットメント デザインのイメージが承認されるまで症例のオーダーが保留になります。)
アバットメント イメージ画像 送付先アドレス、3D画像を含む (ある場合)* (電子メール アドレスが複数ある場合はコマで区切る)
xxxxxx@dentsply.com
アバットメント イメージ画像 送付先アドレス - 2D画像のみ:

モデル

症例のオーバービュー
インプラントの位置を指定してください。


オーダーページ2 - 「アイテム」は、オリジナルの症例のデータをすべて表示します。

すべてのデータはデザインの詳細の編集が可能ですが、症例の再スキャンが必要になる為、インプラントタイプの編集は除きます。

注意：デジタルデータとして、最初のオーダー時に保存されたオリジナルのデータをご覧になりたい場合は、「設定の初期化」をクリックしてください。

指示欄に再作製症例に関する新規のコメントを追加することができます。

オリジナル症例のコメントが前回作製症例に関する指示欄で読み取り専用としてご確認いただけます。

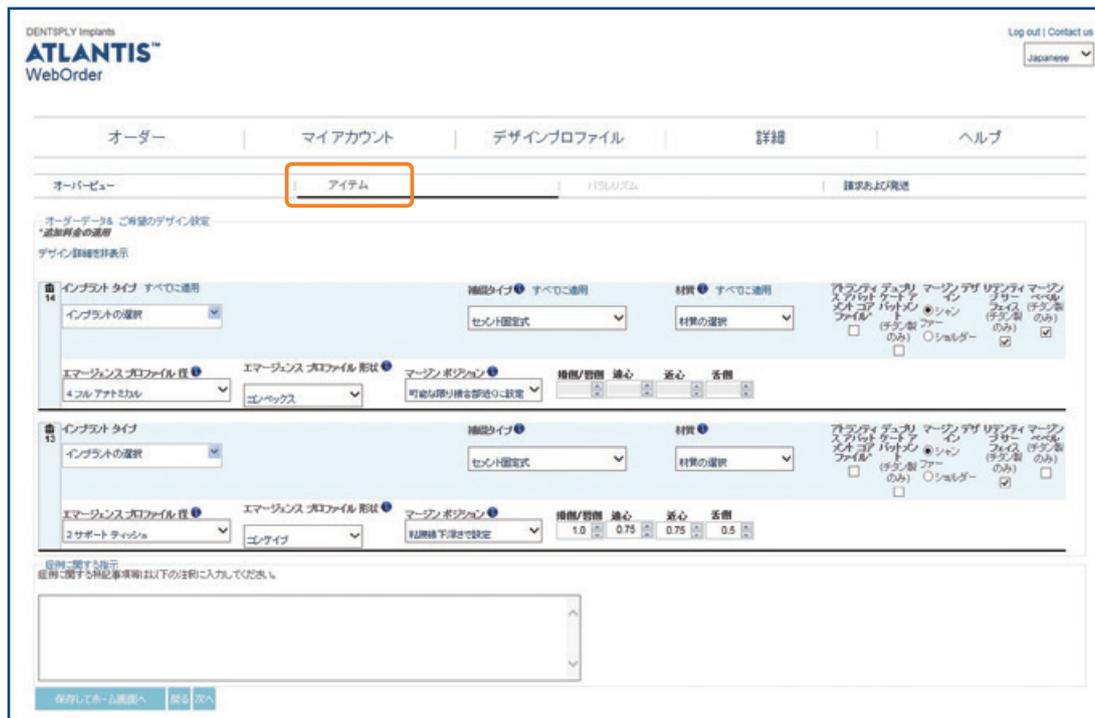

オーダーページ3 - 「パラレルリズム」

「オーバービュー」ページ内の「症例のオーバービュー」において、保存されたオリジナルのデータと同じユニットがすべて選択されている状態でなければ、「パラレルリズム」のページは表示されても、ユニットをパラレルに変更することはできません。



オーダーページ4 - 「請求および発送」は、オリジナルのオーダーの際に入力された情報をそのまま示しています。確定される前に、すべての情報を再度確認してください。すべての欄は編集可能です。

DENTSPLY Implants
ATLANTIS
WebOrder

Log out | Contact us
Japanese

オーダー | マイアカウント | デザインプロフィール | 詳細 | ヘルプ

オーバービュー | アイテム | パラメリズム | **請求および発送**

オーダーを確定する前に、発送先および請求先の情報がすべて正しいことを確認してください。

支払い方法
請求書
発注番号 (オプション):

請求先
JPG9910
デンツプライIH株式会社
東京都港区麻布台1-8-10
麻布台5Cビル5階
港区 106-0041
Japan
電話番号: XXXXXXXXXXXX
Fax: XXXXXXXXXXXX

発送の詳細
デンツプライインプラントによる最善の選択 納期時間

発送先
リストから住所を選択。
または新規住所を指定:
DENTSPLY IH K.K.

JPG9910 | 001 | 1

商品名*: DENTSPLY IH K.K.

住所1*: Azabu-Kasai Building 6F, 1-8-10

住所2 (オプション): Azabudai Minato-ku Tokyo

住所3 (オプション):

市町村名*: Minato-ku

郵便番号: 106-0041

国*: Japan

電話番号 (オプション): xxxxxxxxxxxx

Fax (オプション):

戻る | オーダー確定

マイアカウント

マイアカウント ページで、マイアカウントに登録されているアカウントユーザーのIDおよびパスワードでログインしたアカウントマネージャーは、「情報を編集 >>」リンクをクリックして、アカウント情報を編集することができ、「新規ユーザーの追加 >>」をクリックして、新規ユーザーを追加することができます。

The screenshot shows the 'My Account' page with the following sections:

- マイアカウント** (My Account) - highlighted with an orange box in the navigation menu.
- 詳細** (Details) - includes fields for name, email address, phone number, and time zone.
- 情報を変更 >>** (Edit Information >>) - highlighted with an orange box.
- アカウントのステータス** (Account Status) - includes a table of users.
- アカウントユーザー** (Account Users) - contains a table with columns: ユーザー (User), 電子メールアドレス (Email Address), ステータス (Status), and 消去 (Delete).
- 新規ユーザーの追加 >>** (Add New User >>) - highlighted with an orange box.

ユーザー	電子メールアドレス	ステータス	消去
xxxxxx	xxxxxx@dentaply.com	アカウントマネージャー	
xxxxxx	xxxxxx@dentaply.com	アカウントマネージャー	X

必要に応じて、アカウント情報を編集し、「保存」ボタンをクリックして、マイアカウントページに戻ってください。

「イメージをEメールにて送付」項目から、Eメールで通知を受けたいイメージについて、ご希望をお選びください。

- なし：Eメールでのイメージの送付はなし（ユーザーが入力する症例である場合も含む）
- このユーザーが入力したオーダーのみ：マイアカウントに記載されているユーザーが入力した症例のイメージのみを、Eメールで送付
- 入力されたすべてのオーダー：どのユーザーが症例を入力したかに関わらず、全てのイメージをEメールで送付

The screenshot shows the 'Edit My Account' page with the following sections:

- マイアカウントの編集** (Edit My Account) - highlighted with an orange box in the navigation menu.
- ユーザー情報 (アトランティス™ ウェブ オーダー アカウントマネージャー)** (User Information) - includes fields for name, email address, phone number, and time zone.
- イメージをEメールにて送付** (Send Images via Email) - includes radio buttons for 'なし' (None), 'オーダーを入力できるのはこのユーザーのみです' (Only this user can enter orders), and 'すべてのオーダーが入力されました' (All orders entered).
- アカウントデザイン画像のオプション** (Account Design Image Options) - includes radio buttons for '2Dのみ' (2D only), 'アトランティス™ 3Dエディタ (読み取り専用)' (Atlantis™ 3D Editor (Read Only)), and 'アトランティス™ 3Dエディタ' (Atlantis™ 3D Editor).
- パスワード変更 >>** (Change Password >>)
- 保存** (Save) - highlighted with a blue button.

アトランティス 3D エディターは、アカウントのIDおよびパスワードでログインしたアカウントユーザー（アカウントマネージャー）のみが、対象アカウントの全ユーザーに、アトランティス 3D エディター機能を有効または無効にする設定ができます。

注意：アカウントマネージャーによって、アトランティス 3D エディターのオプションが有効にされる場合、各ユーザー単位でも、機能を有効にするか無効にするかを設定できるようになります。

アトランティス ウェブ オーダー
マイアカウント



必要に応じて、マイアカウント情報を編集し、「保存」ボタンをクリックして、「マイアカウント」ページに戻ってください。パスワードを変更するためには、「マイアカウント」ページの最下部の「パスワード変更>>」をクリックしてください。



新規ユーザーを追加するには、「新規ユーザーの追加>>」リンクをクリックして、ユーザーの姓、名、および電子メールアドレスを該当する欄に入力してください。



「登録」をクリックして、新規ユーザーを追加すると「マイアカウント」ページに戻ります。新規ユーザーはアカウント確認のためのEメールを受信します。各ユーザーは、同じアカウントに、異なるパスワードでログインし、各ユーザーがアトランティス ウェブ オーダーで作業をすることが可能です。

詳細

オーダー設定は、詳細ページのオーダー設定セクションにある「情報を編集>>」リンクをクリックして変更することができます。

DENTSPLY Implants
ATLANTIS™
WebOrder

Log out | Contact us
Japanese

オーダー | マイアカウント | デザインプロフィール | **詳細** | ヘルプ

デンツプライIH株式会社 アカウント

オーダー設定

- 通称 - 産科ごとの通称 (xxxxxx@dentaply.com)
- アトランティス材料 - 無し
- 補綴タイプ - セメント固定式
- アトランティス アバットメント コア ファイル - アフォルト オフ
- アトランティス デザイン 歯肉のオプション - アトランティス™ 3Dエディタ
- 発送業者 - デンツプライインプラントによる最善の選択
- 宛先住所詳細 - 請求書用
- 支払い方法 - 請求書

3ShapeサイトID

- xxxxxx
- xxxxxx

情報を編集>>

請求書の送付先が保存されました。

組織名	住所	番号	印刷機決定
JPG9910 デンツプライIH株式会社	東京都港区麻布台1-8-10 麻布台成石石階 港区 106-0041 Japan	Phone: 0363118777 Fax: 0363118791	

DENTSPLY Implants
ATLANTIS™
WebOrder

Log out | Contact us
Japanese

オーダー | マイアカウント | デザインプロフィール | **詳細** | ヘルプ

詳細の編集

補綴タイプ
セメント固定式

アバットメント材質
症例ごとを選択

画像
 デザイン確認無し
 デザイン確認有り - イメージを送付
 症例ごとを選択

アトランティス アバットメント コア ファイル
 すべての症例で入力したコア ファイルをデフォルトでオーダーする

3ShapeサイトID
 xxxxxx 削除しますか?
 xxxxxx 削除しますか?

 #505535

アトランティス™ 3Dエディタ
 2Dのみ
 アトランティス™ 3Dエディタ (読み取り専用)
 アトランティス™ 3Dエディタ

発送業者
デンツプライインプラントによる最善の選択

発送の詳細
デンツプライインプラントによる最善の選択 終了時間

支払い方法
請求書

請求書の送付先
JPG9910
デンツプライIH株式会社
東京都港区麻布台1-8-10
麻布台成石石階
港区 106-0041
Japan
電話番号: xxxxxxxxxxxx
Fax: xxxxxxxxxxxx

製品の発送先
DENTSPLY IH K.K.
JPG9910 | 00111
Azabu-Koisoji Building 6F, 1-8-10
Azabudai Minato-ku Tokyo
Minato-ku 106-0041
Japan
電話番号: xxxxxxxxxxxx
Fax:

保存 キャンセル

編集されたら、「保存」をクリックしてオーダー設定ページに戻ってください。

デザイン設定

「デザイン設定」 ページで、「詳細の追加」、「新規プロフィール入力>>」または「プロフィールの消去」をしていただけます。

DENTSPLY Implants Log out | Contact us

ATLANTIS™
WebOrder Japanese ▾

オーダー | マイアカウント | **デザインプロフィール** | 詳細 | ヘルプ

デザインプロフィール

新規プロフィール入力>>

展開 縮小

初期設定 ⌆

プロフィール名: 初期設定

画像の電子メール
電子メールを追加

セメント固定式補綴用アバットメント ▾

スクリュー固定式補綴用アバットメント ▾

TEST ⌆

プロフィール名: test

画像の電子メール
電子メールを追加

セメント固定式補綴用アバットメント ⌆

治療部 位	エマー ジェンス ル径	プロファイ ル形状	エマー ジェンス プロファイ ル形状	マー ジンの ボジ ション	類 側 唇	遠 心	近 心	舌 側	マー ジンの デザ イン	リ テン ティ ブ サー フェイス	マー ジンの ベ ル	ベ ベ ク リ ン グ か?
初期 設定	3 カ ン ト ウ ア ー	ティ ッ シュ	コ ン ケ イ ブ	粘 膜 縁 下 深 さ で 設 定	1.0	0.75	0.75	0.5	シャ ン フ ァ ー	有 効	無 効	

詳細の追加

スクリュー固定式補綴用アバットメント ▾

プロフィールの消去

新規プロフィール入力>>

詳細の追加

新規デザイン設定ページで、エマージェンス プロファイル 径 オプションおよび マージン ポジション オプションなどのデザインの詳細を編集し保存していただくことができます。

必要な場合は、初期設定をオーダーごとに修正していただくことも可能です。

新規デザイン設定をされたら、「作成する」をクリックしてください。

DENTSPLY Implants
ATLANTIS™
WebOrder

オーダー | マイアカウント | **デザインプロファイル** | 詳細

新規デザイン設定

治療部位の詳細: 上顎前歯部

エマージェンスプロファイル 径のオプション

- 1 ノー ティッシュ ディスプレースメント
- 2 サポート ティッシュ
- 3 カントウアー ティッシュ
- 4 フル アナトミカル
- 5 アナトミカル サポート ティッシュ

エマージェンスプロファイル 形状

- コンケイブ
- スレート
- コンベックス

マージン ポジションオプション

粘膜縁下深さで設定

頬側/唇側	遠心	近心	舌側
1.0	0.75	0.75	0.5

隣接番を使用

接合部からの高さで設定

頬側/唇側	遠心	近心	舌側
1.0	1.5	1.5	1.0

可能な限り接合部近くに設定

物理的特徴

マージン デザイン

- ショルダー
- シャンファー

チタンのリテンティブ サーフェイス

マージン ベベル

キャンセル | **作成する**

エマージェンス プロファイル 径 オプション

1. ノー ティッシュ ディスプレースメント

軟組織の支持のないアバットメント。アバットメントは、お預かりした模型のガムシリコンまたは石膏製の粘膜立ち上がり部に接触しません。

2. サポート ティッシュ

解剖学的に形成されたアバットメントは、お預かりしたガムシリコンの粘膜立ち上がり形状よりも最大0.2mm大きくなります。比較的容易に装着が可能です。

3. カントウアー ティッシュ

中程度の直径に形成されたアバットメントは、お預かりしたガムシリコンの粘膜立ち上がり形状よりも最大1.0mm大きくなります。

4. フル アナトミカル

可能な限り最良のエマージェンスプロファイルで提供される、最大直径のアバットメント。装着時には外科的切開が必要になることがあります。

5. アナトミカル サポート

エマージェンス プロファイルが最大かつコンケイブを用いた軟組織圧迫が最小の解剖学的アバットメントです。アバットメントのサイズは、可能な限り最良のエマージェンス プロファイル 径 によって決定され、マージンは、粘膜縁下レベルまたは粘膜縁下直下に設置され、エマージェンス シェイプはできるだけコンケイブにします。

新規設定入力

デザイン設定名に、お客様の氏名または他の情報を用いて、新規デザイン設定を作成していただけます。「オーバービュー」ページの「プロフィールの選択」で特定のデザインプロフィールを選択していただくと、自動的にそのプロフィールに設定内容が使用されます。

新規プロフィールへのリンクをクリックして、プロフィール名を入力して「作成する」をクリックしてください。

DENTSPLY Implants
ATLANTIS™
WebOrder

Log out | Contact us
Japanese

オーダー | マイアカウント | **デザインプロフィール** | 詳細 | ヘルプ

新規デザイン プロファイル

デザイン プロファイル名:

電子メール アドレス (オプション):

3Dを共有しますか? (オプション)

作成する

新規プロフィールを作成してから、「デザイン設定」ページの「詳細の追加」を選択して、プロフィールをカスタマイズして、新規デザイン設定ページにアクセスすることができます。(詳細は前ページをご参照ください。)

DENTSPLY Implants
ATLANTIS™
WebOrder

Log out | Contact us
Japanese

オーダー | マイアカウント | **デザインプロフィール** | 詳細 | ヘルプ

新規デザイン 設定

検索部位の詳細
下部検索部
上部検索部
下部検索部

エメラルド オプション

1ノー タイプ チェスプレースメント

2サポート タイプ

3カントナー タイプ

4フル アタカール

5アタカール サポート タイプ

エメラルド プロファイル 形状

エンケイブ

フレート

エンベックス

マージン オプション

結露線下深まで設定

縁側寄側	遠心	近心	唇側
1.0	0.75	0.75	0.5

縁側寄側使用

縁側寄側の高さで設定

縁側寄側	遠心	近心	唇側
1.0	1.0	1.0	1.0

可能な限り縁側寄側に設定

仕上げ的特徴

マージン デザイン

シェルダ

シャンワア

手戻りのランディブ サービス

マージン ベベル

キャンセル **作成する**

エマージェンス プロファイル 径 オプション

The screenshot shows the 'Design Profile' page for DENTSPLY Atlantis. The 'Emergency Profile Options' section is highlighted with orange circles and arrows pointing to three callout boxes on the right. Each callout box shows a 3D diagram of a dental implant with a pink emergency profile attached to the abutment.

Emergency Profile Options:

- 1 ノー ティッシュ デザイン スメント
- 2 サポート ティッシュ
- 3 カントアー ティッシュ
- 4 フル アウトモカ
- 5 アナトミカル サポート ティッシュ

Emergency Profile Shape:

- コウエイブ
- ストレート
- コンベックス

Marginal Position Options:

- 粘膜線 下深さで設定

傾斜割合	遠心	近心	舌側
1.0	0.75	0.75	0.5
- 隣接歯を使用
- 接合部からの高さで設定

傾斜割合	遠心	近心	舌側
1.0	1.5	1.5	1.0
- 可能な限り接合部通りに設定

①のいずれかをクリックすると、オプションの図解が表示されます。

詳細情報については、「アトランティス アバットメント デザインガイド」をご参照ください。

モデルタイプ

The screenshot shows the 'Model' selection page. The 'DIH スキャンをリクエストする' section has three radio button options circled in orange, with arrows pointing to three callout boxes on the right. Each callout box shows a 3D model of a dental implant with a pink wax model.


Model Options:

- 石膏模型 - 可撤式ガム模型あり
- 石膏模型 - 可撤式ガム模型なし
- 石膏模型 - 軟組織部なし

ATLANTIS™ BioDesign Matrix™

アトランティスは、アトランティス バイオデザインマトリックスとして知られている4つの重要な機能が組み合わさって構成されています。これらの機能は相互に作用して、天然歯の機能と外観を再現するために軟組織をマネージします。歯科技工所、歯科医師およびインプラント患者にとってのアトランティスのメリットです。

- Atlantis VAD™ – 最終歯牙形態および個々の患者の解剖学的構造からデザインされています
- Natural Shape™ – 個々の患者の解剖学的構造に基づいた独自の形状とエマージェンスプロファイル
- Soft-tissue Adapt™ – 軟組織の治療および、最終補綴物に適応するために有利な環境を実現
- Custom Connect™ – 強力で安定した適合 - 主要なインプラントシステム用にカスタマイズされた接合部

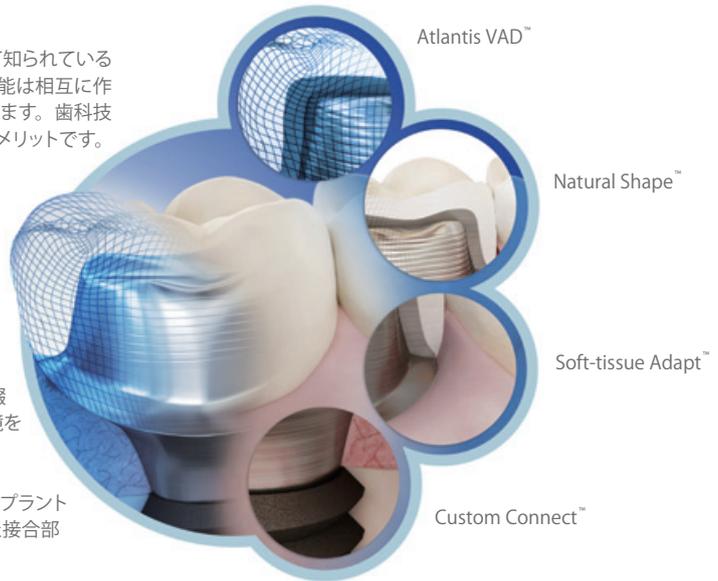

デンツプライ三金株式会社 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル
カスタマー・サービス・センター ☎ 0120-4618-68 FAX : 0120-4618-67