

# Simplant<sup>®</sup>

## Simplant order website Release information

テックサービス専用窓口

デンツプライシロナ株式会社

〒140-0012 東京都品川区勝島 1-5-21 東神ビルディング別館 11 号館

TEL: 受付時間 : 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)


0120-016-152

FAX: 0120-280-630

E-mail: [simplant-jp-service@dentsplysirona.com](mailto:simplant-jp-service@dentsplysirona.com)

## シムプラントガイド

シムプラントでガイドの注文手順を完了し、「Finish」をクリックします。プランはオンラインの注文ページに転送されます。アップロードが完了する前にシムプラントソフトウェアを閉じないでください

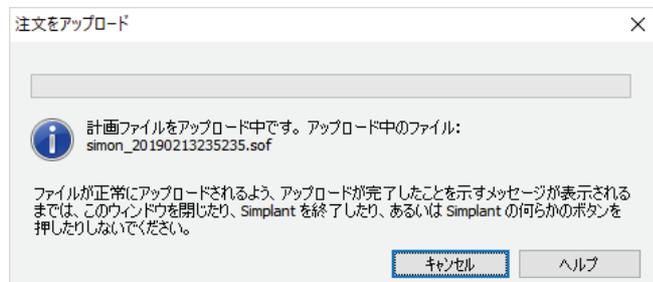

標準のブラウザが開き、シムプラント ガイドの注文が完了します。



このガイドオーダーを追加するアカウントでログインします。

- オーダーを閉じる前に、シムプラントからのファイルのアップロードが完全に完了していることを確認してください。オーダーページの入力作業が終わっていない場合、後で作業を再開することができます。
- まだアカウントでログインしていない場合、またはアップロードが完了するまで待たなかった場合は、オーダーはオンラインに保存されません。シムプラントで注文をやり直す必要があります。

オーダーweb サイト右下



をクリックすると以下の画面が現れます。



リモートサポートに必要なアプリケーションをここからダウンロードすることができます

# オーダー手順 (1 処方)

1 処方 → 2 買い物かご → 3 請求 発送 → 4 確認およびオーダー確定

To further strengthen compliance with data protection laws, we have updated all installers for Simplant Pro software on our website per December 3, 2018. However, if you have installed your Simplant Pro software 17 or 18 prior to December 3, 2018, we're asking you to take a moment to run the [DataProtectionPatch2018](#). Please note that there is no change in functionality of your software.

**照会**  
 姓例に名前を付ける\*

オーダー名を記載します。(カルテ番号、患者名など)  
 記載内容は納品書に印字されます

**治療**  
 インプラント製品ライン  
 DENTSPLY Implants - OsseoSpeed EV

PPHMA クラウン固定\*

適用症例\*

インプラントの位置\*

補綴物の位置\*

“スクリー固定式”または“セメント固定式”を選択してください (現状の日本のサービスには影響ありません)

“インプラントの位置”を選択してください

“補綴物の位置”を選択してください (現状の日本のサービスには影響ありません)

**外科**

歯牙支持ガイド  
 Simplantセーフガイド

FastTrack ですか。  
 はい  
 固定していますか。  
 はい

各種ファイルがシムプラントですすでに追加されている場合、「プランニングファイルに含まれています」と表示されます  
 必要なファイルがまだ追加されていない場合は、ここでアップロードできます

**スキャン**

CTまたはコーンビームスキャン\*  
 プランニングファイルに含まれています

石膏模型型オブティカル スキャンまたは口腔内スキャン\*  
 プランニングファイルに含まれています

石膏模型の送付方法に関しては P7 を参照ください

Omicam による口腔内スキャンデータの送付方法に関しては P9 を参照ください

CT撮影する前にCT撮影のガイドラインに従ってください。CT画像が不明瞭な場合、Dentsply Sironaのチームが品質保証を提示できない可能性があります。

必要項目を入力したら“次へ”をクリックします

次へ →

## オーダー手順 (2 買い物かご)

日本語 | ようこそ, Sirona Dentsply 様 | ログアウト

Dentsply Sirona

ホーム | オーダー | マイアカウント | ヘルプ

1 2 3 4

処方 買い物かご 請求 発送 確認およびオーダー確定

To further strengthen compliance with data protection laws, we have updated all installers for Simplant Pro software on our website per December 3, 2018. However, if you have installed your Simplant Pro software 17 or 18 prior to December 3, 2018, we're asking you to take a moment to run the DataProtectionPatch12018. Please note that there is no change in functionality of your software.

### 買い物かごにある製品

 **Simplant SAFE Guide - ASTRA TECH Implant System EV**  
This guide is designed for 1 implants.  
This guide will support fixation functionality.  
[詳細...](#)

¥42000

小計(税別) ¥42000

### 製品をカートに追加する

 **Special design**  
[詳細...](#)  
¥2000 [カートに追加](#)

 **日本未対応製品**  
**Atlantis Abutment**  
[詳細...](#)  
0.00 [カートに追加](#)

 **Immediate Smile Digital**  
[詳細...](#)  
¥12000 [カートに追加](#)

 **Duplicate of Simplant Guide**  
[詳細...](#)  
¥25000 [カートに追加](#)

 **Jaw model**  
[詳細...](#)  
¥35000 [カートに追加](#)

ガイドオーダーに各種製品を追加することができます。P10を参照ください

[← 戻る](#)

[次へ →](#)

必要項目を入力したら“次へ”をクリックします

## オーダー手順 (3 請求 発送)

日本語 ▼ ようこそ, デンツェ タロウ | ログアウト

Dentsply Sirona

ホーム オーダー マイアカウント ヘルプ

1 処方 2 買い物かご 3 請求 発送 4 確認およびオーダー確定

Please note that our services can be temporarily down between August 14-16 while we upgrade our servers. If you experience any problems please try again a bit later or contact customer support.

Dear Customer, At Dentsply Sirona we are here to support you whenever you need us. Contact customer service or your sales representative if you have questions or concerns. IMPORTANT notices:

- Due to COVID-19 (coronavirus), we are until further notice optimizing our turnaround time for FastTrack guide design and for Simplant planning proposals from 48 hours to 72 hours (3 working days). Please consider this when planning your surgery date.
- IMPORTANT notice for Streumann BLX users Please read before ordering
- ファシリテート ガイデッド サージェリー キットとドリル以外 (FA フォルダードライバー、ドリルキー、インプラントホルダー、カウンターホルダー) は、2019年1月のラインアップに含まれません。現在でもファシリテートのドリルキーを治療に使用しているお客様と、シムプラント Pre 17 をシムプラント ライブラリー 5.1 と併用しているお客様の場合に限り：ファシリテートのドリルキーを治療に使用している場合に限り、上記のソフトウェアバージョンを使用する TX インプラント向けシムプラント セーフガイドを引き続きご注文いただけます。マイシムプラント、シムプラント Pre 18、およびシムプラント Library 5.2 は、TX インプラント向けシムプラント セーフガイドをサポートしていません。

### 請求および配送先住所

住所および連絡先情報を編集 71

請求先 \*

デンツプライシロナ新 デモ用  
東京都品川区藤島1-5-21 東神ビル新館11号館  
東京都品川区  
1400012  
JAPAN

配送先 \*

タロウ デンツ  
dds202009@gmail.com  
0120018152

東京都品川区藤島1-5-21 東神ビル新館11号館  
東京都品川区  
1400012  
JAPAN

配送先、配送先の住所を選択します

### お支払い

購入済みアイテム

なし

発行番号

事前に購入したガイドクーポンを使用する場合、こちらで選択します。(クーポン種類、使用期限、残り数が表示されます)

← 戻る

次へ →

必要項目を入力したら“次へ”をクリックします

© Dentsply Sirona 会社 お問い合わせ 利用規約

## オーダー手順 (4 確認およびオーダー確定)

To further strengthen compliance with data protection laws, we have updated all installers for Simplant Pro software on our website per December 3, 2018. However, if you have installed your Simplant Pro software 17 or 18 prior to December 3, 2018, we're asking you to take a moment to run the [DataProtectionPatch12018](#). Please note that there is no change in functionality of your software.

### オーダー情報

- これは以前のオーダーを修正した計画です。空欄に入力した日オーダー番号(ID)と入れ替えます。
- 日本未対応

一度キャンセルしたオーダーを再オーダーする際に使用します

### 請求 発送

請求先  
デンツプライシロナ株式会社  
東京都港区南青山1-8-10  
南青山ビル5F  
港区  
106-0041  
JAPAN

配送先  
Dentsply Sirona  
Azabu-Kaisei Building 6F, 1-8-10  
Azabudai Minato-ku Tokyo  
Minato-ku  
106-0041  
JAPAN  
@dentsplysirona.com  
0326

発送予定日  
2019年6月17日  
手術予定日  
Invalid date  
オーダーの処理  
ファーストトラック

### オーダーした製品

商品名	価格 (JPY)	数量	価格 (JPY)
Simplant SAFE Guide - ASTRA TECH Implant System EV	¥42000	1	¥42000
		小計(税別):	¥42000
		税:	¥3360
		合計(税込):	¥45360

### 責任の制限

- 私は、オーダーを管理する目的で個人データをデンツプライシロナと共有することについて、患者から同意を得ていることをここに確認します。
  - 本病前サージカルプランに従って、デンツプライシロナによるシムプラントガイドのケアガイドに従って実施するものとします。
- お客様がシムプラントガイドのエンドユーザーである場合、計画した処置を実施するうえで必須の適切な免許を、医学的のものも含め、取得していることをここに宣言し、あらゆる適用法に従い、シムプラントガイドのデザインと利用に際して医学的な全責任を負うものとします。シムプラントガイドは、その顧客であるお客様への技術的な助言とサポートの一端に過ぎないものと見なされ、いかなる形態であれデンツプライシロナによる医学的助言とは見なされません。このガイドを利用することにより、その結果に対する法的および医学的な全責任はお客様が負うものとします。お客様は治療計画または他のあらゆるファイルとその利用前に慎重に確認して管理するものとし、そのファイルを利用することで、自動的にお客様はファイルの利用に関連するどのような責任もデンツプライシロナに関与しないものとします。さらに、お客様は[使用規約](#)と[ライセンス契約](#)の各条項に同意するものとします。
- お客様がエンドユーザーに代わる第三者である場合、本利用規約によりお客様はデンツプライシロナ NV に対し、本オーダーを行う上でエンドユーザーから法的な権利を許可されていること、エンドユーザーが法的に必要な免許を取得していること、ならびにお客様がエンドユーザーの間で、[使用規約](#)と[ライセンス契約](#)の各条項、および上記の規定に同意したことについて確認し、これを保証するものとします。

責任の制限 2 箇所をチェックを入れます

← 戻る

Place Order

オーダーを確定します

To further strengthen compliance with data protection laws, we have updated all installers for Simplant Pro software on our website per December 3, 2018. However, if you have installed your Simplant Pro software 17 or 18 prior to December 3, 2018, we're asking you to take a moment to run the [DataProtectionPatch12018](#). Please note that there is no change in functionality of your software.

オーダー確定後の画面

### ご注文ありがとうございます。

オーダー番号: \_\_\_\_\_  
確認メールを翌もなく送信します。

オーダーの詳細を見る →

オーダーリストに戻る →

## 石膏模型送付方法

歯牙支持ガイドなどをオーダーのために石膏模型を送付する場合は、以下の手順でお送りください。

**ただし、事前に口腔内データを送付し、DICOM データにマッチングした状態でプランニングを行いたい場合は、オプティカルスキャンウィザード (Pro のみ) または Dental Planit をご使用ください。**

石膏模型をガイドオーダー後に送付する場合

- “以下メニューのこのアイテムを宅急便で送付します”にチェック、“送付済みです”はチェックせずにオーダーを進めます。



- 注文プロセスが終わると以下のような画面になるので、リンクより PDF をダウンロードします。



- PDF を印刷し、石膏模型に同封してお送りください。

※ 同梱・添付がない場合には納期が遅れる場合があります。あらかじめご了承くださいませよう願いたします。



\*32538849



## 出荷書類

### Simplant® Guide

オーダー番号: 32538849

日付: 02-15-2019

#### 受領者

名前  
アドレス  
Dentsply Implants  
Dentsply Sirona K.K.  
DDSC - Tokyo  
3F, No.11, 1-5-21 Katsushima, Shinagawa-Ku  
Tokyo, 140-0012  
JAPAN

電子メールアドレス  
電話番号  
@dentsplysirona.com

#### 発送者

名前  
アドレス  
デンツプライシロナ株式会社  
東京都港区麻布台1-8-10  
麻布信成ビル5F  
港区  
106-0041  
JAPAN

電子メールアドレス  
電話番号

石膏模型

数量  
1

ガイドオーダー前に石膏模型を送付する場合

- 以下メニューの“このアイテムを宅急便で送付します”及び“送付済みです”にチェックします。
  - “デンツプライシロナの参照番号または配達業者の追跡番号”に石膏模型を送付した際の宅急便の伝票番号を記入してください。
- ※ 番号の記入がない場合には納期が遅れる場合があります。あらかじめご了承くださいませよう願いたします。

石膏模型オプティカル スキャンまたは口腔内スキャン\*

コンピューターからアップロードする

このアイテムを宅急便で送付します

シロナ コネクトからスキャンを選択する

送付済みです


デンツプライシロナの参照番号または配達業者の追跡番号\*

## セレクトによる口腔内スキャン

歯牙支持ガイドなどのオーダーのためにセレクトの口腔内スキャンをコネクト ケース センターからシムプラントに直接送信できます。

**ただし、事前に口腔内データを送付し、DICOM データにマッチングした状態でプランニングを行いたい場合は、オプティカルスキャンウィザード (Pro のみ) または Dental Planit をご使用ください。**

- コネクト ケース センターポータルで Sirona アカウントをシムプラントアカウントにリンクします。次に「MyFavoriteRecipients」に行き、あなたの地域のシムプラント Recipient ラボを追加してください。

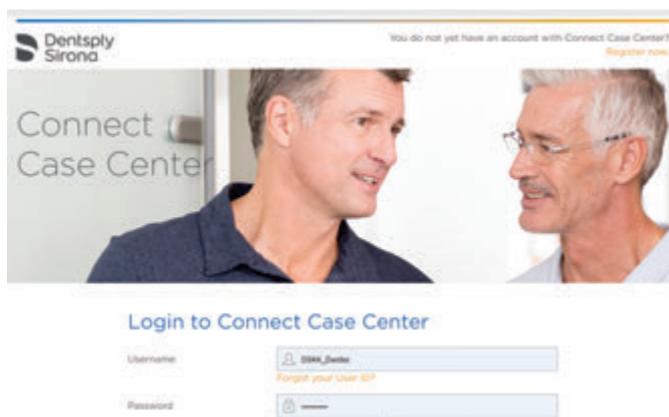

- コネクト ケース センターを使用して、1 つ以上の口腔内スキャンをシムプラントに送信します。患者ごとにインプラント埋入予定歯列スキャンが最低限必要です。必要に応じて、対合歯列、バイト、ワックスアップ等の追加のスキャンを送信することが可能です。



- スキャンが送信され、処理されるとすぐにシムプラントから通知メールが送られます。このメールはシムプラントポータルにリンクしています。
- 処方ページで、「このアイテムはすでにコネクト ケース センターによってアップロードされています」を選択して、使用可能な口腔内スキャンの 1 つを注文に添付します。



## 追加の製品

シムプラント 18 は、自分のガイドオーダーにさまざまなオプションを追加することができます。希望する場合は“カートに追加”をクリックします。

**製品をカートに追加する**

歯牙骨支持ガイド (スペシャルデザイン)  
歯牙支持タイプのガイドで埋入予定部位のみ骨レベルでガイドを作製

骨モデル  
インフォームドコンセントや術前の確認、練習等に使用

イミディエート スマイル デジタル  
プランニングに使用した骨、粘膜データにインプラント位置情報を追加し STL で提供。CAD に取り込むことで術前にテンポラリーブリッジの作成が可能

シムプラントガイドの複製  
同一ガイドを複数作製

## 歯牙骨支持ガイド

**Special design - カートに追加**

“支持タイプ複合型の Simplant ガイド”をチェックします

コメント欄に“歯牙骨支持ガイド”と記載します

“カートに追加”をクリックします

## Immediate Smile Digital ファイルのダウンロード

ガイドのデザインが確定すると、自動メールが送信されます。その時点から STL ファイルをダウンロードできます。  
ファイルの保存期間は 6 か月程です。

- オーダー履歴から、該当する症例のオーダーID をクリックします。

Find your orders   [詳細 >](#)

すべてのオーダー 100 対応が必要となります 0 処理中 0 配送済み 88

オーダーID	オーダー照会	製品タイプ	送信日	ステータス	操作
1234567	XXXXXX	Simplant ガイド	2020/07/17	配送済み	
XXXXXXXX	XXXXXX	Simplant ガイド	2020/03/16	配送済み	
XXXXXXXX	XXXXXX	Simplant ガイド	2019/12/25	配送済み	

- 「Immediate Smile デジタルファイルを開く」のアイコンをクリックすると、左下に STL ファイルが表示されます。

### インプラントの計画とガイドのデザイン

画像は参照目的でのみ提供されます。以下のダウンロード可能な Simplant ファイルに基づいて承認してください。画像とファイルは、オーダーが確定してから 6 か月間保存されます。

画像ギャラリーを表示



オリジナルのオーダー  
ファイルをダウンロード  
する



シムプラント治療計画  
をダウンロード



外科処置のガイドライ  
ンのダウンロード



Immediate Smile デジ  
タル ファイルを開く



“Immediate smile デジタル  
ファイルを開く”をクリック

- 1234567 \_abutments.stl
- 1234567 \_mucosa-abutments.stl
- 1234567 \_mucosa.stl
- 1234567 \_virtual\_tooth.stl

STL ファイルが表示されます

画像ギャラリーを表示

オリジナルのオーダー  
ファイルをダウンロードする

シムプラント治療計画  
をダウンロード

外科処置のガイドライ  
ンのダウンロード

Immediate Smile デジ  
タル ファイルを開く


- 1234567\_abutments.stl
- 1234567\_mucosa-abutments.stl
- 1234567\_mucosa.stl
- 1234567\_virtual\_tooth.stl

ファイル名をクリックしてファイルをダウンロードします

share.simplant.com から 1234567\_abutments.stl (60.1 KB) を開くか、または保存しますか?

ファイルを開く(O)    保存(S)    キャンセル(C)

ファイル例：補綴物、マージン周辺をくりぬいた粘膜、アバットメント、粘膜とアバットメント

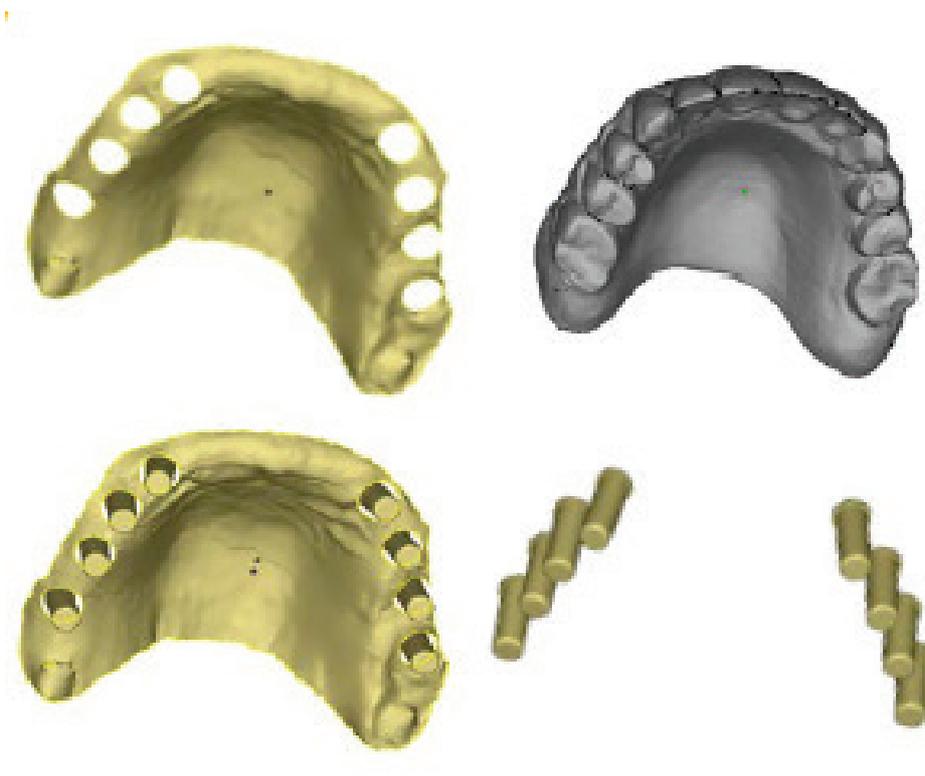

## ホームページ


デンツプライシロナのオーダーWeb サイトで顧客は、シンプラント製品の注文状況を追跡できます。

1. デンツプライシロナ株式会社 HP
2. 製品・ソリューション “Implantology”
3. “Simplant”


の順に進みます



デンツプライシロナ HP  
アクセス用 QR コード

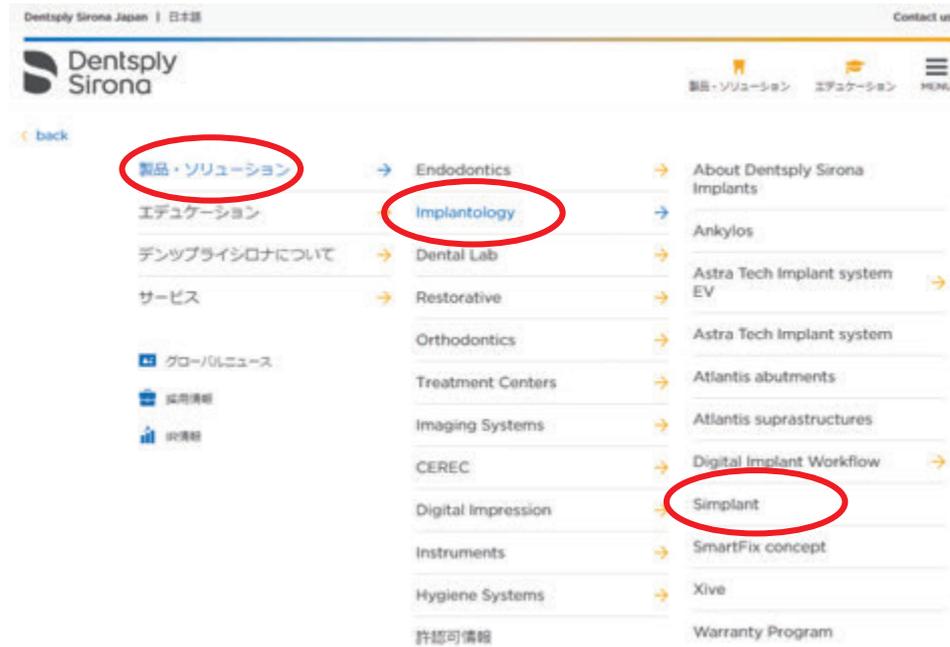


- “関連リンク”から シンプラントガイドオーダー履歴をクリックします

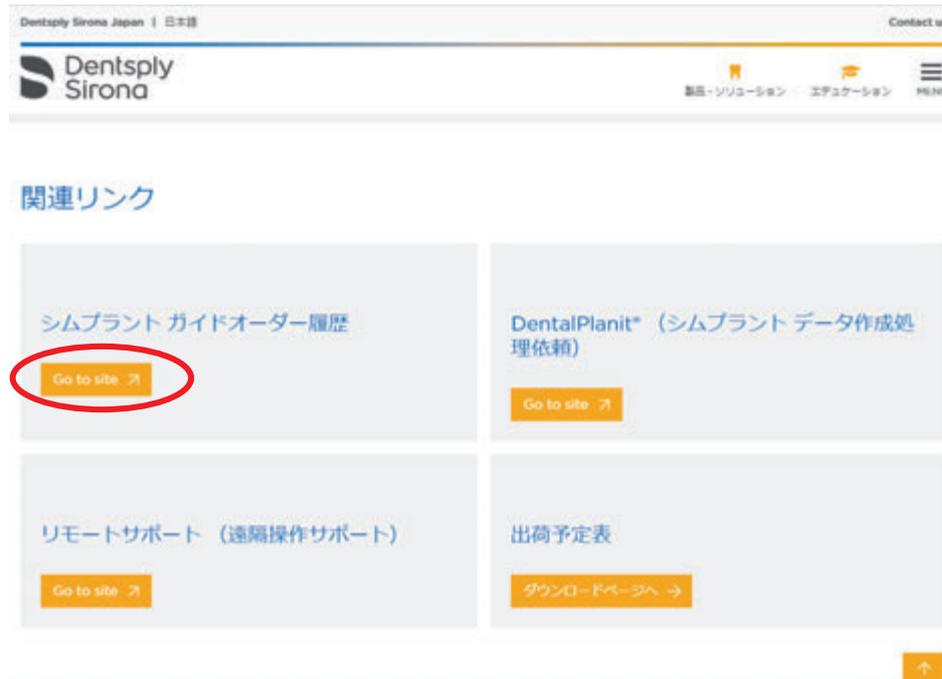

## ガイドオーダー履歴

- オーダーをクリックします。

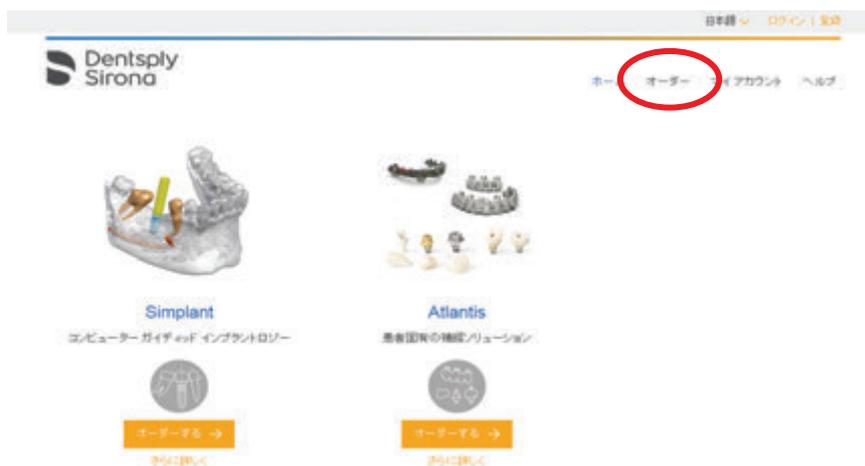

オーダーweb サイト  
アクセス用 QR コード

- ガイドオーダー時の ID,パスワードでログインします

日本語

**Dentsply Sirona**

---

|

|

ログイン →

アカウントをお持ちでないですか?今すぐ登録してください。  
パスワードを忘れた場合

- オーダーID をクリックします。

日本語 ▼ ようこそ, Suzuki Tetsuro | ログアウト

---

**Dentsply Sirona** ホーム   オーダー   マイアカウント   ヘルプ

Find your orders
Q
詳細 >
+ オーダーの作成 ▼

すべてのオーダー 381	対応が必要となります 28	処理中 104	配送済み 217	Demo orders 10		
オーダーID	オーダー照会	製品タイプ	担当者	送信日	ステータス	操作
<a href="#">32584299</a>		ガイドによるSimplantプランニング			下書き	🗑️ 削除
<a href="#">32584298</a>		ガイドによるSimplantプランニング			下書き	🗑️ 削除
<a href="#">32584297</a>		ガイドによるSimplantプランニング			下書き	🗑️ 削除
<a href="#">32579471</a>	利用説明デモ	Simplant ガイド			下書き	🗑️ 削除
<a href="#">32577247</a>	213	ガイドによるSimplantプランニング			下書き	🗑️ 削除
<a href="#">32573834</a>		ガイドによるSimplantプランニング			下書き	🗑️ 削除
<a href="#">32572727</a>	45	Simplant ガイド			下書き	🗑️ 削除
<a href="#">32571772</a>	asd	Simplant ガイド			下書き	🗑️ 削除

オーダー → 32550967

宅急便問い合わせ番号

追跡番号: 29800K

外科処置の準備のため、以下のことが可能です:

### ・ 備考

歯牙支持タイプSIMPLANTガイドのご注文ありがとうございます。  
 CT画像は7か月以上前に撮影されたものです。理由の口腔内とは異なっている可能性があります。SIMPLANTガイドの精度は正確であり、ガイドも変更されます。製品到着後の試通 または手術時に位置とSIMPLANTガイドの安定を十分に確認ください。

ガイドデザインデータ（固定ピンの深度を知りたいとき）やガイドレポート（ガイドのレシピ）などがダウンロードできます

### ・ インプラントの計画とガイドのデザイン

画像は参照目的でのみ提供されます。以下のダウンロード可能なSimplantファイルに基づいて承認してください。画像とファイルは、オーダーが確定してから6か月間保存されます。

<p>画像ギャラリーを表示</p>	<p>オリジナルのオーダーファイルをダウンロードする</p>	<p>Simplantファイルのダウンロード</p>	<p>外科処置のガイドラインのダウンロード</p>
-------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------

### ・ オーダーした製品

	明細価格 (JPY)	数量	価格 (JPY)
Simplant SAFE Guide - ASTRA TECH Implant System EV	¥42000	1	¥42000
Special design	¥2000	1	¥2000
		小計(税別):	¥44000
		税:	¥3460
		合計(税込):	¥47460

### ・ 請求 発送

請求先  
 デンツプライシロナ株式会社  
 東京都港区麻布台1-8-10  
 麻布館ビル5F  
 港区  
 106-0041  
 JAPAN

配送先  
 Dentsply Sirona  
 東京都港区麻布台1-8-10  
 麻布館ビル5F  
 港区  
 106-0041  
 JAPAN

①dentsplysirona.com

### ・ 治療


病名: test case 種: 上顎骨

インプラント製造業者: DENTSPLY Implants サポートタイプ: ToothBoneSupported

インプラント製品ライン: Osseospeed EV 適用症例: 部分欠損症例

PHMA クラウン固定: セメント固定式

ガイドタイプ: Safe

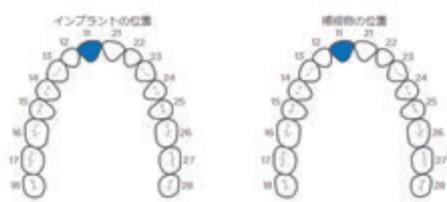

## 注文のフォローアップ

- オーダーWeb サイトは、PC、Mac、iPad、および iPhone からアクセスできます。
- 主要なインターネットブラウザ（Internet Explorer 11、Firefox、Chrome、Safari、Edge）がサポートされています。
- 注文のステータスは[注文]セクションに表示されます。注文の詳細を表示するには、操作が必要な注文をクリックします。



- 注文の詳細ページのボタンを使用して、承認または変更要求を直接行います。ご注文の変更をリクエストする際に関連するコメントを追加してください。

## マイアカウント


[マイアカウント]ページで、ユーザーは自分が属するすべてのアカウントのアカウント詳細を確認できます。

アカウントマネージャの場合は、左側の[アカウントユーザー]リンクをクリックして追加のユーザーをアカウントに招待できます。




## 言語

あなたはウェブサイトの上部にある言語選択を通していつでもあなたの言語を変えることができます。

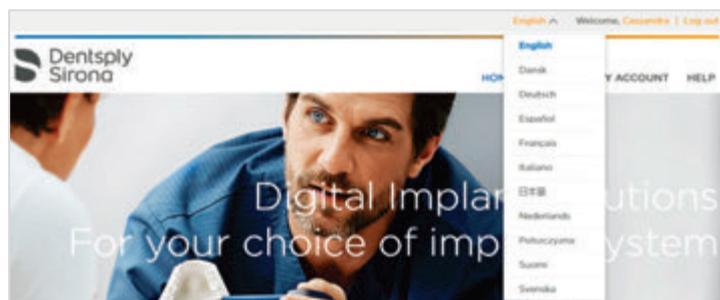

## 条項

すべての法的文書は、Web サイトの下部にある[利用規約]リンクから入手できます。

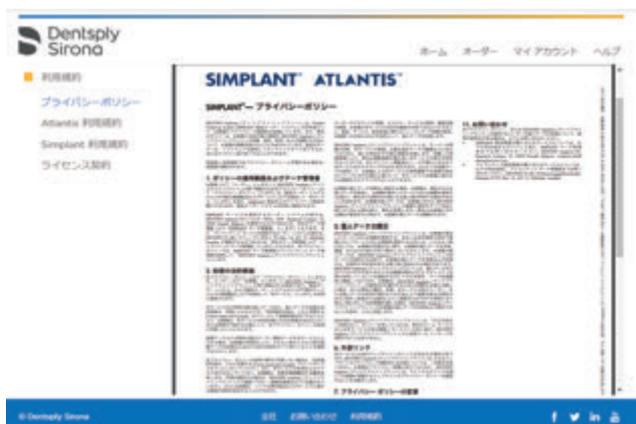

## ダウンロード情報シムプラントソフトウェア

お住まいの地域のシムプラントソフトウェアの最新バージョンが [www.simplant.com](http://www.simplant.com) のダウンロードセクションからダウンロードできます。

- 使用のためのすべての指示は [www.simplant.academy.org](http://www.simplant.academy.org) で見つけることができます
- シムプラントソフトウェアインストーラのリストについては、ヘルプページを参照してください。



## Dentsply Sirona インプラント用の回転インデックス付きシムプラント SAFE ガイド

- Ankylos、Astra Tech Implant System EV および Xive 用のすべてのシムプラント SAFE ガイドデザインに、インプラントの回転方向をコントロールするためのノッチが追加されました。
- プランニング時に回転方向を変更していない場合、インプラントは標準の位置になり、ノッチはインプラントの標準位置に合わせます。下のスクリーンショットのインプラント 31 と 41 の例です。
- プランニング時に回転方向を変更して計画されている場合、インプラントは標準以外の位置になります。ガイドノッチは（ガイドチューブと比較して）回転した位置になります。以下のスクリーンショットのインプラント 33 と 43 の例です。このガイドノッチは、正しいインプラント回転方向で埋入するのに役立ちます。例えば、EV Profile インプラントや、角度付きアバットメント、SmartFix コンセプトなどです。

