一般的名称:歯科用オプション追加型ユニット 販売名:シロナトリートメントセンター C2+ 医療機器承認番号:21800BZY10226000 分類:管理医療機器 特定保守管理医療機器

一般的名称:超音波歯周用スケーラ 販売名:シロソニック 医療機器認証番号:223AABZI00013000 分類:管理医療機器 特定保守管理医療機器

製造販売元 デンツプライシロナ株式会社

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

■支店・営業所 ■札 幌 支 店 Tel:011-709-5800 ■福 岡 支 店 Tel:092-518-1800 ■仙 台 支 店 Tel:022-266-4020 ■盛 岡 営 業 所 Tel:019-604-2340 ■東 京 支 店 Tel:03-5148-7895 ■庄 内 営 業 所 Tel:0235-29-1217 ■横 浜 支 店 Tel:045-440-1521 ■埼 玉 営 業 所 Tel:048-799-2931 ■名 古 屋 支 店 Tel:052-251-8467 ■静 岡 営 業 所 Tel:054-653-2711 ■大 阪 支 店 Tel:06-6243-6636 ■宇都宮サービスステーション Tel:028-614-3710 ■広 島 支 店 Tel:082-546-2301 ■長野サービスステーション Tel:026-217-6171

BI 1005PD



THE DENTAL SOLUTIONS COMPANY




The tip top programm for ultrasonic handpieces

Tips for every purpose, quality in every detail

超音波スケーラー&専用チップ

dentsplysirona.com

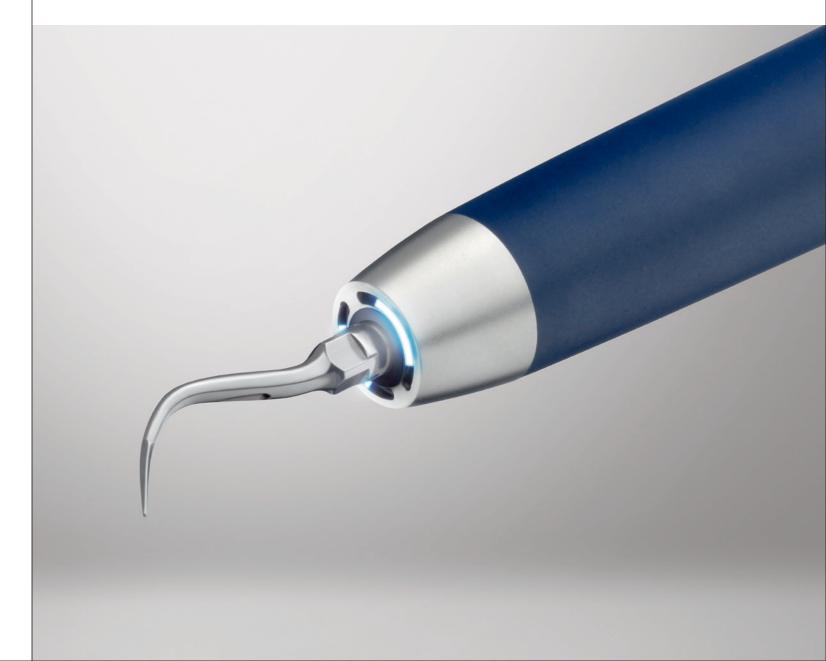

High-quality tips and ultrasonic scalers

首尾一貫した高品質を誇るデンツプライ シロナの超音波スケーラーと専用チップ。 この2つのコンビネーションは、理想的な治療結果を実現します。 ワイドな適応性と優れた使い勝手が定評の超音波スケーラーと、治療部位に特化してデザインされた チップの組み合わせは治療の質を高めます。






前後および上下の2次元振動は、安全かつ効果的な治療を可能とします。

シロソニック/ L / TL - 優れた多目的性: 治療内容に応じて幅広く対応

ターもオプションにてご用意しています。

安全性

各チップへ与えられる適正な振動可動域は、部位に応じた理想的な治 シロソニック、シロソニックL、およびシロソニックTLは、現代の歯科療を実現します。例えば、スケーリング用とペリオ治療用チップは、前後 診療の多岐に渡る治療に優れた有用性を発揮します。各スケーラーの および上下の2次元振動により、治療中の歯牙へ穏やかに対応します。 確実なパワー調整機能は、繊細なペリオ治療から隣接面の小窩洞形側方運動を回避することにより、安全で効果的な治療を可能とします。 成 (マイクロプレパレーション) まで幅広い治療を可能とします。また、 また、スケーリングの効果は、チップの摩耗に大きく左右されます。チッ 根管治療時に用いた薬剤の洗浄用途として、外部供給スプレーアダプ プが短くなるほど、研磨力と歯石の検出性能が低下するからです。1ミ リの摩耗で約25%、2ミリでは約50%の能力低下が見られます。チェッ クカード(別売)にて随時チップの長さをチェックしてください。

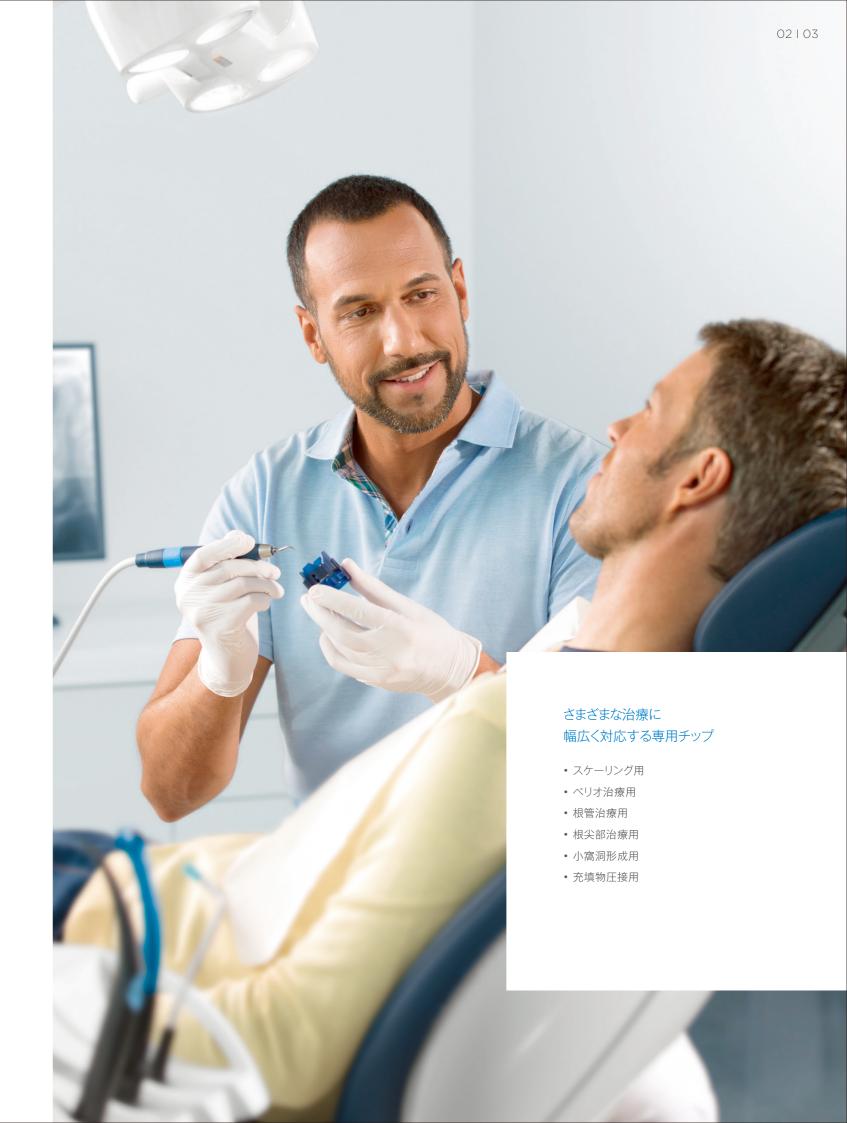

治療効果を高める高品質チップ

優れた互換性

専用チップの多くは、デンツプライ シロナ製のあらゆる超音波 スケーラーにてお使い頂けます。シロソンS、シロソンL、シロソ ニック、シロソニックL、シロソニックTLなど、歴代のスケーラー 間での互換性を最大限考慮しています。

高品質

全ての専用チップは、デンツプライ シロナならではの焼き戻し 処理により硬化調整されたステンレススチールのみで製造され ます。また、最新の製造技術を継続的に導入することにより、常に 高い品質基準を設け製品に反映しています。

超音波スケーラー

| 製品名 | 内容 | 製品番号 |
|-------------|------------------------|-----------|
| シロソニック L*1 | ライト付、No.3L及びNo.4Lチップ付属 | 59 13 509 |
| シロソニック TL*2 | ライト付、No.3L及びNo.4Lチップ付属 | 62 12 216 |

スケーラー用アクセサリー

| 製品名 | | 用途 | 製品番号 |
|------------------|-------|---|-----------|
| 外部注水用 アダプターL | | 生理食塩水等の外部供給用。 対応スケーラー: シロソンL、シロソニック、 シロソニックL | 60 02 286 |
| 外部注水用 アダプターTL | | 生理食塩水等の外部供給用。 対応スケーラー: シロソニックTL | 61 41 852 |
| トルクレンチ | STORE | 専用チップ着脱用レンチ | 60 06 196 |
| チェックカード | | No.1L~4L、および シロベリオPE1の 先端長測定用カード | 54 55 667 |

テクニカルデータ

| スケーラー テクニカルデータ | シロソニックL シロソニックTL |
|----------------|---------------------|
| 振動子タイプ | 圧電タイプ |
| 振動 | リニア(直線) |
| 発信周波数 [kHz] | 25~32 |
| ライト* | LED |
| 最大径 [mm] | 約19.5 |
| 全長(チップ未装着時) | 約96.4 |
| 重量[g] | 約49 |
| | |



^{※1} INTEGO用 ※2 SINIUS、TENEO用

「シロペリオ」 - ペリオ治療用

歯肉縁下のバイオフィルム破壊および洗浄用。分岐部を含むあらゆる歯根部へのアクセスが容易。 歯石除去後の定期健診や日常のメンテナンスに有用です。トルクレンチ付。



| 製品名称 | 特徴と用途 | 製品番号 |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| シロベリオ PE1 | ストレート。歯周ポケットの洗浄、歯根部の清掃 | 60 44 825 |
| シロベリオ PE2 | 右カーブ(細さはストレートと同一)。臼歯の歯周ポケット洗浄、歯根部の清掃 | 60 44 833 |
| シロベリオ PE3 | 左カーブ(細さはストレートと同一)。臼歯の歯周ポケット洗浄、歯根部の清掃 | 60 44 841 |
| シロベリオ セット | セット内容:シロベリオPE1~PE3 各1、トルクレンチ | 59 50 246 |

[※]対応スケーラー:シロソンS/C8/L、シロソニック/L/TL

「No.5チップ」 - 根管治療用

根管治療時に用いた薬剤の洗浄用。超音波の振動により根管内のリンス効果を高めます。 (根管拡大を目的とするものではありません)



| 製品名称 | | 特徴と用途 | 製品番号 |
|--------------------------------------|----|--|-----------|
| 根管治療チップ No.5 (チップ単体、 ファイルは未梱包) | P. | 根管内の残留薬剤洗浄(ライト付超音波スケーラーにて使用)。 ファイルは、EMS社製ESIファイル(発売元:株式会社松風)を推奨します。 | 60 02 310 |

[※]対応スケーラー:シロソンL、シロソニックL/TL

「No.6Lチップ」 - 充填物圧接用

超音波振動により充填物の圧着を確実にします。



| 製品名称 | 特徴と用途 | 製品番号 |
|-------------|--|-----------|
| CEMセット No6L | 揺変性レジンセメントによりセラミックインレー (セレック等) の圧接に有用。 セット内容: No.6チップ(1本)、インレー用コンタクトキャップ (2個) | 18 94 307 |
| コンタクトキャップ | インレー用コンタクトキャップ (10個) | 18 94 372 |

※対応スケーラー:シロソンS/C8/L、シロソニック/L/TL

「シロプレップ」 - 小窩洞形成用

傾斜20度のチップ切端にダイヤモンド粒子をコーティング。「隣接面の小窩洞形成」や 「接着性インレーとアンレーの形成仕上げ」等のマイクロプレパレーションに最適。トルクレンチ付。



| | | | | AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON OF |
|------------|---|-------------------------------|---|--|
| 製品名称 | | 特徴と用途 | | 製品番号 |
| シロブレップ M1 | | 近心用、先端小 | | 59 04 276 |
| シロプレップ M2 | 1 | 近心用、先端標準 | 4 | 59 47 358 |
| シロプレップ D1 | | 遠心用、先端小 | 1 | 59 47 309 |
| シロプレップ D2 | / | 遠心用、先端標準 | 4 | 59 47 366 |
| シロプレップ セット | | セット内容: M1、M2、D1、D2 各1、トルクレンチ付 | | 59 50 253 |

**対応スケーラー:シロソンS/C8/L、シロソニック/L/TL

「シロレトロ」 - 根尖部治療用

ダイヤモンド粒子をコーティングした先端部をほぼ直角に曲げ、さらに左または右に20度のひねりを加えました。 根尖切除した根管の清掃に有用。トルクレンチ付。




[※]対応スケーラー:シロソンS/C8/L、シロソニック/L/TL

スケーリング用

歯肉縁上の幅広いスケーリング用。トルクレンチ付。



[※]対応スケーラー:シロソンS/C8/L、シロソニック/L/TL

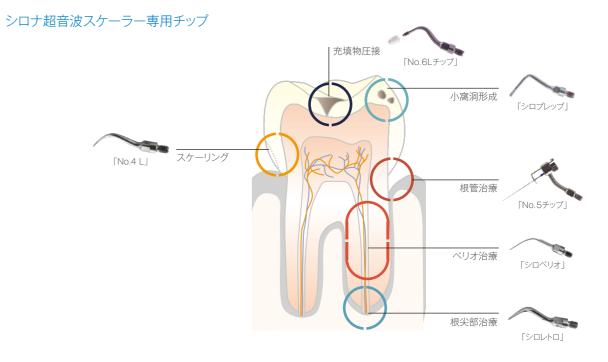

001