

CrystaBrace3

スタンダードも
リニューアル!


クリスタブレース

ボンディングベース面の改良で接着強度アップ!
ガラスと同等の透明性
メタルフリーで目立たない審美ブラケット



ボンディングベース面の改良で接着強度アップ!


当社独自のボンディングベース面を改良し従来品に比べ接着強度が上がりました。マッシュルームのような傘のある形にし機械的嵌合を高めました。

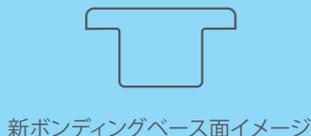


新ボンディングベース面イメージ

接着強度の比較 (従来品と改良品)

接着力(引っ張り)

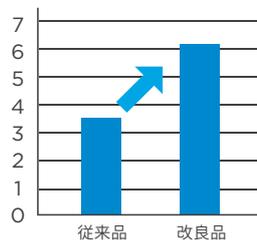

接着力(せん断)

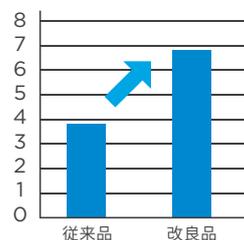

■ 390-1570:
上顎第2小臼歯
(平均値)
単位:kgf
N=30
接着材:3M
(自社試験)

① ガラスと同等の透明性

ガラスと同等の透過性を有しているため、歯牙になじみやすく目立ちません。

光学的特性	試験方法	CB素材	ガラス
光透過率	ISO 13468-2	91.7%	90-92%
光屈折率	DIN 53491(589.3nm)	1.52	1.43-2.14
アッペ数(色分散)	DIN 53491	52	30-58

出典:材料メーカーカタログ



② アレルギー対応製品

メタルフリーのため、金属アレルギーの患者さんにもご使用いただけます。

【ロスタイプ】

部位別		10個入 5,600円					
部位	トルク	アンギュレーション	.018		.022		
			右	左	右	左	
上顎	中切歯	+14	+5	320-1141	320-1142	325-1141	325-1142
	側切歯	+7	+8	320-1271	320-1272	325-1271	325-1272
	犬歯	0	+10	320-1301	320-1302	325-1301	325-1302
	第1小臼歯	-7	0	320-1470		325-1470	
	第2小臼歯	-7	0	320-1570		325-1570	
下顎	切歯	-1	0	320-5110		325-5110	
	犬歯	-7	+6	320-5371	320-5372	325-5371	325-5372
	第1小臼歯	-11	0	320-5410		325-5410	
	第2小臼歯	-17	0	320-5570		325-5570	
	プリトルクバリエーション [犬歯 6°アンギュレーション]						
上顎 犬歯	0	+6	320-5302	320-5301	325-5302	325-5301	
下顎 犬歯	0	+6	320-5301	320-5302	325-5301	325-5302	
プリトルクバリエーション [下顎切歯-5°トルク]							
下顎 切歯	-5	0	320-5150		325-5150		

一症例キット		.018		.022	
一症例キット(上下3-3)12個入		322-0301	6,720円	327-0301	6,720円
一症例キット(上下5-5)20個入		322-0501	11,200円	327-0501	11,200円
一症例キット(上下5-5)20個入 上顎犬歯+6°アンギュレーション		322-0503	11,200円	327-0503	11,200円

管理医療機器(クラスII) 歯列矯正用アタッチメント
医療機器認証番号:222AGBZX00149000

オリジナルスターターキット

初回のご購入時におすすめ。
コンサルティング模型と一症例キットの便利なセット。



コンサルティング模型 1個 一症例キット 5個

上下3-3キットの場合 68,600円

ロスタイプ .018 323-0301
.022 328-0301

上下5-5キットの場合 91,000円

ロスタイプ .018 323-0501
.022 328-0501

ロスタイプ .018 323-0503
.022 328-0503

【スタンダードエッジワイズ】

部位別		10個入 5,600円					
部位	トルク	アンギュレーション	.018		.022		
			右	左	右	左	
上顎切歯	0	0	310-1100	左右共用	315-1100	左右共用	
上顎側切歯・下顎切歯	0	0	310-0100	左右共用	315-0100	左右共用	
上下顎犬歯・小臼歯	0	0	310-0300	左右共用	315-0300	左右共用	

表示価格は、2017年10月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。
※仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

カスタマーサービス

☎ 0120-789-123
FAX:0120-120-659

受付時間
9:00~17:00
(土日祝日を除く)

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社 / 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル
http://www.dentsply-sankin.com