

製品情報

CrystaBrace7 クリスタブレース

ゴールドスロット

医療機器認証番号: 222AG8ZX00149000

[ロスタイプ] 10個 価格¥9,400

部位	トルク	アンギュレーション	.018右	.018左	.022右	.022左
中切歯	+14	+5	390-1141	390-1142	395-1141	395-1142
側切歯	+7	+8	390-1271	390-1272	395-1271	395-1272
犬歯	0	+10	390-1301	390-1302	395-1301	395-1302
第1小白歯	-7	0	390-1470	395-1470		
第2小白歯	-7	0	390-1570	395-1570		
切歯	-1	0	390-5110	395-5110		
犬歯	-7	+6	390-5371	390-5372	395-5371	395-5372
第1小白歯	-11	0	390-5410	395-5410		
第2小白歯	-17	0	390-5570	395-5570		
ロスタイプ 1症例キット(上下3-3) 12個入り			392-0301	¥12,430	397-0301	¥12,430
ロスタイプ 1症例キット(上下5-5) 20個入り			392-0501	¥20,790	397-0501	¥20,790

[ロスタイプ(フック付き)] 10個 価格¥9,900

部位	トルク	アンギュレーション	.018右	.018左	.022右	.022左
犬歯	0	+10	390-3301	390-3302	395-3301	395-3302
第1小白歯	-7	0	390-3471	390-3472	395-3471	395-3472
第2小白歯	-7	0	390-3571	390-3572	395-3571	395-3572
犬歯	-7	+6	390-7371	390-7372	395-7371	395-7372
第1小白歯	-11	0	390-7411	390-7412	395-7411	395-7412
第2小白歯	-17	0	390-7571	390-7572	395-7571	395-7572
ロスタイプ犬歯フック付き 1症例キット(上下3-3) 12個入り			392-3301	¥12,650	397-3301	¥12,650
ロスタイプ犬歯フック付き 1症例キット(上下5-5) 20個入り			392-3501	¥21,010	397-3501	¥21,010

[プリトルク バリエーション] (犬歯6° アンギュレーション)
通常のロスタイプ(+10°)のアンギュレーションだと若干強すぎる場合にご使用ください 10個 価格¥9,400

部位	トルク	アンギュレーション	.018右	.018左	.022右	.022左
犬歯	0	+6	390-5302	390-5301	395-5302	395-5301
犬歯	0	+6	390-5301	390-5302	395-5301	395-5302
ロスタイプ1症例キット(上下5-5) 20個入り 上顎犬歯+6° アンギュレーション			392-0503	¥20,790	397-0503	¥20,790

10個 価格¥9,900

部位	トルク	アンギュレーション	.018右	.018左	.022右	.022左
犬歯フック付き	0	+6	390-7302	390-7301	395-7302	395-7301
犬歯フック付き	0	+6	390-7301	390-7302	395-7301	395-7302

(下顎切歯-5° トルク)
通常のロスタイプ(-1°)より強いトルクが必要な場合にご使用ください 10個 価格¥9,400

部位	トルク	アンギュレーション	.018	.022
切歯	-5	0	390-5150	395-5150

[スタンダードエッジワイズ] 10個 価格¥8,400

部位	トルク	アンギュレーション	.018左右共用	.022左右共用
上顎切歯	0	0	380-1100	385-1100
上顎側切歯・下顎切歯	0	0	380-0100	385-0100
犬歯	0	0	380-0300	385-0300

[スタンダードエッジワイズ(フック付き)] 10個 価格¥8,900

部位	トルク	アンギュレーション	.018右	.018左	.022右	.022左
犬歯・小白歯	0	0	380-0302	380-0301	385-0302	385-0301
犬歯・小白歯	0	0	380-0301	380-0302	385-0301	385-0302

表示価格は、2017年6月現在のメーカー希望小売価格で消費税が含まれません。*仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

カスタマーサービス
☎0120-789-123
FAX: 0120-120-659

受付時間
9:00~17:00
(土・日・祝祭日を除く)

CrystaBrace7 クリスタブレース

レギュラーズロット

医療機器認証番号: 222AG8ZX00149000

[ロスタイプ] 10個 価格¥9,400

部位	トルク	アンギュレーション	.018右	.018左	.022右	.022左
中切歯	+14	+5	360-1141	360-1142	365-1141	365-1142
側切歯	+7	+8	360-1271	360-1272	365-1271	365-1272
犬歯	0	+10	360-1301	360-1302	365-1301	365-1302
第1小白歯	-7	0	360-1470	365-1470		
第2小白歯	-7	0	360-1570	365-1570		
切歯	-1	0	360-5110	365-5110		
犬歯	-7	+6	360-5371	360-5372	365-5371	365-5372
第1小白歯	-11	0	360-5410	365-5410		
第2小白歯	-17	0	360-5570	365-5570		
ロスタイプ 1症例キット(上下3-3) 12個入り			362-0301	¥12,430	367-0301	¥12,430
ロスタイプ 1症例キット(上下5-5) 20個入り			362-0501	¥20,790	367-0501	¥20,790

[ロスタイプ(フック付き)] 10個 価格¥9,900

部位	トルク	アンギュレーション	.018右	.018左	.022右	.022左
犬歯	0	+10	360-3301	360-3302	365-3301	365-3302
犬歯	-7	+6	360-7371	360-7372	365-7371	365-7372
ロスタイプ犬歯フック付き 1症例キット(上下3-3) 12個入り			362-3301	¥12,650	367-3301	¥12,650
ロスタイプ犬歯フック付き 1症例キット(上下5-5) 20個入り			362-3501	¥21,010	367-3501	¥21,010

[プリトルク バリエーション] (犬歯6° アンギュレーション)
通常のロスタイプ(+10°)のアンギュレーションだと若干強すぎる場合にご使用ください 10個 価格¥9,400

部位	トルク	アンギュレーション	.018右	.018左	.022右	.022左
犬歯	0	+6	360-5302	360-5301	365-5302	365-5301
犬歯	0	+6	360-5301	360-5302	365-5301	365-5302
ロスタイプ1症例キット(上下5-5) 20個入り 上顎犬歯+6° アンギュレーション			362-0503	¥20,790	367-0503	¥20,790

(下顎切歯-5° トルク)
通常のロスタイプ(-1°)より強いトルクが必要な場合にご使用ください 10個 価格¥9,400

部位	トルク	アンギュレーション	.018	.022
切歯	-5	0	360-5150	365-5150

[スタンダードエッジワイズ] 10個 価格¥8,400

部位	トルク	アンギュレーション	.018左右共用	.022左右共用
上顎切歯	0	0	350-1100	355-1100
上顎側切歯・下顎切歯	0	0	350-0100	355-0100
犬歯	0	0	350-0300	355-0300

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY

Dentsply
Sirona

CrystaBrace7 クリスタブレース

スタンダードも
リニューアル!

ボンディングベース面の改良で接着強度アップ!
ガラスと同等の透明性を持つ審美ブラケット




THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY

Dentsply
Sirona


ボンディングベース面の改良で 接着強度アップ！

当社独自のベース面を改良し、従来品に比べ接着強度が上がりました。
マッシュルームのような傘のある形にし機械的嵌合を高めました。

新ボンディングベース面イメージ

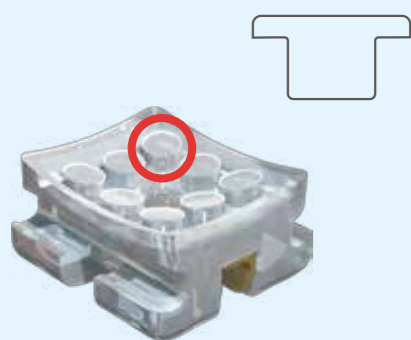

接着強度の比較 (従来品と改良品)

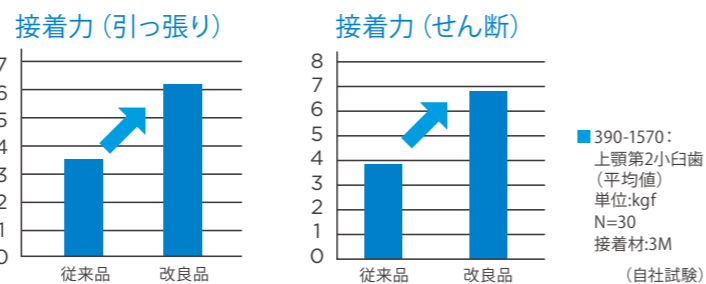

製品特長

① ガラスと同等の透明性

ガラスと同等の透過性を有しているため、歯牙になじみやすく目立たない。



光学的特性	試験方法	CB7素材	ガラス
光透過率	ISO 13468-2	91.7%	90-92%
光屈折率	DIN 53491 (589.3nm)	1.52	1.43-2.14
アッペ数(色分散)	DIN 53491	52	30-58

出展: 材料メーカーカタログ
CB: クリスタブレース

② いつまでも清潔な透明感

よごれや色素の吸着が少なく、
いつまでも清潔な透明感を保つ。
高濃度ターメリック浸透試験に
おいて色素の吸着が少ないことが
確認されました。



クリスタブレース7
色素の吸着がほとんど目立ちません。



アルミナセラミックス
黄色または薄い黄色に不均一に
染まっています。

③ 丈夫で長持ち

従来の硬質ポリカーボネートと比較し、強度・耐摩耗性・傷つきやすさが改善。

	試験方法	CB7素材	硬質ポリカーボネート
摩耗性	DIN 53754	18mg / 100rev.	27mg / 100rev.
引っかき抵抗性	DIN 52347	32% (にぎり度合)	40%

出展: 材料メーカーカタログ
CB: クリスタブレース

臨床例

写真提供: 島 芳夫先生 福井市内開業 (医療法人島矯正歯科 理事長・院長) 東京医科歯科大学歯学部附属病院矯正歯科外来 臨床教授

■ 審美面について

- ブラケット本体は透明のため、患者様にも好評
- ブラークや食物残渣などがはっきりと見えるので、ブラークコントロールに有効

■ 機能面について

- 破折・咬耗が少なく、結紮しやすいウィングの形状
- ワイヤースロットの摩擦が少なく、アライメントやスライディングに有効

■ 物性面について

- 他の材質のブラケットに比べて適度な柔らかさがあるため、装着時の違和感が少ない

■ 接着について

- ベース面の改良によりあらゆるボンディング材に対して接着強度が向上
- ディボンディングしやすく、エナメルクラックが起こりにくい



使用ブラケット: クリスタブレース7
使用ワイヤー: ニッケルチタンワイヤー (.016×.022)
使用モジュール: エラスティックモジュール(クリア)