

併せてお使いいただきたい 審美矯正装置のご紹介


DENTSPLY SIRONA Ovation Sとご一緒にホワイトコーティングワイヤー「ナノホワイト」と「プロリガチャーのクリア」を組み合わせた審美矯正をお勧めしております。



ホワイトコーティングワイヤー：ナノホワイト

タイニロイワイヤー
医療機器認証番号：16300BZZ01773000
管理医療機器（クラスII） 歯列矯正用ワイヤ

SUS ワイヤー
医療機器認証番号：20700BZZ01130000
管理医療機器（クラスII） 歯列矯正用ワイヤ

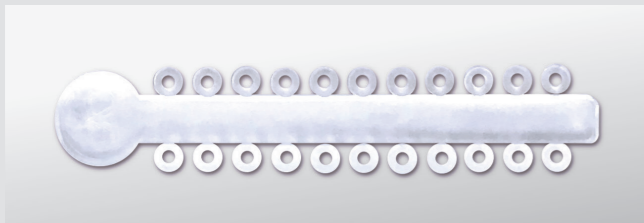

プロリガチャー：クリア

GAC エラスト
医療機器認証番号：229AGBZX00058000
管理医療機器（クラスII） 歯列矯正用エラスチック器材

製品ラインナップ

10粒入 希望小売価格：11,400円

Base(R)	部位	トルク	アンギュレーション	.018 右	.018 左	.022 右	.022 左
上 顎	中切歯	+12	+5	410-111-00	410-211-00	410-112-00	410-212-00
	側切歯	+8	+9	410-121-00	410-221-00	410-122-00	410-222-00
	犬歯（フック付）	0	+11	410-131-10	410-231-10	410-132-10	410-232-10
	第1・2 小臼歯	-7	0	410-541-00		410-542-00	
下 顎	第1・2 小臼歯（フック付）	-7	0	410-141-10	410-241-10	410-142-10	410-242-10
	切歯	0	0	410-611-00		410-612-00	
	犬歯（フック付）	-11	+5	410-331-10	410-431-10	410-332-10	410-432-10
	第1小臼歯	-17	0	410-641-00		410-642-00	
	第2小臼歯	-22	0	410-651-00		410-652-00	
	第1小臼歯（フック付）	-17	0	410-341-10	410-441-10	410-342-10	410-442-10
第2小臼歯（フック付）	-22	0	410-351-10	410-451-10	410-352-10	410-452-10	

1症例キット（上下5-5 20粒） 小臼歯フックなし .018 K410-151-10 22,800円

1症例キット（上下5-5 20粒） 小臼歯フックなし .022 K410-152-10 22,800円

10粒入 希望小売価格：11,400円

Euro(M)	部位	トルク	アンギュレーション	.022 右	.022 左
上 顎	中切歯	+17	+4	410-112-80	410-212-80
	側切歯	+10	+8	410-122-80	410-222-80
	犬歯（フック付）	0	+8	410-132-82	410-232-82
	犬歯（フック付）	-7	+8	410-132-81	410-232-81
	第1・2 小臼歯	-7	0	410-542-80	
下 顎	第1・2 小臼歯（フック付）	-7	0	410-142-81	410-242-81
	切歯	-6	0	410-612-80	
	犬歯（フック付）	0	+3	410-332-82	410-432-82
	犬歯（フック付）	-6	+3	410-332-81	410-432-81
	第1小臼歯	-12	0	410-642-80	
	第2小臼歯	-17	0	410-652-80	
	第1小臼歯（フック付）	-12	0	410-342-81	410-442-81
第2小臼歯（フック付）	-17	0	410-352-81	410-452-81	

1症例キット（上下5-5 20粒） 小臼歯フックなし K410-152-80 22,800円

販売名：DS セラミックブラケット 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：301AGBZX00005000 分類：管理（クラスII）

カスタマーサービス
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
☎ 0120-789-123 FAX:0120-120-659

製造販売元
デンツプライシロナ株式会社
本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布借成ビル
<http://www.dentsply-sankin.com>

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY

Dentsply
Sirona
Orthodontics

NEW



DENTSPLY SIRONA Ovation S デンツプライシロナ オベーション S

審美・強度・ローブリクシオンの3拍子揃った
ハイブリッドなポリサファイアブラケット




THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY

Dentsply
Sirona
Orthodontics

強度と審美性を両立したハイブリッドなブラケット

強度のある多結晶構造でありながら、特殊な研磨技術によって単結晶の審美性を実現。装着が目立たず歯の色調になじみます。

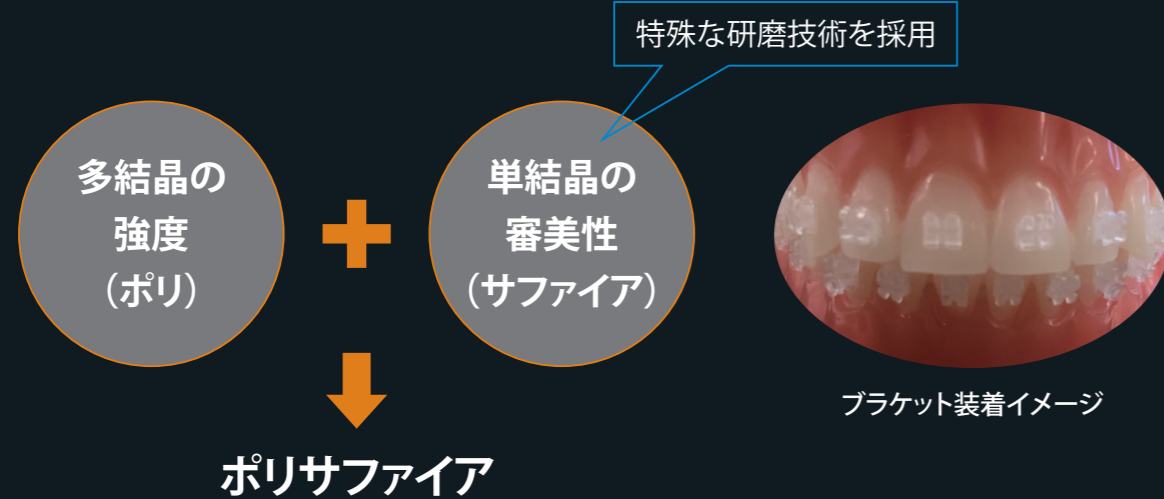

フリクションを軽減しやすいスロット

スロットの開口部分が3方向にテーパがあるため (= 3WAY スロープ)、ワイヤーの引っかかりが起こりにくく、スロットの破損を防ぎフリクションを軽減しやすくなっています。



3WAY スロープのイメージ

装着後の違和感が少ないブラケットの形状

ロープロファイルであることに加え、タイウイングのエッジとフックは丸みを帯びた形状になっており、装着した際に患者の違和感を軽減します。



ロープロファイル

横から見たイメージ

メカニカルボンディングベース

メカニカルベースで安定した機械的嵌合を獲得。必要以上に化学的結合を求めません。そのため、ディボンディングしやすくなっています。



ベース面の形状イメージ

ツールズインデザインを採用。片側結紮なども可能です。

- スロットにもカラーコードを塗布しているためブラケットのポジショニングが容易です。
- スペックは Base (Rタイプ) と Euro (Mタイプ) の2種類をご用意しております。



ツールズインデザインのイメージ

カラーコードとスペック

上 顎	Base		Euro	
	トルク	アンギュレーション	トルク	アンギュレーション
中切歯	● +12	+5	+17	+4
側切歯	● +8	+9	+10	+8
犬歯	● 0	+11	-7/0	+8
第1小白歯	● -7	0	-7	0
第2小白歯	● -7	0	-7	0

下 顎	Base		Euro	
	トルク	アンギュレーション	トルク	アンギュレーション
切歯	● 0	0	-6	0
犬歯	● -11	+5	-6/0	+3
第1小白歯	○ -17	0	-12	0
第2小白歯	● -22	0	-17	0