

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY



The best place to be  
somewhere else.

**Sinius.**



## 患者さんが本当に快適だと感じる時、それはSinusに座っているとき。

スマートな設計と並外れた快適さを備えたSinusは、患者さん一人ひとりのニーズにぴったりと合うよう設計されています。歯内治療、インプラント、患者さんとのコミュニケーションなどの機能がビルトインされ、より良い治療をより迅速に、より確実に提供することができます。患者さんと先生の双方にメリットとなるSinusの特徴とは。Discover Sinus.

### 患者さんの声

「安全だと分かることで信頼感が生まれます」

患者さんの快適性とコミュニケーションについてさらに詳しく P.4へ

「先生のリラックスした感じが患者の私にも伝わります」

術者快適性についてさらに詳しく P.8へ

「高品質と価値を見て感じるすることができます」

ハイジーン設計についてさらに詳しく P.12へ

## あらゆる診療に対する理想的な治療コンセプト



### Sinus - スライドトラック コンセプト

- 独自のエルゴノミクストリートメントコンセプト
- 前後に移動可能な手動式ドクターユニット
- すべてを手の届く範囲に置くことができる 旋回式ドクターユニット



### Sinus TS - オーバーアーム旋回式トレイ コンセプト

- オーバーアームドクターユニットおよびトレイシステムによる人間工学的診療ポジショニング
- 着脱式トレイホルダーでフレキシブルなポジショニングが可能な機能的トレイシステム
- ドクターユニットとサブトレイの十分な広さのインストゥルメントエリア



### Sinus CS - ホイップアーム コンセプト

- ドクターユニットは240°まで可動することができ、最適なポジショニングが可能
- 最大90cmまで伸びる操作性に優れたインストゥルメントホース
- 2ハンドでも4ハンドでも的確に対応

Patient comfort and communication

束の間、  
重力から解き放たれた。  
パラシュートが開いた  
瞬間のように。

The best place to be  
somewhere else.

**Sinius.**



[denstplysirona.com/sinius](https://denstplysirona.com/sinius)



患者さんが本当に快適だと感じる時、それはSiniusに座っているとき。

快適なポジショニングと円滑なコミュニケーションにより患者さんはリラックスして治療を受けることができ、先生は治療に集中することができます。



## 患者さんとのコミュニケーション

- SIDEXISソフトウェアにより、患者データ、X線画像、口腔内画像、プランニングビューに簡単にアクセスすることができます。
- オートフォーカス口腔内カメラSiroCam AF/AF+は簡単な操作で高品質な口腔画像を思い立った時にすぐに撮影することができます。
- Windows Media PlayerやMicrosoft PowerPointを使用し、簡単かつ直感的操作が可能なEasyTouchユーザーインターフェイスを介し直接患者さんに説明することができます。



## 患者さんの快適性

### 1 治療時の快適な姿勢を可能にする、人間工学に基づく患者さんのポジショニング:

- バックレストとシートが連動して動くエルゴモーション機能が、人間工学に基づいて患者さんの背骨をサポートします。
- 仰臥位での患者さんの口腔位置の高さは常に一定です。モータードライブヘッドレストが患者さんの頭部を所定の治療ポジションへ優しくスムーズに移動します。

### 3 患者さんが座りやすい位置まで下がる最低位:


- 子供や高齢の患者さんでも乗り降りが容易です。
- 最高位は床上80cm、最低位は36cmです。

### 2 首をやさしく支えるモータードライブヘッドレストの形状

- 頸椎にフィットする形状は、治療中の緊張を和らげます。
- 頸部の関節に対応した動きは、患者さんに負担をかけることなく、口腔位置を調整できます。

### 4 患者さんを包み込むソフトクッションのラウンジシート

- 柔らかく心地よい素材と快適なクッション材が高い寛ぎを実現します。表面の凹凸が的確なポジショニングを可能にします。

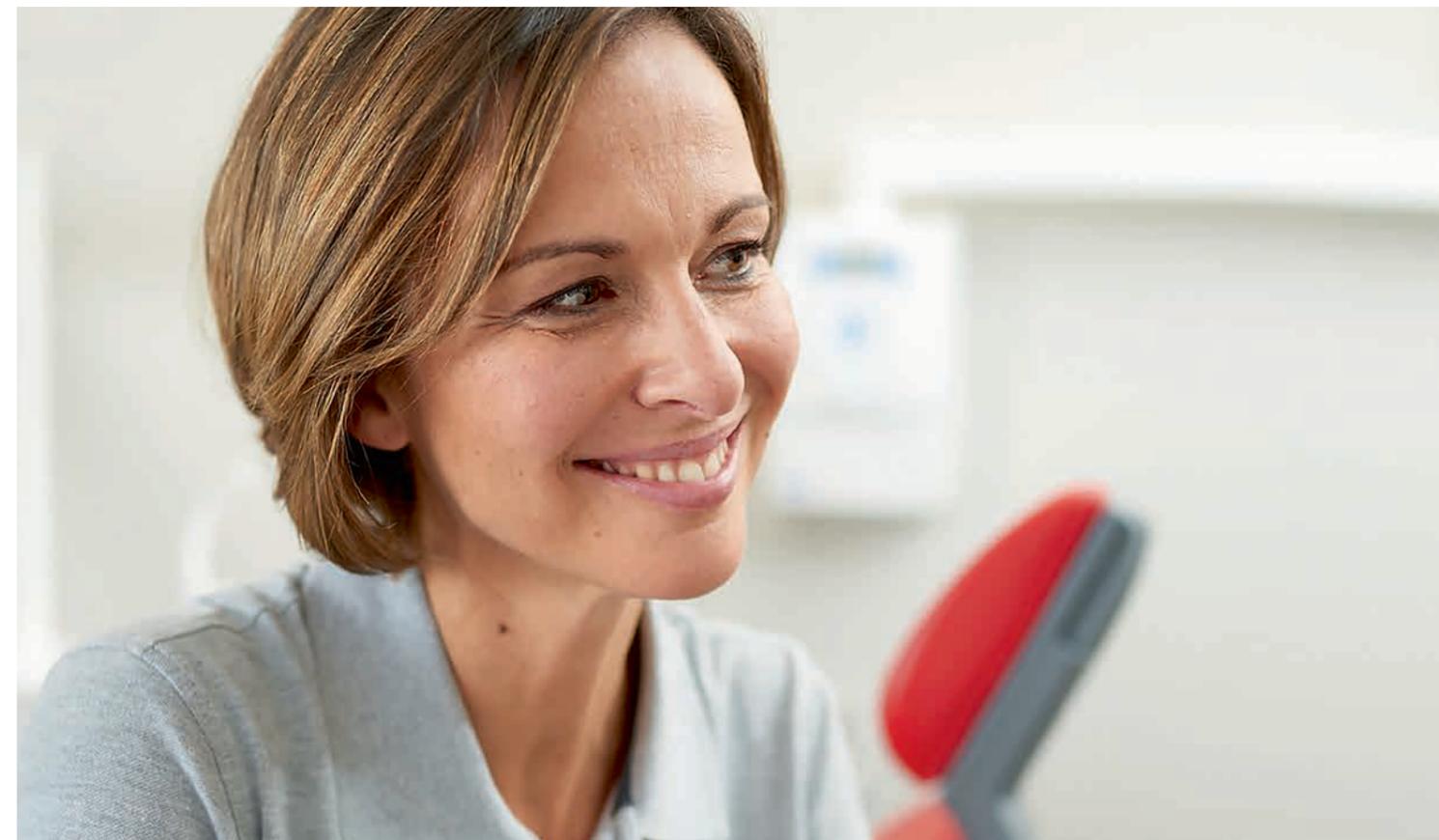

Dentist Comfort

僕は、秘密の場所を  
知っている。  
そこには誰も知らない  
宝物があるんだ。

The best place to be  
somewhere else.

**Sinius.**



[denstplysirona.com/sinius](https://denstplysirona.com/sinius)



子供の患者さんが本当に快適だと感じる時、それはSinusに座っているとき。  
短時間で快適な診療によって、患者さんの信頼を得ることができます。  
Sinusはビルトインされた治療機能で先生一人ひとりの治療コンセプトをサポートします。

## 術者の快適性

### ビルトイン インプラント機能

インプラント機能がユニットに組み込まれていることにより、診療ワークフローを簡易化します。  
画面からの直感的かつ簡単な操作が可能です。

先生独自の治療ステップを設定することができます:


- ・ 速度
- ・ トルク
- ・ 回転方向
- ・ 生理食塩水の流量



### ビルトイン 歯内治療機能

ビルトインされた歯内治療機能では追加の卓上型機器を必要としないため、準備時間を節約することができます。これにより、衛生的かつ安心して効率的な、より良いワークフローが得られます。

- ・ プロセスに基づいたファイルを選択できるファイルライブラリー
- ・ ライブラリー以外にも独自にトルク回転数を設定しメモリー可能
- ・ アベックスストップ、オートストップ、オートリバース機能
- ・ T1ライン エンド6 Lライト付きコントラアングルハンドピースでより良好な視野を提供
- ・ 統合されたレシプロカルファイルシステム

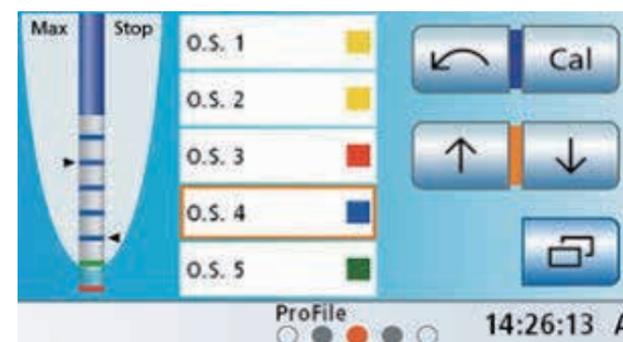

WaveOne® Gold

Hygiene and design

最高の波が  
待っている。  
サーフボードが朝陽に  
輝いて見えるわ。

The best place to be  
somewhere else.

**Sinius.**



[denstplysirona.com/sinius](https://denstplysirona.com/sinius)

患者さんが本当に快適だと感じる時、それはSinusに座っているとき。

患者さんは優れたデザインの中でよりリラックスし、ビルトインされた衛生管理システムが世界基準の治療を提供します。

## 衛生管理システム

### ビルトイン 水清浄システム

Dentosept Sを希釈した清浄水を継続的に使用します。  
絶えず使用することで、細菌の増殖を抑えます。

### ビルトイン サニテーションアダプタ

給水経路の定期的な洗浄と毎月の衛生管理を行います。  
ボタンを押すだけで、すべての給水経路がRKIガイドラインに準拠して洗浄されるか、またはDentsept Sを使用した衛生管理が実施されます。

### 自動排水プログラム

オートパージによる簡単で短時間、安全な給水経路のフラッシング。

### 効率的なサククションホースの洗浄

サククションホース・排唾ホースを、簡単かつ迅速に自動洗浄できます。

### 取外し可能なコンポーネント

衛生管理が必要なコンポーネントはすべて取り外して熱消毒または滅菌が可能です。




## デザイン

残念ながら、根管治療は夢のような旅とはいえません。  
けれども、Sinusはその優れたデザインで良いコンディションを提供します。



**心地よいシート**  
快適な素材、柔らかいクッション。  
熱成型により表面が滑らかで清掃や消毒も簡単です。

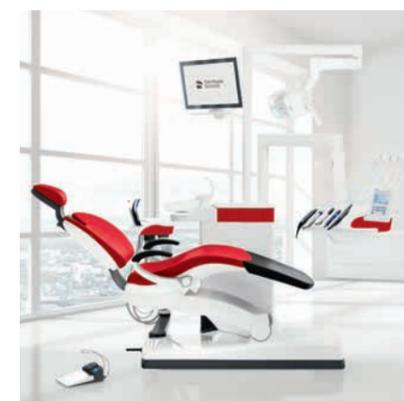

**インテリジェントデザイン**  
患者さんを優しく支える、流れるような美しい  
曲線と、衛生管理を兼ね備えた優れたデザイン



reddot design award  
winner 2012

### Upholstery colors

シートカラー

#### エレガントワールド

気品溢れる、クラシカルで時代を選ばない色調。

#### The elegant world

気品溢れる、クラシカルで時代を選ばない色調。



#### ナチュラルワールド

落ち着いた雰囲気を作り出す、  
柔らかくやさしい色調。

#### The natural world

落ち着いた雰囲気を作り出す、  
柔らかくやさしい色調。



#### バイタルワールド

陽気で現代的な雰囲気を作り出す、  
鮮やかで明るい色調。

#### The vital world

陽気で現代的な雰囲気を作り出す、  
鮮やかで明るい色調。



\*ラウンジシートカラー

### Paintwork colors

アクセントパネルカラー

ドクターユニットパネル、アシスタントユニットパネル、ウォーターユニットパネルのカラーをオプション選択可能です。\*標準はホワイトパネル



Rosé

Platinum silver

Matt gold



デンツプライシロナ イノベーションセンター(ドイツ、ペンズハイム)

私たちは、歯科医療従事者の方々により良く、より安全で、より早いデンタルケアを提供しています。

日々最善の治療を提供している歯科医療従事者の方々にご満足いただけるよう、私たちは日々口腔健康に貢献する革新的なデンタルソリューションの開発を続けています。

あなたの期待に応えます — 今だけでなくこれからもずっと。

一般的名称: 歯科用ユニット 販売名: シロナ SINIUS 認証番号: 224AABZ100065000 管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

製造販売元

## デンツプライシロナ株式会社

本社 / 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

### 支店・営業所

■ 札幌支店	Tel: 011-709-5800	■ 広島支店	Tel: 082-546-2301
■ 仙台支店	Tel: 022-266-4020	■ 福岡支店	Tel: 092-518-1800
■ 東京支店	Tel: 03-5148-7895	■ 盛岡営業所	Tel: 019-604-2340
■ 横浜支店	Tel: 045-440-1521	■ 庄内営業所	Tel: 0235-29-1217
■ 名古屋支店	Tel: 052-251-8467	■ 埼玉営業所	Tel: 048-799-2931
■ 大阪支店	Tel: 06-6243-6636	■ 静岡営業所	Tel: 054-653-2711

※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

BT 6601PD