


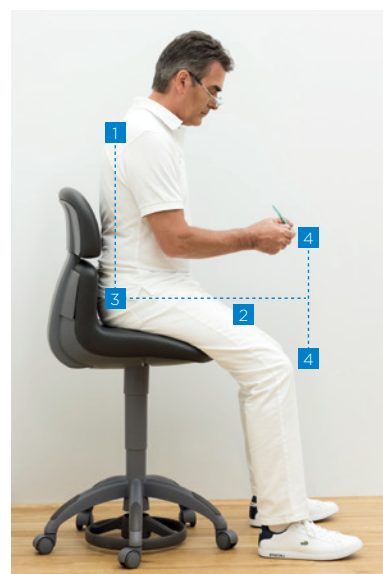


## 健康的な座位診療姿勢の基本

- 1 深く座り、上半身をまっすぐにして背を伸ばします
- 2 腰は太ももよりも高くします
- 3 作業を休止するときだけ、背もたれに背をつけます
- 4 膝と手の距離は、患者さんの頭部を囲みいれるスペースを確保する程度に広げてください。

## Working stool line-up

### Hugo (フーゴ)

デンツプライシロナのエルゴノミクスプログラムを体现したフラッグシップモデル

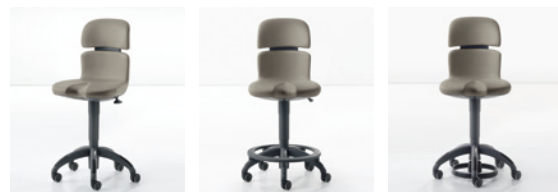

**Hugo マニュアル**  
座面下部のレバーによるマニュアル高さ調整

**Hugo マニュアルプラス**  
フットレスト付き、座面下部のレバーによるマニュアル高さ調整

**Hugo フリーハンド**  
フットリングでの高さ調整により衛生的

### Theo (ゼオ)

着座の安定性と快適性を兼ね備えたサドルスツール



**Theo**  
熱がこもりにくいサーモシート採用モデル

**Theo ラウンジシート**  
見た目にも美しいラウンジシートモデル

### Carl (カール)

背もたれが360°回転し、診療中の姿勢をサポート



**Carl マニュアル**  
座面下部のレバーによるマニュアル高さ調整

**Carl マニュアルプラス**  
フットレスト付き、座面下部のレバーによるマニュアル高さ調整

#### 高さの目安

|      |                |
|------|----------------|
| ロング  | 身長 170cm~200cm |
| ショート | 身長 150cm~180cm |

#### 製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

#### 支店・営業所

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ■札幌支店 Tel: 011-709-5800  | ■大阪支店 Tel: 06-6243-6636  |
| ■仙台支店 Tel: 022-266-4020  | ■広島支店 Tel: 082-546-2301  |
| ■東京支店 Tel: 03-5148-7895  | ■福岡支店 Tel: 092-518-1800  |
| ■横浜支店 Tel: 045-440-1521  | ■盛岡営業所 Tel: 019-604-2340 |
| ■埼玉支店 Tel: 048-799-2931  | ■庄内営業所 Tel: 0235-29-1217 |
| ■名古屋支店 Tel: 052-251-8467 | ■静岡営業所 Tel: 054-653-2711 |

BT 6901PD

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY

Dentsply  
Sirona

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY

Dentsply  
Sirona

## Working stools

It's all about  
keeping the balance

dentsplysirona.com



## Theo – the flexible one

**NEW:** Theo (ゼオ) はデンツプライシロナのトリートメントセンターのための、人間工学的なワーキングスツールです。このサドルスツールは、着座の安定性と快適性を兼ね備え、健康的な姿勢をもたらします。高い座席位置は患者さんへの容易なアクセスを可能にします。快適なクッションとシート形状の組み合わせにより、長時間の診療でも優れた人間工学的なサポートを得られます。

- 動きと連動する、洗練されたシート形状とメカニズム
- プレミアムサーモシートと快適なラウンジシート
- 2つの高さから選択可能



### 独自のバランスメカニズム

シートの動きを調整することで、Theoは術者の動きに最大限の柔軟性を与えます。バランスメカニズムの動作範囲は、リングを1回転させるだけで調整できます。その結果、筋肉群や椎間板への圧力が軽減されるため、作業姿勢を長期間維持することができ、腰や背中などの痛みを軽減することができます。



### サーモシート

長時間にわたる治療中でも熱がこもりにくく、快適性を向上させます。



### ラウンジシート

より良い快適性のために、Theoはクッション性のあるラウンジシート素材も選択できます。快適さだけでなく見た目にもアピールします。

## Hugo – the ergonomics expert

Hugo (フーゴ) はデンツプライシロナのエルゴノミクスプログラムにおいて重要な要素であり、独自の技術を取り入れています。人間工学に基づいた直感的な座位を促進し、治療プロセス全体を通して健康的な姿勢を維持することを可能にします。ダイナミックに、快適に、衛生的で、そして多用途-Hugoスツールはあなたのトリートメントセンターを補完します。

### バックレスト – よりダイナミックな サポートのために

動的なHugoのバックレストは多くの柔軟性を与えます。診療中やリラックスし座っている間、バックレストは術者の動きに連動しサポートします。それにより、背骨は自然とまっすぐに伸び、筋肉の緊張を効果的に防ぎます。



### シート – より快適に

革新的なオプチモーション機構は、より自由な動きと患者さんへの容易なアクセスを可能にします。シートの前部が左右に沈み込むフレキシブルな傾斜により、大腿部裏側の圧迫を多分に軽減させます。サーモシートは、長時間にわたる治療中でも熱がこもりにくく、快適性を向上させます。



### スツールベース – よりフレキシブルに

Hugoは診療チームのそれぞれのメンバーに合うように、フットリングにより簡単に衛生的に座面高さを調整することができます。

