

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Seria de instrumente T1, T2 și T3

La fel de personale ca propriul
dumneavoastră scris de mână.


dentsplysirona.com




Doar ce este mai bun pentru fiecare aplicație

Pentru rezultate optime de lucru sunt necesare instrumentele potrivite, rezultate precise putând fi obținute doar cu instrumente ușoare, simplu de manevrat. Seria noastră de instrumente îndeplinește această cerință în mod consecvent. Indiferent de seria aleasă, veți beneficia de produse de calitate superioară care vă fac munca mai plăcută – pentru toate domeniile de aplicare și pentru toate etapele de lucru.


Indiferent de situație,
Dentsply Sirona oferă
întotdeauna soluția potrivită

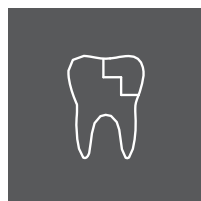


Prepararea cavității
și a coroanei

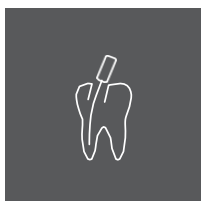

Endodonție

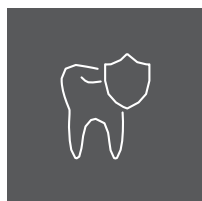


Profilaxie

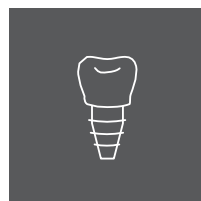

Implantologie



Chirurgie

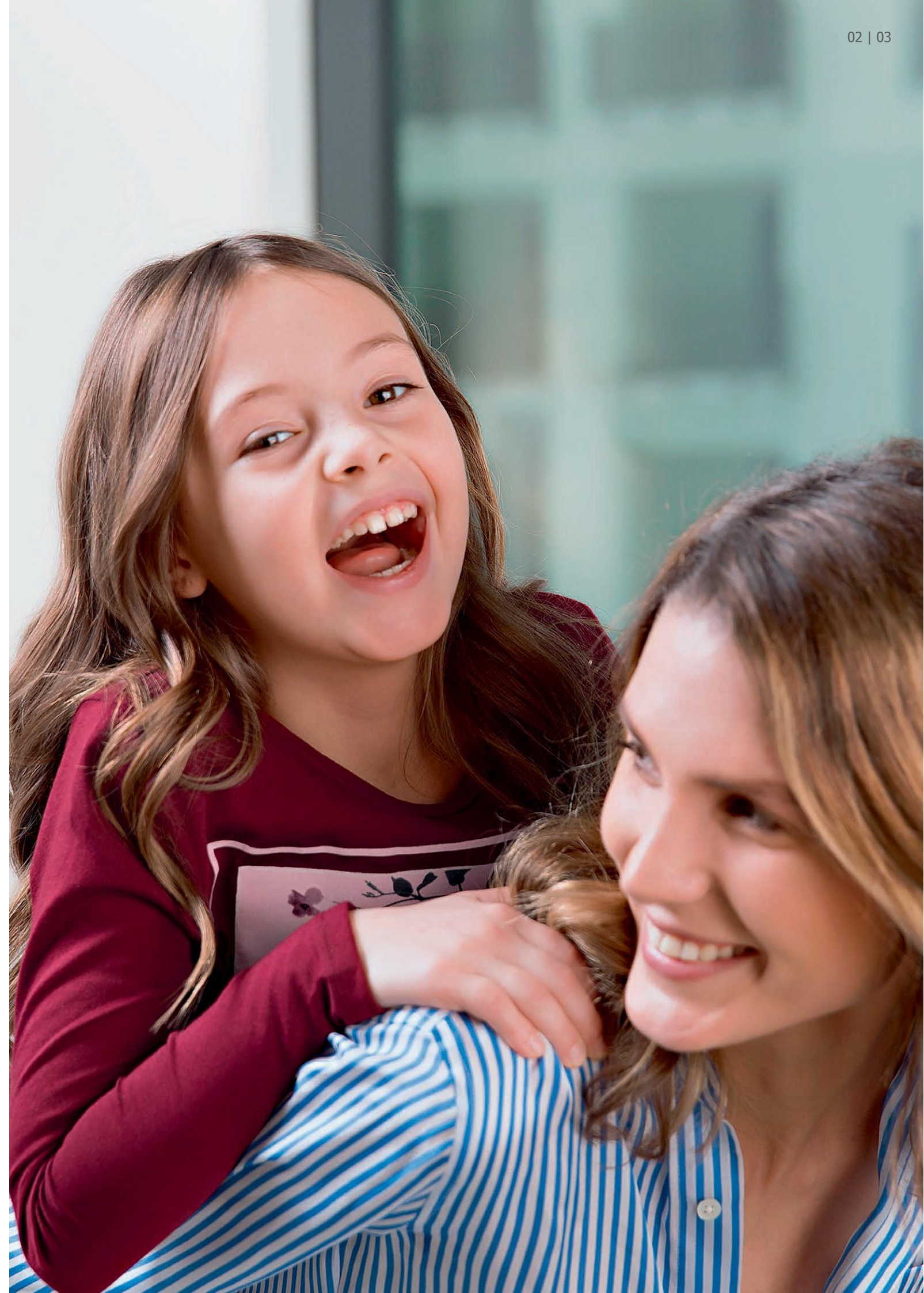

Turbine – foarte puternice, dar foarte silențioase

Portofoliul nostru de turbine vă pune la dispoziție produse pentru orice nevoie. Toate au un lucru în comun: control operațional complet cu randament maxim – și, în plus, sunt mai silențioase ca niciodată.



Fiecare turbină oferă:

- Până la 26 wați pentru cuplu de torsiune ridicat
- Vedere optimă grație iluminării ideale și dimensiunilor mici ale capului: volum redus al capului cu până la 11%
- Opritor dublu pentru aspirație inversă (sistem de protecție a capetelor)
- Rulmenți ceramici robuști
- Funcție de oprire rapidă: timpul de rulare rapidă a polizorului este redus cu până la 50% datorită funcției de oprire rapidă fără uzură
- Debit incredibil de silențios datorită pulverizatorului cu 4 duze
- Igienice: pot fi sterilizate și dezinfectate termic
- Control dinamic al vitezei (Dynamic Speed Control - DSC) pentru o funcționare mai lină la o viteză de rotație mai mică
- Filtru de apă încorporat



Fiecare produs are caracteristici calitative excelente



Dimensiuni mici ale capetelor

Dimensiunile mici ale capetelor instrumentelor de la Dentsply Sirona asigură confort ergonomic și rezultate precise, garantând în același timp o perspectivă optimă asupra câmpului de lucru în orice moment. Capul mini-turbinei are un diametru de numai 9,7 mm și o putere de 21 W.




Design ergonomic cu materiale de calitate superioară

Indiferent că sunt realizate integral din titan, precum clasa T1 Premium sau din oțel inoxidabil solid cu aderență extraordinară, precum clasele T2 și T3, materialele noii generații de turbine vă facilitează munca în cel mai bun mod posibil.




Control dinamic al vitezei (DSC)

Cu ajutorul funcției DSC, viteza de ralanti a turbinelor Dentsply Sirona este limitată, fără a-și reduce vizibil puterea.

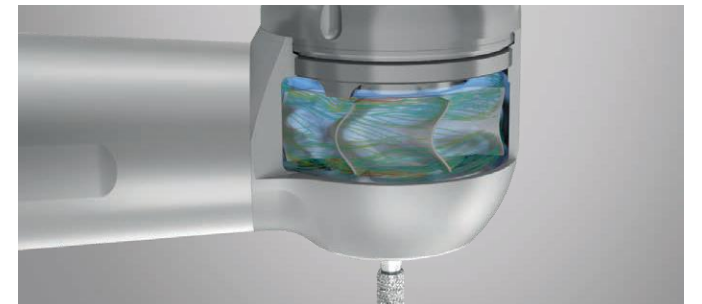

Oprire rapidă fără uzură

Fără influență mecanică, turbinele T1 și T2 Control au un timp de rulare mai mic de o secundă.

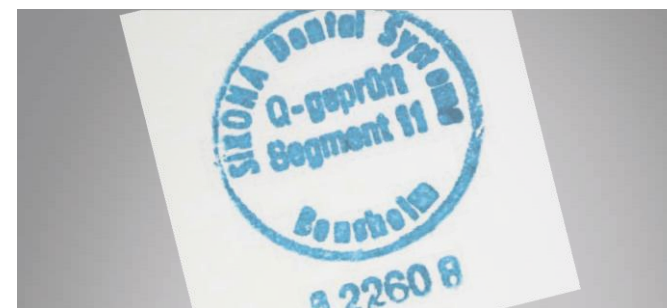

Durată de funcționare îndelungată, garantată

Toate instrumentele de la Dentsply Sirona au o durată de funcționare îndelungată, cu o garanție de cel puțin 12 luni.



Aderență puternică

Turbinele din clasele T2 și T3 au o suprafață finisată care asigură o prindere excepțional de puternică, susținând o muncă confortabilă.

Turbinele T1 – perfecțiunea în mâna dumneavoastră

Turbinele din clasa premium sunt extrem de echilibrate în mâna dumneavoastră. Indiferent dacă alegeți T1 Control, T1 Boost sau T1 mini, toate turbinele asigură o putere ridicată și un control optim în orice moment și sunt extrem de silențioase în timpul funcționării.



Turbinele T1 oferă următoarele avantaje:

- Corp ergonomic ușor din titan: cu 22% mai ușor decât înainte
- Rulmenți ceramici placați cu DLC*
- Control dinamic al vitezei (Dynamic Speed Control - DSC) pentru o funcționare mai lină și fără rupere
- Înlocuirea economică a cartușului rotorului de către utilizator
- Reducerea dimensiunii capului la putere constantă sau chiar ridicată.

Turbinele T2 – calitatea pe care vă puteți baza

Vă puteți baza pe turbinele noastre din clasa T2 în orice situație. Performanța constantă ridicată și forma ergonomică combinată cu finisajul corpului exterior pentru aderență puternică a acestor turbine din oțel inoxidabil garantează satisfacția în orice situație.



Turbinele T2 oferă următoarele avantaje:

- Robustețe ridicată datorită corpului exterior fabricat din oțel inoxidabil și finisajului corpului exterior pentru aderență puternică
- Rulmenți ceramici robuști
- Control dinamic al vitezei (Dynamic Speed Control - DSC) pentru o funcționare mai lină și fără rupere
- Adecvate pentru toate versiunile comune cu cuplaj rapid (Click & Go)
- Înlocuirea economică a cartușului rotorului de către utilizator



Nivel scăzut de zgomot: Turbine T2 cu pulverizator cu 4 duze

* Durată mai mare de funcționare datorită rulmenților placați cu DLC (carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului)



Calitate de top „Made in Germany”

„Made in Germany” – aceasta este promisiunea mărcii Dentsply Sirona de a pune întotdeauna pe primul loc satisfacția clienților. Promisiunea este respectată. Iar aici, în Germania, îi aducem un suflu nou în fiecare zi. Calitatea excelentă a instrumentelor noastre se bazează pe trei valori germane tipice: meticulozitate, fiabilitate și spirit de pionierat.

Turbinele T3 – cu cuplaj rapid

Turbinele din clasa T3 sunt fabricate din oțel inoxidabil, sunt ușor de curățat și au o aderență bună datorită finisajului corpului exterior. Puterea de până la 26 de wați și rulmenții ceramici asigură o performanță eficientă pe termen lung. Cu alte cuvinte: eficiență de durată.



T3 mini: Opțiunile de capete extrem de mici vă permit accesul optim în regiunea molarilor și o perspectivă optimă asupra câmpului de lucru. T3 mini prezintă un raport impresionant între dimensiunea capului (înălțime: 12,7 mm, diametru: 9,7 mm) și cuplul de torsiune.

T3 Boost: Turbina T3 Boost robustă este universală! Turbina din oțel inoxidabil iese în evidență datorită ușurinței de utilizare și are puterea necesară pentru a răspunde oricărei cerințe.

Turbinele T3 oferă și:

- Un sistem de fixare cu cleme cu vibrații scăzute
- Filtru de apă încorporat

Turbinele T3 – conexiune fixă

Materialele stabile pe termen lung asigură faptul că turbinele T3 cu conexiune fixă rămân solide în viitor. Turbina cu pulverizator cu 4 duze este extrem de silențioasă, iar corpul de calitate superioară este simplu și rapid de curățat.



T3 mini: Opțiunile de capete extrem de mici vă permit accesul optim în regiunea molarilor și o perspectivă optimă asupra câmpului de lucru. T3 mini prezintă un raport impresionant între dimensiunea capului (înălțime: 12,7 mm, diametru: 10,2 mm) și cuplul de torsiune.


T3 Racer: Cu până la 30 de wați, turbina T3 Racer este de departe cea mai puternică turbină cu conexiune fixă. Acest lucru înseamnă că puteți lucra mai rapid, dar și mai eficient.

Turbinele T3 (cu conexiune fixă) oferă și:

- Opțiuni de Midwest cu 4 ieșiri și Borden 2/3 ieșiri
- Un sistem de fixare cu cleme cu vibrații scăzute



Seria de instrumente T1, T2 și T3 – cerințele dumneavoastră, alegerea dumneavoastră

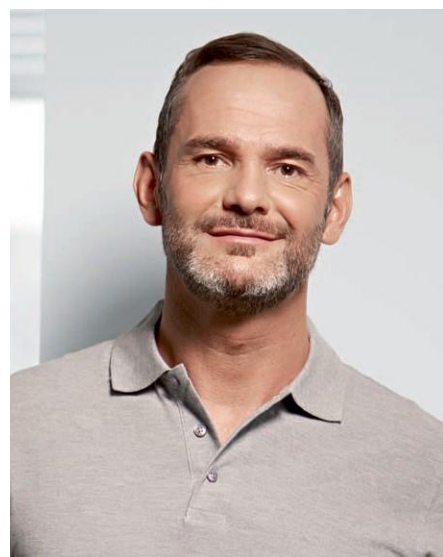

Fiabilitatea are prioritate.

„Iau în considerare doar instrumentele cu caracteristici de primă clasă, executate excelent.”



Calitatea contează.

„Instrumentele cu un grad ridicat de funcționalitate și cu o ergonomie ideală sunt singura alegere corectă pentru mine.”



Avantajele oferite de produsele testate.

„Voi lua în considerare doar instrumentele care oferă un raport bun calitate-preț.”

Seria de instrumente T1 Line –

Vă mențineți flexibilitatea, cu ușurință.

Seria de instrumente pentru turbina T1 –

Perfecțiunea în mâna dumneavoastră.

Seria de instrumente T2 Line/T2 S-Line –

Soluția confortabilă.

Seria de instrumente pentru turbina T2 –

Calitate pe care vă puteți baza.

Seria de instrumente T3 Line/T3 S-Line –

Rentabilitate continuă.

Seria de instrumente pentru turbina T3 –

Cuplaj rapid/conexiune fixă.



Piese drepte și contraunghi – unice pentru fiecare clasă

Indiferent dacă lucrați cu o piesă de mână de mare viteză sau cu un instrument de mică viteză, veți obține cu siguranță rezultate de calitate superioară pentru toate aplicațiile.



Fiecare piesă dreaptă și contraunghi oferă:

- Igienă perfectă - acestea pot fi sterilizate și dezinfectate termic
- Sistem de pulverizare optimă
- Debit incredibil de silențios datorită pulverizatorului cu 4 duze
- Perspectivă optimă grație dimensiunilor mici ale capului
- Corp ergonomic ușor din titan



T1 Line – vă mențineți flexibilitatea, cu ușurință

Seria T1 Line de piese drepte și contraunghi de calitate superioară excelează prin designul ergonomic. Acestea sunt foarte ușoare datorită corpului din titan.

Garantează lucrul fără oboseală și rezultate precise. Vă oferă flexibilitate datorită interfeței ISO, indiferent de centrul de tratament utilizat.



T1 Line vă oferă următoarele avantaje:

- Garanție 3 ani
- Durată mai mare de funcționare datorită rulmenților placați cu DLC (carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului)
- Iluminare optimă pentru o perspectivă excelentă asupra câmpului de lucru
- O interfață ISO universală
- Adaptabilitate la motoarele cu lampă datorită elementului ISO Slider®

T2 Line – soluția confortabilă

T2 Line reprezintă seria de piese drepte și contraunghi robuste din clasa confort. Calitatea și expertiza Dentsply Sirona se combină pentru a crea o serie de produse funcționale și fiabile care asigură concentrarea exclusivă asupra tratamentului.



Profitați de numeroasele funcții convenabile:

- Garanție 2 ani
- Iluminare optimă pentru o perspectivă excelentă asupra câmpului de lucru
- O interfață ISO universală
- Adaptabilitate la motoarele cu lampă datorită elementului ISO Slider®



T2 S-Line:

- Considerabil mai scurte, prin urmare, mai ergonomice
- Foarte ușoare datorită dimensiunii compacte
- Cel mai mic cap are un diametru de doar 8,7 mm

T3 Line – rentabilitate continuă

Piesele drepte și contraunghi din clasa T3 sunt solide datorită corpului extrem de robust din titan și constituie o investiție care va satisface cerințele din viitor.



T3 Line oferă și:

- Interfață ISO universală



T3 S-Line

- Considerabil mai scurte, prin urmare, mai ergonomice
- Foarte ușoare datorită dimensiunii compacte
- Cel mai mic cap are un diametru de doar 8,7 mm



Comparație între T2 Line și T2 S-Line: Cu 11,7% mai scurte

Piesa contraunghi potrivită pentru fiecare sarcină

Clasa premium reprezintă gama complexă de piese contraunghi speciale de la Dentsply Sirona. Astfel, veți găsi cu siguranță soluția potrivită pentru fiecare sarcină.



Prophy pentru profilaxie

Piesa contraunghi Prophy permite șlefuirea excepțională a dinților și a suprafețelor de material împreună cu periile și capelinele.



EVA 04 L/11 L pentru micropreparări

Datorită flexibilității de reglare a acului, piesa contraunghi EVA este potrivită pentru șlefuire, pentru îndepărtarea reziduurilor de material compozit și pentru netezirea suprafețelor radiculare.



Endo L pentru endodonție

Principiul 2 în 1 de preparare a canalului radicular se bazează pe furnizarea unei singure piese contraunghi care permite utilizarea eficientă a pilelor și acelor manuale, precum și a pilelor și acelor din oțel operate mecanic.



Endo 6 L pentru endodonție/endometrie

În combinație cu ApexLocator, Endo 6 L permite localizarea apexului fără clemă. Capul extraordinar de mic îi asigură medicului stomatolog o vedere mai bună pe canal.





Doriți să eliminați riscurile de infectare? Activați DAC Universal!

Respectați standardele de control al infecțiilor prin simpla atingere a unui buton și evitați contaminarea încrucișată: Sunteți în siguranță cu DAC Universal. Pacienții și angajații dumneavoastră se pot baza pe această protecție completă și își pot pune toată încrederea în tratamentul cu instrumente reprocesate și dezinfectate termic.

Manevrare ușoară

- Nou design
- Ecran tactil cu interfață intuitivă pentru utilizator
- Flux de lucru de întreținere ghidat Verificare & Curățare

Reprocesare eficientă din punct de vedere al costurilor

- Costuri de exploatare și consum reduse – nu se utilizează substanțe chimice de curățare și dezinfectare și indicatori chimici
- Investiții reduse în instrumente datorită procesului de răcire la terminarea ciclului și, prin urmare, posibilitate de reutilizare rapidă

Reprocesare complet automată

- Șase instrumente în aproximativ 15 de minute
- Curățare la interior și la exterior, lubrifiere (dacă este necesar) și dezinfectare a pieselor drepte și contraunghi, turbinelor, pieselor de mână și vârfuri ultrasonice, duzelor de seringi multifuncționale și dispozitive cu jet de pulbere, precum și a pieselor de mână cu jet de pulbere
- Siguranța proceselor cu selectare automată a programului
- Interfață LAN pentru documentație electronică

Siguranță din punct de vedere legal

- Proces de curățare și dezinfectare ce poate fi validat
- Proces de curățare și dezinfectare conform EN ISO 15883-1/-2



Prezentarea generală a datelor tehnice

T1 Line

Tipuri			Raport de transmisie /reducere	Viteze	Diametru cap (mm)	Înălțime cap (mm)	Caracteristici	Indicație	Ref.
T1 Line C 200 L	☼	●	1: 5	Până la aprox. 200.000	Aprox. 8,7	Aprox. 14,6	Dia. 1,6 FG	Prepararea cavității și a coroanei	33 28 452
T1 Line C 40 L	☼	●	1: 1	Până la aprox. 40.000	Aprox. 8,7	Aprox. 12,4	Dia. 2,35 WB	Finisare	33 28 437
T1 Line C 6 L	☼	●	6: 1	Până la aprox. 6.000	Aprox. 8,7	Aprox. 12,4	Dia. 2,35 WB	Excavare	33 28 429
T1 Line C 1,6 L	☼	●	24: 1	Până la aprox. 1.600	Aprox. 8,7	Aprox. 12,4	Dia. 2,35 WB	Excavare	33 28 411
T1 Line H 40 L	☼	●	1: 1	Până la aprox. 40.000	—	—	Dia. 2,35 HB/WB	Pregătire	60 31 277

Piesă contraunghi, roșu 1: 5 cu pulverizator cu 4 duze, piese contraunghi, albastru 1: 1 și verde 6: 1 sau 24: 1 cu pulverizator cu 1 duză, piesă de mână, albastru 1: 1 cu pulverizator cu 1 duză.

Turbinele T1

Tipuri		Putere (W)	Diametru cap (mm)	Înălțime cap (mm)	Greutate (g)	Viteză la ralanti (rpm)	Indicație
T1 Control	☼	Până la 22	Aprox. 11,9	Aprox. 13,0	Aprox. 44	Aprox. 250.000	Pregătirea cavității
T1 Boost	☼	Până la 26	Aprox. 11,4	Aprox. 12,7	Aprox. 44	Aprox. 370.000	Pregătirea cavității
T1 mini	☼	Până la 21	Aprox. 9,7	Aprox. 12,7	Aprox. 43	Aprox. 410.000	Pregătirea cavității

Tipuri/Ref.	Conexiune Dentsply Sirona	Conexiune KaVo
T1 Control	66 89 348	66 89 363
T1 Boost	66 89 389	66 89 405
T1 mini	66 89 421	66 89 462

Cuplaj rapid Dentsply Sirona/Ref.	R, cu flux de aer de retur	R (LED), cu flux de aer de retur	F, fără flux de aer de retur
Interfață standard cu 4 ieșiri cu lampă, control al pulverizării și opritor pentru aspirație inversă	18 94 588	63 19 706	41 74 467

Piese contraunghi speciale

Tipuri	Raport de transmisie /reducere	Viteze/cicluri	Caracteristici	T1 Classic Ref.	T1 Classic Ref.	Indicație
Prophy	2,4: 1	Până la aprox. 5.000	Clipsabil și cu șurub	58 99 278	18 94 901	Profilaxie
EVA 04 L	–	Cursă 0,4 mm	–	58 99 237	33 29 260	Lustruire
EVA 11 L	–	Cursă 1,1 mm	–	58 99 245	41 77 015	Lustruire
Endo L	–	Mișcare ± 30°	Dia. tijă 3,6–4,0/Dia. adaptor 2,35	58 99 260	58 69 552	Endodonție
Endo 6 L	6: 1	Până la aprox. 6.000	Dia. 2,35 WB	–	65 27 191	Endodonție

Prezentarea generală a datelor tehnice

T2 Line

Tipuri			Raport de transmisie /reducere	Viteze	Diametru cap (mm)	Înălțime cap (mm)	Caracteristici	Indicație	Ref.
T2 Line A 200 L	☀	●	1: 5	Până la aprox. 200.000	Aprox. 8,7	Aprox. 14,6	Dia. 1,6 FG	Prepararea cavității și a coroanei	63 76 177
T2 Line A 40 L	☀	●	1: 1	Până la aprox. 40.000	Aprox. 8,7	Aprox. 12,4	Dia. 2,35 WB	Finisare	63 76 185
T2 Line A 6 L	☀	●	6: 1	Până la aprox. 6.000	Aprox. 8,7	Aprox. 12,4	Dia. 2,35 WB	Excavare	63 76 193
T2 Line AH 40 L	☀	●	1: 1	Până la aprox. 40.000	–	–	Dia 2,35 HB/ WB	Pregătire	63 76 201

Piesă contraunghi, roșu 1: 5 cu pulverizator cu 4 duze, piese contraunghi, albastru 1: 1 și verde 6: 1 cu pulverizator cu 1 duză, piesă de mână, albastru 1: 1 cu pulverizator cu 1 duză

T2 S-Line

Tipuri			Raport de transmisie /reducere	Viteze	Diametru cap (mm)	Înălțime cap (mm)	Caracteristici	Indicație	Ref.
T2 S-Line AS 200 L	☀	●	1: 5	Până la aprox. 200.000	Aprox. 8,7	Aprox. 14,6	Dia. 1,6 FG	Prepararea cavității și a coroanei	65 76 065
T2 S-Line AS 40 L	☀	●	1: 1	Până la aprox. 40.000	Aprox. 8,7	Aprox. 12,4	Dia. 2,35 WB	Finisare	65 76 073
T2 S-Line AS 6 L	☀	●	6: 1	Până la aprox. 6.000	Aprox. 8,7	Aprox. 12,4	Dia. 2,35 WB	Excavare	65 76 081

Piesă contraunghi, roșu 1: 5 cu pulverizator cu 4 duze, piese contraunghi, albastru 1: 1 și verde 6: 1 cu pulverizator cu 1 duză

Turbinele T2

Tipuri		Putere (W)	Diametru cap (mm)	Înălțime cap (mm)	Greutate (g)	Viteză la ralanti (rpm)	Indicație
T2 Control	☀	Până la 22	Aprox. 11,9	Aprox. 13,0	Aprox. 54	Aprox. 250.000	Pregătirea cavității
T2 Boost	☀	Până la 26	Aprox. 11,4	Aprox. 12,7	Aprox. 54	Aprox. 370.000	Pregătirea cavității
T2 mini	☀	Până la 21	Aprox. 9,7	Aprox. 12,7	Aprox. 53	Aprox. 410.000	Pregătirea cavității

Tipuri/ref.	Conexiune Dentsply Sirona	Conexiune KaVo	Conexiune W&H:	Conexiune NSK:
T2 Control	66 89 520	66 89 546	66 89 561	66 89 603
T2 Boost	66 89 629	66 89 637	66 89 652	66 89 678
T2 mini	66 89 702	66 89 744	66 89 769	66 89 785

Cuplaj rapid Dentsply Sirona/ref.	R, cu flux de aer de retur	R (LED), cu flux de aer de retur	F, fără flux de aer de retur
Interfață standard cu 4 ieșiri cu lampă, control al pulverizării și opritor pentru aspirație inversă	18 94 588	63 19 706	41 74 467

T3 Line

Tipuri			Raport de transmisie /reducere	Viteze	Diametru cap (mm)	Înălțime cap (mm)	Caracteristici	Indicație	Ref.
T3 Line E 200		●	1: 5	Până la aprox. 200.000	Aprox. 8,7	Aprox. 14,6	Dia. 1,6 FG	Prepararea cavității și a coroanei	63 92 679
T3 Line E 40		●	1: 1	Până la aprox. 40.000	Aprox. 8,7	Aprox. 12,4	Dia. 2,35 WB	Finisare	63 92 687
T3 Line E 6		●	6: 1	Până la aprox. 6.000	Aprox. 8,7	Aprox. 12,4	Dia. 2,35 WB	Excavare	63 92 695
T3 Line EH 40		●	1: 1	Până la aprox. 40.000	–	–	Dia. 2,35 HB/WB	Pregătire	63 92 711

T3 Line: Piesă contraunghi, roșu 1: 5 cu pulverizator cu 4 duze, piese contraunghi, albastru 1: 1 și verde 6: 1 cu pulverizator cu 1 duză.

T3 S-Line

Tipuri			Raport de transmisie /reducere	Viteze	Diametru cap (mm)	Înălțime cap (mm)	Caracteristici	Indicație	Ref.
T3 S-Line ES 200		●	1: 5	Până la aprox. 200.000	Aprox. 8,7	Aprox. 14,6	Dia. 1,6 FG	Prepararea cavității și a coroanei	65 76 123
T3 S-Line ES 40		●	1: 1	Până la aprox. 40.000	Aprox. 8,7	Aprox. 12,4	Dia. 2,35 WB	Finisare	65 76 131
T3 S-Line ES 6		●	6: 1	Până la aprox. 6.000	Aprox. 8,7	Aprox. 12,4	Dia. 2,35 WB	Excavare	65 76 149

T3 S-Line: Piesă contraunghi, roșu 1: 5 cu pulverizator cu 4 duze, piese contraunghi, albastru 1: 1 și verde 6: 1 cu pulverizator cu 1 duză

Turbinele T3 – cu cuplaj rapid

Tipuri	Putere (W)	Diametru cap (mm)	Înălțime cap (mm)	Greutate (g)	Viteză la ralanti (rpm)	Pulverizator	Caracteristici (mm)	Indicație
T3 Boost	Până la 26	Aprox. 11,4	Aprox. 13,0	Aprox. 54	Aprox. 370.000	4	1,6 FG	Pregătirea cavității
T3 mini	Până la 21	Aprox. 9,7	Aprox. 12,7	Aprox. 53	Aprox. 410.000	4	1,6 FG	Pregătirea cavității

Tipuri/ref.	Conexiune Dentsply Sirona	Conexiune KaVo
T3 Boost	66 89 801	66 89 827
T3 mini	66 89 843	66 89 868

Cuplaj rapid Dentsply Sirona/Ref.	F, fără flux de aer de retur
Interfață standard cu 4 ieșiri cu lampă, control al pulverizării și opritor pentru aspirație inversă	41 74 467

Turbinele T3 – conexiune fixă

Tipuri	Putere (W)	Diametru cap (mm)	Înălțime cap (mm)	Greutate (g)	Viteză la ralanti (rpm)	Pulverizator	Caracteristici (mm)	Indicație	Ref.
T3 Racer Midwest	Până la 30	Aprox. 11,9	Aprox. 13,0	Aprox. 46	Aprox. 400.000	4	1,6 FG	Pregătirea cavității	64 60 385
T3 Racer Borden	Până la 30	Aprox. 11,9	Aprox. 13,0	Aprox. 46	Aprox. 400.000	4	1,6 FG	Pregătirea cavității	64 60 427
T3 mini Midwest	Până la 24	Aprox. 10,2	Aprox. 12,7	Aprox. 47	Aprox. 410.000	4	1,6 FG	Pregătirea cavității	66 01 731
T3 mini Borden	Până la 24	Aprox. 10,2	Aprox. 12,7	Aprox. 47	Aprox. 410.000	4	1,6 FG	Pregătirea cavității	66 01 756

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Germania
dentsplysirona.com

Soluții de tratament

Preventive
Restaurative
Ortodonție
Endodonție
Implanturi
Protetică

Tehnologii generice

CAD/CAM
Imagistică
Centre de tratament
Instrumente