

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Intego & Intego Pro

Performanța pe care vă puteți baza

dentsplysirona.ro/intego





Partenerul dvs. de încredere

Intego este cel mai bun centru de tratament din clasa sa. Se bazează pe puterea inovatoare și pe designul premiat al centrelor noastre de tratament. Ca partener de încredere pentru un cabinet eficient, Intego include toate caracteristicile care oferă un sprijin optim: design ergonomic pentru fluxuri de lucru îmbunătățite, standarde înalte de calitate în ceea ce privește prelucrarea și proiectarea și o valoare excelentă – de aceea Intego reprezintă clasa noastră de performanță.

Valoare excelentă

Performanță extraordinară și funcții inovatoare la un preț foarte bun, opțiuni personalizate pentru valoare excelentă.

Design ergonomic

Proiectat pentru operare intuitivă și fluxuri de lucru integrate și optimizate.

Calitate „Made in Germany”

Procese definite de asigurare a calității, materiale durabile și design solid, proiectat pentru viitor.

Decizia vă aparține

Soluția universală – știm că, de cele mai multe ori, acest lucru nu este valabil într-un cabinet stomatologic. Din acest motiv, Intego este disponibil în două versiuni care răspund cerințelor fiecăruia.

Intego

Dacă sunteți în căutarea unui centru de tratament care să vă faciliteze în mod optim fluxurile de lucru la un preț scăzut, Intego este opțiunea potrivită. Dispune de toate funcțiile relevante, exact acolo unde sunt necesare, fiind în același timp simplu de utilizat. Designul ergonomic asigură confort ridicat atât pentru

dumneavoastră, cât și pentru pacienții dumneavoastră. Unitatea compactă de alimentare cu apă prevăzută cu un recipient de apă proaspătă facilitează respectarea reglementărilor de prevenire a infecțiilor.

Intego Pro

Atuul Intego Pro este, fără îndoială, unitatea confortabilă de alimentare cu apă, care aduce un concept complex de prevenire a infecțiilor în cabinetul dumneavoastră. Sistemul de dezinfectare integrat reduce volumul de muncă al echipei dumneavoastră,

datorită purjării și igienizării automate a țevelor de apă, precum și a dezinfecției permanente cu Dentosept S.



Intego TS (design cu furtunuri pe jos)

- Poziționare ergonomică a mesei medicului grație sistemului brațului de susținere cu numeroase posibilități de poziționare
- Sistem funcțional cu tavă detașabilă ce poate fi poziționată flexibil



Valoare excelentă pe care vă puteți baza

Ziua dumneavoastră de lucru este complexă și solicită în diferite moduri centrul de tratament ales. Intego vă oferă soluția perfectă: alegeți dintre două concepte de tratament pe care le puteți configura în mod flexibil. Indiferent dacă selectați un design cu furtunuri pe sus sau cu furtunuri pe jos – fiecare opțiune vă oferă o performanță optimă la un preț corect.

CS – Designul cu furtunuri pe sus



- Ideal pentru cele mai variate situații de tratament la două sau patru mâini
- Poate fi rotit cu până la 240° pentru poziționare optimă
- Distanța maximă dintre masa medicului și instrumente este de 90 cm

- 1 Sprayvit E**
Vizibilitate optimă datorită iluminării LED integrate.
- 2 Motor BL ISO E**
Motor fără perii sterilizabil cu control al vitezei și cuplului pe durata tratamentului. Deosebit de ușor și compact, cu numeroase setări de viteză.
- 3 Aparat de detartraj SiroSonic L**
Piesa de mână și vârfurile pot fi sterilizate. Vibrații drepte controlate cu control electronic al puterii și apei.
- 4 SiroCam F, AF sau AF+**
Imagini intra-orale detaliate cu SiroCam F sau AF/AF+ ușor de utilizat, cu auto-focalizare.



Utilizare intuitivă

Tratamentele dificile vă solicită întreaga concentrație. Din acest motiv, Intego este intuitiv – cu două interfețe de ultimă generație pentru utilizator și instrumente inovatoare pentru tratamente fără stres. Pentru ca dumneavoastră să vă puteți concentra asupra celor mai importante aspecte – pacientul și tratamentul cu rezultate perfecte.

Interfețe intuitive de ultimă generație



EasyPad

Interfață clară și intuitivă pentru utilizator – dotare standard pentru Intego. Funcția Basic Endo este disponibilă cu EasyPad.



EasyTouch

Această interfață pentru utilizator poate fi integrată opțional. Confort sporit de utilizare datorită tehnologiei cu ecran tactil intuitiv și a opțiunilor de operare și afișare suplimentare. Necesar pentru funcția Endo avansată.

Posibilități de integrare pentru tratamente endodontice

Funcția endodontică integrată a Intego este soluția ideală pentru stomatologii care doresc un nivel superior de siguranță, eficiență și simplitate în executarea procedurilor endodontice. Cu soluții complete integrate, fluxul de lucru este simplificat și absolut igienic, reducând timpii de reglare la minimum.




ApexLocator

Un ansamblu ApexLocator poate fi integrat, de asemenea, în EasyTouch pentru a permite controlul permanent al adâncimii de lucru în timpul tratamentului endodontic și reducerea expunerii la raze X.



Modelul Heliodent Plus integrat în unitate

Radiografie intra-orală rapidă și fiabilă cu ajutorul modelului Heliodent Plus integrat în unitate. Aparatul de radiologie durabil vă oferă flexibilitate maximă și calitate optimă a imaginii.

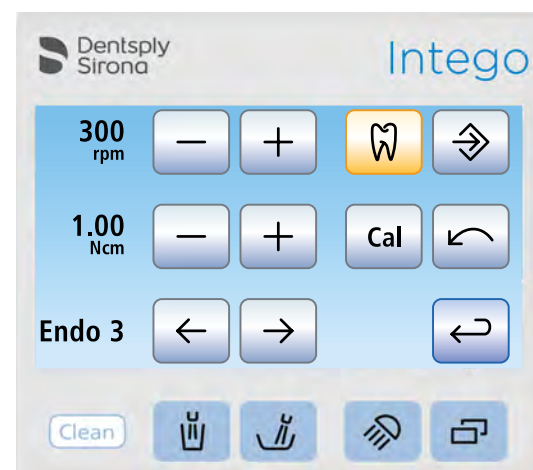

Controlul integrat al cuplului de torsiune

Viteza și cuplul de torsiune pot fi pre-setate pentru 6 ace diferite, iar motorul se oprește automat atunci când se atinge cuplul de torsiune maxim setat, conferind o mai mare siguranță tratamentelor endodontice.



Piesă contraunghi T1 Line Endo 6 L cu lumină

Vizibilitatea îmbunătățită pe durata tratamentului sporește șansele unui tratament corect executat. O altă opțiune disponibilă este piesa contraunghi fără lumină Endo 6:1.

Sisteme de ace cu mișcare reciprocă

Intego integrează sistemele de ace cu mișcare reciprocă Maillefer și VDW de la Dentsply Sirona, facilitând o utilizare rapidă și ușoară a sistemelor de ace generice.

WaveOne®

WaveOne® Gold
Ace cu mișcare reciprocă

Reciproc®
Endodonție cu un singur ac



Confort remarcabil al pacientului

Pacienții dumneavoastră vor aprecia confortul de care beneficiază: fotoliul Intego pentru pacient are un design ergonomic și, împreună cu tetiera, asigură un confort deosebit al pacientului. Fotoliul poate coborî suficient de mult chiar și pentru pacienți mai scunzi, pentru ca aceștia să se poată așeza și ridica de pe fotoliu cu ușurință. Și, fără îndoială, pacienții care se simt confortabil au și un sentiment de siguranță și rămân fideli cabinetului dumneavoastră.



Sistemul ErgoMotion de la Dentsply Sirona pentru Intego

Avantajele dumneavoastră

- Poziționare mai bună pentru tratamentul maxilarului sau mandibulei
- Mai puțină întindere a gâtului pacientului
- Fără întinderea sau comprimare a coloanei pacientului
- Nu este necesară reajustarea tetierei

Tetieră cu articulație dublă

Reglabilă ușor în funcție de situațiile de tratament și de statura pacientului.

Tapițerie Premium / Lounge

Tapițeria de calitate superioară asigură confort chiar și pe durata tratamentelor lungi.

ErgoMotion

Înclinația spătarului corespunde mișcării coloanei vertebrale a pacientului pentru a preveni efectele de întindere sau de comprimare.

Cotiere

Pacienții își pot așeza confortabil brațele.

Sistem de ridicare

Mecanismul unic de ridicare a fotoliului deplasează ușor pacienții în poziția corectă.

Suport pentru picioare Vario

Suportul pentru picioare Vario furnizat împreună cu tapițeria Premium poate fi extins ușor pentru o poziționare ergonomică a pacienților foarte înalți.

Siguranța pe care vă puteți baza – cu Intego

Stomatologii din întreaga lume sunt foarte exigenți în ceea ce privește siguranța pacienților și a echipei medicale. Conceptul Intego de prevenire a infecțiilor este conceput pentru respectarea rapidă și simplă a regulamentelor privind controlul infecțiilor. Designul consolei asistentei și a unității de alimentare cu apă facilitează și scurtează durata procedurilor de prevenire a infecțiilor. Toate acestea garantează un control perfect al infecțiilor.

Intego cu unitate compactă de alimentare cu apă

Cuspidor (bloc scuipător)

Detașabil și pivotant, ușor de curățat și ușor accesibil.

Funcție de purjare

Purjează automat toate furtunurile de apă ale instrumentelor de pe consola dentistului și a asistentei.

Sisteme de aspirație

Compatibile cu toate sistemele convenționale de aspirație umedă sau uscată, inclusiv cu separator de amalgam.

Intego

Unitatea de apă Compact și consola asistentei pot fi adaptate pentru a răspunde multor cerințe diferite prin intermediul sistemelor de aspirație liber selectabile și al opțiunilor de prevenire a infecțiilor.



Recipient de apă proaspătă

Pentru controlul calității apei. Poate fi umplut și cu soluție Dentosept S pentru dezinfecție permanentă și igienizare manuală.



Curățare automată a furtunului de aspirație

Adaptor de curățare pentru clătirea automată a aspiratorului de salivă și a aspiratorului de volum mare.



Suprafețe netede

Designul fără denivelări mari ale suprafețelor asigură controlul maxim al infecțiilor în cel mai scurt timp posibil.

Siguranța pe care vă puteți baza – cu Intego Pro

Stomatologii din întreaga lume au în comun exigențele în materie de siguranță a pacienților și a echipei medicale. Conceptul Intego Pro de prevenire a infecțiilor este conceput pentru respectarea rapidă și simplă a regulamentelor privind controlul infecțiilor. Designul consolei asistentei și a unității de alimentare cu apă facilitează și scurtează durata procedurilor de prevenire a infecțiilor. Toate acestea garantează un control perfect al infecțiilor.

Intego Pro cu unitate confortabilă de alimentare cu apă

Cuspidor (bloc scui pător)
Detașabil și pivotant
din sticlă de calitate superioară,

Funcție de purjare și de auto-purjare
Furtunurile instrumentelor
pot fi spălate rapid sau
curățate intens prin
intermediul adaptoarelor
de curățare.

Sisteme de aspirație
Compatibile cu toate sistemele
centrale convenționale de
aspirație umedă sau uscată,
inclusiv cu separatorul de
amalgam.

Intego Pro

Unitatea de alimentare cu apă
Comfort și consola asistentei se
bazează pe un concept complex de
prevenire a infecțiilor.



Sistem de dezinfecție integrat
Dezinfecție permanentă a tuturor
furtunurilor de apă cu Dentosept S.
Funcție de igienizare automată
pentru dezinfecție intensivă
regulată. Poate fi utilizat și cu o
sursă autonomă de alimentare cu
apă.



Adaptoare de curățare integrate
Pentru purjarea automată a
furtunurilor instrumentelor
(AutoPurge) și pentru igienizarea
traseelor de apă.



Curățare chimică a furtunurilor de aspirație
Recipient cu agent de curățare
pentru purjarea chimică a
furtunurilor de aspirație.
Concentrația agenților de curățare
poate fi reglată în mod individual.


Intego Ambidextrous o capodoperă a flexibilității

Opțiunea Ambidextrous este disponibilă
atât pentru Intego, cât și pentru Intego Pro

Rotire ergonomică perfectă

Pentru organizarea unei rutine zilnice eficiente în cabinet, este esențial ca echipamentele din cabinet să fie adaptate nu numai la cerințele dumneavoastră, ci și la cerințele echipei dumneavoastră. Acest aspect este cu atât mai problematic în cabinetele stomatologice asociate, în care centrul de tratament va fi folosit de mai mulți stomatologi. Zona de tratament necesită o ajustare rapidă și ușoară. Acest proces trebuie să fie absolut sigur și stabil. Intego Ambidextrous este conceput să deservească exact acest scop.

Procesul de rotire pe scurt

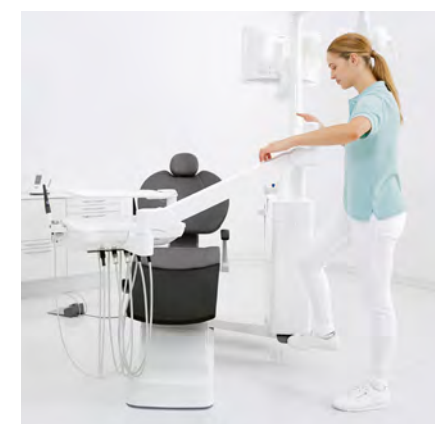

1 Procesul de rotire este activat cu o singură apăsare pe pedala de comandă aferentă, iar spătarul se deplasează în mod automat în poziția de rotire indicată.




2 Pe măsură ce unitatea de apă se deplasează încet în spatele spătarului pe un braț de susținere robust, consola dentistului și lampa chirurgicală pot fi pivotate simultan în poziția nouă, fără a fi necesar un spațiu suplimentar.




3 La final, suportul pentru tavă și suportul pentru cameră, dacă există, pot fi schimbate între ele.

Avantajele dumneavoastră

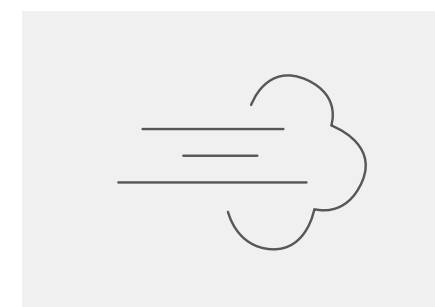


Rapid

Datorită mecanismului cu concept inteligent, poziția de tratament poate fi rotită în doar 15 secunde.

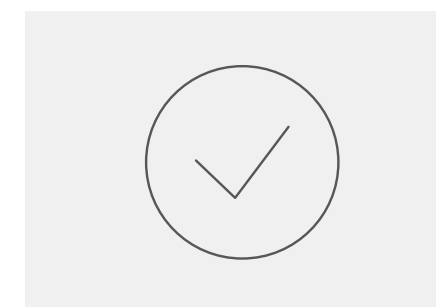

Ușor

Nu este necesară o instruire specială, procesul poate fi gestionat intuitiv de către echipă. Mecanismul de pivotare este acționat printr-o simplă apăsare a pedalei, iar spătarul se reglează automat în poziția corectă.

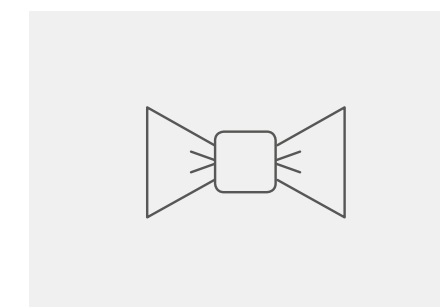


Elegant

Centrul de tratament poate fi convertit fără efort, printr-o singură rotire continuă. Fără mișcări sacadate, șuruburi sau asamblare.


Mai multă libertate de mișcare fără a fi nevoie de mai mult spațiu

Intego Ambidextrous asigură o flexibilitate excelentă într-un spațiu mic. În ciuda opțiunii de conversie, Intego Ambidextrous nu necesită mai mult spațiu decât alte centre de tratament existente de la Dentsply Sirona. Mecanismul de rotire conceput în mod inteligent permite mișcări compacte care economisesc spațiu în orice moment, în fiecare etapă. În timpul procesului de conversie, centrul de tratament rămâne complet stabil în toate pozițiile. Unitatea de apă este ghidată în siguranță și în mod controlat în jurul spătarului, eliminând astfel riscul de deteriorare.

Următoarele imagini ilustrează faptul că, în fiecare etapă a mișcării de conversie, Intego Ambidextrous nu necesită mai mult spațiu decât alte centre de tratament Intego.

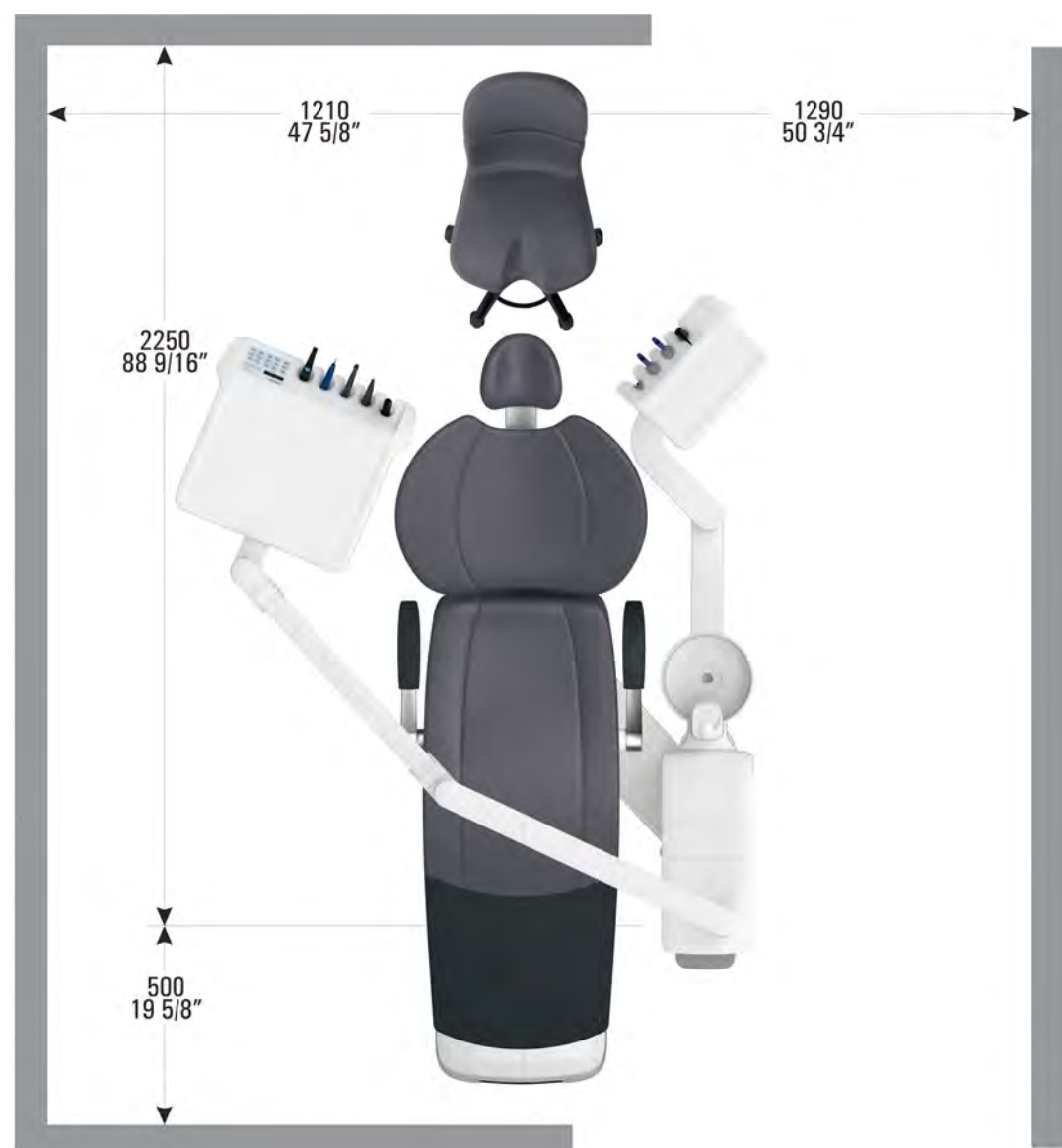

Această imagine ilustrează spațiul necesar pentru orice centru de tratament Intego atunci când este folosit în poziția de tratament corespunzătoare orei 12.

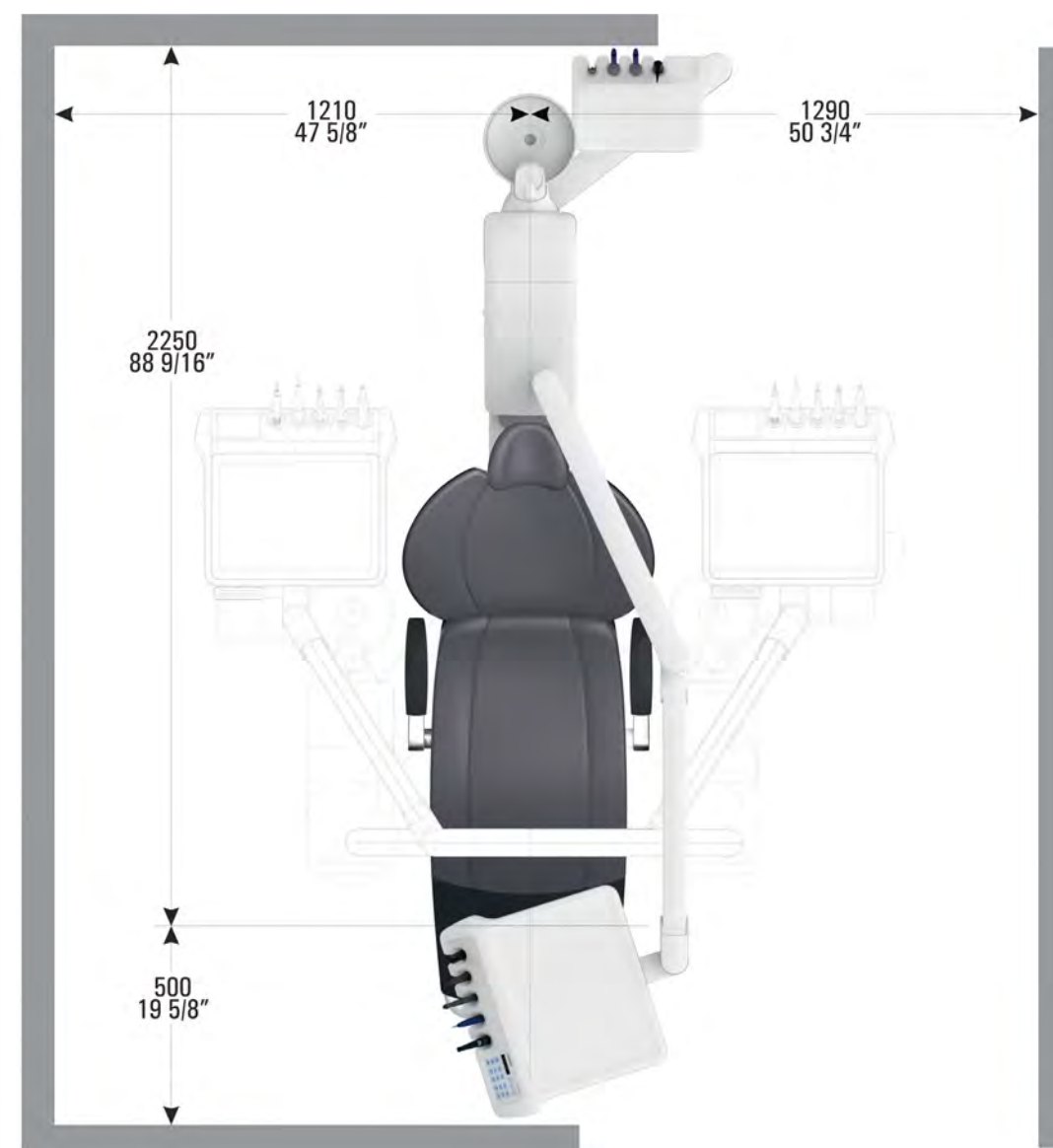

Această imagine ilustrează spațiul maxim necesar centrului de tratament Intego Ambidextrous cu consolă Comfort pentru asistentă în cursul procesului de conversie.

Poziție ergonomică perfectă pentru fiecare tratament

Obțineți rezultate perfecte chiar și la sfârșitul unei lungi zile de muncă – cu expertiza dumneavoastră și cu ajutorul centrului nostru de tratament. Indiferent că preferați să vă tratați pacienți ca medic dreptaci sau stângaci, în fiecare situație veți beneficia de așezare intuitivă, poziționare confortabilă, vizibilitate optimă și fluxuri de lucru integrate. Această combinație va duce la rezultate clinice perfecte.



Mai multă libertate de mișcare

- Spătar subțire pentru libertate ideală de mișcare a picioarelor
 - Poziționare flexibilă a pedalei
- Reglare ușoară a înălțimii de la masa medicului sau cu ajutorul pedalei opționale
 - Cuspidor pivotant

Amplasare optimizată a instrumentelor

- Coordonare perfectă a mesei medicului și a consolei asistentei
- Poziționare flexibilă a tăvii suplimentare pentru mai mult spațiu de depozitare
- Consolă compactă și confortabilă a asistentei în funcție de conceptul de tratament

Scaune de lucru confortabile

- Hugo, Carl, Paul
- Nou: Scaunul tip șa Theo pentru acces optim pe durata tratamentelor mandibulei
 - Asigură o postură sănătoasă pe durata întregii zile

Vizibilitate optimă

- Tetieră cu articulație dublă pentru adaptări rapide și flexibile
- Tetieră plată cu diferite poziții oferite de perna magnetică
- Lampă chirurgicală LEDview Plus sau LEDlight Plus, iluminare cu LED a instrumentelor

Designul întâlnește funcționalitatea

Premiile prestigioase pentru design, precum premiul iF pentru comunicare și premiul red dot pentru design, sunt mărturia calității excepționale a designului centrelor de tratament Dentsply Sirona. Intego oferă o gamă foarte variată de opțiuni de design pentru cabinetul dumneavoastră în trei scheme diferite de culori. Dați frâu liber imaginației și realizați combinația perfectă.



Culori disponibile pentru tapițerie

Atmosfera elegantă

Carbon*	Merlot*	Platinum	Pacific*
---------	---------	----------	----------

Combinații clasice atemporale pentru un aspect cu adevărat sofisticat.

Atmosfera naturală

Umbra*	Sapphire	Basalt*	Cherry
--------	----------	---------	--------

Nuanțe delicate și calde pentru o atmosferă liniștitoare de tratament.

Atmosfera vitală

Aloe	Aqua	Flamingo	Orchid*
------	------	----------	---------

Culori vii și tonuri luminoase pentru o atmosferă modernă, plină de viață.

* Culori disponibile pentru tapițeria Lounge.

Culorile cusăturilor



Standard

Roșu

Gri închis

Albastru
deschis

Roz

Opțiuni de tapițerie



Tapițerie Premium

Tapițeria de calitate superioară fără cusături asigură confort chiar și în timpul tratamentelor de lungă durată.



Tapițerie Lounge

Material moale cu o suprafață plăcută și umplutură confortabilă pentru relaxare maximă. Suprafață conturată pentru poziționare perfectă.

Flexibilitate pentru viitor

Într-un cabinet de calitate, setările personalizate sporesc confortul. Din acest motiv, puteți configura Intego Pro exact așa cum aveți nevoie pentru a facilita un flux optim de tratament. Pentru noi, flexibilitatea nu se oprește aici – puteți configura Intego Pro cu opțiuni tehnice și interfețe compatibile cu aplicații viitoare.

Numeroase modele

Două opțiuni de tetieră

Tetiera plată magnetică poate fi reglată în mod rapid și flexibil. Opțional, puteți selecta o tetieră cu articulație dublă mai ușor de poziționat, care vă oferă vizibilitate optimă chiar și în zone greu accesibile.



Tetieră magnetică



Tetieră cu articulație dublă

Două opțiuni de lămpi chirurgicale – întotdeauna iluminare optimă

Două opțiuni de lămpi LED pentru iluminare optimă a câmpului de lucru. Lampa noastră chirurgicală premium LEDview Plus oferă lumina naturală perfectă cu LED-urile multicolore și caracteristicile tehnice sofisticate.



LEDlight Plus



LEDview Plus

Consola asistentei: Comfort sau Compact

Ambele console pentru asistentă sunt ultra compacte, asigurând o libertate de mișcare maximă. Cu modelul Comfort, puteți lucra confortabil chiar și fără asistentă.




Consola asistentei Comfort



Consola asistentei Compact

Echipamente ultramoderne

Camerele cu autofocalizare Siro-Cam F/AF/AF+ combină calitatea superioară a imaginilor cu ușurința utilizării.

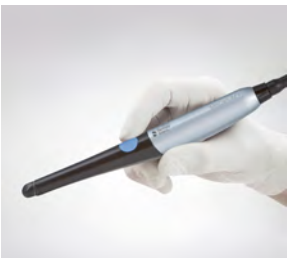

	SiroCam F	SiroCam AF	SiroCam AF+
Focalizare	Focalizare fixă	Auto-focalizare	Auto-focalizare
Format imagine 16:10	✓	✓	✓
Pixeli (utilizabili)	0.42 megapixeli	0.65 megapixeli	1.00 megapixeli
Spațiu de lucru	✓ 5–20 mm	✓ 2–130 mm	✓ 2–130 mm
Rezoluție imagini live	824 x 514	824 x 514	824 x 514
Rezoluție imagini statice	824 x 514	1024 x 640	1276 x 796

Proiectat pentru viitor

Interfețe: flexibilitate pentru viitor

Interfața de rețea pe fotoliul pacientului și portul USB pe masa medicului sau consola asistentei vă permit integrarea de noi funcții și crearea unei rețele în cadrul cabinetului, simplificând astfel și lucrările de depanare realizate de tehnicianul de service.



Interfață USB integrată

Monitor de 22” AC Sivision

Cu acest monitor HD, puteți explica radiografiile și imaginile intra-orale realizate cu camera, ferestrele de software și planificare, prezentările video și în PowerPoint direct pacientului la centrul de tratament.



Monitor de 22” AC Sivision

Calitate pe care vă puteți baza

Nu vrem doar să ne satisfacem clienții, ci să-i impresionăm. De aceea, calitatea, performanțele și serviciile sunt esențiale pentru noi. Unitățile de tratament Dentsply Sirona combină calitatea superioară cu inovația, îmbunătățind astfel considerabil confortul tratamentului și fluxul de lucru.

Fiabilitate și durabilitate



Testele de calitate precise și elaborate și materialele robuste fac din Intego un centru de tratament fiabil, cu o durată de funcționare peste medie.

Calitate superioară



Intego Pro reflectă clar atenția noastră la detalii. Materialele utilizate – plastic maleabil rezistent, componente solide din oțel și aluminiu la interior, sticlă și tapițerie de calitate superioară – îndeplinesc cerințele de înaltă calitate ale unui produs premium.

Standarde ridicate



Dentsply Sirona este lider în tehnologie, cu peste 130 de ani de experiență în inovație. Inginerii și oamenii de știință din cadrul departamentului nostru de cercetare și dezvoltare acordă o atenție deosebită atât inovației, cât și calității.

Proiectat pentru viitor

La centrul de inovație Dentsply Sirona, tendințele viitoare sunt anticipate, iar produsele sunt concepute pentru adaptare la exigențele tehnologice ale viitorului.



Configurație individuală

Intego

Unitatea de bază

Fotoliul pacientului

- Tapițerie Premium
- Pedală de comandă pneumatică
- Tetieră magnetică
- Opțiunea Ambidextrous

Masa medicului

- 5 poziții pentru instrumente
- Interfața utilizatorului EasyPad
- Alimentare pentru 2 instrumente

Consola asistentei

- Versiunea Compact pe braț pivotant montat direct pe cuspidor
- 4 poziții pentru piese de mână
- Aspirator de salivă și aspirator de volum mare

Corpul hidric

- Aspirație umedă standard
- Poate integra un recipient de apă proaspătă
- Cuspidor cu funcție de pivotare manuală

Versiune

Versiunea TS cu furtunuri pe jos

Versiunea CS cu furtunuri pe sus

Intego Pro

Unitatea de bază

Fotoliul pacientului

- Tapițerie Premium
- Pedală de comandă pneumatică pentru instrumente
- Tetieră magnetică
- Joystick cu 4 direcții
- Opțiunea Ambidextrous

Masa medicului

- 5 poziții pentru instrumente
- Interfața utilizatorului EasyPad
- Alimentare pentru 2 instrumente
- Sursă de lumină pentru instrumente
- Componente electronice de alimentare pentru până la 2 motoare și aparat de detartraj

Consola asistentei

- Consola asistentei Comfort
- 4 poziții pentru piese de mână
- Aspirator de salivă și aspirator de volum mare
- Sursă de lumină pentru Sprayvit E

Corpul hidric

- Poate integra un dispozitiv automat de dezinfecție
- Adaptoare de curățare integrate
- Cuspidor cu funcție de pivotare manuală
- Aspirație umedă cu valvă pentru stații multiple
- Curățare integrată a furtunului de aspirație cu apă
- Încălzitor de apă

Versiune

Versiunea TS cu furtunuri pe jos

Versiunea CS cu furtunuri pe sus

Pachete pentru utilizator

**Start**

- Seringă standard cu 3 căi
- Sursă de lumină în consola dentistului
- 2 furtunuri pentru turbină
- LEDlight Plus*

**Advance**

- Pedală de comandă electronică C+
- Sprayvit E în consola dentistului
- Sursă de lumină în consola dentistului
- Un furtun pentru turbină
- 1 micro-motor BL ISO E
- LEDlight Plus
- Opțiune cu cost suplimentar: EasyTouch

**Innovation**

- Pedală de comandă electronică C+
- Sprayvit E în consola dentistului
- Sursă de lumină în consola dentistului
- Un furtun pentru turbină
- 1 micro-motor BL ISO E
- Aparatul de detartraj SiroSonic L
- LEDview Plus
- Opțiune cu cost suplimentar: EasyTouch

Pachete de opțiuni

**Sivision Ready**

- Interfață USB pentru consola dentistului sau a asistentei
- Interfață de rețea

**Sivision Start cu/fără monitor**

- Interfață USB pentru consola dentistului sau a asistentei
- Interfață de rețea
- SiroCam F (SiroCam AF sau AF+ la o taxă suplimentară)
- Monitor montat pe coloana de susținere a lămpii
- Opțional: Monitor de 22" AC

**Ergo**

- ErgoMotion
- Sistem de ridicare a fotoliului stomatologic 185 kg
- 2 suporturi de braț
- Tetieră cu articulație dublă

**Endo Pro****

- Controlul integrat al cuplului de torsiune
- ApexLocator
- Piesă contraunghi 6:1 pentru endodonție
- e-Control

* LEDview Plus la o taxă suplimentară

** Numai cu EasyTouch

Pachete pentru utilizator

**Start Pro**

- Pedală de comandă electronică C+
- Sprayvit E în consola dentistului
- Un furtun pentru turbină
- Un micro-motor BL ISO E
- LEDlight Plus

**Advance Pro**

- Pedală de comandă electronică C+
- Sprayvit E în consola dentistului
- Un furtun pentru turbină
- Un micro-motor BL ISO E
- Aparatul de detartraj SiroSonic L
- Interfață cu utilizatorul EasyTouch
- LEDview Plus

**Innovation Pro**

- Pedală de comandă electronică C+
- Sprayvit E în consola dentistului
- Un furtun pentru turbină
- Două micro-motoare BL ISO E
- Aparatul de detartraj SiroSonic L
- Interfață cu utilizatorul EasyTouch
- Sprayvit E în consola asistentei
- LEDview Plus

Pachete de opțiuni

**Sivision Ready**

- Interfață USB pentru consola dentistului sau a asistentei
- Interfață de rețea

**Sivision Start cu/fără monitor**

- Interfață USB pentru consola dentistului sau a asistentei
- Interfață de rețea
- SiroCam F (SiroCam AF sau AF+ la o taxă suplimentară)
- Monitor montat pe coloana de susținere a lămpii
- Opțional: Monitor de 22" AC

**Endo Pro****

- Controlul integrat al cuplului de torsiune
- ApexLocator
- Piesă contraunghi 6:1 pentru endodonție
- e-Control

* * LEDview Plus la o taxă suplimentară

** ** Numai cu EasyTouch

Opțiuni individuale

Aici puteți consulta lista completă de opțiuni individuale și o listă de verificare a componentelor incluse în unitățile de bază.

Intego

Fotoliul pacientului		Ambi-dextrous
2 poziții de tratament, S și O	■	■
Cutie de conexiuni integrată	■	■
Sistem de ridicare a fotoliului stomatologic 140 kg	■	■
Sistem de ridicare a fotoliului stomatologic 185 kg	□Er	□Er
Tetieră magnetică	■	■
Tetieră cu articulație dublă	□Er	□Er
Tapițerie Premium	■	■
Tapițerie Lounge	□	□
ErgoMotion	□Er	□Er
Joystick cu 4 direcții	□	□
Pernă de înălțare pentru pacienții mici de statură	□	□
Cotieră dreapta	□Er	□Er
Cotieră stânga	□Er	□Er
Set valve pentru conectare aparate externe	□	□
Kit de reducere a presiunii de vacuum	□	□
Kit de instalare a capacelor	□	□
Cutie de conexiuni separată	□	□
Placă adaptoare	□	□

Dentist element		Ambi-dextrous
Braț de susținere reglabil pe înălțime cu frână pneumatică	■	■
5 poziții pentru instrumente	■	■
Suport de cameră suplimentar destinat consolei TS a dentistului	□	—
Alimentare hidro-pneumatică pentru 2 instrumente fără fibră optică	■	■
Pedală de comandă pneumatică	■	■
Pedală de comandă electronică C+	□A, I	□A, I
Interfață pentru utilizator EasyPad cu 2 setări specifice utilizatorilor	■	■
Interfață pentru utilizator EasyTouch cu 4 setări specifice utilizatorilor	□T	□T
Sprayvit E cu lumină	□A, I	□A, I
Sprayvit E cu lumină (buton de apă la partea stângă)	□A, I	□A, I
Seringă standard cu 3 căi	□S	□S
Furtun turbină cu lumină	□Sx2, A, I	□Sx2, A, I
Furtun turbină Borden	□	□
Primul motor BL ISO E cu furtun	□A, I	□A, I
Al doilea motor BL ISO E cu furtun	□	□
Aparatul de detartraj SiroSonic L	□I	□I
Conexiune al treilea instrument	□	□
Kit pentru lampă intra-orală pentru turbină și Sprayvit E	□S, A, I	□S, A, I
Control al cuplului de torsiune pentru tratamente endodontice	□E	□E
eControl: Interval de viteze 100-40.000 rpm	□E	□E
ApexLocator integrat	□E	□E
Piesă contraunghi 6:1 pentru endodonție	□E	□E
Negatoscop radiografii intra-orale	□	□
Funcție de purjare și de igienizare manuală	□	□
Suport de tavă TS flexibil pentru 2 tăvi de dimensiuni standard	—	□
Suport de tavă TS suplimentar pentru 2 tăvi de dimensiuni standard	□	—
Pad din silicon pentru consola asistentei TS	□	□
Suport de tavă CS suplimentar pentru 1 tavă de dimensiuni standard	□	□

Suport de tavă CS suplimentar pentru 2 tăvi de dimensiuni standard	□	□
Pad din silicon pentru consola asistentei CS	□	□
Manșoane detașabile din silicon pentru mâner	□	□
Consola asistentei		Ambi-dextrous
Consola asistentei Compact, cu montare pivotantă direct pe brațul cuspidorului	■	■
Consola asistentei Comfort, ideală pentru trata-ment la două mâini	□	□
4 poziții pentru instrumente	■	■
Aspirator de salivă și aspirator de volum mare	■	■
Sprayvit E cu lumină	□	□
Sprayvit E cu lumină (buton de apă la partea stângă)	□	□
Seringă standard cu 3 căi	□	□
Kit pentru al doilea aspirator de volum mare	□	□
Lampă de fotopolimerizare Satelec Mini LED	□	□
Touchpad	□	□
Sursă de lumină pentru Sprayvit E	□	□
Pad din silicon pentru consola asistentei Comfort	□	□

Corpul hidric		Ambi-dextrous
Compatibil cu recipient de apă proaspătă	■	■
Cuspidor cu funcție de pivotare manuală	■	■
Cuspidor alb	■	■
Unitate de apă fără cuspidor	□	□
Compatibil cu aspirație umedă standard	■	■
Compatibil cu aspirație umedă standard cu control automat al aspirației	□	□
Valvă pentru stații multiple	□	□
Valvă cuspidor pentru aspirație umedă standard	□	□
Separator automat	□	□
Separator de amalgam	□	□
Recipient pentru apă proaspătă fără racord la rețeaua publică de alimentare cu apă	□	□
Recipient pentru apă proaspătă cu racord la rețeaua publică de alimentare cu apă	□	□
Încălzitor de apă	□	□
Sistem de curățare a furtunului de aspirație cu apă	□	□

Opțiuni de lampă chirurgicală/Heliudent Plus		Ambi-dextrous
LEDlight Plus	□S, A	□S, A
LEDview Plus	□I	□I
Adaptare pentru modelul Heliudent Plus integrat în unitate	□	—

Comunicare cu pacientul		Ambi-dextrous
Interfață USB pe consola dentistului sau a asistentei	□SiR, SiS	□SiR, SiS
SiroCam F	□SiS	□SiS
SiroCam AF	□	□
SiroCam AF+	□	□
Montare monitor pe coloana de susținere a lămpii	□SiS	□SiS
Monitor 22" AC (cu unitate de alimentare cu curent integrată)	□SiS*	□SiS*
Interfață de rețea	□SiR, SiS	□SiR, SiS

■ Incluz în unitatea de bază
□ Opțiune
— Nu este posibil/nu se aplică
Pachet SiR Sivation Ready
Pachet SiS Sivation Start
SiS* Pachet Sivation Start cu monitor

S Pachet Start Pro
A Pachet Advance Pro
I Pachet Innovation Pro
E Pachet Endo Pro
Er Pachet Ergo

Intego Pro

Fotoliul pacientului		Pro Ambi-dextrous
2 poziții de tratament, S și O	■	■
Cutie de conexiuni integrată	■	■
Sistem de ridicare a fotoliului stomatologic 185 kg	■	■
Tetieră magnetică	■	■
Tetieră cu articulație dublă	□	□
Tapițerie Premium	■	■
Tapițerie Lounge	□	□
ErgoMotion	□	□
Joystick cu 4 direcții	■	■
Pernă de înălțare pentru pacienții mici de statură	□	□
Cotieră dreapta	□	□
Cotieră stânga	□	□
Set valve pentru conectare aparate externe	□	□
Kit de reducere a presiunii de vacuum	□	□
Kit de instalare a capacelor	□	□
Cutie de conexiuni separată	□	□
Placă adaptoare	□	□

Masa medicului		Pro Ambi-dextrous
Braț de susținere reglabil pe înălțime cu frână pneumatică	■	■
5 poziții pentru instrumente	■	■
Suport de cameră suplimentar destinat consolei TS a dentistului	□	—
Suport pentru cameră TS flexibil	—	□
Alimentare hidro-pneumatică pentru 2 instrumente fără fibră optică	■	■
Pedală de comandă pneumatică	■	■
Pedală de comandă electronică C+	□S, A, I	□S, A, I
Interfață pentru utilizator EasyPad cu 2 setări specifice utilizatorilor	■	■
Interfață pentru utilizator EasyTouch cu 4 setări specifice utilizatorilor	□A, I	□A, I
Sprayvit E cu lumină	□S, A, I	□S, A, I
Sprayvit E cu lumină (buton de apă la partea stângă)	□S, A, I	□S, A, I
Furtun turbină cu lumină	□S, A, I	□S, A, I
Primul motor BL ISO E cu furtun	□S, A, I	□S, A, I
Al doilea motor BL ISO E cu furtun	□I	□I
Aparat de detartraj SiroSonic L	□A, I	□A, I
Conexiune al treilea instrument	□I	□I
Lampă de fotopolimerizare Satelec Mini LED	□	□
Kit pentru lampă intra-orală pentru turbină și Sprayvit E	■	■
Control al cuplului de torsiune pentru tratamente endodontice	□E	□E
eControl: Interval de viteze 100-40.000 rpm	□E	□E
ApexLocator integrat	□E	□E
Piesă contraunghi 6:1 pentru endodonție	□E	□E
Negatoscop radiografii intra-orale	□	□
Purjare și auto-purjare	■	■
Suport de tavă TS flexibil pentru 2 tăvi de dimensiuni standard	—	□
Suport de tavă TS suplimentar pentru 2 tăvi de dimensiuni standard	□	—
Pad din silicon pentru consola asistentei TS	□	□
Suport de tavă CS suplimentară pentru 1 tavă de dimensiuni standard	□	□

Suport de tavă CS suplimentară pentru 2 tăvi de dimensiuni standard	□	□
Pad din silicon pentru consola asistentei CS	□	□
Manșoane detașabile din silicon pentru mâner	□	□
Consola asistentei		Pro Ambi-dextrous
Consola asistentei Compact, cu montare pivotantă direct pe brațul cuspidorului	—	■
Consola asistentei Comfort, ideală pentru trata-ment la două mâini	■	□
4 poziții pentru instrumente	■	■
Aspirator de salivă și aspirator de volum mare	■	■
Sprayvit E cu lumină	□I	□I
Sprayvit E cu lumină (buton de apă la partea stângă)	□I	□I
Kit pentru al doilea aspirator de volum mare	□	□
Lampă de fotopolimerizare Satelec Mini LED	□	□
Touchpad	□	□
Sursă de lumină pentru Sprayvit E	■	■
Pad din silicon pentru consola asistentei Comfort	□	□

Corpul hidric		Pro Ambi-dextrous
Compatibil cu dispozitiv de dezinfecție integrat	■	■
Cuspidor cu funcție de pivotare manuală	■	■
Cuspidor alb	■	■
Cuspidor din sticlă	□	—
Unitate de apă fără cuspidor	□	□
Valvă pentru stații multiple	■	■
Valvă cuspidor pentru aspirație umedă standard	□	□
Separator automat	□	□
Separator de amalgam	□	□
Sistem de dezinfecție integrat cu dezinfecție permanentă a traseelor de apă și funcție de igienizare automată	□	□
Încălzitor de apă	■	■
Sistem de curățare a furtunului de aspirație cu apă	■	■
Sistem de curățare chimică a furtunului de aspirație	□	□

Opțiuni de lampă chirurgicală/Heliudent Plus		Pro Ambi-dextrous
LEDlight Plus	□S	□S
LEDview Plus	□I, T	□I, T
Adaptare pentru modelul Heliudent Plus integrat în unitate	□	—

Comunicare cu pacientul		Pro Ambi-dextrous
Interfață USB pe consola dentistului sau a asistentei	□SiR, SiS	□SiR, SiS
SiroCam F	□SiS	□SiS
SiroCam AF	□	□
SiroCam AF+	□	□
Montare monitor pe coloana de susținere a lămpii	□SiS	□SiS
Monitor 22" AC (cu unitate de alimentare cu curent integrată)	□SiS*	□SiS*
Interfață de rețea	□SiR, SiS	□SiR, SiS

■ Incluz în unitatea de bază
□ Opțiune
— Nu este posibil/nu se aplică
Pachet SiR Sivation Ready
Pachet SiS Sivation Start
SiS* Pachet Sivation Start cu monitor

S Pachet Start Pro
A Pachet Advance Pro
I Pachet Innovation Pro
E Pachet Endo Pro

Dumneavoastră decideți ce se potrivește nevoilor dumneavoastră

Aceasta este o prezentare generală a numeroaselor opțiuni disponibile pentru Intego și Intego Pro. Centrul dumneavoastră de tratament – alegerea dumneavoastră.



Hugo



Carl



Paul



Theo



Suport pentru tavă suplimentară CS



Suport pentru tavă suplimentară TS



Tetieră cu articulație dublă



Tetieră magnetică



Suport pentru cameră suplimentară TS



Negatoscop radiografii



Consola asistentei Comfort



Consola asistentei Compact



Pedală electronică C+



LEDview Plus



LEDlight Plus



Set valve pentru conectare aparate externe




Model Heliodent Plus integrat în unitate



Monitor 22" AC



SiroCam F

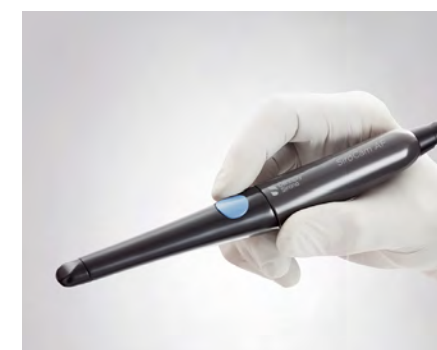

SiroCam AF



SiroCam AF+



Lampă de fotopolimerizare Saletec Mini LED



Intego fără cuspidor



Joystick cu 4 direcții

Dentsply Sirona CEE Central

Office & Showroom
Str. Vulturilor nr. 98A, 030857, București, România
dentsplysirona.ro
facebook.com/dentsplysirona.romania

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Germania
dentsplysirona.com

Soluții de tratamente

Preventive
Restaurative
Ortodonție
Endodonție
Implanturi
Protetică

Tehnologii generice

CAD/CAM
Imagistică
Centre de tratament
Instrumente