

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Unituri Dentare Dentsply Sirona

Punctul central al cabinetului dumneavoastră

dentsplysirona.com/treatment-centers

dentsplysirona.com/ro-ro/exploreaza/centre-tratament



Dentsply Sirona

Unituri dentare

Uniturile dentare reprezintă punctul central al fiecărui cabinet. Datorită designului modern, funcțiilor integrate și materialelor de calitate superioară, uniturile noastre dentare transformă experiența medicului dentist și a pacientului de la început până la sfârșit. Ne asigurăm că uniturile noastre vă pun la dispoziție orice aveți nevoie, astfel încât să vă concentrați exclusiv asupra pacienților dumneavoastră și să îi faceți să zâmbească.

Cu o istorie de peste 130 de ani de inovație, ne-am luat un angajament ferm de a oferi o calitate superioară pentru fiabilitate fundamentală. Acest lucru este însoțit de ambiția noastră continuă de a oferi inovații utile care îmbunătățesc confortul, fluxul de muncă și experiența.



1 Design

Uniturile dentare Dentsply Sirona sunt unice datorită armoniei conceptului de design modern și ergonomic în care forma corespunde funcționalității. Materialele de calitate superioară și suprafețele netede sunt concepute pentru a respecta cele mai înalte standarde de igienă. Contururile simplificate distinctive permit recunoașterea rapidă a uniturilor noastre și lasă o amintire de durată.



2 Integrare

Aveți nevoie de un unit dentar ale cărui funcții se adaptează în detaliu fluxului dumneavoastră de lucru - și nu invers. De aceea, soluțiile noastre integrate includ funcții pentru implantologie și endodonție, un sistem integrat de prevenire a infecțiilor și instrumente de comunicare cu pacientul care vin în sprijinul consultațiilor pentru tratament. Fluxurile de lucru perfecte și absența duratelor suplimentare de configurare sunt la fel de importante ca ergonomia.



3 Experiență

Atunci când unitul dentar răspunde perfect nevoilor dumneavoastră, vă puteți concentra exclusiv pe pacient. Când totul se îmbină astfel, munca nu mai este percepută ca muncă, ci ca o experiență. Obiectivul nostru este de a vă oferi instrumentele necesare pentru îmbunătățirea îngrijirii dentare pentru pacienții dumneavoastră și, în cele din urmă, pentru a-i face să zâmbească. Acesta este parțial motivul pentru care confortul medicului dentist și al pacientului este la fel de important pentru noi. Uniturile dentare Dentsply Sirona furnizează numeroase soluții pentru un tratament confortabil, fără dureri și fără stres pentru medicul dentist și pentru echipă.



Teneo – Inovația în perfectă armonie

Teneo nu face niciun compromis: doar cel mai bun este suficient de bun. Unitul dumneavoastră dentar răspunde automat și individual tuturor nevoilor dumneavoastră. Funcțiile atent selectate vă oferă asistență în orice situație de tratament. Caracteristicile de confort le permit pacienților dumneavoastră să se simtă mai relaxați pe tot parcursul tratamentului, astfel încât să vă puteți concentra exclusiv pe munca dumneavoastră. De ce să vă mulțumiți cu mai puțin?

1 Masa medicului culisantă motorizată

Pentru a vă permite să vă concentrați pe deplin asupra pacienților dumneavoastră, Teneo și masa sa culisantă motorizată poziționează tot ce aveți nevoie la îndemâna dvs. – hands-free și fără efort.

2 Masa medicului

Ecranul EasyTouch Display de 7" și 6+1 poziții pentru instrumente (inclusiv poziția suplimentară la masa medicului pentru camera intraorală) asigură utilizarea intuitivă și explicită.

3 Tetieră motorizată

Pentru acces optim în orice moment, chiar și în cazul înălțimilor variabile ale pacienților. Poate fi reglată cu ușurință utilizând pedala de comandă pentru tratament hands-free, completând operarea cu ajutorul interfeței cu utilizatorul și reglarea manuală.

4 Sistem integrat de prevenire a infecțiilor

Controlul maxim al infecțiilor într-un timp scurt, cu un efort minim, ceea ce îi permite echipei să economisească timp prețios.

5 Pedale de comandă wireless

Operare hands-free pentru toate funcțiile ecranului EasyTouch, pentru instrumente și pentru masa culisantă motorizată.

6 Cuspidor motorizat

Cuspidorul motorizat se poziționează corect, fără ca pacientul să se aplece prea mult.




Concept divizat pentru o manevrare îmbunătățită

Consola dentistului și consola asistentei, precum și tava pot fi poziționate independent pentru a putea comuta în mod flexibil între modurile de tratament în echipă sau individual. Dumneavoastră și asistenta dumneavoastră vă puteți menține o poziție de lucru ergonomică în orice moment, fără a vă îngrijora dacă există suficient spațiu pe tavă și în jurul pacientului.



Concept holistic de prevenire a infecțiilor


Suprafețele ușor de curățat, componentele detașabile și adaptoarele de igienizare încorporate asigură procese igienice eficiente și sigure. Instrumentul și furtunurile de aspirație trebuie să fie pur și simplu așezate pe adaptoarele de igienizare integrate, iar procesul începe la o singură apăsare a butonului. Recipientul cu agent de curățare pentru clătirea chimică a furtunurilor de aspirație este integrat în unitatea de alimentare cu apă și poate fi reumplut cu ușurință. În plus, concentrația agenților de curățare poate fi reglată în mod individual.

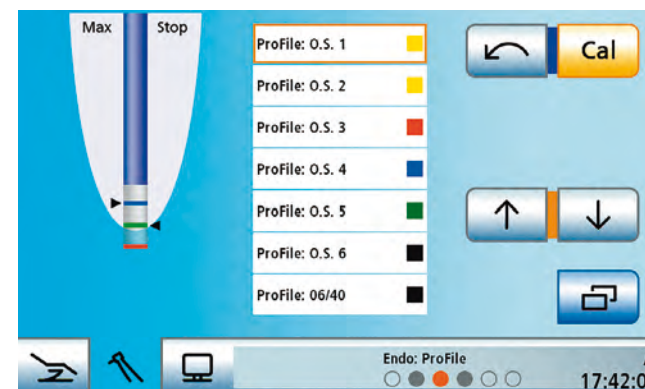

Funcții de tratament integrate

Funcțiile de tratament integrate pentru implantologie și endodonție fac inutile duratele de configurare, deoarece echipamentele suplimentare pentru masă nu mai sunt necesare. Toate funcțiile pot fi controlate cu ajutorul pedalei de comandă. Aceasta permite o tranziție perfectă între examinarea, educarea și tratamentul pacientului.


Viteza și cuplul sunt presetate într-o bibliotecă integrată care conține o varietate de ace și de sisteme de implanturi. Funcțiile suplimentare de software pot fi adăugate ulterior cu ajutorul accesoriilor.

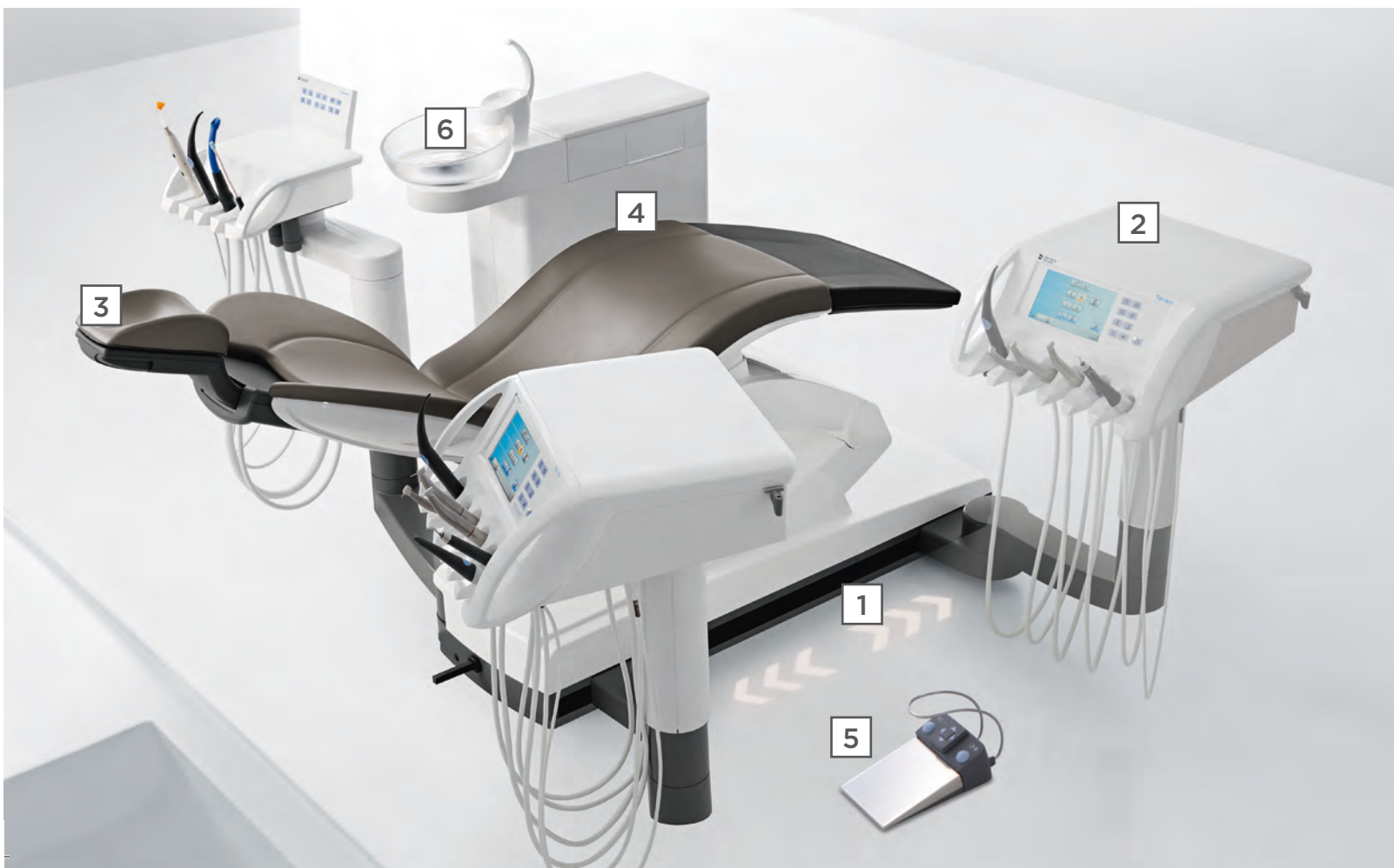

Sinius – Eficiență îmbunătățită

Timpul este unul dintre atuurile noastre cele mai valoroase, iar unitul dentar Sinius oferă avantaje clare în ceea ce privește duratele de tratament și flexibilitatea, deoarece unitatea poate fi configurată pentru a răspunde oricărei situații și nevoi. Utilizarea intuitivă cu ajutorul celei mai recente tehnologii tactile și al numeroaselor funcții integrate oferă valoare adăugată și beneficii suplimentare pentru fluxul de lucru.

Fluxuri de lucru eficiente

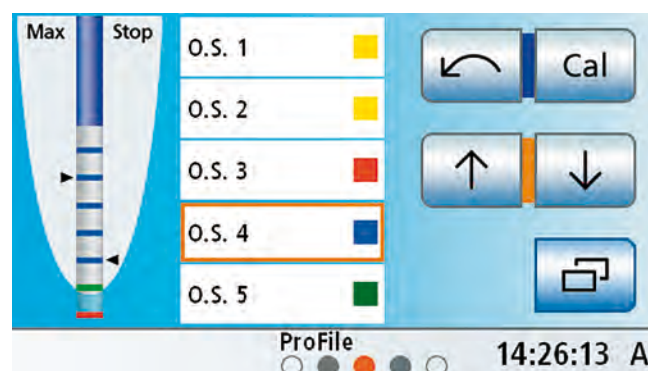

Funcții de endodonție și implantologie integrate

Funcțiile de terapie integrate fac ca endo-motoarele și fiziodispenserele să fie de domeniul trecutului. Pe lângă controlul precis al cuplului, funcția de endodonție este disponibilă opțional împreună cu ApexLocator pentru o siguranță clinică maximă. Tratamentele cu implanturi pot fi simplificate cu ajutorul setărilor individuale pentru viteză, cuplu și debit de lichid de răcire steril pentru un control crescut în orice moment.

Concept holistic de prevenire a infecțiilor

Suprafețele ușor de curățat, componentele detașabile și adaptoarele de igienizare încorporate asigură igienizări eficiente și sigure. Instrumentul și furtunurile de aspirație trebuie să fie pur și simplu așezate în adaptoarele de igienizare integrate, iar procesul începe la o singură apăsare a butonului. Recipientul cu agent de curățare pentru clătirea chimică a furtunurilor de aspirație este integrat în unitatea de alimentare cu apă și poate fi reumplut cu ușurință. În plus, concentrația agenților de curățare poate fi reglată în mod individual.

Concepte de tratament



Sinius cu masa medicului culisantă manual



Sinius Stil Tradițional (TS) cu furtunuri atârinate



Sinius Stil Continental (CS) cu furtunuri pe sus

1 Masa medicului

Ecran EasyTouch Display de 4,3" și 5+1 poziții pentru instrumente (inclusiv poziția suplimentară la masa medicului pentru camera intra-orală).

2 Tetieră motorizată opțională


Pentru acces optim în orice moment, chiar și în cazul înălțimilor variabile ale pacienților. Poate fi reglată cu ușurință utilizând pedala de comandă pentru tratament hands-free, completând operarea cu ajutorul interfeței cu utilizatorul și reglarea manuală.

3 Sistem integrat de prevenire a infecțiilor

Controlul maxim al infecțiilor într-un timp scurt, cu un efort minim, ceea ce îi permite echipei să economisească timp prețios.

4 Pedale de comandă wireless

Operare hands-free pentru toate funcțiile ecranului EasyTouch, pentru instrumente și pentru șina culisantă motorizată.

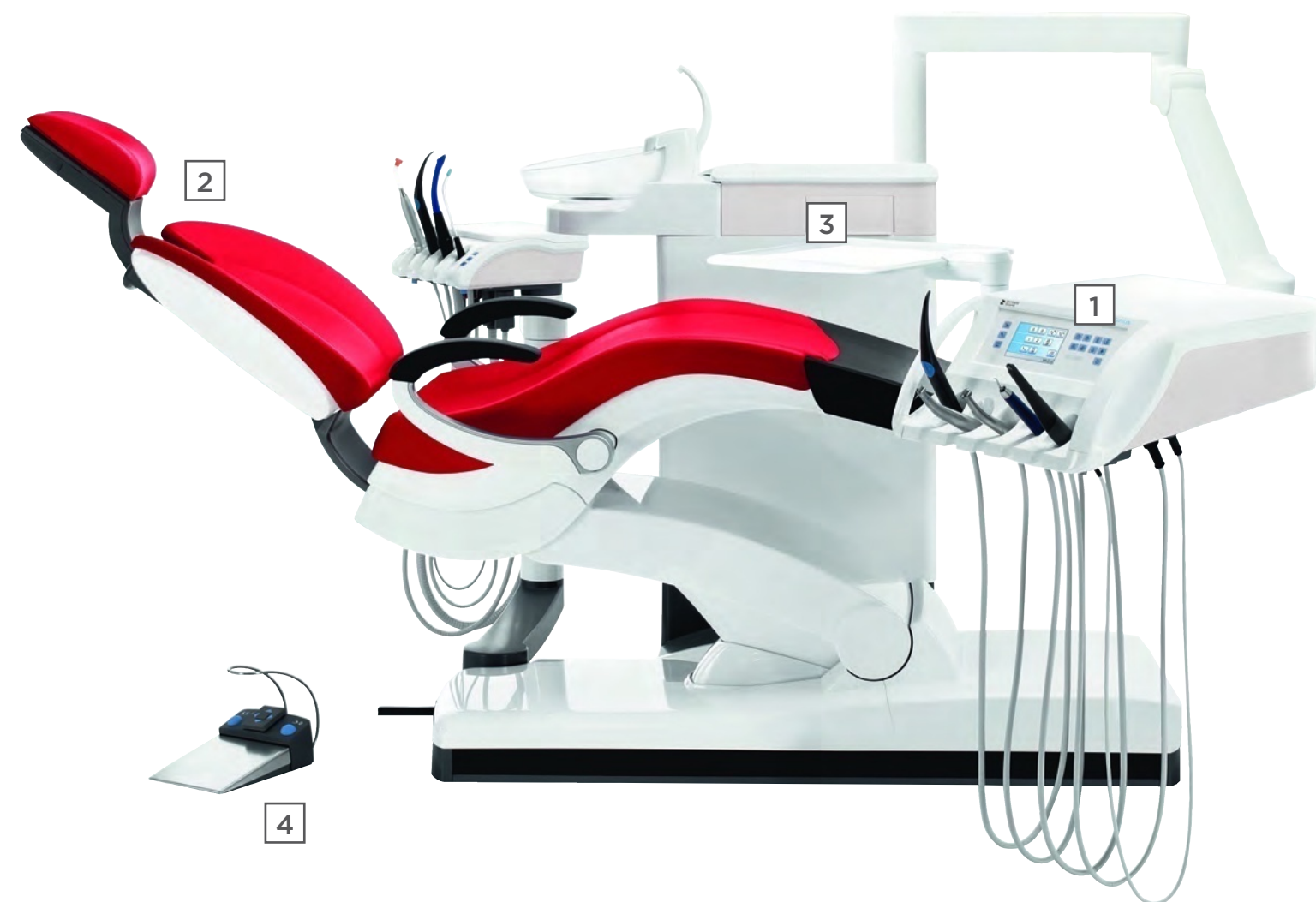

Intego Pro – Performanță pe care vă puteți baza

Atuul Intego Pro este, fără îndoială, unitatea *Comfort* de alimentare cu apă, care aduce un concept cuprinzător de prevenire a infecțiilor în cabinetul dumneavoastră. Sistemul de dezinfectare integrat reduce volumul de muncă al echipei dumneavoastră prin purjarea și igienizarea automată a conductelor de apă, precum și prin dezinfectarea permanentă cu Dentosept S.

1 Masa medicului

Disponibilă în versiunea TS sau CS. Cu ecran EasyPad sau cu interfața cu utilizatorul EasyTouch de 4,3", opțional cu control al cuplului de torsiune și ApexLocator, precum și cu 5+1 poziții pentru instrumente.

2 Tetieră cu articulație dublă sau plată

Tetieră cu articulație dublă pentru reglare rapidă și flexibilă sau tetieră plată cu o varietate de poziții datorită pernei magnetice.

3 Unitatea de alimentare cu apă *Comfort* și consola asistentei

Unitatea de alimentare cu apă *Comfort* și consola asistentei se bazează pe un concept cuprinzător de prevenire a infecțiilor, pentru procese de igienizare sigure și eficiente.


4 Pedale de comandă pneumatică sau electronică

Alegeți una dintre cele două pedale de comandă pentru utilizarea hands-free a instrumentelor.



Intego Ambidextrous

Versiune Ambidextrous opțională pentru modelele Intego sau Intego Pro, pentru a configura unitul dentar pentru medicii dentiști stângaci. Rapid, ușor și elegant.

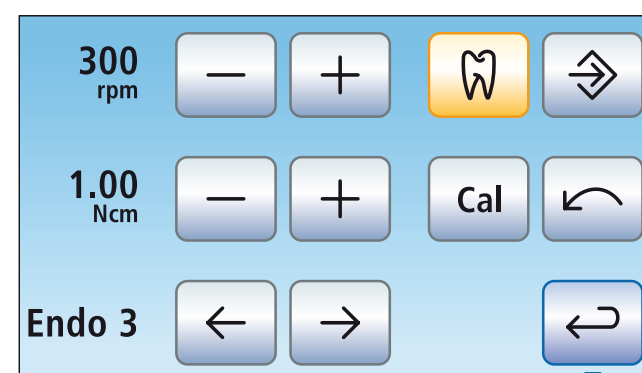

Funcție de endodonție integrată

O soluție ideală pentru siguranță, eficiență și simplitate sporită, viteza și cuplul de torsiune pot fi presetate pentru 6 ace diferite. În plus, setările certificate WaveOne® Gold și RECIPROC® Blue sunt integrate în consola dentistului. Motorul se oprește automat atunci când se atinge cuplul de torsiune maxim setat. În EasyTouch poate fi integrat și un ansamblu ApexLocator, pentru a permite controlul permanent al lungimii de lucru.



Sistem de dezinfecție integrat

Adaptoarele de curățare integrate facilitează purjarea automată a furtunurilor instrumentelor și igienizarea conductelor de apă. În plus, Intego Pro permite igienizarea automată pentru dezinfecția intensivă regulată și dezinfectia permanentă a tuturor conductelor de apă cu Dentosept S. Poate fi utilizat și cu o sursă autonomă de alimentare cu apă.




Curățarea chimică a furtunului de aspirație

Recipientul cu agent de curățare pentru clătirea chimică a furtunurilor de aspirație este integrat în unitatea de alimentare cu apă și poate fi reumplut cu ușurință. În plus, concentrația agenților de curățare poate fi reglată în mod individual. Mai mult, sistemele de aspirație sunt compatibile cu toate sistemele centrale convenționale de aspirație umedă sau uscată, inclusiv cu separatorul cu amalgam.



Intego – Performanță pe care vă puteți baza

Dacă sunteți în căutarea unui unit dentar care să vă faciliteze în mod optim fluxurile de muncă personale la un preț scăzut, Intego este opțiunea potrivită. Cu o funcționare simplă, oferă toate funcțiile relevante când și unde aveți nevoie de acestea. Designul ergonomic asigură confortul ridicat atât pentru dumneavoastră, cât și pentru pacienții dumneavoastră. Unitatea compactă de alimentare cu apă prevăzută cu un recipient de apă proaspătă facilitează respectarea reglementărilor de prevenire a infecțiilor.

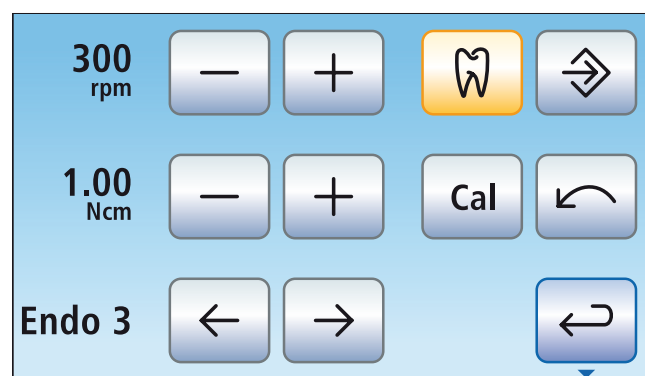

Funcție de endodonție integrată

Ca o soluție ideală pentru siguranță, eficiență și simplitate sporită, viteza și cuplul de torsiune pot fi presetate pentru 6 ace diferite. În plus, setările certificate WaveOne® Gold și RECIPROC® Blue sunt integrate în consola dentistului. Motorul se oprește automat atunci când se atinge cuplul de torsiune maxim setat. În EasyTouch poate fi integrat și un ansamblu ApexLocator, pentru a permite controlul permanent al lungimii de lucru.

Recipient de apă proaspătă

Unitatea de apă compactă poate fi adaptată pentru a răspunde multor cerințe diferite prin intermediul sistemelor de aspirație liber selectabile și al opțiunilor de prevenire a infecțiilor. Un recipient cu apă proaspătă poate fi integrat pentru controlul calității apei. Poate fi umplut și cu soluție Dentosept S pentru dezinfecție permanentă și igienizare manuală.

Curățarea automată a furtunului de aspirație

Adaptor de curățare pentru clătirea automată a aspiratorului de salivă și a aspiratorului de volum mare. Sistemele de aspirație sunt compatibile cu toate sistemele convenționale de aspirație umedă sau uscată, inclusiv cu separatorul cu amalgam.



Intego Ambidextrous

Versiune Ambidextrous opțională pentru modelele Intego sau Intego Pro, pentru a configura unitul dentar pentru medicii dentiști stângaci. Rapid, ușor și elegant.

1 Masa medicului

Disponibilă în versiunea TS sau CS. Cu ecran EasyPad sau cu interfața cu utilizatorul EasyTouch de 4,3", opțional cu control al cuplului de torsiune și ApexLocator, precum și cu 5+1 poziții pentru instrumente, pentru a se adapta nevoilor dumneavoastră.

3 Consolă compactă sau tip *Comfort* pentru asistentă

Ambele console pentru asistentă sunt compacte, economisind astfel spațiu prețios și asigură o libertate de mișcare maximă. Modelul tip *Comfort* vă permite să lucrați confortabil chiar și fără asistentă.

2 Tetieră cu articulație dublă sau plată

Tetieră cu articulație dublă pentru reglare rapidă și flexibilă sau tetieră plată cu o varietate de poziții datorită pernei magnetice.

4 Pedală de comandă pneumatică sau electronică.

Alegeți una dintre cele două pedale de comandă pentru utilizarea hands-free a instrumentelor.



Transformarea experienței pacientului

Indiferent de unitul dentar pe care îl alegeți – fiecare unitate Dentsply Sirona este adaptată nevoilor pacienților dumneavoastră și, prin urmare, vă poate ajuta să influențați pozitiv modul în care își amintesc tratamentul. Experiența pacientului cuprinde mai mult decât o poziționare confortabilă sau un personal prietenos. Un medic dentist care știe ce experiențe „colecționează” pacienții lor pe durata vizitei își poate îmbunătăți oferta, stimulând încrederea și fidelitatea.



Sidexis 4

Un proces de tratament transparent contribuie în mod semnificativ la fidelitatea pacienților. Datorită Sidexis 4, integrat și ușor accesibil în unitate, Teneo și Sinus asigură vizualizarea clară a situației clinice și capacitatea de a stoca poziții individuale ale pacientului. Software-ul permite, de asemenea, accesul facil la datele pacientului și ale radiografiilor, pentru o comunicare rapidă.



Comunicarea cu pacientul

Stabiliți o relație bazată pe încredere cu pacienții dumneavoastră prin furnizarea de informații despre tratament și comunicare clară. Datorită monitorului integrat și capacității de a afișa imagini intraorale capturate cu ajutorul camerei intraorale, imaginilor radiografice 3D și prezentărilor, consultarea pacienților nu a fost niciodată mai simplă.



Cameră intraorală

Optimizați-vă modul de vizualizare și de documentare a tratamentului. SiroCam F sau AF+ combină calitatea excelentă a imaginii cu utilizarea simplă. Imaginea este afișată pe monitorul de 22" de înaltă definiție.



Ergonomie

Disponibilă pentru Teneo și Sinus, tetiera motorizată constituie caracteristica cheie pentru accesul optim la locul tratamentului. Aceasta poate fi reglată cu ușurință utilizând pedala de comandă, interfața cu utilizatorul sau chiar reglarea manuală, asigurând o poziționare mai bună pentru orice tratament.



Confortul pacienților

Funcția ErgoMotion asigură mișcările combinate ale spătarului și ale șezutului pentru o extensie ergonomică a coloanei vertebrale. Teneo oferă, de asemenea, funcția OrthoMotion, adecvată în special pentru tratarea pacienților în vârstă sau cu dizabilități: Spătarul și șezutul își mențin unghiul, protejând vertebrele lombare.



Unitul dentar. Alegerea dumneavoastră.

Scaune de lucru medic



Hugo – expertul în ergonomie

Hugo permite o poziție ergonomică și intuitivă de șezut pentru ca dumneavoastră să mențineți o postură sănătoasă pe durata tratamentului. Este disponibil în mai multe modele, pentru a se adapta dimensiunilor și obiceiurilor de lucru ale utilizatorilor.



Carl – scaunul universal

Scaunul rotund Carl asigură libertatea maximă de mișcare și răspunde celor mai ridicate cerințe de confort și calitate. Scaunul rotund include o tapițerie confortabilă și este total igienic.



Theo – scaunul flexibil

Scaunul tip șă combină postura sănătoasă susținută de statul în picioare cu avantajele și stabilitatea de care beneficiați în poziția așezat confortabilă. Poziția ridicată a scaunului permite accesul optim la pacienți.



Paul – scaunul de lucru

Scaunul de lucru confortabil cu șezut circular. Spătarul rotativ are un dublu scop, deoarece contribuie la susținerea suplimentară a corpului. Scaunul Paul poate fi reglat la 2 înălțimi diferite și poate fi comandat cu un inel opțional de picior pentru a se adapta dimensiunilor diferite ale utilizatorilor.

Lămpi chirurgicale



	LEDlight Plus
Iluminare	aprox. 5.000 – 30.000 lx în 5 trepte
Temperatură de culoare	aprox. 5000 K neregabilă
Indice redare culori	>90
Câmp de distribuție a luminii	aprox. 160x80 mm la o distanță de 700 mm



	LEDview Plus
Iluminare	aprox. 5.000 – 40.000 lx în 7 trepte
Temperatură de culoare	Reglabilă în 3 trepte: aprox. 4.600 – 6.200 K
Indice redare culori	Lumină naturală: 95 la 5.400 K
Câmp de distribuție a luminii	Câmp mai mare de distribuție a luminii: aprox. 200 mm x 100 mm la o distanță de 700 mm

Culori disponibile pentru tapițerie

Atmosfera elegantă



Combinatii clasice atemporale pentru un aspect cu adevărat sofisticat.

Atmosfera naturală




Nuanțe delicate și calde pentru o atmosferă liniștitoare de tratament.

Atmosfera vitală



Culori vii și tonuri luminoase pentru o atmosferă modernă, plină de viață.

Culorile cusăturilor**

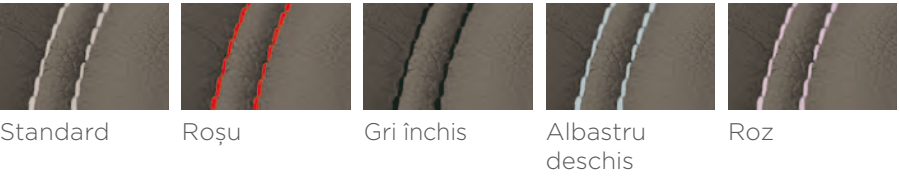

Culori de vopsea disponibile pentru Teneo și Sinius



Calitate fără compromis



Tapițerie premium

Tapițeria de calitate superioară fără cusături asigură un conform optim, chiar și în timpul tratamentelor de lungă durată.



Tapițerie Thermo premium

Reduce căldura acumulată în zona șezutului și în zona spatelui, relaxând pacientul ca urmare a acestui efect de răcorire.



Tapițerie Lounge

Materialul inovator conferă mai multă moliciune acestei opțiuni de tapițerie – pentru un plus de confort.




Transformați-vă unitul dentar într-un unit unicat. Tetiera motorizată, tapițeria Lounge și broderia personalizată cu două inițiale vă permite să creați o atmosferă cu adevărat unică și personalizată în cabinetul dumneavoastră.***

* Culori disponibile pentru tapițeria Lounge.
** Cu tapițeria Lounge
*** Opțional. Disponibil cu o tetieră motorizată și tapițerie Lounge.

Dumneavoastră decideți ce se potrivește nevoilor dumneavoastră

Teneo

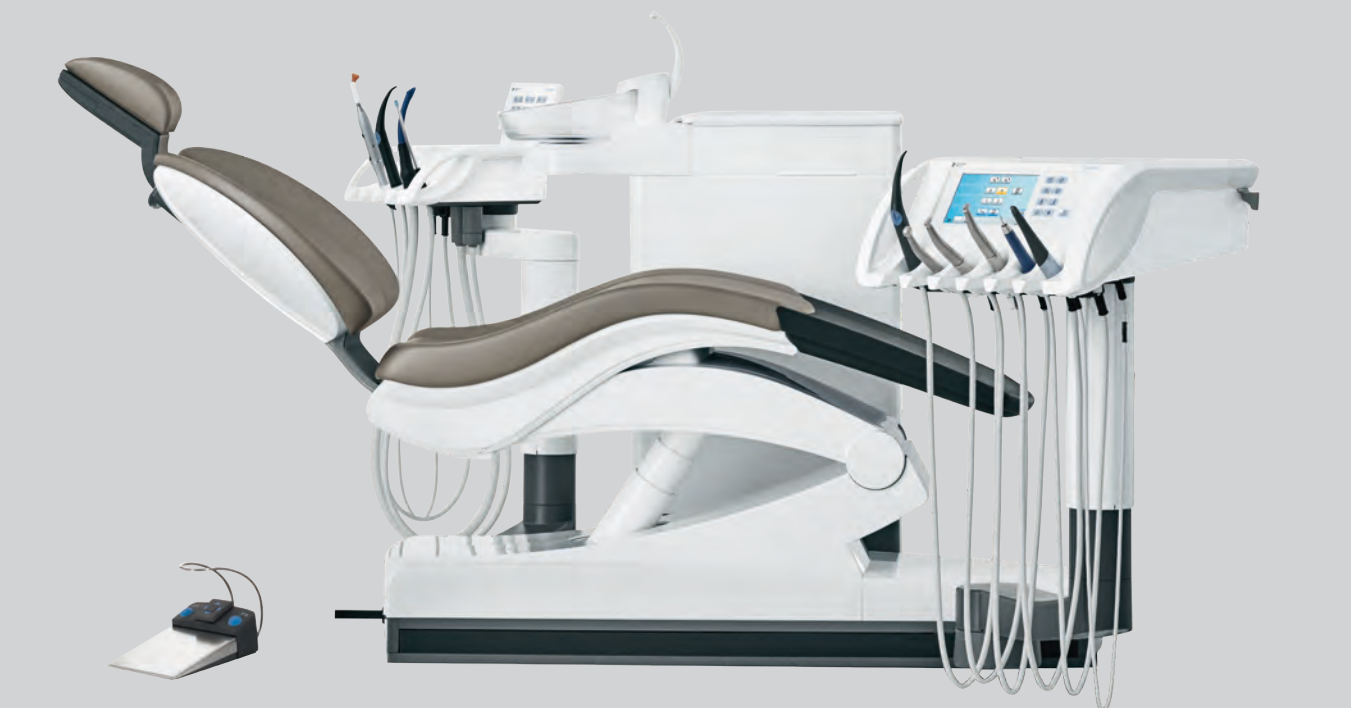

Caracteristici	
Masa medicului	Șină culisantă motorizată
Prevenirea infecțiilor	• Concept holistic de prevenire a infecțiilor cu cuspidor motorizat • Sistem de dezinfecție pentru dezinfecție continuă • Adaptoare de igienizare pt. curățarea automată periodică a furtunurilor de apă • Curățarea integrată a furtunurilor de aspirație
Ergonomie	• OrthoMotion • ErgoMotion • - HSGCHG9K>9' I NG<MINEN8 ; N<9E vertical • HG<> I MNE =80S9M • - HSGCH L I ><3?<<' I >GMIK' I 9<3>GM 6E K>@E9K>9' 9NMH F 9MÜ 9' M>M>K>3 • 1N I HKM EH F ; 9K 6E ?NG<C3> => F 9L9' • I > I 9L9K> 8GÜ
HGLHE9' ==>GMBLMNEN8 - ?859C	IGM>K?9CÜ <N' NMBES9MHKNE " 9LR' 2HN<A' ==> q[
HGLHE9' ==>GMBLMNEN8 - PoS8C88	6+1 I HSGCH I >GMIK' 8GLMKN F>GM>
HGLHE9' 9L8LM>GM>8	4 poS8C88 <N' M9LM9MINKÜ H I >K9CHG9EÜ
2>M8>KÜ	Motoriz9MÜ
->=9E' =>' <H F 9G=Ü	Wireless
4>KL8NG>' I >GMIK' LMpG@9<3	NN
) 9 F I Ü <A8KNK@8<9EÜ	LEDview Plus

Sinius



9K9<M>K8LM8<3	
* 9L9' F >=8<NEN8	• 88GÜ <N8L9GMÜ' F 9GN9EÜ • 1ME 2K9=8CHG9E 1214' <N' ?NKMINGNK8E> 9MpKG9M> • 1ME Continental (CS) <N' ?NKMINGNK8E> I >' LNL'
-K>O>G8K>9' 8G?><C88EHK	• HG<> I M' AHE8LM8< ==> I K>O>G8K> 9' 8G?><C88EHK <N' <NL I 8=HK • 18LM> F' ' ==> 88G?><C88> I >GMIK' ==> 88G?><C88> <HGM8GNÜ • =9 I MH9K> ==> 8@8>G8S9K>' I M' <NKÜC9K>9' 9NMH F 9MÜ I >K8H=8<Ü 9' ?NKMINGNK8EHK ==> 9 I Ü • NKÜC9K>9' 8GM>@K9MÜ 9' ?NKMINGNK8EHK ==> 9L I 8K9C8>'
"K@HGH F 8>	• ErgoMotion • #NG<C8> LN I HKM EH F ; 9K' • HG<> I M' =80S9M • - HSGCHG9K>9' I NG<MINEN8 ; N<9E O>KM8<9E
Consola dentistului – Afișaj	Interfață cu utilizatorul EasyTouch 4,3"
Consola dentistului – Poziții	5+1 poziții pentru instrumente
Consola asistentei	4 poziții cu tastatură operațională
Tetieră	• Motorizată • Cu articulație dublă
Pedală de comandă	Wireless sau cu cablu
Versiune pentru stângaci	Nu
Lămpi chirurgicale	LEDview Plus

Intego Pro



Caracteristici	
Masa medicului	• Stil Tradițional (TS) cu furtunurile atârinate • Stil Continental (CS) cu furtunurile pe sus
Prevenirea infecțiilor	• Concept holistic de prevenire a infecțiilor cu cuspidor • Sistem de dezinfecție pentru dezinfecție continuă • Adaptoare de igienizare încorporate pentru curățarea automată periodică a furtunurilor de apă • Curățarea integrată a furtunurilor de aspirație
Ergonomie	ErgoMotion
Consola dentistului – Afișaj	Interfață cu utilizatorul EasyPad sau EasyTouch de 4,3"
Consola dentistului – Afișaj	5 poziții pentru instrumente (+1 pentru TS)
Consola asistentei	Tip <i>Comfort</i> sau <i>Compact</i> cu Intego Ambidextrous
Tetieră	• Plată • Cu articulație dublă
Pedală de comandă	Pneumatică sau electrică cu cablu
Versiune pentru stângaci	Da (Intego Pro Ambidextrous)
Lampă chirurgicală	• LEDlight Plus • LEDview Plus

Intego



Caracteristici	
Masa medicului	• Stil Traditional (TS) cu furtunurile atârinate • Stil Continental (CS) cu furtunurile pe sus
Prevenirea infecțiilor	• Recipient cu apă proaspătă cu cuspidor • Sistem opțional integrat de curățare a furtunurilor de aspirație cu apă
Ergonomie	ErgoMotion
Consola dentistului – Afișaj	Interfață cu utilizatorul EasyPad sau EasyTouch de 4,3"
Consola dentistului – Poziții	5 poziții pentru instrumente (+1 cu TS)
Consola asistentei	Tip <i>Comfort</i> sau <i>Compact</i>
Tetieră	• Plată • Cu articulație dublă
Pedală de comandă	Pneumatică sau electrică pe cablu
Versiune pentru stângaci	Da (Intego Ambidextrous)
Lampă chirurgicală	• LEDlight Plus • LEDview Plus

Dentsply Sirona România

Office & Showroom
Str. Vulturilor nr. 98A, 030857, București
dentsplysirona.ro

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland
dentsplysirona.com

Soluții clinice

Prevenție
Restaurare
Ortodonție
Endodonție
Implantologie
Protetică

Tehnologii generice

CAD/CAM
Sisteme de imagistică
Unituri dentare
Instrumente

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

