


## SmartLite® Pro

Modulare LED Polymerisationslampe

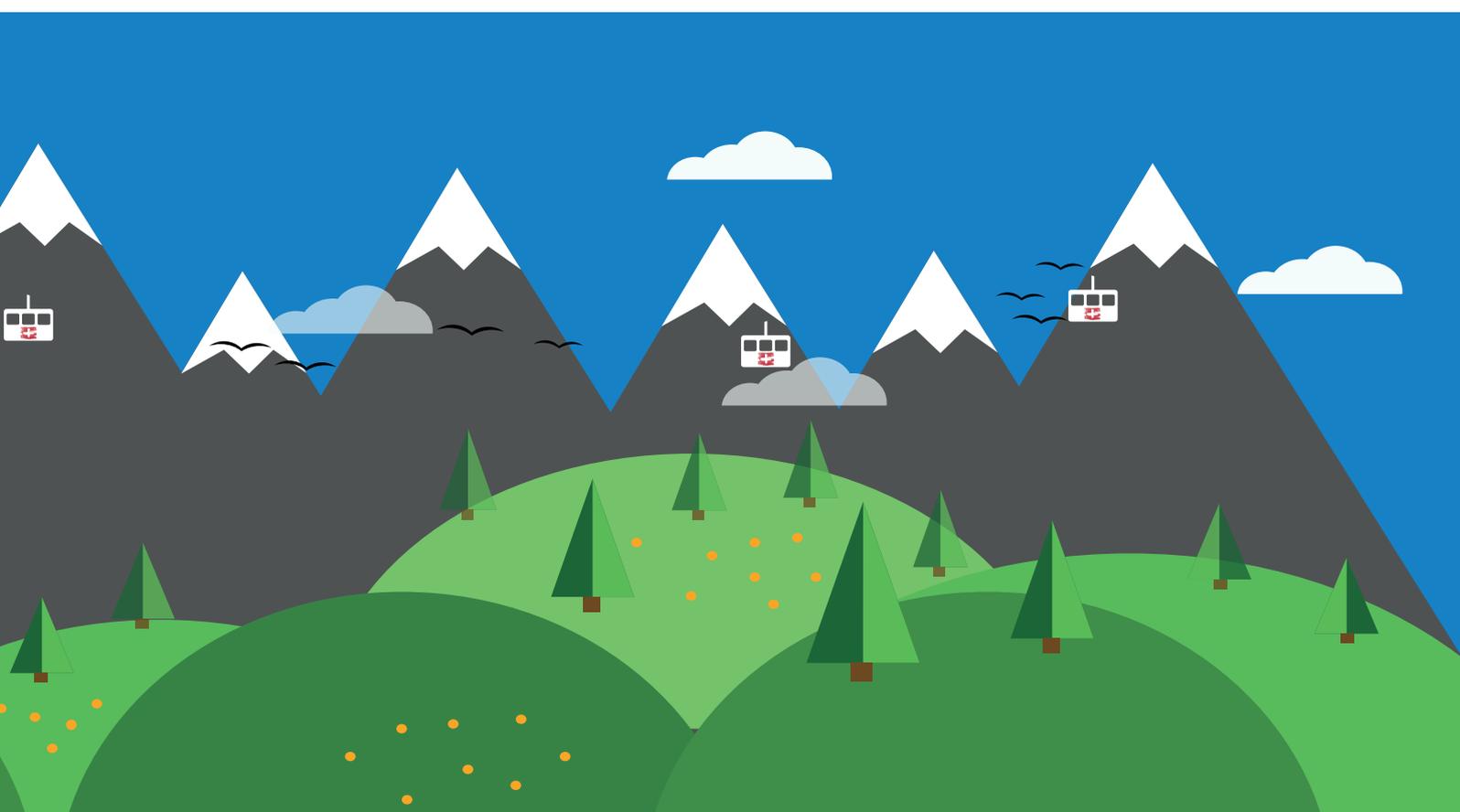

# SmartLite® Pro

## Mehr als eine Polymerisationslampe

Wir waren nicht damit zufrieden, eine der fortschrittlichsten Lampen zu entwickeln, sondern sie sollte auch über ein aussergewöhnliches Design verfügen. SmartLite® Pro ist eine einzigartige, modulare Polymerisationslampe in ästhetischem Metallgehäuse. Aber sie sieht nicht nur gut aus. Modernste Optik sorgt für eine Polymerisation in Spitzenqualität und damit für verlässliche Resultate.


SmartLite® Pro. Perfekte Form und Funktion. Designed to perform.

## Modernste Optik

Das optimierte Design mit 4 LEDs sorgt für eine gleichmässige Lichtverteilung über den gesamten aktiven Bereich.

Lichtleistung:  $\sim 1.250 \text{ mW/cm}^2$

Vergleich unterschiedlicher Strahlenprofile bei 0 mm Abstand (blaues Lichtspektrum)<sup>1</sup>

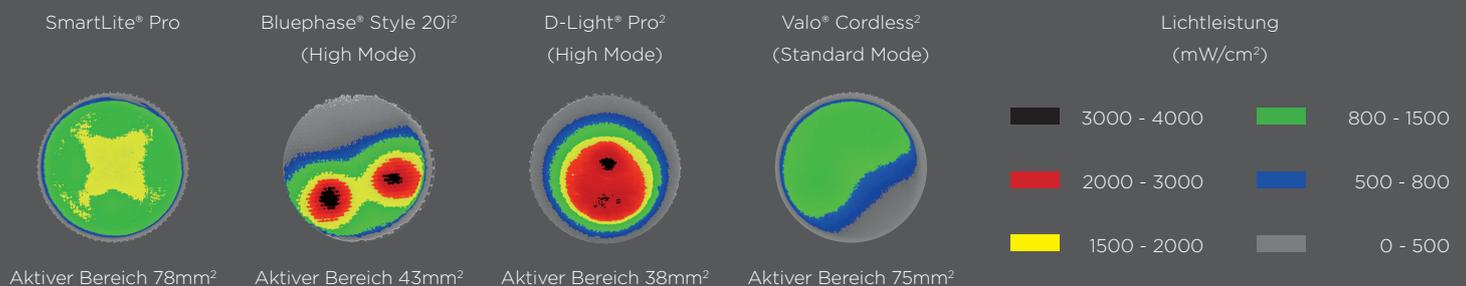

## Einfache Handhabung

Dank einfacher, intuitiver Handhabung mit nur einem Knopf sowie akustischen und Vibrations-Signalen können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.

## Metallgehäuse

Edelstahl und eloxiertes Aluminium in medizinischer Qualität sorgen für Robustheit und Langlebigkeit, Jahr für Jahr.

## Transillumination

Der zusätzliche Transillumination Tip ist ein diagnostisches Hilfsmittel zur Erkennung approximaler Karies, Untersuchung frakturierter Zähne und Ausleuchtung endodontischer Zugangskavitäten. Dieser hochentwickelte Aufsatz bietet ein auf 1 mm fokussiertes Licht mit 2 Einstellungen (für Front- und Seitenzähne).



Klinische Situation



Transillumination



## Vielseitigkeit

Die SmartLite® Pro überzeugt durch einen modularen Aufbau mit leicht austauschbaren, um 360° drehbaren Lichtaufsätzen für verschiedene klinische Indikationen. Das zukunftsorientierte Design erlaubt die Integration neuer Aufsätze, sobald innovative technische Lösungen verfügbar sind.




<sup>1</sup> Quelle: BlueLight Analytics Inc.

<sup>2</sup> Keine eingetragene Marke von Dentsply Sirona.


## Verlässliche Resultate

Das grosse aktive Lichtaustrittsfenster mit 10 mm Durchmesser deckt auch grössere Füllungen ab, und der exzellent gebündelte Lichtstrahl sorgt für verlässliche Polymerisation selbst über grössere Abstände.

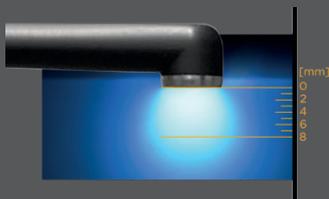

SmartLite® Pro:

Gebündelter Lichtstrahl für verlässliche Polymerisation über grössere Abstände.

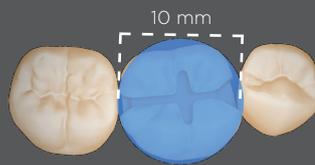

SmartLite® Pro

Wettbewerber

## Multifunktionale Ladestation

Zur SmartLite® Pro gehört eine modern gestaltete Ladestation mit integriertem Radiometer und Platz für zusätzliche Aufsätze. Das intuitive Akkumanagementsystem bietet zwei Schnellwechsel-Akkus für ständige Verfügbarkeit. Und dank LiFePO4-Akkutechnologie der neuesten Generation reicht eine Aufladung für einen ganzen Arbeitstag.

## Produkt-Referenzen

Produkt	Artikelnummer
SmartLite® Pro Einführungspackung 1 Handstück, 1 Cure Tip, 1 Illumination Tip, 2 Akkus, 1 Ladestation, Zubehör	644400
SmartLite® Pro Basispackung 1 Handstück, 1 Cure Tip, 2 Akkus, 1 Ladestation, Zubehör	644409
SmartLite® Pro Nachfüllpackung Akku	644401
SmartLite® Pro Nachfüllpackung Schutzhüllen (100 Stück)	644402
SmartLite® Pro Nachfüllpackung Augenschutzschilde (5 Stück)	644403
SmartLite® Pro Nachfüllpackung Netzteil mit USB-Ladekabel	644404
SmartLite® Pro Nachfüllpackung Illumination Tip	644405
SmartLite® Pro Nachfüllpackung PolyCure Tip	644406
SmartLite® Pro Nachfüllpackung Cure Tip	644407



Dentsply Sirona (Schweiz) AG  
Täferweg 1  
5405 Baden-Dättwil

+41 56 483 30 40  
[info.ch@dentsplysirona.com](mailto:info.ch@dentsplysirona.com)

